

# swit

by Revylne



## RL 090

**SONIC ELECTRIC TOOTHBRUSH**

---


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Перед первым использованием электрической щетки SWIT RL 090 внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.**

Технические характеристики . . . . .	4
Комплектация . . . . .	4
Меры предосторожности . . . . .	5
Предупреждения медицинского характера . . . . .	6
Зарядка аккумулятора . . . . .	6
Насадки в комплекте . . . . .	7
Вкл/выкл прибора . . . . .	7
УФ-лампа . . . . .	8
Режимы работы и их индикация . . . . .	9
Режим блокировки/разблокировки . . . . .	9
Процесс чистки . . . . .	10
Уход за зубной щеткой . . . . .	11
Транспортировка, хранение и утилизация прибора . . . . .	11
Гарантия . . . . .	12

Если у вас остались вопросы,  
обратитесь в сервисный центр:

 **8 (800) 775-38-49**

 **[www.revyline.ru](http://www.revyline.ru)**

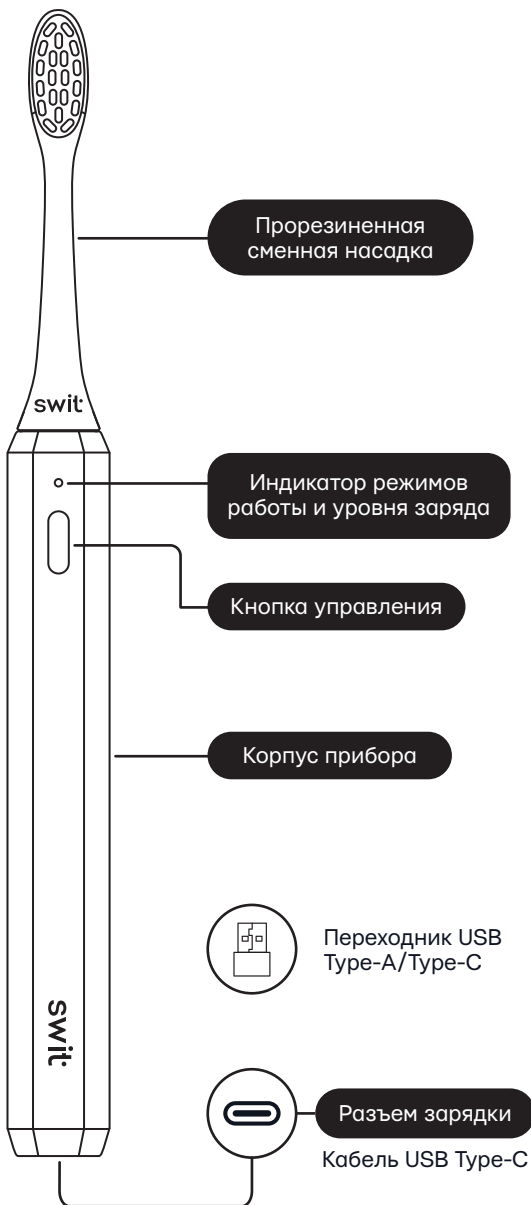

**Электрическая звуковая зубная щетка**

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- 4 режима работы
- Частота колебаний щетинок – 38 000 в мин.
- Материал корпуса – алюминиевый сплав
- Влагозащита – IPX7
- Время стерилизации насадки – 3 мин.
- Питание – аккумулятор Li-ion (800 mAh)
- Потребляемая мощность – 3 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Зарядка через кабель Type-C/Type-C
- Время полной зарядки – 2 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 30 дней.
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Основной блок щетки
- 2 сменные насадки
- Футляр с УФ-лампой для дезинфекции насадки
- Кабель Type-C/Type-C
- Переходник USB Type-A/Type-C
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте щетку во время принятия душа.
- Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
- Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
- Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
- Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
- Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Электрическую зубную щетку SWIT RL 090 не рекомендуется использовать лицами (в т.ч. детьми) с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Детям до 10 лет следует использовать устройство под присмотром взрослого.
- Небольшое нагревание ручки во время зарядки прибора является нормальным. Но если ручка становится горячей, отключите питание.
- Время от времени следует очищать контакты адаптера питания, чтобы избежать перегрева прибора и поломок.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Небольшая кровоточивость и дискомфорт десен в начале использования данного устройства являются нормой. Если кровотечение и дискомфорт сохраняются более одной недели, следует обратиться к стоматологу.

Если в последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости, установили импланты или протезы, то перед началом использования данного устройства следует проконсультироваться с врачом.

Если у вас установлен кардиостимулятор или другие подобные имплантированные устройства, перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C, который вставляется в разъем, находящийся в основании блока щетки. При необходимости воспользуйтесь переходником, входящим в комплектацию.



Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор щетки. Перед зарядкой щетки убедитесь, что она выключена.



Во время зарядки индикатор на корпусе прибора мигает красным. Когда зарядка завершена – загорается зеленая индикация.



В процессе зарядки ручка щетки может нагреваться – это нормально.




Щетка работает до 30 дней от одного заряда (при двухразовой ежедневной чистке по 2 мин.).

**Внимание!** Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

## НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации зубной щетки RL 090 2 стандартные сменные насадки.

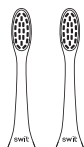


Прорезиненная насадка обеспечивает безопасность чистки.

**Внимание!** Согласно правилам личной гигиены, совместное использование одной насадки различными пользователями недопустимо.

## Установка и замена насадки

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

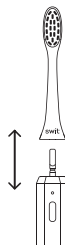

Стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 3 месяца для сохранения высокой эффективности гигиены полости рта.

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА




Включение щетки и переключение режимов осуществляется коротким нажатием кнопки вкл/выкл, а выключение – более длительным.



В щетку встроен таймер, благодаря которому автоматическое отключение питания происходит через 2 минуты работы прибора. Каждые 30 секунд щетка делает небольшую паузу, позволяя сменить зону чистки.

## УФ-ЛАМПА

Дорожный чехол на магните с интеллектуальной функцией стерилизации насадки

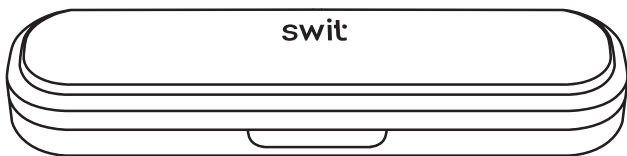


Дорожный чехол RL 090 защищает щетку от загрязнений и повреждений во время транспортировки прибора.



Встроенная в чехол УФ-лампа дезинфицирует насадку, уничтожая вредоносные бактерии.

Чтобы произвести процедуру стерилизации, подключите чехол к сети, поместите насадку внутрь чехла в отведенное для нее место и закройте крышку.

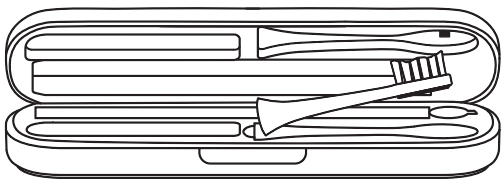

УФ-лампа включится автоматически, о чем будет свидетельствовать загоревшийся на чехле индикатор. Спустя 3 минуты индикатор начнет мигать, свидетельствуя о завершении дезинфекции и автоматическом отключении УФ-лампы.

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ИХ ИНДИКАЦИЯ



При выборе режимов происходит их индикация. Каждому режиму соответствует определенный цвет.

### У SWIT RL 090 4 режима работы



Clean

Стандартная ежедневная чистка. Подходит большинству людей.



Soft

Рекомендован для использования в период привыкания к электрической модели. Подходит для чувствительных зубов.



White

Возвращает зубам естественную белизну. Предотвращает образование пигментных пятен на эмали.



Polish

Придает зубам блеск и красоту. Борется с образованием зубного налета и развитием кариеса.

## РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ

При случайном нажатии кнопки вкл/выкл может произойти самопроизвольное включение щетки. Такое иногда случается в дороге при транспортировке прибора.




Чтобы избежать подобных ситуаций, заблокируйте щетку. Для этого в течение 10 секунд удерживайте кнопку включения, дожидаясь трехразового мигания индикатора, которое будет свидетельствовать том, что прибор перешел в нерабочее состояние.



Чтобы вернуть щетку в рабочее состояние, снова удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд. О том, что щетка готова к работе, «просигнализирует» однократно вспыхнувший индикатор.


## ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

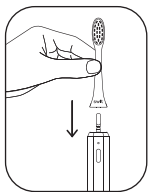


Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации.




Намочите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем вы приступите к чистке зубов, это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

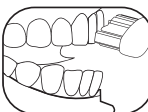

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая возвратно-вращательные движения.

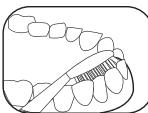

30 сек.

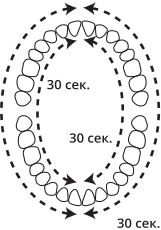

Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно.

Поможет в этом 2-минутный таймер, который каждые 30 секунд будет делать короткую паузу, «информируя» таким образом о том, что пора сменить зону чистки. По прошествии двух минут щетка отключится автоматически.

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

## УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

- Регулярно очищайте зубную щетку RL 090.
- Промойте чистящую головку насадки, чтобы удалить остатки пасты после чистки, и дайте ей высохнуть на воздухе.
- Не трите щетину, чтобы не деформировать ее.
- Ополосните рукоятку, чтобы удалить загрязнения после чистки, и высушите мягкой тканью.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не чистите зубную щетку агрессивным моющим средством и при температуре воды выше +40 °С.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Транспортировка изделий осуществляется любым видом открытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.

Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0 °С до +20 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

---

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению, неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом), нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.
- На неисправности, которые вызваны независимыми от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Swiit

— by Revyline —