

SUPRA



Руководство по эксплуатации
МАССАЖЕР
ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА

MFS-103

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание

Введение.....	3
Меры предосторожности и безопасности.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера.....	5
Подготовка массажера к эксплуатации	5
Эксплуатация прибора.....	6
Безопасная утилизация	8
Технические характеристики.....	8



ВВЕДЕНИЕ

Почему очистка кожи и забота о коже так важны?

Очистка кожи лица – это первый шаг

Очистка кожи лица – базовый элемент в женской красоте, предпосылка для правильного ухода за кожей. Очистка кожи лица подготавливает кожу к другим процедурам, таким как увлажнение или питание.

Если вы не очищаете кожу правильно, поры кожи могут закупориваться, приводя к появлению угрей или покраснению, может замедлиться естественный процесс обновления клеток кожи.

Отшелушивание кожи

Цель отшелушивания кожи – удаление отмерших клеток кожи, чтобы открыть молодую кожу. Отшелушивание кожи освобождает место на поверхности кожи для того, чтобы более глубокий слой новых, менее сухих клеток кожи оказался на поверхности кожи. Высохшие клетки кожи, оставленные на поверхности кожи слишком долго, могут привести к тому, что поверхность кожи станет тусклой, неровной и шелушащейся.

Удаление отмерших клеток кожи может сильно изменить внешний вид кожи, освежить кожу. Чем больше вы стимулируете нормальный процесс отшелушивания кожи, тем меньше вероятность закупоривания пор кожи, тем легче избавиться от акне и тем более красивой будет ваша кожа.

Таким образом, тщательная и в то же время аккуратная чистка лица важна для того, чтобы сохранить вашу кожу здоровой и предотвратить высыпания сыпи.

Цель очистки – хорошее усвоение питающих веществ

Кожа обновляется медленнее с течением времени. Метаболизм в клетках идет медленнее. Коже будет не хватать воды и питания, поэтому она становится тусклой и теряет эластичность. Появятся возрастные пятна.

Своевременное увлажнение и питание кожи очень важны для того, чтобы предотвратить старение кожи.

Почему прибор гарантирует оптимальную очистку кожи?

Мягкая щетка может аккуратно обращаться для того, чтобы глубоко очищать кожу. Она может использоваться каждый день совместно с вашим обычным очищающим средством или со специальным средством для интенсивного очищения. Мягкая щетка удаляет загрязнения и мертвые клетки кожи, делая кожу гладкой и сияющей.

Косметическая губка мягко массирует вашу кожу, чтобы активизировать активность в коже, сделать кожу эластичнее и способствовать поглощению ваших кремов, используемых для ухода за кожей. Она может использоваться на любой части тела, а не только на лице.

Абразивная насадка может легко удалить отмершие клетки кожи на стопах или сгибах локтей, чтобы каждый участок вашей кожи был молодым и упругим.

При обработке ногтей эта насадка делает края ногтей более гладкими, а также используется при полировке поверхности ногтей.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием массажера полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

Не используйте прибор на пересушенной, потрескавшейся коже или когда вы страдаете от заболеваний кожи или раздражений кожи, таких как акне, солнечные ожоги и т.д.

Обратите внимание, что состояние кожи меняется в течение года. Кожа лица может стать более сухой зимой, в таком случае вам следует уменьшить время процедуры.

Не нажимайте щеткой слишком сильно на лицо, нежно нажимайте щеткой на кожу.

При использовании прибора на коже шеи вам следует уменьшить время процедуры, так как кожа шеи более чувствительная, чем кожа лица.

Используйте ободок, чтобы убрать волосы с лица и предотвратить попадание волос в прибор.

Запрещается использование прибора в душе, так как прибор не является водонепроницаемым.

Массажер предназначен для массажа и очищения лица и отдельных частей человеческого тела в домашних условиях. Запрещается использовать массажер в коммерческих целях.

Необходимо регулярно очищать прибор, чтобы улучшить очистку лица и продлить срок действия прибора.

Используйте прибор только по его прямому назначению таким образом, как указано в руководстве.

Запрещается разбирать и каким-либо

образом изменять прибор.

Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Запрещается подвергать массажер воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.

Храните прибор в недоступном для детей месте.

Запрещается пытаться самостоятельно отремонтировать прибор. При возникновении каких-либо неисправностей обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра производителя.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор – 1

Насадки – 3

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон - 1

- *Показано к применению всем типам кожи*

- *Нормализует работу сальных желез*

- *Удаляет загрязнения*

- *Улучшает цвет кожи*

- *Улучшает общее состояние кожи*


УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

Массажер для ухода за кожей лица функционирует с 3 сменными насадками: мягкая щетка, мягкий спонж, микродерма щетка.



1. Мягкая щетка
2. Мягкий спонж
3. Микродерма щётка
4. Переключатель питания

ПОДГОТОВКА МАССАЖЕРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

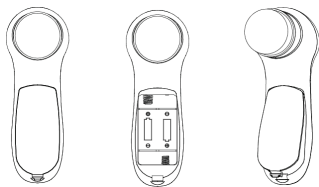

Кнопка

Установка батареек

ВНИМАНИЕ: Устанавливайте батарейки только сухими руками.

В приборе используются батарейки типа AA, 1,5В в количестве 2 шт. Для более длительного времени работы рекомендуется использовать батарейки типа Alkaline.

1. Нажмите на кнопку (смотри рисунок) и откройте крышку батарейного отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите крышку во время снятия, чтобы легче открыть батарейный отсек.

2. Вставьте батарейки типа AA в количестве 2 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте указанную полярность «+» и «-» при установке батареек.

3. Закройте крышку батарейного отсека, нажав на нижнюю часть крышки до щелчка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Снимите с прибора упаковочные материалы. Удалите с поверхности все наклейки, кроме этикетки с серийным номером.

Проведите осмотр прибора на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь в том, что аппарат и насадки продезинфицированы и готовы к работе.



Очистка и отшелушивание кожи щеткой «микродерма»

ВНИМАНИЕ:

Не перестарайтесь с процедурой очищения кожи или ее отшелушивания.

Помните, что очищение кожи или ее отшелушивание должны быть приятными.



1. Нажмите на корпус чистящей щетки до тех пор, пока она не будет установлена в заданном положении с щелчком.
2. Используйте ободок, чтобы убрать волосы с лица и предотвратить попадание волос в прибор. Если вы до этого нанесли много косметики на лицо, мы рекомендуем вам снять излишки макияжа перед процедурой.
3. Переведите переключатель питания в положение Low при проведе-

нии ежедневного очищения или в положение High для процедуры отшелушивания кожи. При отшелушивании кожи сначала очистите лицо, потом промойте лицо теплой водой и нанесите отшелушивающее средство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мы рекомендуем вам вспенить небольшую часть очищающего средства в ладони с помощью щетки и теплой воды. Вы также можете нанести очищающее средство непосредственно на влажную щетку.

Если вы используете очищающее молочко, мы советуем вам положить его прямо на щетку.

4. Поднесите щетку к вашему лицу.
5. Аккуратно перемещайте щетку

ПРИМЕЧАНИЯ:

В зависимости от чувствительности вашей кожи, рекомендуется использовать прибор примерно 1-2 минуты, чтобы очищение кожи или ее отшелушивание были эффективными.

Не отшелушивайте кожу лица дольше или интенсивнее, чем рекомендовано на упаковке отшелушивающего средства.

Во время очищения кожи избегайте чувствительных участков кожи, таких как область вокруг глаз и губ.

Щетка «Микродерма» — это безопасная и эффективная альтернатива дорогим химическим, лазерным и хирургическим процедурам в спа-салонах и косметологических центрах. Микродерма щетка нежно отшелушивает кожу, чтобы минимизировать складки и морщины, уменьшить воздействие солнечных ожогов и рубцевание кожи и уменьшить размер пор и другие недостатки кожи, в то же время способствуя появлению новых и здоровых клеток кожи. У вас будет посвежевшая, оздоровленная и моложе выглядящая кожа, гладкая и шелковая на ощупь.

Щетка «Микродерма» подходит как для молодой, так и для зрелой кожи и безопасна для всех типов кожи. Круговые движения и повторяющаяся очистка поверхности кожи с помощью прибора способствуют кровотоку, повышают мышечный тонус лица и способствуют воспроизведению клеток.



Щетка для чувствительной кожи.

Щётка предназначена для сверх чувствительной кожи. Если ваша кожа сверх чувствительна, Supra позаботилась о Вас и дарит насадку для Чувствительной кожи. 2 часть процедуры можно провести сменной щёткой. Если с щёткой « Микродерма» Вы испытываете дискомфорт, то можно провести всю процедуру щёткой для чувствительной кожи.



Ежедневное очищение кожи и массаж спонжем

1. Нажмите на корпус губки до тех пор, пока она не будет установлена в заданном положении с щелчком.
2. Выполните шаги 2-5, описанные в разделе «Очистка и отшелушивание кожи чистящей щеткой», чтобы тщательно очистить кожу.
3. Обмакните губку в любой крем и нанесите достаточное количество крема на лоб, щеки, нос и подбородок (или на любые другие обрабатываемые области кожи).
4. Переключите переключатель питания в положение Low.
5. Прикоснитесь губкой к поверхности кожи.
6. Продолжайте втирать крем в кожу в течение 5-10 минут.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная потребляемая мощность: 2Вт.

Питание прибора: батареи типа АА, 1,5В, 2шт (входят в комплект)

Режим работы прерывистый

Диапазон рабочих температур: 15-35°C

Рабочая влажность: не более 80%

Габариты в упаковке: 135x50x185 мм

Вес у упаковке: 205 г

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой

право вносить изменения в конструкцию, дизайн

и комплектацию товара без предварительного

уведомления.

EAC

Дата производства: 09.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается

(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Единая справочная служба:
8-800-100-3331**

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены. Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

S\N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____



www.supra.ru