

CELLUMAX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

[1] Массажёр Cellumax

[2] Плоская массажная насадка

Данная насадка обеспечивает мягкий массаж для особо чувствительных зон таких, как например, лицо.


⚠ Внимание! При массаже лица обязательно используйте сетчатую крышку-насадку, во избежание попадания волос во вращающиеся части массажёра.



ВИБРАЦИЯ



ПРОГРЕВ

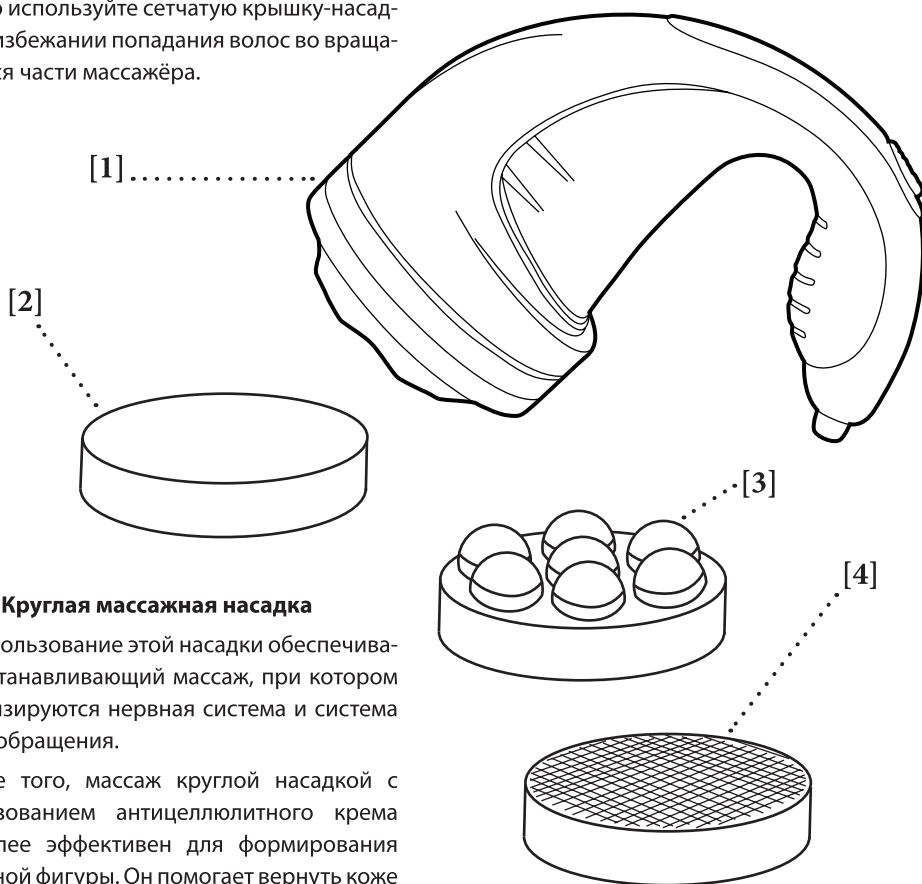

[3] Круглая массажная насадка

Использование этой насадки обеспечивает восстанавливающий массаж, при котором активизируются нервная система и система кровообращения.

Кроме того, массаж круглой насадкой с использованием антицеллюлитного крема наиболее эффективен для формирования стройной фигуры. Он помогает вернуть коже подтянутость и упругость, а также устранить растяжки и целлюлит.

[4] **Сетчатая насадка** предназначена для защиты от попадания волос или посторонних предметов во вращающиеся части массажёра.

⚠ Внимание! Не используйте сетчатую крышку-насадку если массаж проводится с использованием крема.


УПРАВЛЕНИЕ

[5] Вкл./выкл.

Используйте регулируемый выключатель для включения Cellumax, а так же для регулировки оборотов.

Максимальные обороты массажёра соответствуют положению выключателя ON.

Для выключения поверните выключатель в положение OFF.

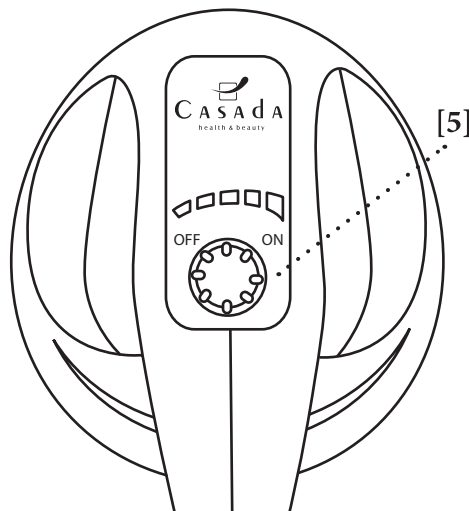

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Перед началом эксплуатации проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на штепсельной вилке прибора и присоедините прибор к сети. После этого включите массажный аппарат при помощи регулируемого выключателя, расположенного на рукоятке массажёра.

ПРИМЕНЕНИЕ

Cellumax предназначен для глубокого массажа. Данный вид массажа улучшает кровообращение и выведение токсинов. При активном воздействии происходит нагревание поверхности кожи, ускоряется циркуляция крови, что способствует расщеплению жира, активизации дренажа, выведению продуктов липолиза и излишней жидкости из подкожно-жирового слоя. При помощи Cellumax вы можете массировать уставшие и напряженные участки тела, а так же разглаживать «апельсиновую корку» в проблемных зонах.

Две разные, легко заменяемые массажные насадки различным образом активизируют нервную систему и систему кровообращения. Встроенная функция прогрева помогает быстрее и эффективнее расслабить мышцы, что, в свою очередь, повышает глубину воздействия массажа.

С помощью Cellumax можно просто и эффективно втирать антицеллюлитный крем

Насадку можно снять и промыть.

Специально изогнутая ручка, выполненная из противоскользящего материала сконструирована так, чтобы обеспечить простое и надёжное использование массажёра.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с размотанным кабелем.

2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

Массаж соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.

Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.

Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.

Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.

Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.

Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 15 минут.

Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.

Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности или, если области массажа (одна или несколько) подвержены любому из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак.

Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.

Не используйте массажер, управляя автомобилем.

Не используйте массажер сразу после приема пищи или на голодный желудок.

Если Вы используете электронные приборы, например, сердечный стимулятор, каждый перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром взрослых.

Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1
тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.
Casada International GmbH

Все права защищены.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
<ul style="list-style-type: none">• Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт дистанционного управления не работают.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте присоединение к сетевому кабелю.• При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 18,5 x 11 x 17,5 см

Вес: 1 кг

Напряжение: Переменный ток 220 В, 50 Гц

Номинальная мощность: 25 Вт

Сертификаты:

