

# BMS

Body&Mind syncSystem

CASADA<sup>TM</sup>  
healthcare



time to relax

braintronics<sup>®</sup>  
brainwave  
stimulation system



# BETASONIC



## < timetorelax

С момента своего основания в 2000 году CASADA олицетворяет высококачественные изделия для сферы укрепления здоровья и фитнеса.

Сегодня оборудование CASADA можно приобрести в 37 странах по всему миру. Непрерывное развитие, безошибочный дизайн и постоянная направленность на повышение качества жизни, а также непревзойденное качество – все это отличает продукцию CASADA.

# Поздравляем!

Приобретая это массажное кресло, вы проявили осведомленность о необходимости заботиться о своем здоровье. Для того, чтобы вы могли получать пользу от преимуществ своего массажного кресла на протяжении длительного времени, мы просим вас прочесть и тщательно соблюдать инструкцию по безопасности.

Мы надеемся, что вы сможете получить истинное удовольствие от использования своего личного BetaSonic.

## Содержание

4	Инструкции по безопасности
5	Противопоказания
6	Оборудование
7	Установка
10	Запуск
11	Дистанционное управление
14	Дисплей
15	Отличительные особенности
18	После использования
19	Устранение неполадок
20	Инструкции по хранению / обслуживанию
20	Технические данные
21	Ес – Декларация соответствия
21	Гарантийные условия

# Инструкции по Безопасности



Прежде чем начать эксплуатацию массажного кресла, пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже инструкции, что позволит обеспечить надлежащую работу кресла с максимальной эффективностью. Данные инструкции по эксплуатации необходимо сохранить для использования в будущем!

- Массажное кресло соответствует принятым техническим принципам и новейшим правилам техники безопасности.
- В этом оборудовании имеется нагреваемая поверхность. Чувствительным к теплу людям следует соблюдать осторожность при использовании оборудования. (IEC 60335-2-32)
- Массажное кресло не требует проведения технического обслуживания. Любые ремонтные работы должны выполняться только уполномоченными на это специалистами.
- Ненадлежащее использование и проведение ремонта без соответствующих полномочий не допускается по соображениям безопасности и ведет к потере гарантии.
- Во избежание получения травм не допускается просовывать пальцы между массажными роликами.
- Запрещается прикасаться к разъему электропитания мокрыми руками.
- Следует избегать контакта массажного кресла с водой, воздействия на него высокой температуры и прямых солнечных лучей.
- Не допускается использование массажного кресла в условиях высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Запрещается использование массажного кресла в условиях ограниченного пространства или в местах, где вентиляторы будут закрыты, и не будет обеспечиваться поступление свежего воздуха.
- Во избежание опасности возникновения короткого замыкания массажное кресло необходимо отключать от сети электропитания, если оно не используется в течение долгого времени.
- Запрещается использовать поврежденные кабели, вилки или плохо закрепленные розетки.
- При наличии повреждений на кабелях/вилках их замена производится изготовителем, представителем обслуживающей организации или квалифицированными сотрудниками.
- При наличии неисправностей следует немедленно отключить устройство от сети. Ненадлежащее или неправильное использование отменяет все обязательства по возмещению убытков.
- Ненадлежащее или неправильное использование отменяет все обязательства по возмещению убытков.
- Не допускается превышение рекомендованной ежедневной длительности массажных процедур, составляющей 30 минут, во избежание создания чрезмерного напряжения мускулов и нервов.
- Запрещается использование заостренных или заточенных предметов во избежание повреждения массажного кресла.
- Обязательно использовать розетки только подходящего для вилки типа и всегда проверять, чтобы вилка была полностью вставлена в розетку, для снижения риска возникновения короткого замыкания или возгорания.
- Необходимо вынимать вилку из розетки непосредственно после использования и перед чисткой.
- Детям до 14 лет запрещено производить чистку и техническое обслуживание кресла без надзора со стороны взрослых.
- В случае неожиданного отключения электропитания во время использования необходимо незамедлительно переключить выключатель в положение ВЫКЛ и вынуть вилку из розетки во избежание повреждения массажного кресла.
- Запрещается использование массажного кресла, если электрические кабели мокрые или повреждены.
- Дети в возрасте до 14 лет, лица с ограниченными возможностями или ослабленным здоровьем, находящиеся вблизи массажного кресла или использующие его, должны постоянно находиться под надзором.
- Запрещается использование массажного кресла непосредственно после употребления пищи или под воздействием алкоголя.
- Использование оборудования разрешено только для целей, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Следует использовать только оригинальные принадлежности от поставщика оборудования.
- Запрещается становиться на подставку для ступней, сидеть или прыгать на ней во избежание повреждений.
- Запрещается сидеть на подлокотнике или спинке кресла во избежание повреждений или получения травм.
- Необходимо проводить регулярную чистку массажного кресла, при этом следует предотвращать попадание посторонних предметов в щели на массажном кресле.
- Запрещается тянуть за кабель питания для перемещения массажного кресла.
- При регулировке положения подставки для ног или спинки следует убедиться в отсутствии под ними каких-либо объектов или маленьких детей в возрасте до 14 лет.
- Изделие предназначено только для применения в домашних условиях.
- При повреждении гибкого кабеля питания, необходимо использовать другой предназначенный для этой же цели гибкий кабель, или следует приобрести у изготовителя или в его сервисном центре соответствующий гибкий кабель в качестве замены.

# Противопоказания

При отсутствии уверенности в необходимости использования массажного кресла в каждом конкретном случае необходимо обращаться к своему врачу.


- Не допускается выполнение массажных процедур во время беременности или при наличии приведенных ниже одной или нескольких жалоб, связанных с массажными зонами: недавние травмы, тромбозные заболевания, все виды воспалений и вздутий, а также раковые заболевания. Рекомендуется обратиться к врачу перед проведением массажа для лечения недугов и заболеваний.
- Лица с патологиями организма, ограниченными умственными способностями или восприятием или лица с недостаточным опытом и знаниями могут использовать это кресло только под присмотром и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Во избежание неприятных ощущений или опасностей при использовании массажного кресла мы рекомендуем следующим лицам обратиться к врачу перед использованием изделия:
  - Постельные больные
  - Лица, проходящие медицинское лечение
  - Лица с заболеваниями спины, проблемами с позвоночником или с неправильным положением тела
  - Лица с кардиостимуляторами
- При возникновении болевых ощущений во время массажа следует немедленно остановить процедуру.
- При получении травмы при использовании массажного кресла необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Запрещается использовать участки кожи с покраснением, вздутием или воспалением.
- Данное массажное кресло следует использовать только для профилактического массажа в домашних условиях, оно не является устройством медицинского массажа. Таким образом, не допускается его использование в виде замены специального медицинского лечения.
- Рекомендуется использование массажного кресла ежедневно в течение 30 минут. При этом каждую часть тела необходимо массировать не более 15 минут, так как в противном случае избыточный массаж может оказать контрпродуктивный эффект.
- Данное изделие не пригодно для использования детьми в возрасте до 14 лет.
- Дети до 14 лет должны находиться под присмотром. Необходимо исключить игры детей с массажным креслом.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ braintronics

- Психозы (например, шизофрения, биполярное расстройство, эндогенная депрессия)
- Расстройства личности
- Эпилепсия и схожие расстройства
- Сердечные заболевания
- Заболевания центральной нервной системы
- Тромбозы
- Эндогенная депрессия
- Синдром дефицита внимания (недостаточная активность)
- Недавний серьезный сердечный приступ
- Психическое расстройство
- Зависимость от алкоголя или наркотиков
- Регулярное использование психотропных препаратов
- Беременность



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Из этических и правовых соображений braintronics нельзя использовать детям и подросткам без четкого разрешения законных представителей. Запрещено использовать лицам, которые вследствие медитации могут вступать в религиозные конфликты.

# Оборудование

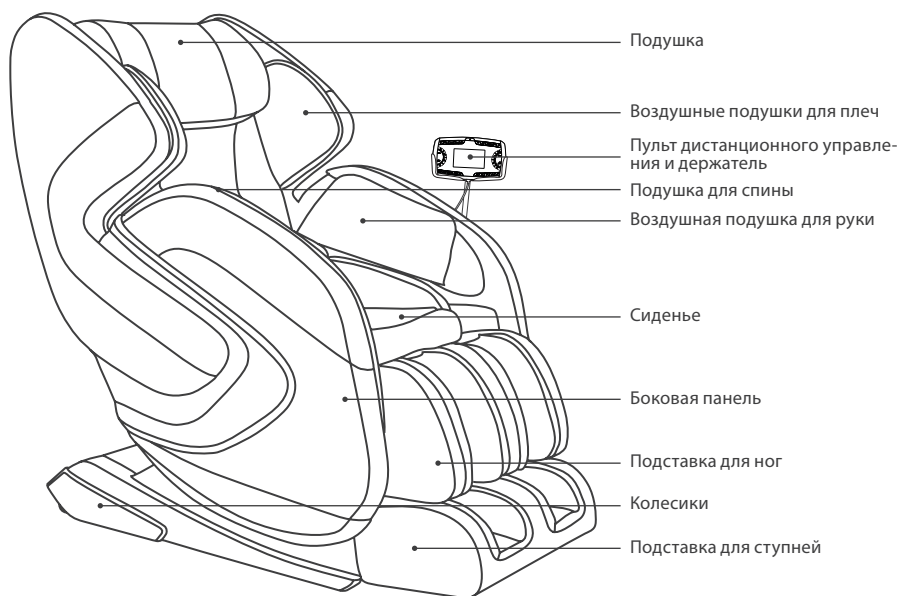


## ▲ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНОГО КОРПУСА (ВИД СПЕРЕДИ)

## ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНОГО КОРПУСА (ВИД СЗАДИ) ▶

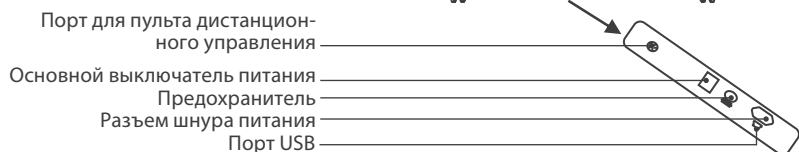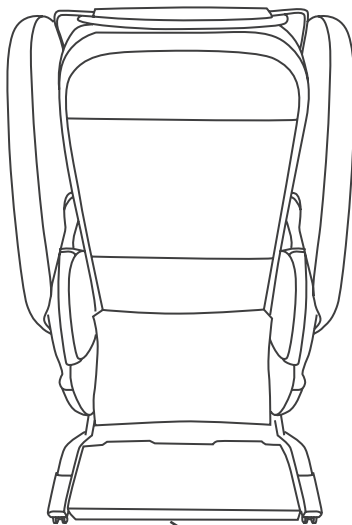


# Установка

## 1| ОТКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКССУАРОВ

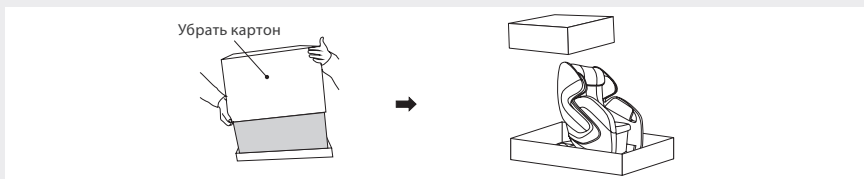

- Убрать пластмассовые ленты с внешней упаковки массажного кресла и поднять внешнюю упаковку.
- Вынуть внутренний упаковочный материал.
- Установить заднюю спинку и подушку
- Комплектность поставки в упаковке с аксессуарами: руководство по эксплуатации, кабель питания, пульт дистанционного управления и держатель для него.


## 2| УСТАНОВКА РАМЫ ДЛЯ НОГ

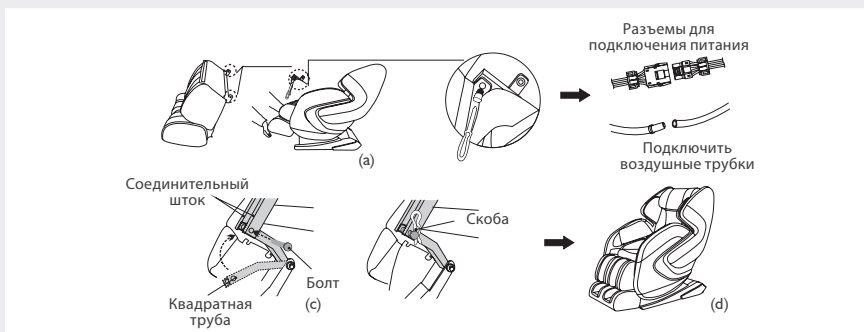

- Извлечь подставку для ступней, расположенную в задней части массажного кресла и установить ее спереди кресла.
- Справа и слева на передней части кресла имеется резьба. Взять подставку для ступней, и, удерживая ее на одном уровне с резьбой закрепить обе стороны входящими в комплект поставки винтами. Вставить входящие в комплект поставки пластиковые шайбы между подставкой и креслом.
- Включить кресло и поднять подставку для ступней в самое высокое положение. После этого снова отключить его от источника питания. Затем соединить воздушные трубки подставки для ступней с трубками кресла, используя совпадающие номера. Наконец, соединить вместе разъемы для подключения питания подставки для ступней.
- Теперь соединить шток, расположенный в задней центральной части подставки для ступней с железной кромкой, выступающей из кресла, при помощи соответствующих болтов и закрепить его с помощью предохранительного зажима.
- Наконец подключить кресло к источнику питания и дать ему вернуться в начальное положение.

# Установка

## 3| УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ КОНТРОЛЛЕРА

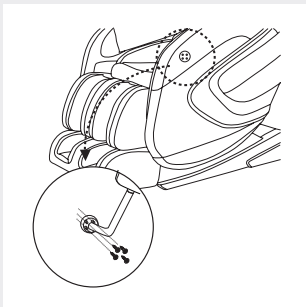


1. Взять скобу для пульта дистанционного управления и разместить ее на внешней стороне подлокотника.
2. Устройство крепления расположено на боковой панели, как показано на рисунке. При помощи отвертки закрепить держатель пульта дистанционного управления винтами.
3. Вставить пульт дистанционного управления в держатель.

## 4| ПРОВЕРКА ВСЕГО МАССАЖНОГО КРЕСЛА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ

### 5| НАСТРОЙКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

- а) Вынуть массажное кресло в сборе из упаковки для основания и установить его в подходящем положении.
- б) При настройке массажного кресла необходимо выдерживать расстояние 5-10 см от спинки до стены и 50 см от передней части до стены, чтобы спинка и подставка для ступней могли свободно наклоняться.
- в) Во избежание наложения сигналов, кресло следует установить на расстоянии не менее 1 м от аудио/видео аппаратуры, телевизоров и радио.

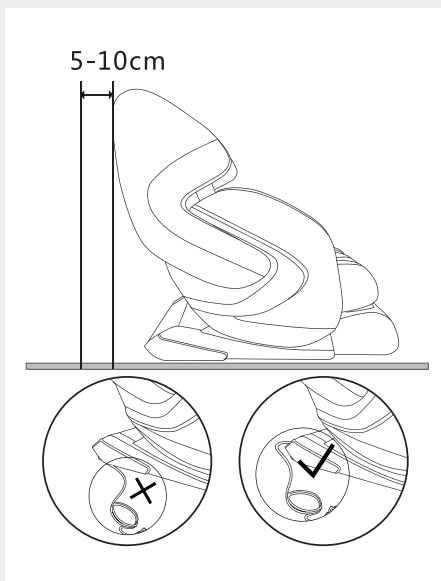




# Установка

## 6| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

а) Удерживать спинку обеими руками, как показано на рисунке справа и наклонить кресло назад примерно на 45°. Осторожно перемещать кресло на колесиках назад или вперед, пока не будет достигнуто желаемое положение.

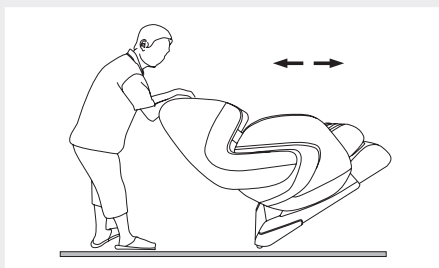


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда перемещать кресло вдвоем, убедившись, что на нем никто не сидит.
- При ненужном перемещении массажного кресла возможно повреждение пола.
- Следует крепко держать массажное кресло во избежание его падения.

## 7| ЗАЩИТА ПОЛА

Во избежание неравномерного истирания пола из-за тяжелого массажного кресла, мы рекомендуем ставить его на ковер или нечто подобное.

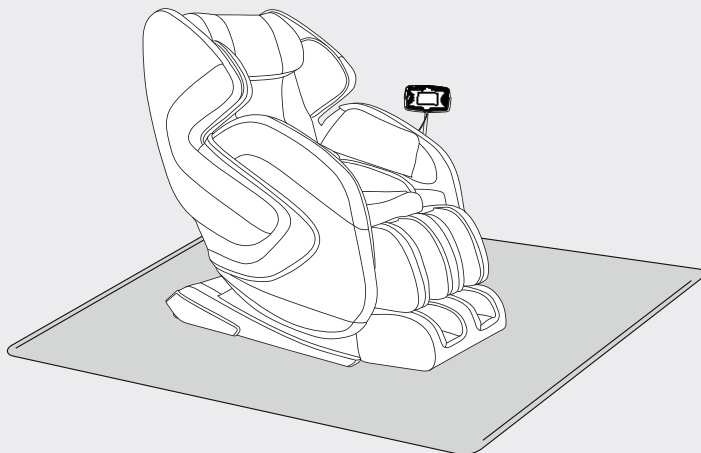


### ВНИМАНИЕ:

В случае сенсорного пола не следует катить по нему кресло, его необходимо переносить как минимум вдвоем. Поднять кресло за заднюю спинку и подставку для ступней. При этом подставка для ступней автоматически полностью поднимется.

# Запуск


## 1| РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ СПИНКИ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТУПНЕЙ

- Убедиться, что подголовник и спинка находятся в подходящем начальном положении.
- Убедиться, что разъем питания не поврежден.
- Убедиться, что подставка для ступней поднята должным образом.

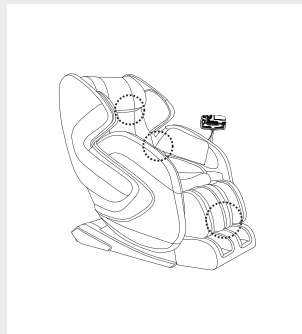


## 2| ПРОВЕРКА ОКРУЖЕНИЯ

Убедиться, что вокруг массажного кресла нет препятствий

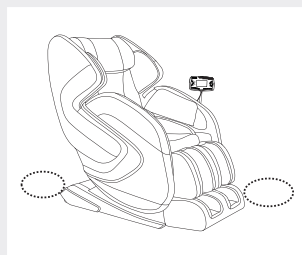


## 3| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ КРЕСЛА

- Подключить кабель питания
- Включить выключатель на кресле

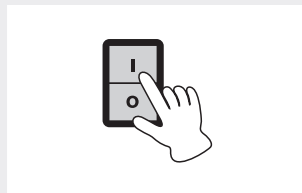


## 4| НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОЛОВНИКА

Отрегулировать положение подголовника таким образом, чтобы его нижняя кромка находилась на одной линии с кончиком мочки уха.

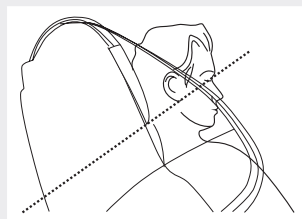

# Дистанционное управление

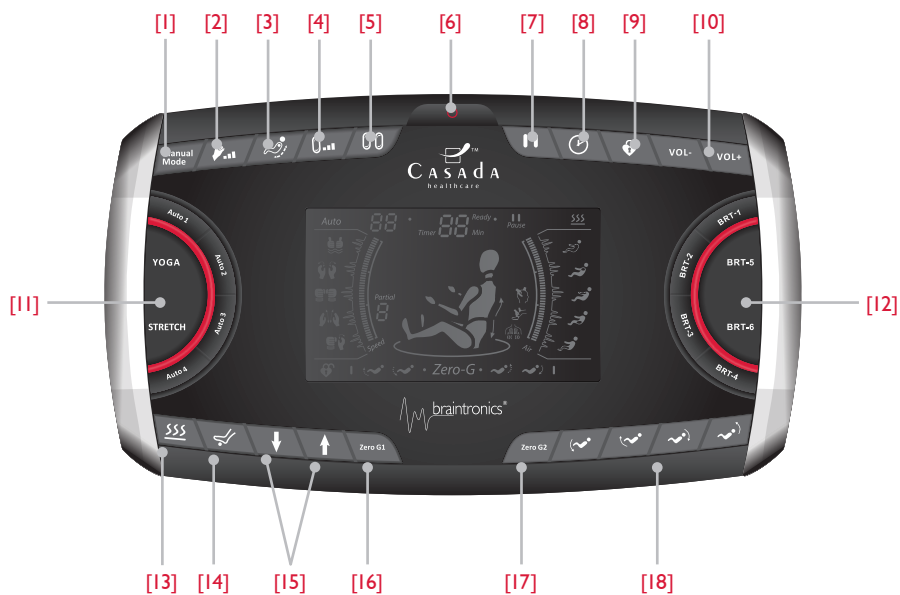

- [1] Ручная программа
- [2] Регулировка скорости
- [3] Выбор зоны массажа
- [4] Интенсивность воздушного массажа
- [5] Кнопка давления воздуха
- [6] ВКЛ/ВЫКЛ массажное кресло
- [7] Пауза / экстренная остановка
- [8] Кнопка таймера
- [9] Функция сон с braintronics
- [10] Регулировка громкости
- [11] Автоматический режим
- [12] Зона braintronics
- [13] Кнопка нагрева
- [14] Кнопка роликов для ступней
- [15] Кнопка настройки положения
- [16] «Нулевая гравитация 1»
- [17] «Нулевая гравитация 2»
- [18] Регулировка наклона

# Дистанционное управление

## 2| ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК КОНТРОЛЛЕРА



Включение и выключение массажного кресла. При повторном нажатии кнопки все функции массажного кресла отключаются, и оно возвращается в исходное положение.



При нажатии этой кнопки все функции приостанавливаются. При повторном нажатии кнопки все ранее выбранные функции продолжают работу.



Выбор желаемой длительности массажа. Диапазон регулировки 5-30 минут. Время работы по умолчанию: 15 минут.

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ



Массажное кресло имеет 6 автоматических программ массажа.

**Auto 1 (Авто 1) – Полный массаж тела:** Включает / отключает массаж по всей зоне спины.

**Auto 2 (Авто 2) – Массаж нижней части тела.** Включает / отключает массаж спины и поясничной области.


**Auto 3 (Авто 3) – Освежающий массаж:** Борется с симптомами усталости и возвращает энергию.

**Auto 4 (Авто 4) – Расслабление:** Просто откиньтесь назад, расслабьтесь, отдохните, избавьтесь от усталости, восстановите силы.

**YOGA (ЙОГА):** Направленное растяжение активизирует тело и оказывает на него бодрящий эффект.

**STRETCH (РАСТЯЖЕНИЕ):** Основано на классических методах глубокого разминания и наиболее эффективно, когда ролики останавливаются на различных точках, надавливают на них и совершают круговые движения.

## ЗОНА BRAINTRONICS

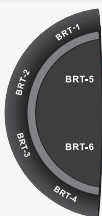

При помощи этих кнопок можно выбрать индивидуально сохраненные программы аудиостимуляции braintronics.

## ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ



«Нулевая гравитация»: Каждый раз при нажатии этой кнопки кресло переместится в следующее из двух разных положений наклона.



Нажать и держать кнопку для независимой регулировки положения подставки для ступней.



Эти кнопки управляют положением спинки и подставки для ступней.

# Дистанционное управление

## ВЫБОР МАССАЖА ВРУЧНУЮ



Функция сон с braintronics: Если вы хотите остаться в лежачем положении после программы braintronics, нажмите эту кнопку в начале или в процессе работы программы.



5 ручных программ массажа. Эта кнопка позволяет выбрать желаемые персональные программы массажа, такие как разминание, постукивание, массаж двойного действия, шицу и роллинг-массаж.



3-ступенчатая настройка скорости массажа для постукивания, разминания, массажа двойного действия и шицу.



**Настройка положения ролика:** Во время работы ручных программ нажатием этой кнопки можно перемещать массажные головки вверх и вниз



**Выбор зоны массажа:** Кнопка выбора для зоны ручного массажа, в следующей последовательности:  
Фиксированная точка ▶ Спина ▶ Талия ▶ Седалище ▶ Спина и талия ▶ Талия и седалище ▶ Все тело



**Нагрев:** Включение и отключение функции нагрева спины



Запуск или остановка работы ролика для ступней



### Массаж давлением воздуха:

Краткое нажатие кнопки позволяет выбрать индивидуальные зоны массажа:

Ступни/голеня ▶ Руки ▶ Плечи ▶ Ступни/голеня/руки ▶ Ступни/голеня/руки/плечи

Вы можете выбрать автоматическую комбинацию различных зон, удерживая кнопку нажатой на протяжении длительного времени.



### Интенсивность массажа воздухом:


3-ступенчатая регулировка интенсивности массажа при помощи воздушных подушек

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ



Регулируют громкость.

# Дисплей

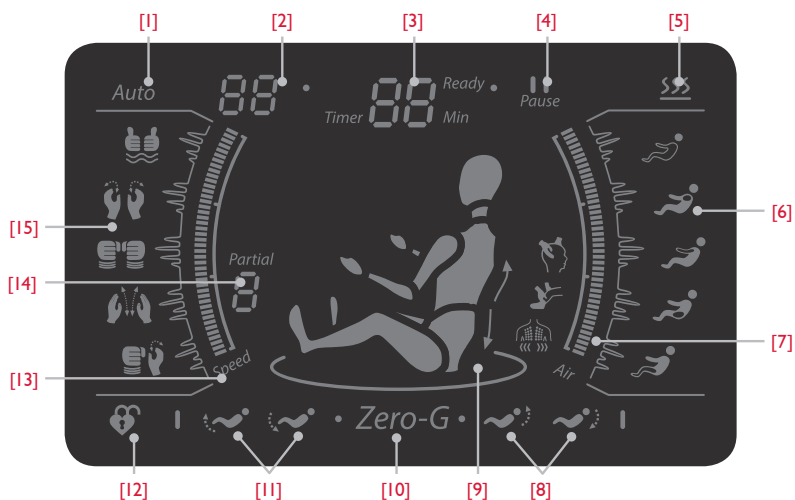

- [1] Запущен автоматический режим
- [2] Уровень автоматического режима
- [3] Отображение времени, оставшегося до завершения текущей массажной программы
- [4] Активирована кнопка паузы
- [5] Включена функция нагрева
- [6] Положение массажа воздухом
- [7] Уровень интенсивности массажа воздухом
- [8] Положение наклона спинки
- [9] Отображение положения массажных роликов
- [10] Отображение функции «нулевой гравитации»
- [11] Положение наклона подставки для ног
- [12] Функция сна вкл/выкл
- [13] Отображение регулировки скорости массажера
- [14] Показывает уровень скорости массажа
- [15] Отображение способа массажа

# Отличительные особенности



## ШИАЦУ

Шиatsu (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника лечения тела. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих растяжений и поворотов. Целью шиatsu является стимулирование отдельных точек на теле и обеспечение подвижности мышц.



## МАССАЖ 2D

Массажное кресло оснащается интеллектуальным механизмом массажа 2D. Это позволяет массажному креслу измерять вашу спину для определения более точной позиции отделов позвоночника.



## РАЗМИНАНИЕ

Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.



## ПОКОЛАЧИВАНИЕ

При поколачивании производят короткие постукивающие движения при помощи ребра ладони, кулака или ладони. Это стимулирует приток крови к коже и расслабляет напряженные мышцы. Если применять технику поколачивания на уровне груди, то это способствует растворению слизи в легких.



## РАСТЯГИВАЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ

Точечная растяжка спины роликами помогает снять напряжение с отдельных участков позвоночника и активизирует организм.



## РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц, он обладает особым успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации.



## ПРОГРЕВ

Проникающее внутрь и распространяющее тепловое воздействие позволяет превосходно расслабиться. Благодаря глубокому проникновению тепла, эта функция особенно благотворно влияет на напряженные мышцы.



## МАССАЖ СТОП

Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных роликов можно отрегулировать.

# Отличительные особенности



## СЖАТИЕ ВОЗДУХА

Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачивающие движения, которые вызывают естественные сокращения мышц. Благоприятно влияет также на область икр и стоп.



## ЙОГА

Целенаправленный растягивающий массаж активизирует Ваше тело и обладает оживляющим воздействием на весь организм.



## L ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ

В данном массажном кресле проводится глубокий массаж всего тела от шеи до ягодиц



## ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только 5 см до стены позади. Экономия пространства и удобство!



## НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.



## МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ

Удобно и применимо к области массажа любого размера.



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП

Подставку для стоп можно удлинять до 15 см, поэтому ее можно приспособить к разным размерам тела.



# Отличительные особенности




## РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ

Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения тела еще более удобным.



## ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.

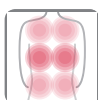

## ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Три зоны компрессионного массажа (всего тела, рук и ног / нижней части тела).



## СВЕТИЛЬНИК-ПРОЖЕКТОР

Массажные ролики могут проводить массаж в конкретной точке тела.



## СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость массажа.



## ШИРИНА

Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и широкий).



## ГРОМКость



Регулировка громкости.  
(Для функции braintronics.)



## BRAINTRONICS

Ритмичные звуки одной из восьми специальных программ braintronics, на 21 минуту погружают в медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа сна.

# После использования

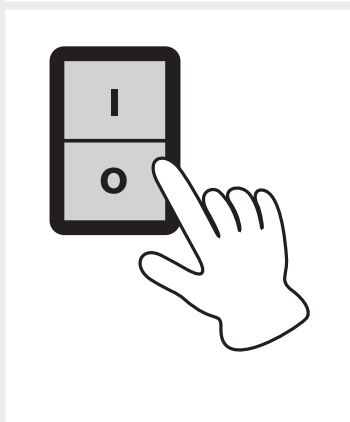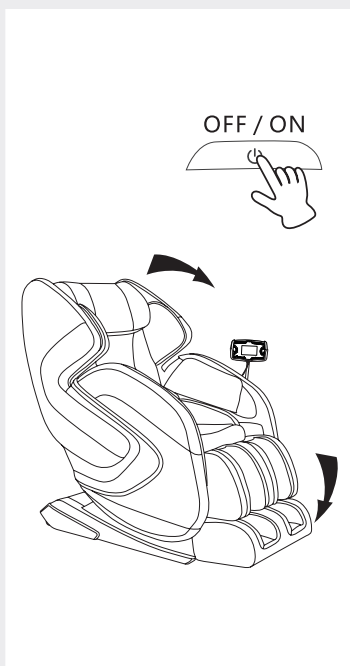

1. После завершения массажной программы, вернуть кресло в вертикальное положение, нажав кнопку регулировки угла наклона.
  - Убедитесь, что требуемая зона наклона вокруг кресла не заблокирована объектами.
  - Во избежание травм убедитесь, что ваши руки и ноги не могут быть защемлены в отверстиях внутри кресла.
2. Нажать кнопку питания для отключения массажного кресла и вернуть пульт дистанционного управления обратно в держатель
3. Отключить главный выключатель питания.
4. Выдернуть вилку из розетки.
  - Не выдергивать вилку за шнур питания.
  - Не вынимать вилку влажными руками.

# Устранение неполадок

При возникновении особых обстоятельств прекратить использование во избежание инцидентов и выдернуть вилку из розетки. Если описанные ниже меры не исправляют ситуацию, необходимо связаться с нашим центром обслуживания клиентов.

## ОШИБКА

## УСТРАНЕНИЕ

• Массажное кресло не работает, несмотря на то, что оно подключено к источнику питания.

1. Убедиться, что кабели питания массажного кресла и пульта дистанционного управления вставлены надлежащим образом.
2. Проверить, переведен ли выключатель массажного кресла в положение "I".

• Массажное кресло не реагирует на команды с пульта дистанционного управления.

1. Убедиться, что кабели питания массажного кресла и пульта дистанционного управления вставлены надлежащим образом.
2. У массажного кресла имеется автоматическая функция отключения при перегреве. Отключить кресло от источника питания на 30-50 минут.




• Массажное кресло и пульт дистанционного управления не работают.

После использования массажных программ массажное кресло автоматически переходит в режим ожидания. Нажать кнопку питания для активации кресла.

• Невозможно запустить автоматические программы braintronics.

Убедиться, что блок braintronics и кресло подключены через USB-кабель и надлежащим образом подключены к источнику питания.

# Инструкции по хранению / обслуживанию

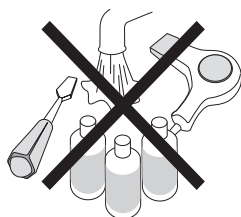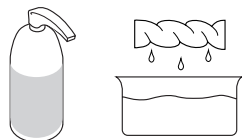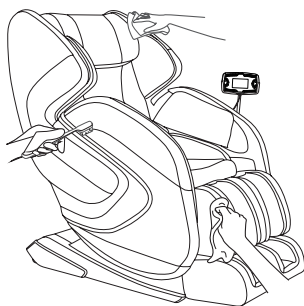

- Если кресло не используется в течение длительного времени, кабель питания должен быть свернут, кресло должно храниться в сухом помещении.
- Запрещается хранение кресла вблизи источника нагрева или открытого огня. Избегать длительного воздействия солнечных лучей.
- Если кресло расположено на неровной поверхности, запрещается катить или толкать его; для перемещения кресло необходимо поднять.
- После каждого использования кресла необходимо выдерживать паузу, запрещается использовать кресло несколько раз без пауз.
- Перед очисткой кресла необходимо отсоединить его от источника питания.
- Для очистки грязи и следов пота всегда следует использовать сухую мягкую ткань и нейтральное моющее средство.
- Запрещается использовать для очистки кресла избыточное количество воды или сушить кресло при помощи фена.
- Необходимо очищать кресло регулярно и при появлении грязи.
- Разрешается использовать только имеющиеся на рынке продукты для ухода за искусственной кожей. Запрещается очищать кресло при помощи растворителя, бензола или спирта.

## Технические данные

Габариты: в вертикальном положении:	76 x 113 x 135 см
В наклонном положении:	76x 92 x 185 см
Масса:	110 кг
Напряжение:	220В ~ 50Гц
Номинальная мощность:	230 Вт
Время работы:	максимум 30 минут
braintronics:	21 минут
Сертификаты:	



# ЕС – Декларация соответствия

Соответствует европейским нормативным стандартам EMC 2014/30/EU и LVD 2014/35/EU.

## Гарантийные Условия

Розничный оператор гарантирует предписанный законом гарантийный срок на изделие, указанный на обратной стороне. Гарантия вступает в силу с момента покупки. Дату покупки следует указать на подтверждающих покупку документах. Розничный оператор на безвозмездной основе выполнит ремонт или замену любых вышедших из строя компонентов изделия, покрываемых действием гарантии на территории Германии. Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные износу, например, на тканевые чехлы. Требованием для гарантийного ремонта является отправка неисправного компонента с подтверждающими покупку документами до истечения гарантийного срока.

Претензии по гарантии не принимаются, если выявленный дефект был вызван, например, внешним воздействием, или возник в результате проведения ремонтных работ или внесения изменений, которые выполняло не предприятие-изготовитель или авторизованный дилер. Гарантия со стороны розничного оператора ограничивается проведением ремонта или замены изделия. В рамках настоящей гарантии предприятие-изготовитель или розничный оператор не берет на себя никакие дальнейшие обязательства и не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации и/или ненадлежащего использования изделия.

Если в результате проверки изделия предприятием-изготовителем будет обнаружено, что заявление по гарантии не относится к дефекту, на который распространяется действие гарантии, или что истек гарантийный период, все расходы на проведение проверки и ремонта будет нести покупатель.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com | www.casada.com



Авторское право. На изображения и текст распространяется действие авторского права компании CASADA International GmbH, их запрещается использовать без однозначного согласия правообладателя.

Copyright © 2016 CASADA International GmbH.

Все права защищены.





