



---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА SA-5306BL



---

Вибромассаж

5 насадок

Регулятор интенсивности вибрации

Работа от сети 220-240В

---

## **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА**

Данная модель предназначена для массажа тела. В набор входят 4 насадки для разного типа массажей и защитная насадка.

Массаж с помощью данного прибора полезен в следующих случаях:

- При радикулите и остеохондрозе
- При дискинезии кишечника и заболевании желчных путей в хронической форме
- При бронхиальной астме (но не в стадии обострения)
- При пневмонии в стадии ремиссии
- При полиартрите и ожирении
- При целлюлите
- При расстройствах нервной системы
- При подготовке к физическим нагрузкам и для закрепления результатов после них

Имеется ряд медицинских противопоказаний, внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности»!

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед подключением, убедитесь, что параметры электросети соответствуют 220-240В~50/60Гц
- Прибор предназначен только для бытового использования. Запрещается использование прибора в профессиональных целях или не по назначению!
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- При отключении тяните за вилку, а не за кабель питания.
- Не используйте насадки, не входящие в комплект поставки.
- Не допускайте падения или повреждения прибора.
- Запрещается оставлять включенный прибор без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой насадок или чисткой.
- Отключайте прибор, если он не используется.
- Следите за целостностью кабеля питания прибора. Запрещается использовать прибор с поврежденным кабелем! Если кабель поврежден, обратитесь для авторизованный сервисный центр для его замены.
- Перед включением прибора в сеть, убедитесь, что переключатель стоит в положении ВЫКЛ. (0)
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте неисправный прибор.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
- Не позволяйте детям играть с работающим прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.

## **ВНИМАНИЕ!**

**НЕЛЬЗЯ** использовать прибор при следующих заболеваниях:

- Высокая температура, лихорадка (массаж может спровоцировать судороги)
- Воспаления кожи (воспаление может распространиться в более глубокие слои тканей)
- Рахит и лимфаденит (возможны травмы)
- Гемофилия и геморрагический диатез (возможно внутреннее кровотечение)
- Острый гепатит и туберкулез
- Гипертония и врожденный порок сердца
- Сосудистые заболевания (тромбоз, варикоз, аневризма)
- Вибрационная болезнь

Перед применением прибора **рекомендуется проконсультироваться** с врачом:

- Беременным женщинам
- Людям, страдающим заболеваниями сердца
- При заболеваниях мышц, суставов
- В случаях других проблем со здоровьем

## **ВНИМАНИЕ!**

- Массаж должен проводиться в вентилируемом пространстве, не накрывайте прибор при его использовании!
- После 20 минут массажа прибор нужно отключить и дать ему остыть до комнатной температуры **в течение 20 минут**.
- **Данная модель не подходит для массажа головы и лица.**

## **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. КОТОРЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА**

- 1) Не смазывайте жиром участки кожи, подлежащие воздействию, за исключением проработки мышц глубоких слоёв
- 2) Вибромассаж области живота, поясницы и ног проводится **лёжа**, остальные виды массажа – **сидя**.
- 3) При первых процедурах продолжительность массажа не должна превышать 3-5 минут, затем время массажа можно постепенно увеличить до 15 минут.
- 4) Сеансы массажа в начале лучше всего проводить через день. При явных признаках благоприятного воздействия можно перейти на ежедневный массаж.
- 5) Пользуйтесь прибором не менее, чем через 1 час после приёма пищи.
- 6) Не используйте прибор непосредственно перед сном
- 7) Не используйте прибор, если температура окружающей среды выше 37°C
- 8) Если во время использования Вы испытываете тошноту, головокружение, боль или другие неприятные симптомы, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к врачу.



## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – вибрирующая головка
- 2 – ручка прибора
- 3 – регулятор интенсивности вибрации



Насадки:

- A – защитная сетчатая насадка
- B – плоская насадка
- C – насадка для ступней ног
- D – волнообразная насадка
- E – шариковая насадка

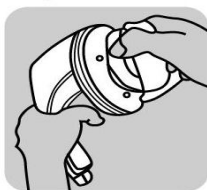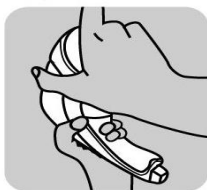

## РАБОТА ПРИБОРА

- Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал, протрите корпус прибора и насадки влажной тканью.
- Снимите с прибора защитную сетчатую насадку, повернув ее по часовой стрелке.
- Наденьте необходимую массажную насадку, надавив, чтобы задвинуть ее до конца.
- Включите прибор в сеть 220-240В.
- Поверните регулятор интенсивности вибрации по часовой стрелке. Начинать массаж нужно со слабой вибрации, постепенно увеличивая интенсивность.
- По окончании работы поверните регулятор в положение ВЫКЛ (OFF) и выньте вилку из розетки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

- Шариковая насадка – подходит для массажа чувствительных частей тела. Тонизирует мышцы, улучшает упругость кожи.
- Насадка для ступней ног – массирует ступни, одновременно избавляя от загрубевшей кожи
- Волнообразная насадка – для разминающего массажа, тонизирует мышцы, улучшает кровообращение
- Плоская насадка – для деликатного массажа шеи, плечей, спины и ног. Ослабляет мышечное напряжение.

- Защитная сетчатая насадка – используется в местах, где в движущиеся части массажера могут попасть волосы.
- **При смене насадок будьте осторожны, снимайте их аккуратно, чтобы не повредить прибор.**
- **Сетчатая защитная насадка используется только для плоской и волнообразной насадок! Не используйте ее с другими насадками, чтобы не повредить!**

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Насадки можно чистить ватой, смоченной в спирте.
- Тщательно просушите все насадки перед хранением
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

## РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте [sakura-dt.com](http://sakura-dt.com)

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
  - технику с механическими повреждениями;
  - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
  - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
  - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - использование прибора в профессиональных целях;
  - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
  - расходные материалы, аксессуары

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Массажёр	1 шт.
2. Насадки	5 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	25 Вт
Параметры электросети	220-240В~50/60Гц

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

Производитель: Ningbo Weapon Electric Appliance Co.,Ltd

Адрес: No. 66 Xiaolan Street, Zhouxiang Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

EAC C €  RoHS



Срок службы прибора – 5 лет  
Дата производства: 15-07-2016