



Руководство по эксплуатации

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШИАЦУ С
ПОДОГРЕВОМ

Модель: MGP-129M

Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение массажной подушки **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.



Комплектация

- 1 x массажная подушка;
- 1 x руководство пользователя;
- 1 x сетевой адаптер;
- 1 x автомобильный адаптер.

Технические характеристики:

Модель	MGP-129M
Наименование	Массажная подушка универсальная Шицу с подогревом
Напряжение и ток	12 В, 2,5 А
Мощность	30 Вт

Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из списка ниже:

- Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и повышенное артериальное давление.
- Онкологические заболевания.
- Лихорадка.
- Травмы позвоночника и остеопороз.
- Кожные заболевания (экзема, псориаз).
- Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме, тошнота.
- Аномальный изгиб позвоночника.

Также нужна консультация врача в период беременности и для детей до 12 лет.

Внимание!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности и инструкцией.

Меры предосторожности

Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, травм:

- Не оставляйте устройство без присмотра. Отключайте от розетки, когда устройством не используется, а также перед очисткой, установкой или снятием деталей.
- Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева.
- Не переносите устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Не эксплуатируйте изделие с засоренными отверстиями. Следите за тем, чтобы в отверстиях не было ворса, волос и т.п.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.
- Держите устройство вдали от открытых источников тепла, например, печи и камина.
- Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, кислорода или в местах использования аэрозольных спреев.
- Держите устройство и его компоненты вдали от жидкостей.
- Для очистки выключите устройство и протрите чистой мягкой тряпкой или влажной тканью. Не используйте щетки, жидкие моющие средства, спирт.
- Для выключения устройства отключите все элементы управления и выньте вилку из розетки.
- Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
- Устройство имеет теплую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании устройства.
- Используйте устройство только с адаптером из комплекта.
- Не используйте устройство, если у него поврежден шнур или вилка, если оно не работает должным образом, если оно упало и было повреждено, или если оно упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.

Зоны массажа:



Шея



Спина



Живот




Бедра



Голени

Составляющие части:

- Кнопка питания.
- Массажная зона: 2 массажных узла (4 ролика) Шиацу.
- Защитная сетка.
- DC-коннектор.
- Ремень для крепления на подголовник.
- Сетевой адаптер.
- Автомобильный адаптер.

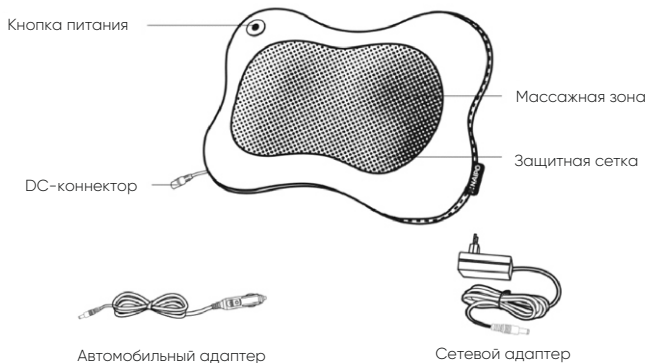

Особенности использования:

1. Подключите устройство к источнику питания.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. По умолчанию включится массаж Шиацу и инфракрасный подогрев.
3. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы отключить функцию инфракрасного подогрева.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 сек, чтобы отключить все функции.
5. После использования устройства в течение 20 мин подождите 30 мин, прежде чем использовать снова.

После использования отключите устройство от источника питания.



! Помните, что массажер Nairo – не медицинское устройство. Он не заменяет лечение.

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd,
No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu,
Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил»
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37
Гарантия: 12 месяцев с момента покупки
Срок службы: 24 месяца

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 6, место 1
Телефон: +375 (29) 761 60 65
Понедельник – выходной
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда



Устройство соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза.



Гарантия и поддержка клиентов

По вопросам поддержки или гарантийных претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному выше адресу.