

**МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ, ПЛЕЧ, ЖИВОТА  
И ПОЯСНИЦЫ ШИАЦУ С  
ПОДОГРЕВОМ NAIPO OCUDDLE**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Model: oCuddle-C1

Благодарим вас за приобретение массажера Nairo. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.

### Комплектация:



Массажер



Руководство  
пользователя



Сетевой  
адаптер



Автомобильный  
адаптер

### Технические характеристики:

Модель	oCuddle-C1
Наименование	Массажер для шеи, плеч, живота и поясницы Шиаци с подогревом
Масса нетто	1,3 кг
Размеры устройства	300 x 130 x 135 мм
Напряжение и ток	12 В, 2.5 А
Потребляемая мощность	30 Вт
Таймер по умолчанию	20 мин

## **Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из списка ниже:**

- Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и повышенное артериальное давление.
- Онкологические заболевания.
- Лихорадка.
- Травмы позвоночника и остеопороз.
- Растяжение связок или мышц.
- Кожные заболевания (экзема, псориаз).
- Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме, тошнота.
- Аномальный изгиб позвоночника.



Также нужна консультация врача в период менструации, беременности и для детей до 12 лет.

## **Внимание!**



Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности и инструкцией.

## **Меры предосторожности**




Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, травм:


- Не оставляйте устройство без присмотра. Отключайте от розетки, когда устройство не используется, а также перед очисткой, установкой или снятием деталей.
- Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева.

- Не переносите устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Не эксплуатируйте изделие с засоренными отверстиями. Следите за тем, чтобы в отверстиях не было ворса, волос и т.п.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.
- Держите устройство вдали от открытых источников тепла, например, печи и камина.
- Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, кислорода или в местах использования аэрозольных спреев.
- Держите устройство и его компоненты вдали от жидкостей.
- Для очистки выключите устройство и протрите чистой мягкой тряпкой или влажной тканью. Не используйте щетки, жидкие моющие средства, спирт.
- Для выключения устройства отключите все элементы управления и выньте вилку из розетки.
- Для хранения поместите устройство в сухое и проветриваемое место.
- Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
- Не используйте устройство во время вождения.
- Избегайте прямого контакта устройства с кожей.
- Не используйте устройство непрерывно. После сеанса выключите устройство и включите его снова не раньше, чем через 30 минут. Непрерывное использование может сократить срок службы или стать причиной неисправности устройства.
- Устройство имеет теплую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании устройства.
- Используйте устройство только с адаптером из комплекта.
- Не используйте устройство, если у него поврежден шнур или вилка, если оно не работает должным образом, если оно упало и было повреждено, или если оно упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.


## Зоны массажа

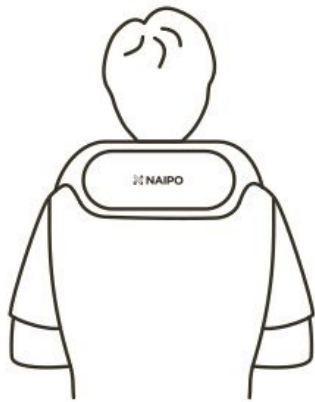

Плечи

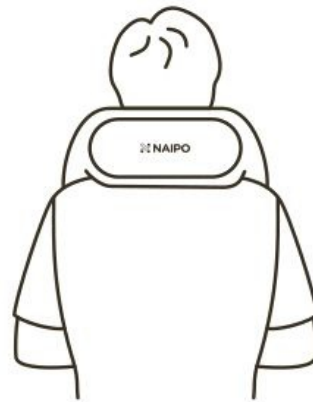

Шея

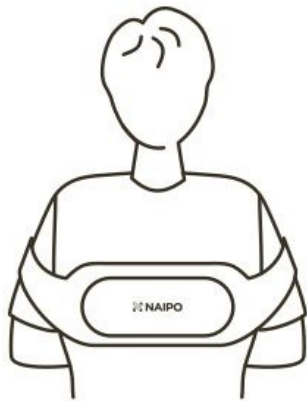

Спина



Поясница



Бедра



Голени

## Инструкция по эксплуатации



1. Подключите сетевой адаптер к розетке (или подключите автомобильный адаптер к прикуривателю).
2. Расположите массажер на теле.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы начать массаж.
4. По умолчанию будут активированы функции массажа и подогрева. Массажер автоматически отключится через 20 минут.
5. Нажмите кнопку подогрева, чтобы выбрать один из уровней нагрева (высокий / низкий) или отключить эту функцию.
6. Нажмите кнопку смены направления массажа, чтобы изменить направление массажа.
7. Нажмите кнопку регулировки интенсивности, чтобы выбрать один из 3 уровней скорости массажа (низкий / средний / высокий).
8. Нажмите кнопку питания, чтобы остановить массаж.

**После использования отключите устройство от источника питания.**



Помните, что массажер Nairo – не медицинское устройство. Он не заменяет лечение.

**Производитель:** Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd,  
No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu,  
Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

**Поставщик:** ООО «Форевер-Мобил»  
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37  
Гарантия: 12 месяцев с момента покупки  
Срок службы: 24 месяца

**Сервисный центр:** ООО «Портатив Мобайл Сервис»  
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 6, место 1  
Телефон: +375 (29) 761 60 65  
Понедельник – выходной  
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда



Устройство соответствует требованиям  
технического регламента Таможенного союза.



**Гарантия и поддержка клиентов**

По вопросам поддержки или гарантийных претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному выше адресу.