

# GÉZATONE



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

BIOLIFT m 100S

МИОСТИМУЛЯЦИЯ

МИКРОТОКИ

3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ



### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ДЛЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР GEZATONE ПРЕДЛАГАЕТ 3D РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР BIOLIFT m100S, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ МИКРОТОКИ И МИОСТИМУЛЯЦИЮ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ЛИФТИНГА КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА.

С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА МОЖНО СКОРРЕКТИРОВАТЬ МОРЩИНЫ, ПОДТЯНУТЬ КОЖУ, УСТРАНИТЬ ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПТОЗ, МОДЕЛИРОВАТЬ ОВАЛ ЛИЦА И УМЕНЬШИТЬ ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК, ИСПОЛЬЗУЯ ПРИБОР 20 МИНУТ В ДЕНЬ.



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПТОЗ



МОРЩИНЫ, КОЖНЫЕ ЗАЛОМЫ И СКЛАДКИ



ОТЕЧНОСТЬ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА, УСТАВШАЯ КОЖА



ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК, НЕЧЕТКИЙ КОНТУР ЛИЦА



СНИЖЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ ТЕЛА

## ФУНКЦИИ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР, СОЧЕТАЮЩИЙ МИКРОТОКИ, МИОСТИМУЛЯЦИЮ И ПЛАСТИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И ЛИФТИНГА КОЖИ ЛИЦА, ОКАЗЫВАЕТ МНОГОУРОВНЕВОЕ ВЛИЯНИЕ, УКРЕПЛЯЕТ МЫШЕЧНЫЙ КАРКАС, СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ «БЕЛКОВ МОЛОДОСТИ», ТОНИЗИРУЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ.

ТРИ МЕТОДА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В BIOLIFT m100S, ОКАЗЫВАЮТ РАЗНОСТОРОННЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТИПА КОЖИ.

Артикул: 1301192

# 3


МЕТОДИКИ



МИКРОТОКИ



МИОСТИМУЛЯЦИЯ

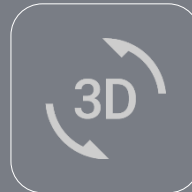

3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ  
МАССАЖ

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ



Артикул: 1301192

ПРИБОР ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ МИОСТИМУЛЯЦИИ, МИКРОТОКОВ, ПЛАСТИЧЕСКОГО РОЛИКОВОГО МАССАЖА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЛИФТИНГА КОЖА ЛИЦА И ТЕЛА.




### МИОСТИМУЛЯЦИЯ

- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
- ТОНИЗАЦИЯ И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕТКОГО КОНТУРА ЛИЦА И УКРЕПЛЕНИЕ ОВАЛА.
- СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ВОСПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАТКА ОБЪЕМОВ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ЛИЦА
- МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ



### МИКРОТОКИ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.

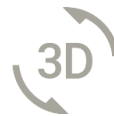

### 3D РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

- СТИМУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УКРЕПЛЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ МЫШЦ
- УМЕНЬШЕНИЕ ВТОРОГО ПОДБОРОДКА
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- ЛИМФОДРЕНАЖ, ДЕТОКСИКАЦИЯ
- МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ ДРЯБЛОСТИ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

## МИОСТИМУЛЯЦИЯ



### ЭМС

МЕТОДИКА ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ ТРЕНИРУЕТ МЫШЦЫ ЛИЦА, ИМИТИРУЯ ИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. СИГНАЛЫ ПОДАЮТСЯ К НЕРВНЫМ ОКОНЧАНИЯМ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ ДВИЖЕНИЕМ МЫШЦ И ЗАСТАВЛЯЮТ ИХ СОКРАЩАТЬСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ.

ПРИ УКРЕПЛЕНИИ МЫШЦ КОЖА ПОДТЯГИВАЕТСЯ И ЛИЦО ПРИОБРЕТАЕТ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ. НАРЯДУ С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА, ЭМС СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ МОРЩИН И УСТРАНЯЕТ «ПРОВИСАНИЕ» В ЗОНАХ ЛИЦА С НЕДОСТАТКОМ ОБЪЕМА ТКАНЕЙ.

## ЭФФЕКТЫ МИОСТИМУЛЯЦИИ



ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ  
И МЫШЦ



УКРЕПЛЕНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА



ВОСПОЛНЕНИЕ  
НЕДОСТАТКА ОБЪЕМОВ



УМЕНЬШЕНИЕ  
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



АКТИВИЗАЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ И  
ОБМЕНА



УСТРАНЕНИЕ  
ОТЕЧНОСТИ



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА

## МИКРОТОКИ



МИКРОТОКИ УСКОРЯЮТ ПРОЦЕССЫ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКАХ КОЖИ, ЧТО ВЕДЕТ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ АКТИВНОСТИ, КЛЕТКИ «ПРОСЫПАЮТСЯ» И НАЧИНАЮТ «РАБОТАТЬ» КАК В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ.

БЛАГОДАря СТИМУЛИРУЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ МИКРОТОКОВ НА ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ УПРУГОЙ, БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ И ПОДТЯНУТОЙ.

ЭФФЕКТЫ МИКРОТОКОВ УСИЛИВАЮТСЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИОСТИМУЛЯЦИИ.

## ЭФФЕКТЫ МИКРОТОКОВ



ЛИФТИНГ




КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН



УСКОРЕНИЕ  
РЕГЕНЕРАЦИИ



АКТИВИЗАЦИЯ  
СИНТЕЗА  
КОЛЛАГЕНА

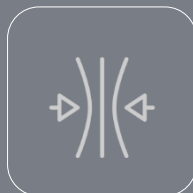

ТОНИЗАЦИЯ И  
ПОВЫШЕНИЕ  
УПРУГОСТИ КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ



ДРЕНАЖ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УВЛАЖНЕНИЕ  
КОЖИ, УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА

## 3D ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РОЛИКИ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ГРАНЯМИ ВРАЩАЮТСЯ НА 360°. ОКАЗЫВАЮТ ГЛУБОКОЕ МАССАЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ. ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ И ПОВЫШАЕТ ИХ ТОНУС, СОЗДАВАЯ ПРОЧНЫЙ КАРКАС.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФОРМУ ЛИЦА, БОРЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ «ВТОРОГО ПОДБОРОДКА», СОЗДАЁТ ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ И ЛИНИИ. ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ КОЖУ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РУК

### ЭФФЕКТЫ РОЛИКОВОГО МАССАЖА



ТОНИЗАЦИЯ И  
ПОВЫШЕНИЕ  
УПРУГОСТИ КОЖИ



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН



СТИМУЛЯЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



ДРЕНАЖ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



УКРЕПЛЕНИЕ  
МЫШЕЧНОГО  
КАРКАСА



ПОДТЯЖКА КОЖИ  
ЛИЦА И ТЕЛА



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** ВСЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОЙ КНОПКИ.
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА И В ПОЕЗДКАХ.
- **ВСЕГДА С СОБОЙ:** ЛЕГКО ПОМЕСТИТСЯ В СУМКЕ, МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕЛОВЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
- УДОБНАЯ ФОРМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗАНИМАЕТ 20 МИНУТ.
- **ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ** ПОЗВОЛЯЮТ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** ПРИБОР МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
- **ПРОСТОТА** ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.



Артикул: 1301192

3

3 МЕТОДА  
ВОЗДЕЙСТВИЯ



УПРАВЛЕНИЕ  
ОДНОЙ  
КНОПКОЙ

4

4 УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



РАБОТАЕТ  
ОТ  
БАТАРЕЕК



ДЛЯ  
ЛИЦА И ТЕЛА



### ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

ЭЛЕКТРОДЫ ШАРИКИ



ЭЛЕКТРОДЫ ШАРИКИ

ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ

КНОПКА  
ПИТАНИЯ / ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ

ОТСЕК  
ДЛЯ БАТАРЕЕК



РАБОТАЕТ ОТ 2 БАТАРЕЕК ААА  
(в комплект не входят)



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул: 1301192

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ  
МАКИЯЖ



2

СМОЙТЕ ОСТАТКИ  
ДЕМАКИЯЖНОГО СРЕДСТВА



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ  
АППАРАТНОЕ  
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



4

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И  
ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ.  
ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ПО  
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ  
ЛИЦА.



5

ДАЛИТЕ ОСТАТКИ  
АППАРАТНОГО СРЕДСТВА,  
ПРОТРИТЕ ЛИЦО  
ТОНИКОМ, НАНЕСИТЕ  
МАСКУ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ  
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ  
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.




СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ, ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ ОТ 15 ДО 20 ПРОЦЕДУР.

### РЕЗУЛЬТАТЫ\*



КОМПАКТНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР - МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ПОДТЯЖКИ КОЖИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОДИТЬ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

КУРС ИЗ 15-20 ПРОЦЕДУР, ПРОВОДИМЫХ ТРИЖДЫ В НЕДЕЛЮ, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

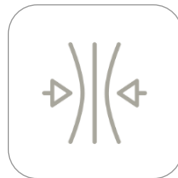

ПОВЫШЕНИЕ  
ТОНУСА КОЖИ



МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА



ВЫРАВНИВАНИЕ  
МИКРОРЕЛЬЕФА



ВОСПОЛНЕНИЕ  
ОБЪЕМОВ



КОРРЕКЦИЯ  
МОРЩИН



УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ  
ОТЕКОВ И  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



ЛИФТИНГ КОЖИ  
ЛИЦА И ТЕЛА



МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ФИГУРЫ

*\* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ, КУПЕРОЗ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДРУГИЕ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СЕАНСЫ МАССАЖА ПРИ БОТОКСЕ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул: 1301192

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	2 x 1.5 В батареи типа ААА (в комплект не входят)
ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА	30 – 37 Гц
ДИАПАЗОН АМПЛИТУДЫ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	10 – 100 В
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА	0,1 мА

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, Biolift m100S -1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1



**GÉZATONE**

