

GÉZA *tone*

SuperLifting

серии Bio Sonic, модель m356

ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ



ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ M356 GEZATONE


Многофункциональный косметический аппарат, о котором мы давно мечтали, теперь доступен для всех, кто хочет сохранить на долго красоту и молодость своего лица и проводить косметические процедуры в домашних условиях.

Компания Gezatone представляет ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА модель M356, сочетающий ЧЕТЫРЕ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТОДИКИ:

- 1** УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ – способствует проведению в глубокие слои кожи специальной косметики для увлажнения и питания клеток кожи.
- 2** ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ИОНОФОРЕЗ в сочетании с заряженными косметическими комплексами улучшит внешний вид и состояние кожи.
- 3** ХРОМОТЕРАПИЯ трех цветов комплексно воздействует на различные типы кожи, нормализует состояние жирной кожи, успокоит раздраженную кожу и запустит процессы выработки волокон коллагена и эластина увядающей кожи.
- 4** ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ в сочетании с УЗ-микромассажем подтянет и укрепит кожу, улучшит контур овала лица, снимет отеки, разгладит морщинки.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

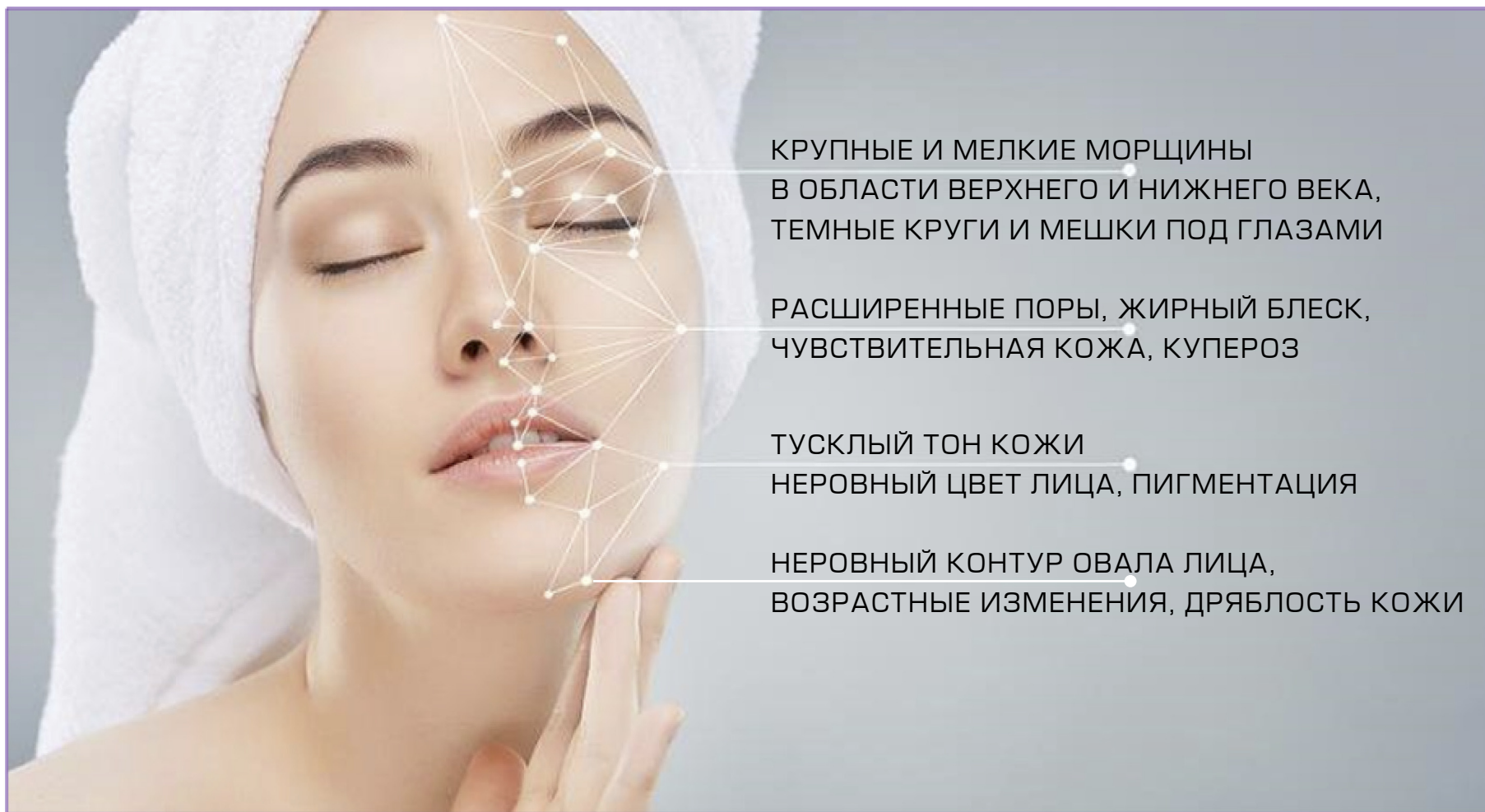

Аппарат рекомендуется для коррекции возрастных изменений кожи и позволит Вам осуществить в домашних условиях высокопрофессиональный уход за кожей с признаками увядания.

Регулярное выполнение простых и не занимающих много времени процедур позволит Вам многократно повысить упругость кожи, восстановить эластичность и тургор, улучшить цвет лица и разгладить морщины.

Аппарат компактен и удобен в использовании и станет Вашим надежным другом на долгие годы.

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕГУЛЯРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА С ФУНКЦИЕЙ СВЕТОТЕРАПИИ M356 Gezatone

- ✔ Максимальный эффект подтяжки кожи
- ✔ Разглаживание мелких мимических морщинок и морщин
- ✔ Эффективный массаж кожи
- ✔ Повышение тонуса и упругости кожи
- ✔ Эффективное очищение, питание и увлажнение кожи
- ✔ Уменьшение отечности
- ✔ Нормализация работы сальных желез
- ✔ Осветление пигментации и устранение темных кругов




ФУНКЦИИ ПРИБОРА

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ и МИКРОМАССАЖ

Ультразвуковые колебания с частотой ≈ 3 миллиона колебаний в секунду заставляют клетки дермы активно сжиматься и разжиматься с такой же частотой. Такое мягкое волнообразное воздействие ультразвука на ткани эффективно стимулирует и омолаживает кожу, не травмируя ее.

ФОНОФОРЕЗ – методика, обеспечивающая сочетание воздействия ультразвука и косметических препаратов. Благодаря ультразвуку проницаемость кожных покровов, клеточных мембран и стенок сосудов повышается, и активные вещества проникают глубоко в кожу.

- ✔ Мягко и деликатно стимулирует клетки кожи
- ✔ Способствует выработке собственного коллагена и эластина
- ✔ Усиливает микроциркуляцию крови и лимфы
- ✔ Устраняет отечность
- ✔ Подтягивает кожу, повышает упругость и эластичность
- ✔ Улучшает цвет лица
- ✔ Усиливает проникновение косметических средств и повышает их эффективность
- ✔ Разглаживает морщинки и неровности на коже

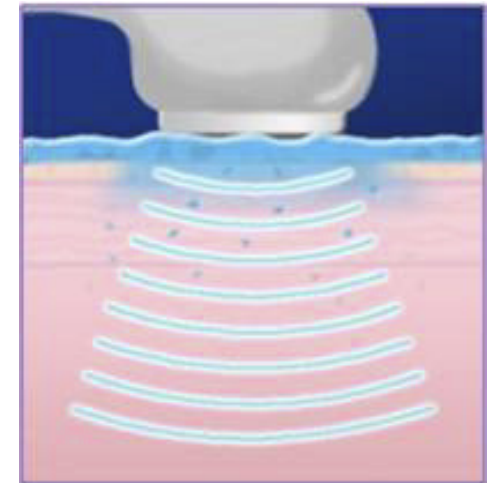

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

ИОНОФОРЕЗ




Применение постоянного гальванического тока регулирует обменные процессы, происходящие в коже, улучшает тонус кожи, нормализует деятельность сальных желез, усиливает питание кожи, ее влажность, способность к регенерации, а также стимулирует выработку белков коллагена и эластина клетками-фибробластами. При помощи постоянного гальванического тока можно проводить процедуру ионофореза, т.е. введения в глубокие слои кожи специальных заряженных косметических комплексов, что многократно усиливает их действие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА "ION-" ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ:

- ✓ повышает тонус дряблой кожи;
- ✓ увлажняет кожу, восстанавливает ее тургор;
- ✓ активизирует тонус сосудов и улучшает цвет лица;
- ✓ стимулирует трофику тканей и кислородное дыхание клеток кожи;
- ✓ усиливает проникновение активных косметических средств в глубокие слои кожи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА "ION+" ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ:

- ✓ снимает повышенный тонус мимических мышц лица
- ✓ разглаживает мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта;
- ✓ уменьшает раздражение и воспаление кожи;
- ✓ устраняет отеки и выводит токсины;
- ✓ снимает аллергические реакции, зуд, покраснения кожи;
- ✓ уменьшает проявления купероза, освежает кожу, способствует сужению пор;
- ✓ открывает кожные поры, расщепляет и омыляет кожный жир (себум), тем самым очищая кожу лица.

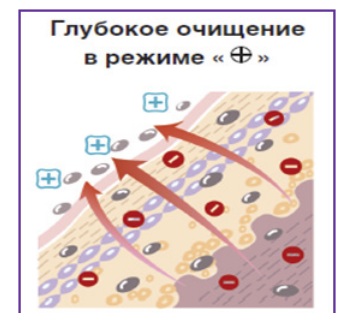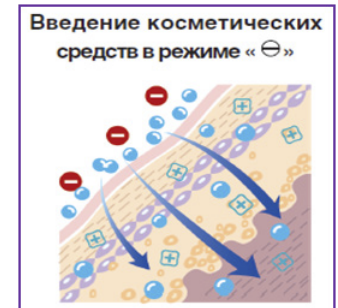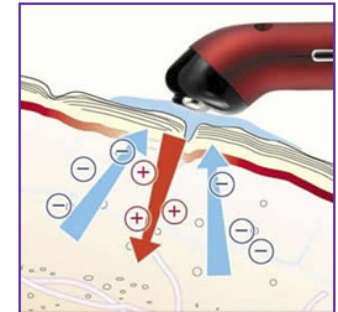

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

ХРОМОТЕРАПИЯ – это бесконтактный метод лечения светом и цветом, эффективность которого научно доказана. Он основан на том, что свет, являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет необходимую энергию клеткам кожи. Все цвета имеют свое излучение и оказывают различные эффекты.

СВЕТ СИНЕГО СПЕКТРА (460–470нм) оказывает успокаивающее действие и идеально подходит для ухода за чувствительной кожей. Способствует нормализации работы сальных желез, сужению расширенных пор. Предотвращает появления воспалений и акне. Свет синего спектра делает кожу красивой и сияющей здоровьем.



СВЕТ КРАСНОГО СПЕКТРА (620–630нм) достигает глубокие слои дермы, способен стимулировать выработку волокна коллагена и эластина. Улучшает кровообращение, уменьшает морщины и разглаживает кожу. Подходит для любого типа кожи.



СВЕТ ЗЕЛЕНОВОГО СПЕКТРА (580–590нм) идеально подходит для ухода за кожей смешанного типа. Свет зеленого спектра оказывает успокаивающее действие на кожу и снимает дискомфорт. Великолепно осветляет кожу с пигментацией, выравнивает тон кожи.



ФУНКЦИИ ПРИБОРА

МАССАЖ

Вибрационный массаж (6000–7000 колебаний в минуту) ускоряет процесс циркуляции крови и лимфоток. Снимает отеки и улучшает цвет лица. В сочетании с ультразвуковым микромассажем и хромотерапией при проведении курса процедур можно добиться великолепных результатов.



✓
ТОНИЗАЦИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ



✓
ПОДТЯЖКА
И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,
РАЗГЛАЖИВАНИЕ
МОРЩИН



✓
УСТРАНЕНИЕ
«ВТОРОГО ПОДБОРОДКА»,
ЧЕТКИЙ ОВАЛ ЛИЦА



✓
УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА
ПОР, ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО РЕЛЬЕФА,
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА




При проведении процедуры необходимо касаться пальцами боковых контактов

LCD ДИСПЛЕЙ

Sonic	Микромассаж
Ion +	Гальваническое воздействие в режиме плюс
Ion -	Гальваническое воздействие в режиме минус
Massage	Вибрационный массаж
Photon	Световое воздействие
Time	Время работы

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

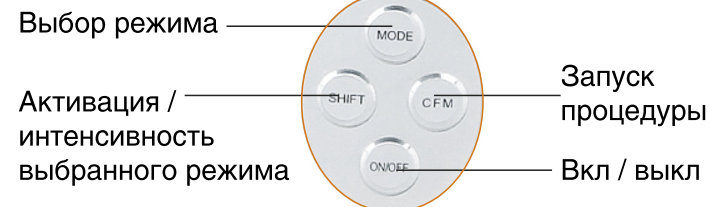

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В РЕЗУЛЬТАТЕ КУРСА ПРОЦЕДУР БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ МЕТОДИК НЕ ТОЛЬКО ВЫ, НО И ВАШИ БЛИЗКИЕ ЗАМЕТЯТ, КАК ПОХОРОШЕЛО ВАШЕ ЛИЦО:

- ✔ произойдет лифтинг лица и шеи
- ✔ кожа станет более ровной, упругой и эластичной
- ✔ глубина и количество морщин уменьшатся
- ✔ активные компоненты специальных косметических средств проникнут в глубокие слои кожи, дадут полноценное питание и увлажнение
- ✔ контуры овала лица станут более четкими
- ✔ цвет лица улучшится, поры станут менее заметными
- ✔ кожные покровы очистятся от шлаков и токсинов



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ❑ ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ❑ ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ❑ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ❑ ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ (ОСОБЕННО ГНОЙНЫЕ)
- ❑ ОСТРЫЙ ПЕРИОД ТРАВМЫ, ССАДИНЫ, РАНЫ
- ❑ ОБОСТРЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ЭКЗЕМЫ, ДЕРМАТИТА, ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ КОЖИ, ТРЕЩИН)
- ❑ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
- ❑ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА И ИМПЛАНТАТЫ, РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ ПОД КОЖЕЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аппарата:

Прибор для ухода и массажа лица Gezatone «Superlifting», модель m356 серия Bio Sonic, бытовой электрический

Напряжение питания: DC 15 В.

Сетевой адаптер: AC 220 В., 50 Гц./ DC15 В., 400 мА
(или 800 мА)

Диапазон рабочих температур: +18...35°С при относительной влажности 20...80%

Частота колебаний в режиме микромассажа:
3 МГц +/- 5%

Длины волны светового излучения: 620–630 нм, 460–470 нм, 580–590 нм.

Частота колебаний в режиме механической вибрации: 6–7 кГц

Установки таймера: 1–19 мин.

Выходной ток в режиме ионофореза: 0,35–0,9 мА (на нагрузке 1 кОм).

Габариты в упаковке: 238x228x68 мм

Вес: 750 г.

Изготовитель: «Gezanne I.T.C.» / «Жезанн И.Т.С.», адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, / Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция.

Филиал завода-изготовителя: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК» адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C., / 2 фл, Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, К.Р., Тайвань.

Импортер/уполномоченная изготовителем организация: ООО «Митридат», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр. 10 тел. (495) 225-25-83

Дата производства: см. на инструкции.

Срок службы 5 лет.





Арт. 1302091S

