

# PHILIPS

## sonicare

Межзубные промежутки,  
питание от аккумулятора

AirFloss

1 насадка



HX8261/01



## AirFloss — эффективная замена зубной нити.

Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха.

### Чистка в течение 30 секунд

- Чистота всей полости рта всего за 30 секунд
- Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

### Развитие здоровых привычек

- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

### Улучшает состояние полости рта


- Лучше удаляет налет между зубами
- Помогает улучшить состояние десен всего за две недели
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

### Легко использовать

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Удобная эргономичная ручка
- Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно


## Особенности

### Простое решение

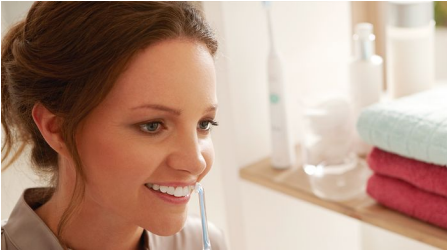

Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

### Лучше удаляет налет между зубами

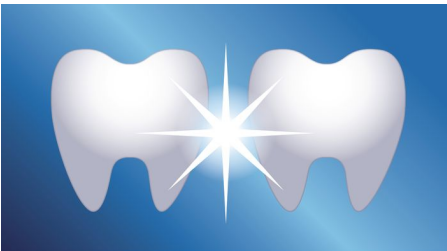

Лучше удаляет налет между зубами

### Чистка в течение 30 секунд



С зубной щеткой AirFloss чистка всей полости рта займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая


направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.

### Удобное наполнение резервуара



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, жидкостью для полоскания рта или водой (для освежающей чистки), установите насадку у межзубного промежутка и начинайте чистку. В резервуар помещается объем жидкости, достаточный для двух чисток.

### Более здоровые десны

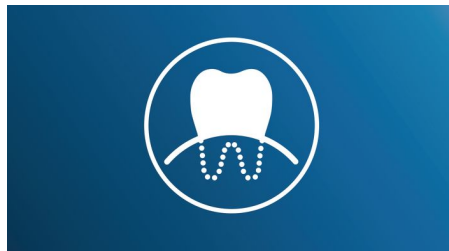

Клинически доказано, что прибор Sonicare AirFloss улучшает состояние десен всего за две недели.

### Помогает предотвратить развитие кариеса



Мягко удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Sonicare AirFloss помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

### Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха



Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

### Эргономичная ручка

AirFloss оснащен удобной эргономичной ручкой и нескользящим покрытием специально для чистки труднодоступных мест.

### Направляющий наконечник



Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

# Характеристики

## Удобство использования

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Индикатор батареи:** Мигающий индикатор указывает на низкий уровень заряда

**Время работы батареи:** До 2 недель

**Насадки:** Легко фиксируются и снимаются

## Технические характеристики

**Батарея:** Перезарядка

**Время работы:** Заменяйте насадки каждые 6 месяцев

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Продолжительность зарядки:** 24 часа для полной зарядки

## Питание

**напряжение:** Универсальное зарядное устройство

## Обслуживание

**Гарантия:** 2 года гарантии

## В комплекте

**Ручка AirFloss:** 1

**Насадка AirFloss:** 1

**зарядное устройство:** 1

## Качество чистки

**Высокое качество:** Удаляет в 5 раз больше налета\*

**Польза для здоровья:** Улучшает состояние десен всего за две недели

**Функция автоматического распыления:** Очищение всей полости рта за 30 сек.

**Насадки:** Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.

## Характеристики дизайна

**Цвет:** Белый с зелеными вставками

