



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СПА-МАССАЖЁР ДЛЯ СТОП
(ПАРОВАЯ ВАННА)

Модель: SFS-101

Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение массажера **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.

Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из списка ниже:

- Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и повышенное артериальное давление.
- Онкологические заболевания.
- Лихорадка.
- Травмы позвоночника и остеопороз.
- Растяжение связок или мышц.
- Кожные заболевания (экзема, псориаз).
- Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме, тошнота.
- Аномальный изгиб позвоночника.



Нужна консультация врача в период менструации, беременности и для детей до 12 лет.

Внимание!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности и инструкцией.

Меры предосторожности



Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, травм:

- Перед использованием сядьте на устойчивое сиденье, чтобы избежать случайных травм.
- Не используйте устройство стоя.
- Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева.
- Не переносите устройство за кабель питания.
- Держите кабель питания подальше от нагретых поверхностей.
- Держите устройство вдали от открытых источников тепла, например, печи и камина.
- Не эксплуатируйте изделие с засоренными отверстиями. Следите за тем, чтобы в отверстиях не было ворса, волос и т.п.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, кислорода или в местах использования аэрозольных спреев.
- Не используйте устройство рядом с ванной, душевой кабиной, бассейном и другими источниками воды.
- Не используйте устройство в среде с высокой влажностью или пыльных местах.
- Не используйте устройство при высокой температуре (>40 °C).
- Не прикасайтесь к устройству и адаптеру питания мокрыми руками.
- Не используйте устройство, если из него вытекает вода.
- Не используйте устройство при недостаточном количестве воды. Немедленно выключите устройство при появлении оповещения о нехватке воды.
- Немедленно прекратите использование, если почувствуете дискомфорт.
- Не вставляйте пальцы ног в зазор между роликами во избежание травм.
- Устройство имеет теплую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны соблюдать осторожность при использовании устройства.
- Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
- Не погружайте устройство в воду для его очистки.
- Устройство содержит ультрафиолетовый излучатель. Замена УФ-излучателя пользователем не разрешена.
- Не используйте устройство, если оно не работает должным образом, если оно упало и было повреждено, или если оно упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.
- Не оставляйте устройство без присмотра. Отключайте от розетки, когда устройство не используется, а также перед очисткой, установкой или снятием деталей.
- Не используйте устройство сразу после еды, после употребления спиртных напитков или интенсивных упражнений.

Утилизация устройства



Эта маркировка указывает на то, что данное устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от

неконтролируемых отходов, устройство необходимо сдать на переработку. Пожалуйста, обратитесь в пункт утилизации или к продавцу. Они смогут принять устройство для экологически безопасной переработки.

Технические характеристики:

Модель	SFS-101
Наименование	Спа-массажер для стоп (паровая ванна) Naipo oFlexiSpa
Входное напряжение и ток	220-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальная мощность	420 Вт
Объем резервуара	170 мл
Размеры	38 x 37.8 x 27.5 см
Вес	4 кг

Компоненты устройства:



1 x массажер



1 x паровая крышка



1 x поддон для
слива




2 x массажные
ролики

Зона массажа:



Руководство по эксплуатации:

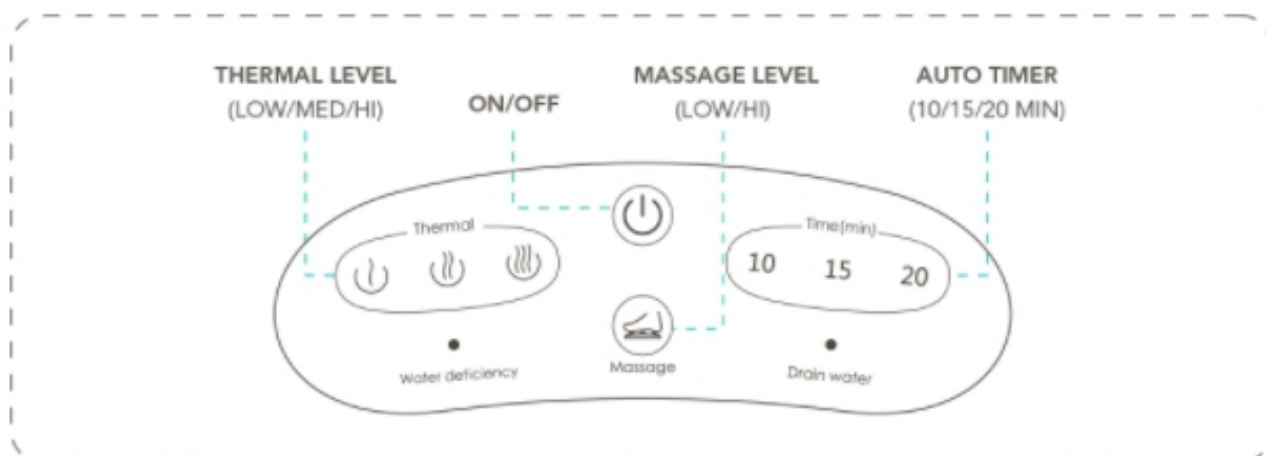

1. Выньте резервуар с водой и налейте в него чистую воду. Вставьте резервуар обратно в устройство.
2. Подключите устройство к источнику питания и коснитесь кнопки питания на панели управления. Массажер должен включиться. Если массажные пластины установлены неправильно, массажер не запустится должным образом, и индикатор будет гореть в течение одной минуты.
3. По умолчанию установлен таймер отключения на 15 минут, а уровень нагрева пара находится на среднем уровне.
4. Во включенном состоянии нажмите кнопку массажа, чтобы активировать

массаж уровня 1 (синий индикатор), нажмите еще раз, чтобы активировать массаж уровня 2 (красный индикатор). Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию массажа.

* Для активации функции массажа должны быть установлены оба ножных ролика. Если ролики не установлены или установлен только один, устройство не активирует функцию массажа.

5. Во включенном состоянии коснитесь кнопок 10 / 15 / 20, чтобы установить таймер автоматического отключения на 10 / 15 / 20 минут. Коснитесь одной из 3 кнопок уровня пара, чтобы выбрать низкую / среднюю / высокую температуру.
6. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить продукт. Все функции будут отключены, а индикатор слива воды будет гореть 5 секунд, чтобы напомнить о необходимости слива оставшейся воды после выключения.
7. Нажмите кнопку слива, чтобы слить оставшуюся воду из бутылки с водой.
8. Вытяните поддон для воды, чтобы слить воду.
9. При нехватке воды прежде чем массажер автоматически выключится, загорится индикатор и раздастся звуковой сигнал. Необходимо наполнить резервуар.
10. Массажер напомнит о необходимости слить воду после использования в течение 4 часов. Загорится индикатор слива воды, раздастся звуковой сигнал в течение 5 секунд, и питание автоматически отключится.



Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство. Он не заменяет лечение.

Особенности эксплуатации:

- *1. Во избежание выхода горячего пара из воздухозаборника сразу после выключения устройства, что может повлиять на безопасность пользователя, массажер будет полностью отключен после того, как охлаждающий вентилятор поработает в течение 30 секунд после выключения питания. Это нормальное явление.
- *2. При непрерывном использовании более 40 минут пар будет конденсироваться на внутренней стенке, а конденсированная вода будет стекать по внутренней стенке. Это нормальное явление.
- *3. Все массажеры тестируются перед отправкой. Если в резервуаре осталось немного воды, это нормальное явление.

Очистка и хранение:

- Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено, а адаптер извлечен из розетки.
- Нажмите кнопку слива, чтобы слить воду. Затем вытащите резервуар для воды.
- Протрите поверхность мягкой тканью с мягким неагрессивным очистителем.
- Избегайте проливания воды прямо в массажер. Массажные ролики необходимо очищать отдельно и класть обратно в устройство после того, они будут вытерты насухо. Перед использованием убедитесь, что ванночка внутри полностью высохла.
- Оберните шнур питания вокруг устройства для хранения продукта.
- Не царапайте поверхность острыми предметами.
- Содержите устройство в чистоте и храните в безопасном, сухом, хорошо проветриваемом и прохладном месте.

Возможные проблемы и их решение:

Проблема	Решение
Устройство не работает	Убедитесь, что устройство правильно подключено к источнику питания
	Коснитесь кнопки питания
Устройство внезапно перестало работать	Убедитесь, что устройство правильно подключено к источнику питания
	Наполните резервуар с водой и убедитесь, что он правильно установлен
	Включите устройство после того, как оно остынет

Гарантийные обязательства:

Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные несанкционированной разборкой или модификацией продукта. Эти действия могут подвергнуть пользователя опасности и / или сделать устройство непригодным для использования.

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd,
No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu,
Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил»
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37
Гарантия: 12 месяцев с момента покупки
Срок службы: 24 месяца

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 5
Телефон: +375 (29) 761 60 65
Понедельник – выходной
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда



Устройство соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза.



Гарантия и поддержка клиентов. По вопросам
поддержки или гарантийных претензий,
пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному
выше адресу.