

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖЕР ПЕРКУССИОННЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
NAIPO GUN MGPC-007

Модель: MGPC-007

Знакомство с устройством

Благодарим вас за приобретение массажера **Naipo**. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для дальнейшего использования.

Комплектация:

Массажер	1
Массажные насадки	5
Кейс для хранения	1
Сетевой адаптер	1
Руководство пользователя	1

Технические характеристики:

Модель	MGPC-007
Наименование	Массажер перкуссионный универсальный беспроводной
Входное напряжение и ток	18 В 0.8 А
Время работы (на 1 зарядке)	5-7 часов
Время зарядки	≈3 часа
Таймер по умолчанию	≈10 минут
Аккумуляторная батарея	DC 14.8 В / 2500 мАч
Зона массажа	Все тело (универсальный)

Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы одно заболевание из списка ниже:

- Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и повышенное артериальное давление.
- Онкологические заболевания.
- Лихорадка.
- Травмы позвоночника и остеопороз.
- Растяжение связок или мышц.
- Кожные заболевания (экзема, псориаз).
- Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме, тошнота.
- Аномальный изгиб позвоночника.



Также нужна консультация врача в период менструации, беременности и для детей до 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности и инструкцией.

Меры предосторожности





Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, травм:

- Не используйте устройство, если испытываете боль и дискомфорт, а также на опухших или пораненных участках тела.
- Не используйте устройство на голове, костях и других твердых участках тела.
- Держите волосы, пальцы и другие части тела подальше от вибрирующей оси.
- Не используйте устройство рядом с чувствительными зонами, включая глаза, зубы, грудь, протезы.
- Не используйте устройство на одном участке тела в течение длительного периода времени.
- Используйте устройство только на чистой и сухой коже.

- Если во время использования вы чувствуете сильную боль, немедленно прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы или зарядки.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Для зарядки устройства используйте только адаптер из комплекта.
- Не используйте устройство непрерывно более 1 часа. После сеанса выключите устройство и включите его снова не раньше, чем через 30 минут. Непрерывное использование может сократить срок службы или стать причиной неисправности устройства.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не окунайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в отверстия.
- Держите устройство вдали от открытых источников тепла, например, печи и камина.
- Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
- Не пытайтесь самостоятельно починить или модифицировать устройство.
- Не используйте устройство, если оно не работает должным образом, если оно упало и было повреждено, или если оно упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.

Схема устройства

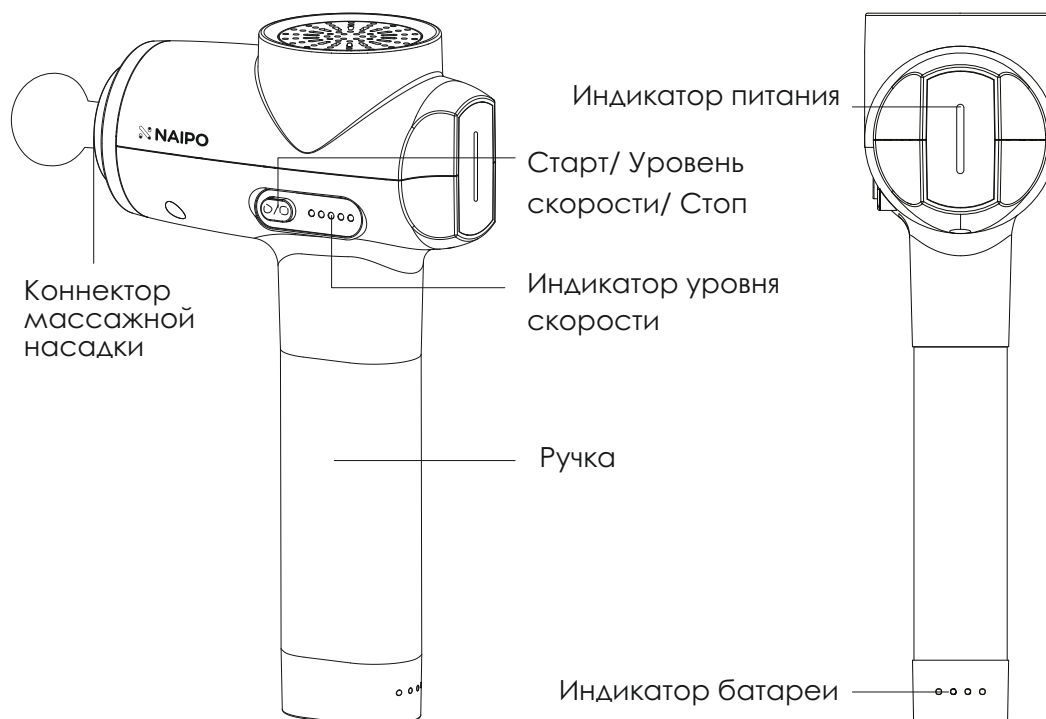

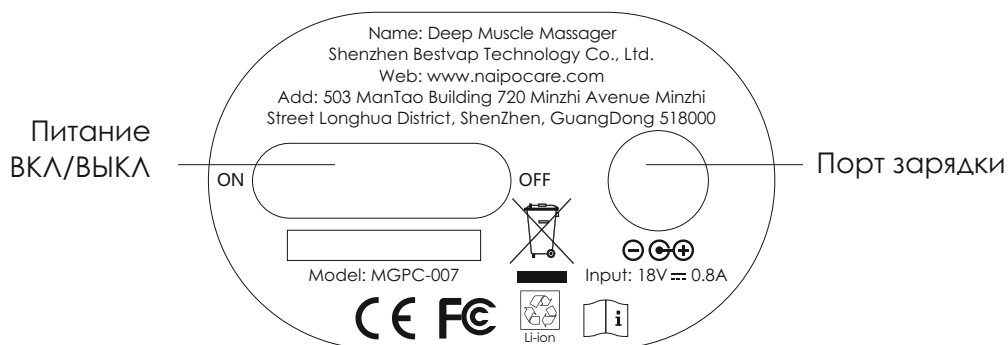



Инструкция по использованию

Зарядка

- Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Подключите коннектор сетевого адаптера к порту зарядки.
- Во время зарядки индикаторы батареи будут мигать.
- Когда зарядка будет завершена, все индикаторы батареи загорятся.

Эксплуатация

- Выключите устройство.
- Установите массажную насадку на коннектор нажатием.
- Потяните массажную насадку, чтобы отсоединить.
- Пожалуйста, устанавливайте и снимайте насадку прямым движением, избегайте круговых движений.
- Переведите кнопку питания в положение ON, чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, переведите кнопку питания в положение OFF.
- Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию массажа.
- Нажимайте и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы выбрать 1 из 5 уровней массажа.
- Индикатор укажет на соответствующий уровень скорости.
- Помассируйте желаемые участки тела с разной интенсивностью.

Обслуживание и хранение

- Очистите устройство с помощью влажного полотенца и вытрите излишки влаги насухо.
- Чтобы новый аккумулятор работал на полную мощность, полностью зарядите и разрядите устройство не менее трех раз.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного периода времени:

- Поместите устройство в кейс из комплекта и храните в сухом месте.
- Заряжайте устройство раз в месяц, чтобы избежать выхода из строя аккумулятора.

Инструкция по применению массажных насадок

Насадка	Цель применения	Результат
	Восстановление мышц спины и позвоночника	Расслабление мышц и восстановление эластичности
	Мышцы, требующие энергичных упражнений для восстановления	Расслабление и массаж глубоких мышечных тканей
	Определенные группы мышц и глубокие мышцы / травмированные суставы (точечный массаж)	Устранение жесткости мышц и расслабление связок
	Кости или чувствительные области	Мягкий массаж для начинающих или в зонах, чувствительных к массажу
	Все тело и мышцы	Ускорение восстановления мягких тканей и снятие болезненных ощущений после тренировки

Приведенная выше инструкция предназначена только для справки



Помните, что массажер Nairo – не медицинское устройство. Он не заменяет лечение.

Возможные проблемы и их решение

Проблема		Решение
Устройство не работает	Кнопка питания в нижней части устройства не включена	Переведите кнопку в положение ON. Загорится индикатор питания (красный) и индикатор батареи (синий)
	Низкий заряд батареи	Перезапустите устройство после того, как оно будет полностью заряжено
Устройство останавливается, встречая сопротивление	Была активирована защитная установка для предотвращения перегрузки по току	Отключите питание. Подключите и отключите сетевой адаптер для активации устройства

Производитель: Aukey International Limited., No. 102,
Building P09, China South City, Pinghu Town, Longgang
District, Shenzhen, Китай

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил»
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37
Гарантия: 24 месяца с момента покупки
Срок службы: 24 месяца

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 5
Телефон: +375 (29) 761 60 65
Понедельник – выходной
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда



Устройство соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза.



Гарантия и поддержка клиентов. По вопросам
поддержки или гарантийных претензий,
пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному
выше адресу.