

# GÉZATONE

---

ПРИБОР  
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ  
ЛИЦА

GUA SHA  
m 911

ИОНОФОРЕЗ

ВИБРОМАССАЖ

ПРОГРЕВ 43° С





### РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СОЧЕТАНИЕ 3 МЕТОДИК И ПРИЕМОВ ТЕХНИКИ МАССАЖА ГУАША, ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО КОРРЕКТИРОВАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ И ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ, ПОВЫСИТЬ СТЕПЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ, АКТИВИЗИРОВАТЬ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА, УМЕНЬШИТЬ МОРЩИНЫ И ДРЯБЛОСТЬ, УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРИЗНАКОВ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ, УКРЕПИТЬ ОВАЛ ЛИЦА И ПОДТЯНУТЬ КОЖУ.



ЖИРНАЯ КОЖА,  
РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,  
ПОВЫШЕННОЕ  
САЛООТДЕЛЕНИЕ




ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
КОЖИ И ПРОФИЛАКТИКА  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО  
СТАРЕНИЯ



НЕРОВНЫЙ ТОН,  
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА,  
НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И  
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ



СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И  
ЭЛАСТИЧНОСТИ,  
ДРЯБЛОСТЬ,  
НЕЧЕТКИЙ КОНТУР ЛИЦА

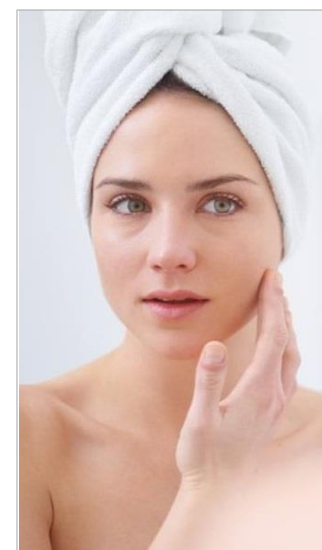

ОТЕКИ НА ЛИЦЕ И В  
ОБЛАСТИ ГЛАЗ,  
МОРЩИНЫ НА ЛИЦЕ И В  
ОБЛАСТИ ГЛАЗ



## ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА ОСНОВАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ В СОЧЕТАНИИ С ВИБРАЦИОННЫМ И ТЕПЛОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ.



### ИОНОФОРЕЗ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



### ВИБРОМАССАЖ 12000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЁЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



### ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ до 43°С

- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ.




Арт. 1301269



### ИОНОФОРЕЗ

ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ + «ЗАРЯЖЕННОЕ» КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.

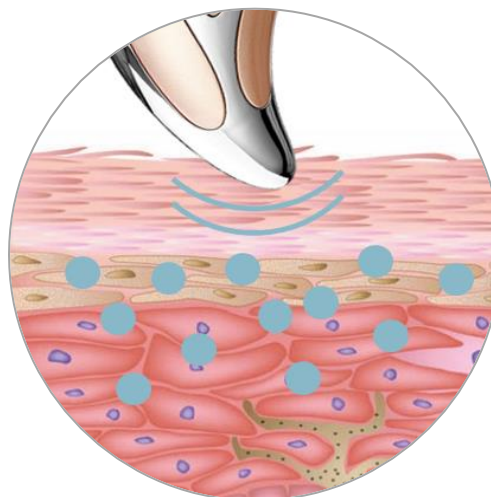

МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ, ПЕРЕДВИГАЯСЬ В ТКАНЯХ, УСКОРЯЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

### РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ



УКРЕПЛЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УМЕНЬШЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР



КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



АКТИВИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ




ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА



### ВИБРОМАССАЖ

ВИБРОМАССАЖ 12000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ

ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ НЕРВНОЙ, КРОВЕНОСНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ.

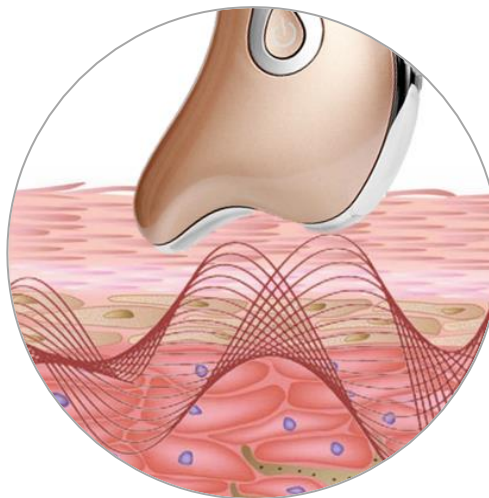

ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ, СОСУДЫ И МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ.

РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ, ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ

### РЕЗУЛЬТАТЫ



ДРЕНАЖ  
ДЕТОКСИКАЦИЯ



УСТРАНЕНИЕ  
СПАЗМОВ МЫШЦ



УКРЕПЛЕНИЕ  
ОВАЛА ЛИЦА




ПОВЫШЕНИЕ  
УПРУГОСТИ  
КОЖИ



АКТИВИЗАЦИЯ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ



НОРМАЛИЗАЦИЯ  
РАБОТЫ  
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

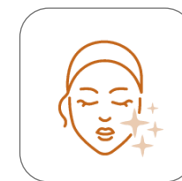


УЛУЧШЕНИЕ  
ЦВЕТА ЛИЦА



### ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ РАЗОГРЕТОЙ ДО 43 ГРАДУСОВ МАССАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ ПРОГРЕВ ТКАНЕЙ НА ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГЛУБИНУ, УСТРАНЯЕТ СПАЗМЫ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ, ЧТО ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ГЛУБИНУ МОРЩИН И КОЖНЫХ СКЛАДОК.

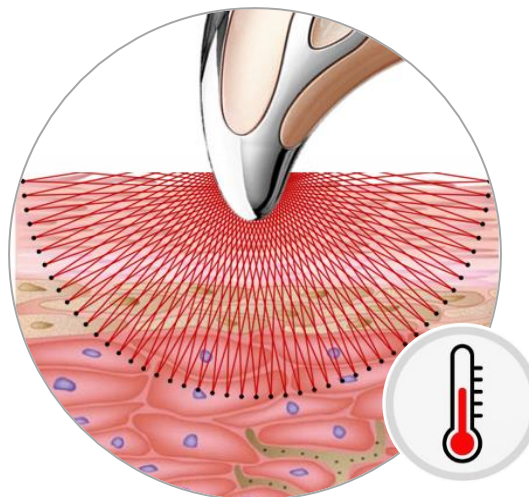

МЯГКИЙ ПРОГРЕВ ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ КЛЕТОК КИСЛОРОДОМ И ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ. СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, УСИЛИВАЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА, УКРЕПЛЯЕТ И ПОДТЯГИВАЕТ КОЖУ.

### РЕЗУЛЬТАТЫ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ



АКТИВИЗАЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ



ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА



ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИКИ



АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ



### МАССАЖ ГУАША

ФОРМА m911 «GUA SHA» ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ ПРИБОР, ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ КИТАЙСКОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА ГУАША, ИЗВЕСТНОГО С ДАВНИХ ВРЕМЕН.

НАЗВАНИЕ ТЕХНИКИ ГУАША ДОСЛОВНО ПЕРЕВОДИТСЯ, КАК «СОСКРЕСТИ ВСЕ ПЛОХОЕ» И ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАССАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – «СКРЕБОК», ФОРМУ КОТОРОГО ПОВТОРИЛИ РАЗРАБОТЧИКИ ПРИБОРА GEZATONE m 911 «GUA SHA».



ЛИМФОДРЕНАЖ



ДЕТОКСИКАЦИЯ



ЛИФТИНГ



СТИМУЛЯЦИЯ  
«ТОЧЕК КРАСОТЫ»

МАССАЖ ГУАША **СТИМУЛИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ**, ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ И СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА, **УСТРАНЯЕТ ЗАСТОЙ** ЛИМФЫ И ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НАКОПЛЕННЫХ ТОКСИНОВ И **ОТЕЧНОСТИ**.

ТАКЖЕ, МАССАЖНАЯ ТЕХНИКА **УСТРАНЯЕТ СПАЗМ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ**, ЧТО ПРИВОДИТ К УМЕНЬШЕНИЮ МОРЩИН, КОЖНЫХ ЗАЛОМОВ И СКЛАДОК. ПОМИМО ЭТОГО, ГУАША **ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ КОЖЕ ЛУЧШЕ УСВАИВАТЬ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.






### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ

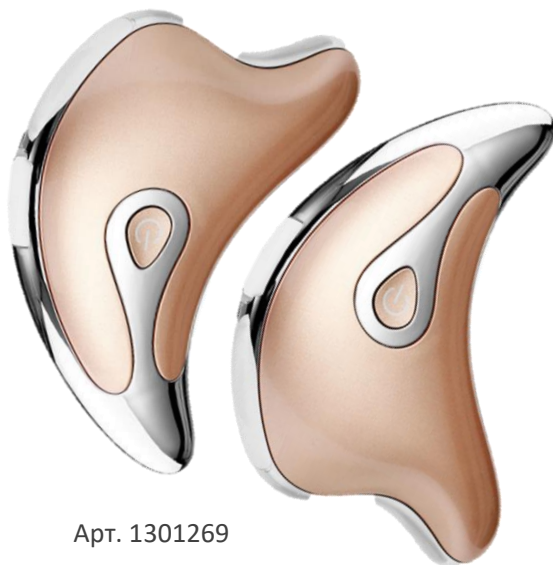

Арт. 1301269

- СОЧЕТАЕТ 3 ВИДА ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МЕТОДИК.
- КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА.
- ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ.
- ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ МАССАЖНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ПОВТОРЯЮЩУЮ ВСЕ ИЗГИБЫ, ПОЭТОМУ ЛЮБАЯ ГРАНЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ МАССАЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ДВА РЕЖИМА: С ПРОГРЕВОМ И БЕЗ ПРОГРЕВА ПОЗВОЛЯЮТ ПОДОБРАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖИДАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА.
- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.

2

2 РЕЖИМА РАБОТЫ



НЕОБЫЧНАЯ ФОРМА



БОЛЬШАЯ МАССАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



12000 КОЛЕБАНИЙ В МИНУТУ



ИОНОФОРЕЗ ЗАРЯД « - »



КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ



РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА



УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ





## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ВРЕМЯ  
ЗАРЯДКИ  
2 - 2,5 ЧАСА



Арт. 1301269

- **ФОРМА ПРИБОРА** ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ГУАША
- ЭЛЕКТРОД НА ЗАОСТРЕННОЙ ЧАСТИ ПРИБОРА ПОЗВОЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА «**ТОЧКИ КРАСОТЫ**», СТИМУЛЯЦИЯ КОТОРЫХ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ И СВЕЖИЙ ЦВЕТ ЛИЦА.
- **ВИБРАЦИЯ** С ЧАСТОТОЙ **КОЛЕБАНИЙ 12000 В МИНУТУ** ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ
- ПРИБОР УПРАВЛЯЕТСЯ **ОДНОЙ КНОПКОЙ**
- **СМАРТ ТАЙМЕР**: ЧЕРЕЗ 2 МИНУТЫ ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
- НАЛИЧИЕ **СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА** ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕЖИМ, КОТОРЫЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ.
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ**: ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ОКОЛО **15 МИНУТ**
- **УДОБНО** ДЕРЖАТЬ В РУКЕ: НЕБОЛЬШОЙ ВЕС, ВСЕГО 42 ГРАММА И НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ.



УПРАВЛЕНИЕ  
1 КНОПКОЙ



УДОБНО  
ДЕРЖАТЬ  
В РУКЕ



СВЕТОВОЙ  
ИНДИКАТОР  
РЕЖИМА



ПРОГРЕВ ДО  
43°С



ВЕС ВСЕГО  
42  
ГРАММА



СМАРТ ТАЙМЕР  
2 МИНУТЫ



ВРЕМЯ  
ПРОЦЕДУРЫ  
15 МИНУТ



КОМФОРТНОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



## 2 РЕЖИМА РАБОТЫ

### 1 РЕЖИМ

РЕЖИМ С ПРОГРЕВОМ / КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР



- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ

### 2 РЕЖИМ

«ХОЛОДНЫЙ» РЕЖИМ / СИНИЙ ИНДИКАТОР



- ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ И УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ ЛИЦА И В ОБЛАСТИ ГЛАЗ
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА
- КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- ДЕТОКСИКАЦИЯ
- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

*Во время проведения процедуры палец должен находиться на сенсорном датчике на тыльной стороне устройства.*



### ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



СМАРТ  
ТАЙМЕР  
2 МИНУТЫ

РАЗЪЕМ  
ЗАРЯДКИ  
АККУМУЛЯТОРА




Арт. 1301269




КНОПКА ВКЛ / ВЫКЛ /  
ВЫБОРА РЕЖИМА

ИНДИКАТОР  
РЕЖИМА

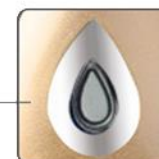

СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК  
НА ЗАДНЕЙ  
ПОВЕРХНОСТИ

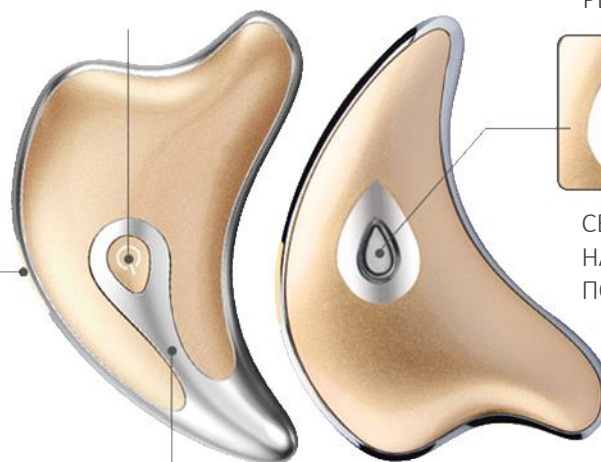

80 мм

106 мм

42  
ГРАММА



360° СЕНСОРНАЯ РАБОЧАЯ  
МАССАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



### ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

### МАССАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ





## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И ПОПАДАЕТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА И ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ  
КОМПЛЕКС "МОЛОДОСТЬ  
БЕЗ ГРАНИЦ"



4515005K – 5 X 3 мл

АКВА – ГЕЛЬ  
АЛОЭ ВЕРА



4501417AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С  
ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

ГЕЛЬ  
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ  
ИКРЫ



4504006K – 120 мл



## РЕЗУЛЬТАТЫ\*

- **ТОНИЗАЦИЯ** И ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ
- **СОКРАЩЕНИЕ** РАСШИРЕННЫХ ПОР, РЕГУЛЯЦИЯ ВЫРАБОТКИ КОЖНОГО САЛА
- **УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН** И КОЖНЫХ СКЛАДОК
- УСТРАНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ
- **СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ ЛИЦА** И В ОБЛАСТИ ГЛАЗ
- УКРЕПЛЕНИЕ **КОНТУРОВ ЛИЦА**, УМЕНЬШЕНИЕ ДРЯБЛОСТИ В ОБЛАСТИ НИЖНЕЙ ТРЕТИ И В ОБЛАСТИ ПОД ПОДБОРОДКОМ
- УЛУЧШЕНИЕ **ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖИ**, СВЕЖИЙ, ОТДОХНУВШИЙ ВИД
- УЛУЧШЕНИЕ ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

*\* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса массажей с использованием прибора.*



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ С ВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
  - ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
  - ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
  - ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
  - НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, ПОРЕЗЫ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ.
  - ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
  - ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ, АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
  - НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (БОЛЕВОЙ И ТЕМПЕРАТУРНОЙ)
  - ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
  - САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ).
  - НАЛИЧИЕ ПОДКОЖНЫХ СИЛИКОНОВЫХ ИМПЛАНТОВ.
  - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИНЪЕКЦИЙ БОТОКСА, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ КУРСА ИНВАЗИВНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
  - ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
  - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ В РЕЖИМЕ ГЛУБОКОГО ПРОГРЕВА ПРИ НАЛИЧИИ КУПЕРОЗА В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Емкость аккумулятора: 350 мА/ч
- Параметры зарядного устройства (в комплект не входит): USB 5В 1А
- Вибрация 12000 колебаний в минуту
- Вес: 42 грамма
- Размеры: 106x80x22 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор для ухода за кожей лица Gezatone m911 – 1
- Провод USB для зарядки аккумулятора – 1
- Инструкция по эксплуатации - 1



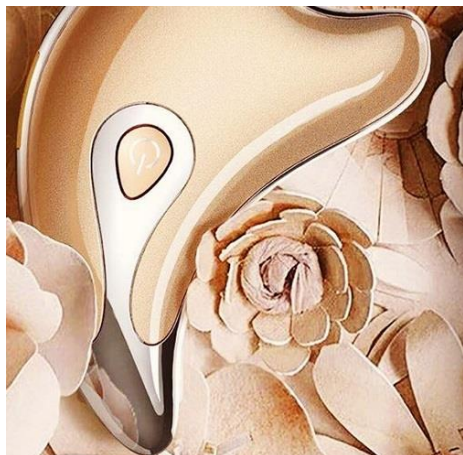

**GÉZATONE**

