



GÉZATONE

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА КРАСОТЫ
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

LED MASK m1030

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МАСКА m1030 ИСПОЛЬЗУЕТ ЭНЕРГИЮ ЦВЕТА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, РЕГЕНЕРАЦИИ И СИНТЕЗА КЛЕТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, НОРМАЛИЗУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КОЖИ ВНЕШНИМ РАЗДРАЖИТЕЛЯМ И ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРАМ.



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
АТОНΙΑ, МОРЩИНЫ, СНИЖЕНИЕ
УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ



ПОВЫШЕННАЯ СЕКРЕЦИЯ
СЕБУМА, САЛЬНЫЙ БЛЕСК,
ВОСПАЛЕНИЯ



РАЗДРАЖЕННАЯ,
ПОВРЕЖДЕННАЯ,
СТРЕССОВАЯ КОЖА



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ОЩУЩЕНИЕ «СТЯНУТОСТИ»
КОЖИ, БЛЕДНОСТЬ



НЕРОВНЫЙ ТОН, ТУСКЛЫЙ
ЦВЕТ ЛИЦА, ПИГМЕНТАЦИЯ,
ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ




ОТЕЧНОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ
СТРЕССА, УСТАЛЫЙ ВИД,
ЗАМЕДЛЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ

ФУНКЦИИ

LED МАСКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ LED МАСКИ НА КОЖУ ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО СВЕТОВОЙ СПЕКТР, В КОТОРОМ НЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ, НЕТ ТЕРМИЧЕСКОГО ИЛИ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

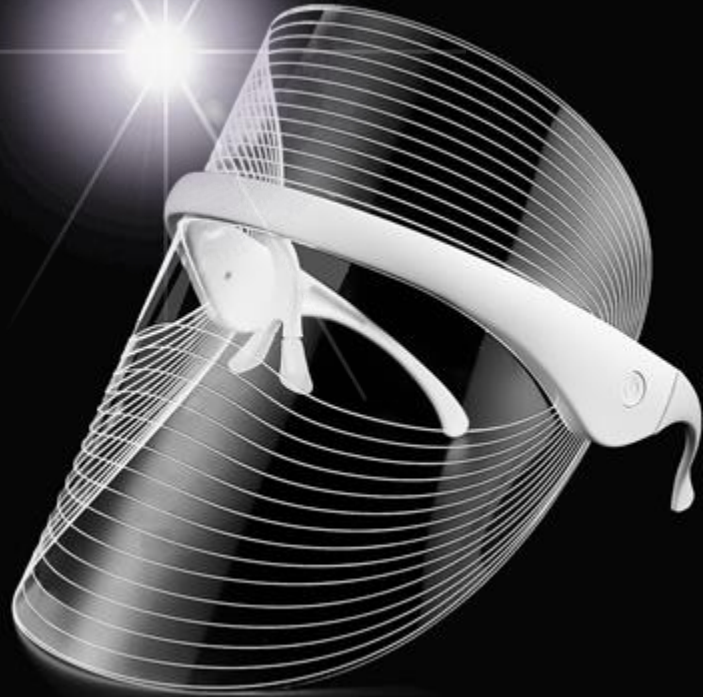

Артикул 1301292



ФОТОТЕРАПИЯ / СВЕТОТЕРАПИЯ

7 ЦВЕТОВ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕГЕНЕРАЦИИ И КЛЕТОЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ. ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК КОЖИ, АКТИВИЗИРУЕТ СИНТЕЗ ФАКТОРОВ РОСТА, КОЛЛАГЕНА, ЭЛАСТИНА. КАЖДЫЙ ИЗ ЦВЕТОВ ОКАЗЫВАЕТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.




ФОТОПОРАЦИЯ

ДОСТАВЛЯЕТ В КОЖУ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ ОТКРЫВАЮТ МИКРОКАНАЛЫ НА МЕМБРАНЕ КЛЕТКИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВНУТРЬ ПОСТУПАЮТ ВЕЩЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, А ТАКЖЕ ВЫВОДЯТСЯ ПРОДУКТЫ ОБМЕНА.

МЕТОД ФОТОТЕРАПИИ / СВЕТОТЕРАПИИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ

- ПРИ СВЕТОТЕРАПИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ВОЛНЫ С КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.
- СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОНИКАТЬ В КОЖУ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ И ВЛИЯТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА, НА РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОКАЗЫВАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.
- МАСКА НЕ ОКАЗЫВАЕТ НА КОЖУ ТЕМПЕРАТУРНОГО, ТРАВМИРУЮЩЕГО ИЛИ ДРУГОГО ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ИЗЛУЧАЕМОМ СВЕТЕ НЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ, ПРОЦЕДУРА ФОТОТЕРАПИИ ОЧЕНЬ КОМФОРТНА.

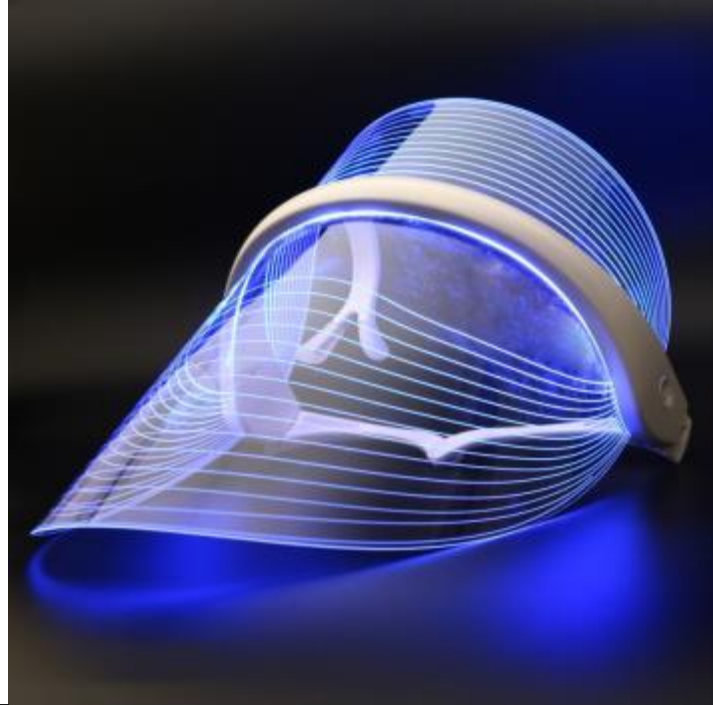

- СВЕТОТЕРАПИЯ ОСНОВАНА НА СПОСОБНОСТИ КОЖИ ПОГЛОЩАТЬ СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК, СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, ФАКТОРОВ РОСТА, ДЛЯ БОРЬБЫ С ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ И БАКТЕРИЯМИ И ВЫВЕДЕНИЯ ТОКСИНОВ.
- КАЖДОМУ ЦВЕТУ ПРИСУЩИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ КОТОРОЕ ЦВЕТ ОКАЗЫВАЕТ НА КОЖУ.

МЕТОД ФОТОТЕРАПИИ / СВЕТОТЕРАПИИ



КРАСНЫЙ
длина волны
630 нм

- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА
- КРАСНЫЙ ЦВЕТ СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ NMF, ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ.
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ И СУЖЕНИЕ ПОР



ГОЛУБОЙ
длина волны
470 нм

- ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЯ ВЛАГИ
- ПОВЫШЕНИЕ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОЖИ
- СОКРАЩЕНИЕ ШЕЛУШЕНИЯ И ДИСКОМФОРТА
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ КОЖИ
- УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ КОЖИ
- КОРРЕКЦИЯ МЕЛКИХ МОРЩИНОК



ЗЕЛЕНый
длина волны
520 нм

- УСТРАНЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ И КРАСНОТЫ
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- НОРМАЛИЗАЦИЯ СОСУДИСТОГО ТОНУСА
- ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ ДРЕНАЖА
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГИПЕРТОНУСА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ



ЖЕЛТЫЙ
длина волны
590 нм

- СТИМУЛИРУЕТ ЛИМФОДРЕНАЖ
- ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ОТЕЧНОСТЬ И ЗАСТОЙ
- АКТИВИЗАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
- ЗАМЕДЛЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА
- УСТРАНЯЕТ ГИПОКСИЮ ТКАНЕЙ



ФИОЛЕТОВЫЙ
длина волны
380-420 нм

- СОЧЕТАЕТ ДЕЙСТВИЕ КРАСНОГО И СИНЕГО
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
- СНИЖЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ
- ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ РУБЦОВ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ



СИНИЙ
длина волны
470 нм

- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ И ПРОТИВО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА РАЗДРАЖЕННУЮ, ВОСПАЛЕННУЮ КОЖУ
- МИНИМИЗИРУЕТ РЕАКЦИЮ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ СОЗДАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ПРОХЛАДЫ




БЕЛЫЙ
длина волны
510-810 нм

- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОПОРЦИИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
- ДЕТОКСИКАЦИЯ
- УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

МЕТОД ФОТОПОРАЦИИ

ДОСТАВКА СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСМЕТИКИ

- СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО АГЕНТА, ДОСТАВЛЯЯ В КОЖУ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ВОЛНЫ «ТЯНУТ» ЗА СОБОЙ ИНГРЕДИЕНТЫ ПРЕПАРАТОВ, НАНЕСЕННЫХ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ, ЧТО УСИЛИВАЕТ КОСМЕТИЧЕСКОЕ И КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.
- ПРОЦЕСС ФОТОПОРАЦИИ ПРОИСХОДИТ В СОЧЕТАНИИ С ФОТОТЕРАПИЕЙ И ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА УРОВНЕ КЛЕТКИ, ПОЭТОМУ НЕОЩУТИМ И ПРОЦЕДУРА ОЧЕНЬ КОМФОРТНА.

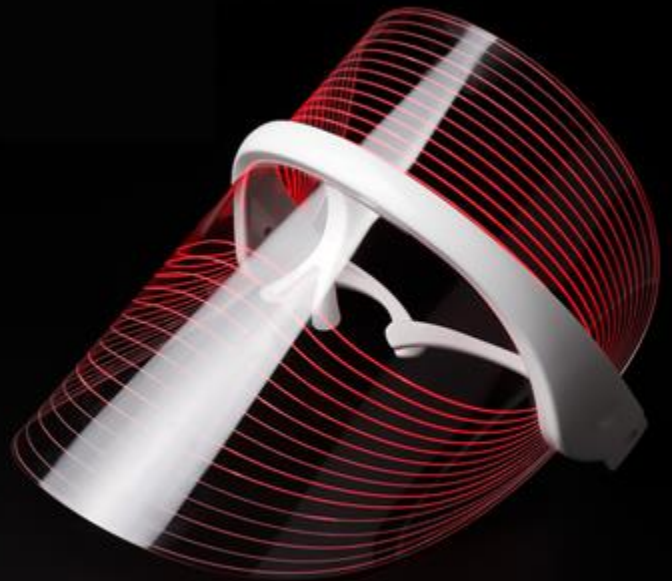

Артикул 1301292

КОЖА ПОГЛОЩАЕТ ДО 80% СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ И ЦВЕТА ЗАВИСИТ ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЛИНА ВОЛНЫ,
ТЕМ ГЛУБЖЕ ОНА ПРОНИКАЕТ.

60

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА на 60%



ДВОЙНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ПРОБЛЕМУ



ВОЗДЕЙСТВИЕ
«ТОЧНО
В ЦЕЛЬ»



СОЧЕТАНИЕ С
КОЛЛАГЕНОВЫМИ,
ГИДРОГЕЛЕВЫМИ
МАСКАМИ



КОЛЛАГЕНОВАЯ
СЫВОРОТКА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С LED МАСКОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Артикул 1301292

- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ, ПРОЦЕДУРА ОЧЕНЬ КОМФОРТНА
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ
- БЫСТРЫЙ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ УСИЛИВАЕТСЯ ОТ ПРОЦЕДУРЫ К ПРОЦЕДУРЕ
- ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ САМОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
- НЕ ВЫЗЫВАЕТ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ТКАНИ.
- ПРОЦЕДУРА МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ДО И ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ.

7

ЦВЕТОВ



АБСОЛЮТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ




СМАРТ – ТАЙМЕР
10 МИНУТ



БЕСПРОВОДНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВЕС ВСЕГО
80 ГРАММ

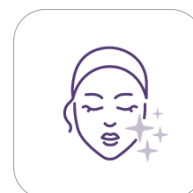

ВИДИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ. ПРИБОР ИМЕЕТ ЭРГОНОМИЧНУЮ ФОРМУ, ЕГО ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ, РУКА НЕ УСТАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.



ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ПОЛНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 3 ПРОЦЕДУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ МОЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗ. USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ В КОМПЛЕКТЕ.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

СМАРТ-ТАЙМЕР САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЕТ МАСКУ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ, НЕ НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ЧАСАМИ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ВРЕМЯ СЕАНСА.


ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ, СМЕНА ЦВЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ 1 КНОПКИ. МАСКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.



БЕСПРОВОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ БЬЮТИ-ДЕВАЙС В ЛЮБОМ УДОБНОМ МЕСТЕ, БЕЗ ПОИСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ.

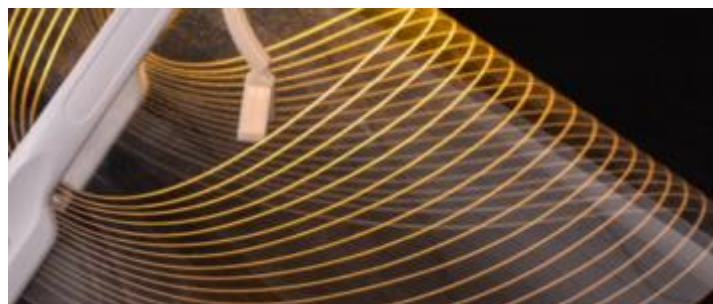

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



КНОКА ВКЛЮЧЕНИЯ /
ВЫКЛЮЧЕНИЯ / СМЕНЫ ЦВЕТА




РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА

Артикул 1301292



СКЛАДНЫЕ
ДУЖКИ

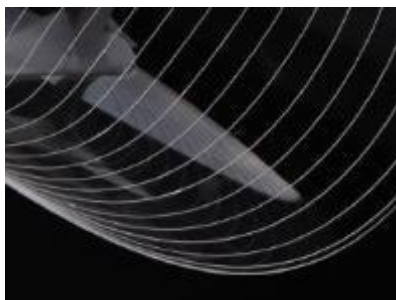

СВЕТОДИОДЫ
ФОТОТЕРАПИИ



СИЛИКОНОВЫЕ ПОДУШЕЧКИ
ДЛЯ НОСА

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

СЕАНСЫ СВЕТОТЕРАПИИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ, 16 +.



1

УДАЛИТЕ
МАКИЯЖ



2

ПРОТРИТЕ ЛИЦО
ТОНИКОМ ИЛИ
ЛОСЬОНОМ



3

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ
СЫВОРОТКУ ИЛИ
ГИДРОГЕЛЕВУЮ /
КОЛЛАГЕНОВУЮ МАСКУ



4

НАДЕНЬТЕ LED МАСКУ,
ВКЛЮЧИТЕ И ВЫБЕРИТЕ
НУЖНЫЙ ЦВЕТ.



5

СНИМИТЕ LED МАСКУ,
УДАЛИТЕ ОСТАТКИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО РАСТВОРА,
ПРОТРИТЕ ЛИЦО ТОНИКОМ





6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ
И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



СЕАНСЫ ПРОВОДЯТСЯ 2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ, ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС СОСТАВЛЯЕТ ОТ 15 ДО 20 ПРОЦЕДУР.

РЕЗУЛЬТАТЫ

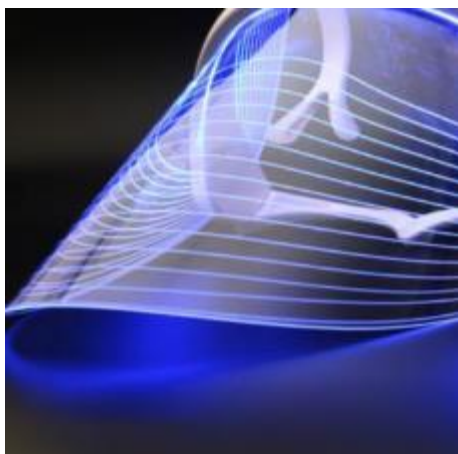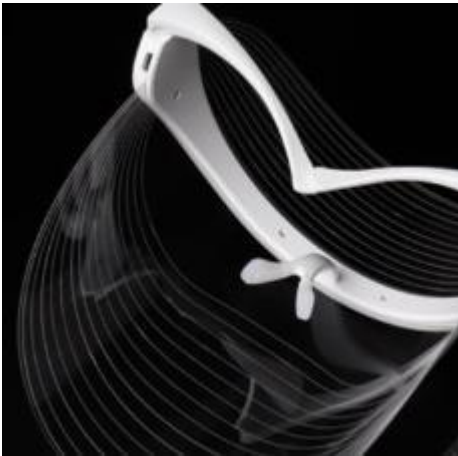

СЕАНСЫ СВЕТОТЕРАПИИ ОСВЕЖАЮТ ЦВЕТ ЛИЦА И УЛУЧШАЮТ СОСТОЯНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ.

ПОВРЕЖДЕННАЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ИЛИ КОСМЕТИЧЕСКИМИ МАНИПУЛЯЦИЯМИ КОЖА БЫСТРЕЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ОТЕКОВ И КРАСНОТЫ.

«УСТАВШАЯ» КОЖА ОБРЕТАЕТ ПРЕЖНЮЮ ЯРКОСТЬ, СТАНОВИТСЯ УПРУГОЙ, УВЛАЖНЕННОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ.




ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН
И ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

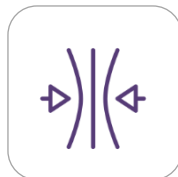

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕКОВ И ДЕТОКС



СОКРАЩЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЯ – 74%



СОКРАЩЕНИЕ
РАЗДРАЖЕНИЯ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ.
- ФОТОДЕРМАТОЗ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ НАРУШЕНИЕ ПИГМЕНТНОГО ОБМЕНА (ПОРФИРИЮ)
- ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОЛУГОДОВОГО ПЕРИОДА ИЛИ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОВЫШАЮЩИХ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 1301292



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА
2 ЧАСА



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРАСНЫЙ СВЕТ	630 нм
СИНИЙ СВЕТ	470 нм
ЗЕЛЕНый СВЕТ	520 нм
ЖЕЛТЫЙ СВЕТ	590 нм
ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ	380-420 нм
ГОЛУБОЙ СВЕТ	470 нм
БЕЛЫЙ СВЕТ	510-810 нм
РАЗМЕР В УПАКОВКЕ	200x180x70 мм
ВЕС МАСКИ (БЕЗ УПАКОВКИ)	80 г
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ	От 16 до 60 лет
КАБЕЛЬ USB	длина примерно 100 см
БЛОК ПИТАНИЯ	DC 5 В. ,1А (в комплект не входит)
ТИП АККУМУЛЯТОРА	Li-Ion,3,7В 200 мА ^ч

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светодиодная маска m1030 Gezatone – 1 шт.

Кабель USB – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

GÉZATONE

LED MASK m 1030



GÉZATONE

