



GÉZATONE

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА

Clean&Beauty PRO
m 780



ВИБРОМАССАЖ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ИОНОФОРЕЗ

ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ

МИКРОТОКИ

LED ТЕРАПИЯ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ


СОЧЕТАЯ ТЕХНИКИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ, ИОННОГО ОЧИЩЕНИЯ И ИОНОФЕРЕЗА С МИКРОТОКАМИ, ТЕПЛОМ И ХРОМОТЕРАПИЕЙ, **ЩЕТКА m780** ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД. ЕЁ ТОНКИЕ ЩЕТИНКИ ИЗ МЕДИЦИНСКОГО СИЛИКОНА НЕ ПОВРЕДЯТ ДАЖЕ КАПРИЗНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ КОЖУ, А СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ УВЛАЖНЕНИЯ, ЛИФТИНГА И ПИТАНИЯ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ И УПРУГОСТЬ КОЖИ.



ЗАБИТЫЕ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,
КОМЕДОНЫ И ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ В
Т ЗОНЕ



ПОВЫШЕННАЯ СЕКРЕЦИЯ
СЕБУМА И СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
ЕЁ САЛЬНЫЙ БЛЕСК

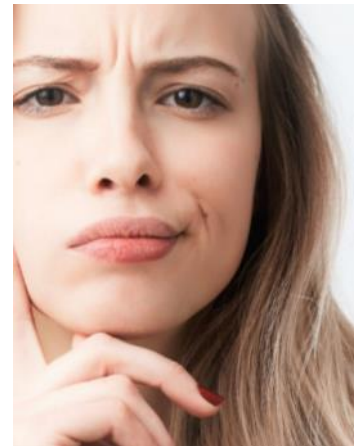


МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ,
НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА



СНИЖЕННЫЙ ТОНУС, ПРИЗНАКИ
УВЯДАНИЯ И УМЕНЬШЕНИЕ
ПЛОТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ




НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ, ОЩУЩЕНИЕ
«СТЯНУТОСТИ» КОЖИ

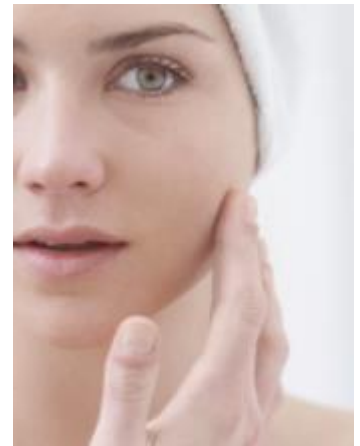

ОТЕЧНОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ
СТРЕССА, УСТАЛЫЙ ВИД,
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

ФУНКЦИИ

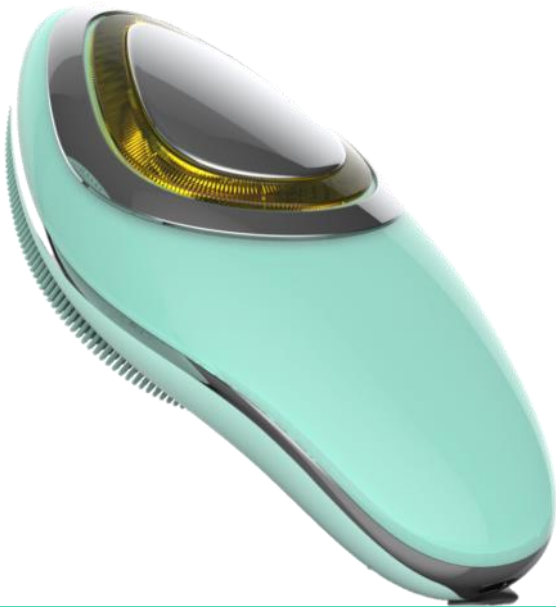

В АППАРАТЕ **CLEAN&BEAUTY PRO m 780** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК

1500 МЯГКИХ ЩЕТИНОК ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО СИЛИКОНА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЧИСТОТУ КОЖИ.

ОБЛАДАТЕЛЯМ МОЛОДОЙ КОЖИ **CLEAN&BEAUTY PRO** ПОМОЖЕТ ТЩАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ МАКИЯЖ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНОГО БЛЕСКА, ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И НЕСОВЕРШЕНСТВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАТИТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ УВЯДАНИЕ.

ЗРЕЛОЙ КОЖЕ АППАРАТ ПРИНЕСЕТ ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ, УЛУЧШИТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПОВЫСИТ ТОНУС И УСКОРИТ ОБНОВЛЕНИЕ.

Артикул 1301291

6

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МЕТОДИК



ЕЖЕДНЕВНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ



ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ –
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ



ИОНОФОРЕЗ



ВИБРАЦИЯ /
ВИБРОМАССАЖ



ГЛУБОКИЙ
ПРОГРЕВ



МИКРОТОКИ



LED
ТЕРАПИЯ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ CLEAN&BEAUTY PRO m 780 СОЧЕТАЕТ 6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИК И ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОЖЕ ЛЮБОГО ТИПА ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И ДЕЛИКАТНОЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ И ДИСКОМФОРТА.

ВИБРАЦИЯ

- УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ ОЧИЩЕНИЯ, УСТРАНЯЯ ДО 99,5% ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА, ДЕТОКСИКАЦИЯ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



ИОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОМЕДОНОВ И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР И НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ



LED ТЕРАПИЯ

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА И РАЗДРАЖЕНИЯ



ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ


- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА, ДЕТОКСИКАЦИЯ
- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МЫШЦ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ.



МИКРОТОКИ

- ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА АТФ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКАХ
- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ, УСТРАНЕНИЕ ГИПЕРТОНУСА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

ВИБРАЦИЯ / ВИБРОМАССАЖ

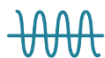

В АППАРАТЕ **CLEAN&BEAUTY PRO m 780** ВИБРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ДВОЙНУЮ ФУНКЦИЮ: УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ И ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

ВИБРОМАССАЖ

ОСНОВАН НА ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ НА НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ КОЖИ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ОТВЕТНУЮ РЕАКЦИЮ КРОВЕНОСНОЙ, НЕРВНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ.

ОКАЗЫВАЕТ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ, СОСУДЫ И МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ. РАСШИРЯЮТСЯ СОСУДЫ, ПОВЫШАЕТСЯ ОКСИГЕНАЦИЯ ТКАНЕЙ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ.

Артикул 1301291

ЭФФЕКТЫ ВИБРОМАССАЖА

6

УРОВНЕЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ



ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ И ПОР



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
МЕЛКИХ МОРЩИН



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА



УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ




УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ - ОМЫЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЛОСЬОНА-ДЕЗИНКРУСТАНТА.

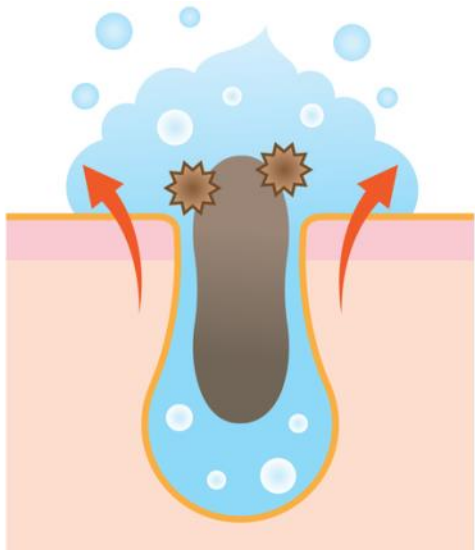

ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ.
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА, ПРОИСХОДИТ РЕАКЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЫЛО И ЛЕГКО ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

ЭФФЕКТЫ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ




СОКРАЩЕНИЕ ПОР



УСТРАНЕНИЕ «ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»




ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ БЕЗ ТРАВМЫ

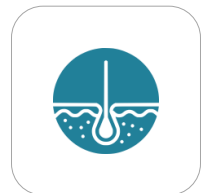


УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛОУДЕЛЕНИЯ

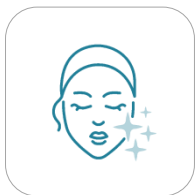

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

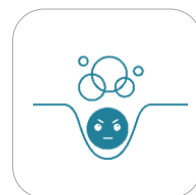

ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ



УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

ИОНОФОРЕЗ



ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ + КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.


МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ, ПЕРЕДВИГАЯСЬ В ТКАНЯХ, УСКОРЯЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

Артикул 1301291


ЭФФЕКТЫ ИОНОФОРЕЗА



УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ КОЖИ

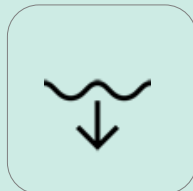

УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ

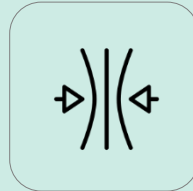


ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА
СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН




УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

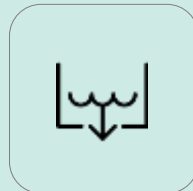

СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС




УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР

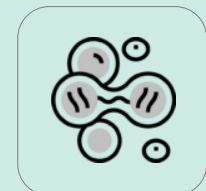

УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ

МИКРОТОКИ

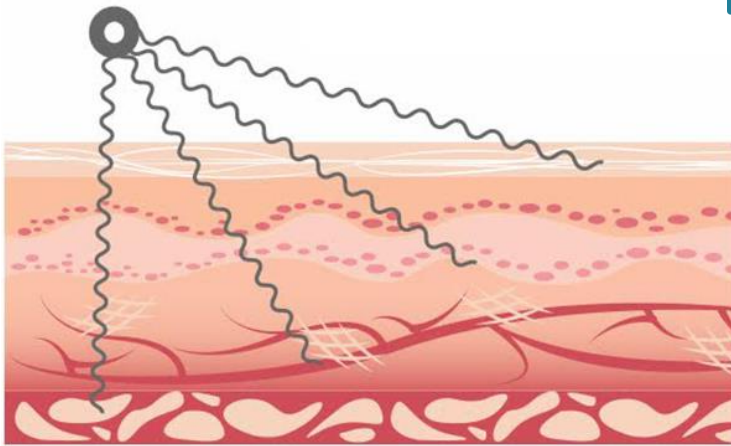

МИКРОТОКИ УСКОРЯЮТ ПРОЦЕССЫ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКАХ КОЖИ, ЧТО ВЕДЕТ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ АКТИВНОСТИ, КЛЕТКИ «ПРОСЫПАЮТСЯ» И НАЧИНАЮТ «РАБОТАТЬ» КАК В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ.

БЛАГОДАРЯ СТИМУЛИРУЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ МИКРОТОКОВ НА ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ УПРУГОЙ, БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ И ПОДЪЯНУТОЙ.


ЭФФЕКТЫ МИКРОТОКОВ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА



СТИМУЛЯЦИЯ
СИНТЕЗА
КОЛЛАГЕНА

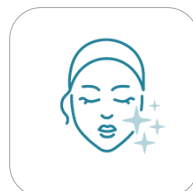

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



УСТРАНЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ И ДЕТОКС




КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

ГЛУБОКИЙ ПРОГРЕВ

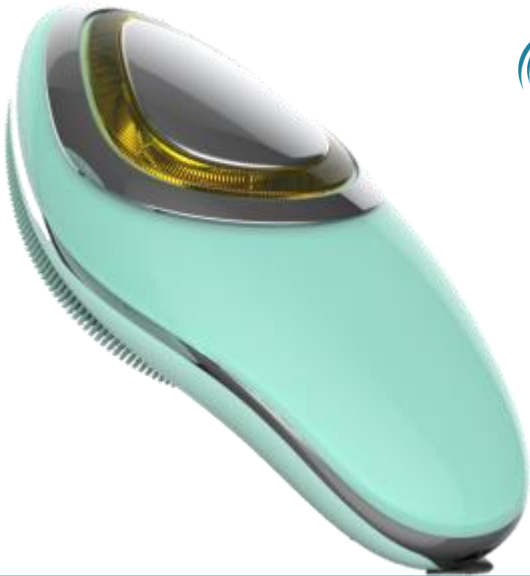

ПРОГРЕВ ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАРУШЕННОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КОЖЕ И МЫШЦАХ, УСИЛИВАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ПОВЫШАЕТ НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ И УСТРАНЯЕТ ЗАСТОЙ ЖИДКОСТИ.


ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЕ ТЕПЛО УСТАРЯЕТ СПАЗМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ И ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ СКЛАДОК, ЗАЛОМОВ И МОРЩИН, А ТАКЖЕ ОКАЗЫВАЕТ АНТИСТЕРССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПОМОГАЯ РАССЛАБИТЬСЯ.

Артикул 1301291


ЭФФЕКТЫ ПРОГРЕВА



СТИМУЛЯЦИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

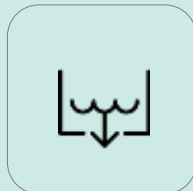

СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС

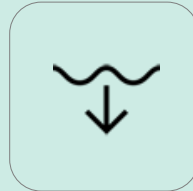


УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ И
МЕТАБОЛИЗМА

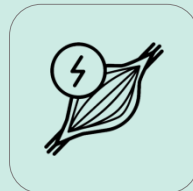

УСТРАНЕНИЕ СПАЗМОВ
МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УСТРАНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
И УСТАЛОСТИ

LED ТЕРАПИЯ

КРАСНЫЙ

УСКОРЯЕТ ТЕМП МЫШЛЕНИЯ, ПОВЫШАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ, СИЛУ, ПРОГОНЯЕТ ДЕПРЕССИЮ.

- СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА
 - УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ
 - СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕПАРАЦИИ
 - АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
 - СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА



ЖЕЛТЫЙ

ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ И СОЗДАЕТ ГАРМОНИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ. УСИЛИВАЕТ АНТИДЕПРЕССИВНЫЙ ЭФФЕКТ КРАСНОГО ЦВЕТА, ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ ТРЕВОГИ.

- ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ДИСКОМФОРТА
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ



4 РЕЖИМА РАБОТЫ

ЩЕТОЧКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА M780 GEZATONE МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ НЕСКОЛЬКО АППАРАТОВ. ЧЕТЫРЕ КОМБИНИРОВАННЫХ РЕЖИМА РАБОТЫ СОЧЕТАЮТ ШЕСТЬ МЕТОДИК ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО И ИНТЕНСИВНОГО УХОДА.

1

РЕЖИМ
«ОЧИЩЕНИЕ»



ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВСЕГО 1 МИНУТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КОЖА СТАЛА МЯГКОЙ И СИЯЮЩЕЙ. 1500 СИЛИКОНОВЫХ ЩЕТИНОК ДВУХ ВИДОВ В СОЧЕТАНИИ С ВИБРО-ВОЗДЕЙСТВИЕМ УБИРАЮТ МАКИЯЖ, ГРЯЗЬ И СЕБУМ, УСТРАНЯЮТ ОРОГОВЕВШИЕ ЧАСТИЧКИ И МАССИРУЮТ.

2

РЕЖИМ
«ПИТАНИЕ»



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ УСИЛИВАЮТ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИКИ И ПРОЛОНГИРУЮТ ЕЁ ДЕЙСТВИЕ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ДЕПО. ИОНОФОРЕЗ УСИЛЕН КРАСНЫМ СВЕТОМ, ВИБРОМАССАЖЕМ И ПРОГРЕВОМ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ АКТИВИЗАЦИИ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, УВЛАЖНЕНИЮ, РЕГЕНЕРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ УПРУГОСТИ КОЖИ.

3


РЕЖИМ
«ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ»



ПРИ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ПРОИСХОДИТ ОМЫЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОНЫ И ИЗЛИШКИ СЕБУМА ПРЕВРАЩАЮТСЯ В МЫЛО И УДАЛЯЮТСЯ ИЗ ПОР И С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ. ДЕЙСТВИЕ УСИЛИВАЮТ ВИБРАЦИЯ И ТЕПЛО, УСКОРЯЯ ДЕТОКСИКАЦИЮ И УСТРАНЯЯ ОТЕЧНОСТЬ, А ЖЕЛТЫЙ СВЕТ ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ.

4

РЕЖИМ
«УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ»

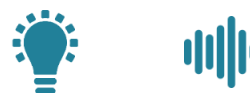


ОБЪЕДИНЯЕТ ХРОМОТЕРАПИЮ И МИКРОТОКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. КРАСНЫЙ СВЕТ УСИЛИВАЕТ КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗ И ПОВЫШАЕТ УВЛАЖНЕННОСТЬ, А МИКРОТОКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕОБХОДИМУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ РАБОТЫ КЛЕТОК. ПРОГРАММА БОРЕТСЯ С МОРЩИНАМИ И СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ, СОХРАНЯЯ КОЖУ МОЛОДОЙ И ПОДТЯНУТОЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

99,5%

ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ПОЗВОЛЯЕТ УСТРАНИТЬ 99,5% ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ИЗ ПОР, ПРЕДОТВРАЩАЯ ПОЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВ И УЛУЧШАЯ СОСТОЯНИЕ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА.

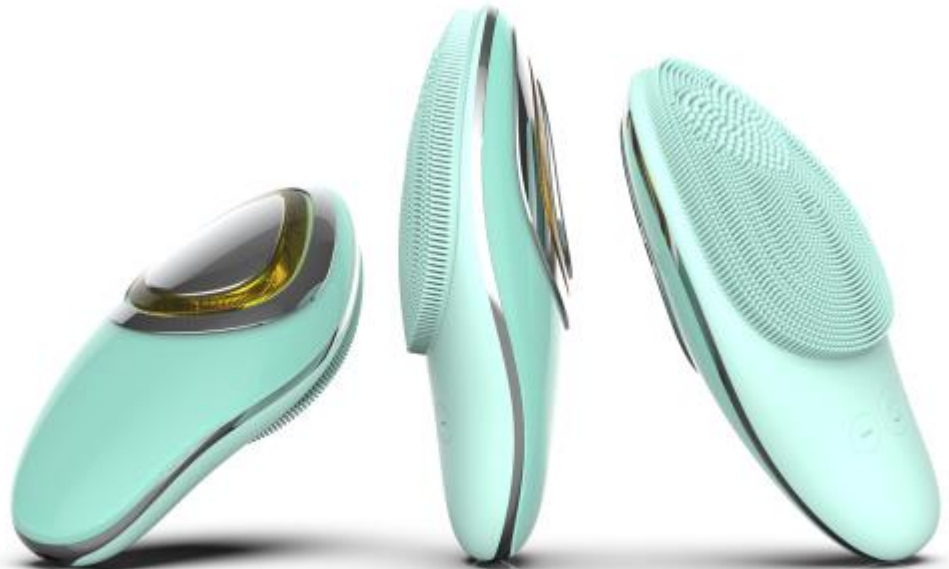

Артикул 1301291

6

6 МЕТОДОВ



РАБОТАЕТ
ОТ АККУМУЛЯТОРА

6

6 РЕЖИМОВ
ВИБРАЦИИ



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ


4

4 ПРОГРАММЫ

- **РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ.** СТОИМОСТЬ АППАРАТА, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИТ НЕСКОЛЬКО ПРИБОРОВ И ПРОСЛУЖИТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ДЕШЕВЛЕ ОДНОГО ПОХОДА В САЛОН.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО:** БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ЭЛЕКТРО-РОЗЕТКЕ.
- **ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА** С РАЗНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ МЕТОДОВ ПОЗВОЛЯТ ПОДОБРАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
- ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДЕМАКИЯЖ ЗАЙМЕТ ВСЕГО 1 МИНУТУ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО **ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ** БЕЗ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЧИЩЕНИЯ.
- КОМФОРТНОЕ **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА, НА ОТДЫХЕ И В ПОЕЗДКАХ.
- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ. ПРИБОР ИМЕЕТ ЭРГОНОМИЧНУЮ ФОРМУ, ЕГО ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ, РУКА НЕ УСТАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.

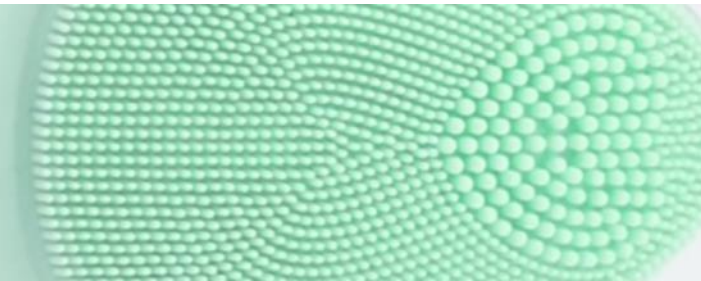

ДВА ВИДА СИЛИКОНОВЫХ ЩЕТИНОК

ЩЕТИНКИ ПРИ КОЛЕБАНИИ УДАЛЯЮТ ОТМЕРШИЕ КЛЕТКИ И ИЗБЫТОК КОЖНОГО САЛА, СТИМУЛИРУЮТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ, ПОВЫШАЮТ ТОНУС КОЖИ.

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ПОЛНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 1 ЧАС НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ МОЖНО НЕСКОЛЬКО ДЕЙ. USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ В КОМПЛЕКТЕ.



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ, СМЕНА ПРОГРАММ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ 1 КНОПКИ. ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ




МАГНИТНАЯ РАМКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ САЛФЕТКИ

МАГНИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВОКРУГ ЭЛЕКТРОДА, НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТ САЛФЕТКУ, ПРОПИТАННУЮ КОСМЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ.



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

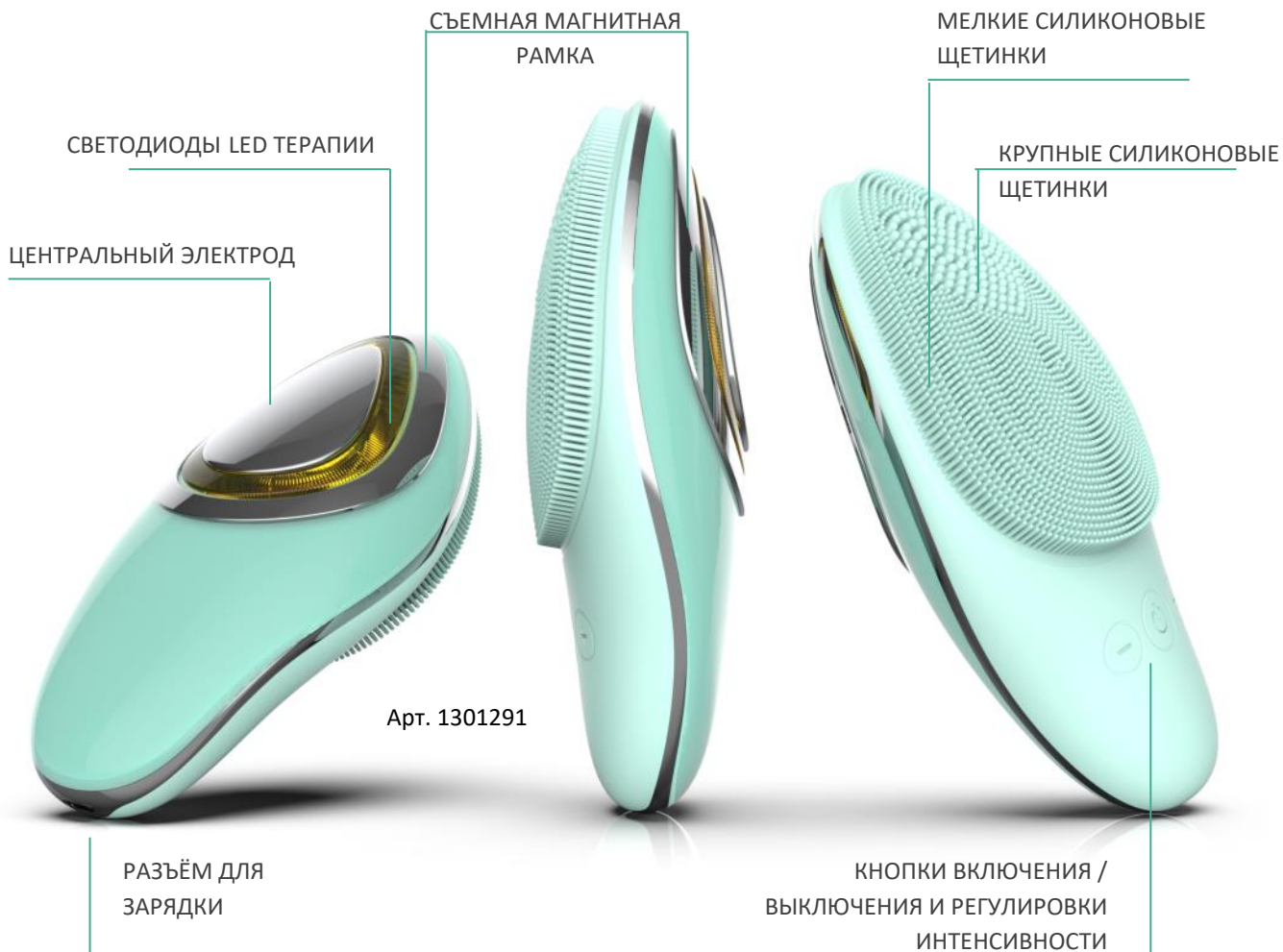

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА 3 часа



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ



1

СМОЧИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ С СИЛИКОНОВЫМИ ЩЕТИНКАМИ, НАНЕСИТЕ НА ЩЕТОЧКУ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА.



2

СЛЕГКА НАМОЧИТЕ ЛИЦО ВОДОЙ



3

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР И ВЫБЕРИТЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ. ОЧИЩАЙТЕ КОЖУ ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ, ПО 15 СЕКУНД НА КАЖДОЙ ЗОНЕ ЛИЦА.



1

СМОЙТЕ ОСТАТКИ ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА



2

ПРОТИРИТЕ ЛИЦО ТОНИКОМ ИЛИ ЛОСЬОНОМ



3

ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ НАНЕСИТЕ КРЕМ ПО ТИПУ КОЖИ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД



1

ОЧИСТИТЕ ЛИЦО ПРИ ПОМОЩИ ЩЕТОЧКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА



2

СМОЧИТЕ НЕТКАНУЮ САЛФЕТКУ ЛОСЬОНОМ ДЕЗИНУСТАНОМ И ЗАКРЕПИТЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЭЛЕКТРОДЕ ПРИ ПОМОЩИ МАГНИТНОЙ РАМКИ.



3

ПРОВЕДИТЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (РЕЖИМ 3) ПО МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ



1

СМОЙТЕ ОСТАТКИ ЛОСЬОНА ДЕЗИНУСТАНА, ПРОТРИТЕ ЛИЦО ТОНИКОМ ИЛИ ЛОСЬОНОМ



2


НАНЕСИТЕ НА КОЖУ АППАРАТНЫЙ ГЕЛЬ, ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ В РЕЖИМЕ «ПИТАНИЕ», «УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ»



3

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСКИ, СЫВОРОТКИ И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ*

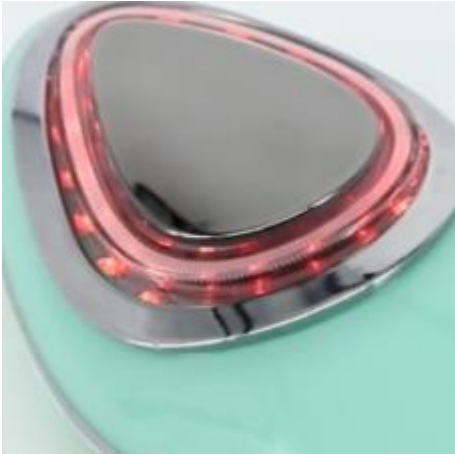

КОЖА ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК И ТОКСИНОВ, СОКРАЩАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ ПОРЫ. ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС И УПРУГОСТЬ, УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА, СОКРАЩАЮТСЯ МОРЩИНКИ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. КОЖА НАПОЛНЯЕТСЯ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, СТАНОВИТСЯ МЯГКОЙ И НЕЖНОЙ. ВЫРАВНИВАЕТСЯ ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ ОТДОХНУВШИМ И УХОЖЕННЫМ.



ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ ПОР



УСТРАНЕНИЕ
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЯ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



СОКРАЩЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН И
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ КОЖИ


* Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при проведении курса процедур

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- КУПЕРОЗ
- ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРОГРАММУ ЕЖЕДНЕВНОГО ОЧИЩЕНИЯ.
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ МИКРОТОКОВ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

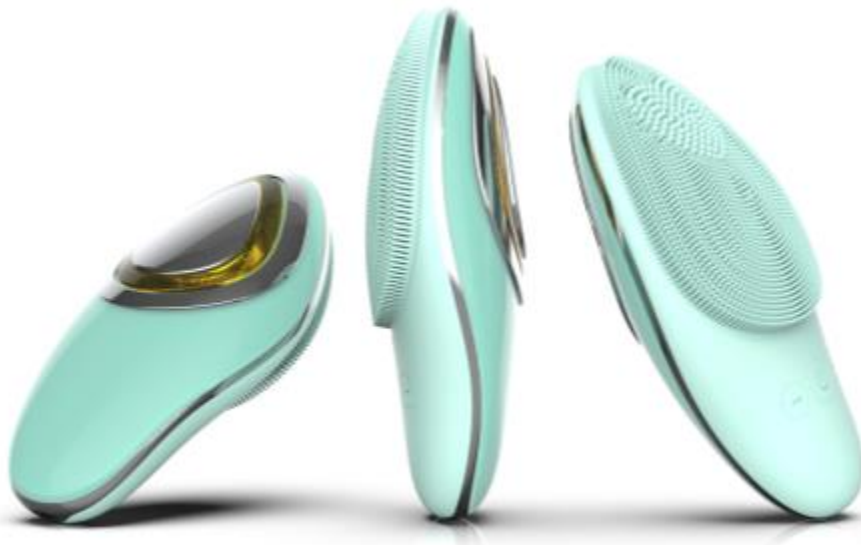

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
АККУМУЛЯТОРА
3 ЧАСА



ПРОВОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Арт. 1301291

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	DC 5В 1А
ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	3,7В, 500мА*ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	3 ЧАСА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ	1 ЧАС
Выходное напряжение в режиме ПИТАНИЕ, ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ	min = -4В, max= -8В.
В режиме УВЛАЖНЕНИЕ И ЛИФТИНГ (биполярные прямоугольные импульсы)	min=±4В, max=±8В
КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ	6
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор Gezatone, Clean&Beauty PRO m780 -1 шт.

USB-кабель – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Упаковочная коробка – 1



GÉZATONE

