

GÉZATONE



ДАРСОНВАЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР С 3мя НАСАДКАМИ

Модель D 307





РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ **GEZATONE BIOLIFT4 D307** ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС.



» ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА АКНЕ, ПОСТАКНЕ, ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



» КОЖА СО СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ, МОРЩИНАМИ, ТУСКЛАЯ



» ЖИРНАЯ КОЖА, ПОВЫШЕННОЕ САЛОУДЕЛЕНИЕ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ



» РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБЛЫСЕНИЯ, СЕБОРЕЯ, ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ВОЛОС



» РУБЦЫ, ОЖОГИ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РАНЫ, ГЕМАТОМЫ, УШИБЫ



» ЦЕЛЛЮЛИТ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

АППАРАТ GEZATONE BIOLIFT4 D307

СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УМЕНЬШАЕТ СПАЗМ МЫШЦ И НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ, ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ ВОЛОСЯНЫХ ФОЛЛИКУЛОВ И ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ДРУГИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ. ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МОЩНЫМ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ.



ДЛЯ МУЖЧИН
И ДЛЯ ЖЕНЩИН



ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВООБРАЩЕНИЯ



БАКТЕРИЦИДНОЕ
ДЕЙСТВИЕ




СТИМУЛЯЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ



ПОВЫШЕНИЕ
МЕТНОГО
ИММУНИТЕТА

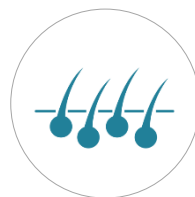

АКТИВИЗАЦИЯ
РОСТА ВОЛОС



РЕГУЛЯЦИЯ
САЛОУДЕЛЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЙНЫХ
ЯВЛЕНИЙ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР
УДОБНО ДЕРЖАТЬ
В РУКЕ

Арт. 1301243

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ПРИБОР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КАК ЖЕНЩИНАМ, ТАК И МУЖЧИНАМ.

ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ **КОМПЛЕКСНОГО УХОДА** ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ТЕЛА, ГОЛОВЫ

АППАРАТ **УДОБНО ДЕРЖАТЬ** В РУКЕ И ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ЛИЦА И ТЕЛА, В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

ПРИБОРОМ ЛЕГКО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО **15 МИНУТ**

3

3 СТЕКЛЯННЫХ
ЭЛЕКТРОДА



ПЛАВНАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ИНТЕНСИВНОСТИ



УДОБНАЯ
РУКОЯТКА



ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ
15 МИНУТ



ЭЛЕКТРОДЫ - НАСАДКИ

НАСАДКА – РАСЧЕСКА



ПРИМЕНЯЕТСЯ **ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ ГОЛОВЫ** ПРИ ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ РОСТА ВОЛОС, ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ И АКТИВИЗАЦИИ ЛУКОВИЦ. ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ СЕБОРЕИ, НОРМАЛИЗОВАТЬ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ КОЖИ ГОЛОВЫ.

НАСАДКА – ГРИБОК



ЯВЛЯЕТСЯ **УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ**, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА **ДЛЯ ПРОЦЕДУР** КАК ПО ЛИЦУ, ТАК И ПО ТелУ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ **ДЛЯ КОНТАКТНОЙ МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ** НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ ОХВАТА ОКОЛО 2,5 см


НАСАДКА – КАПЕЛЬКА



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ **ДЛЯ КОНТАКТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** НА НЕБОЛЬШИЕ УЧАСТКИ КОЖНОГО ПОКРОВА, А ТАКЖЕ **ДЛЯ «ПРИЖИГАНИЯ» ВОСПАЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** (ПРЫЩИКИ И ГЕРПЕС).



ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

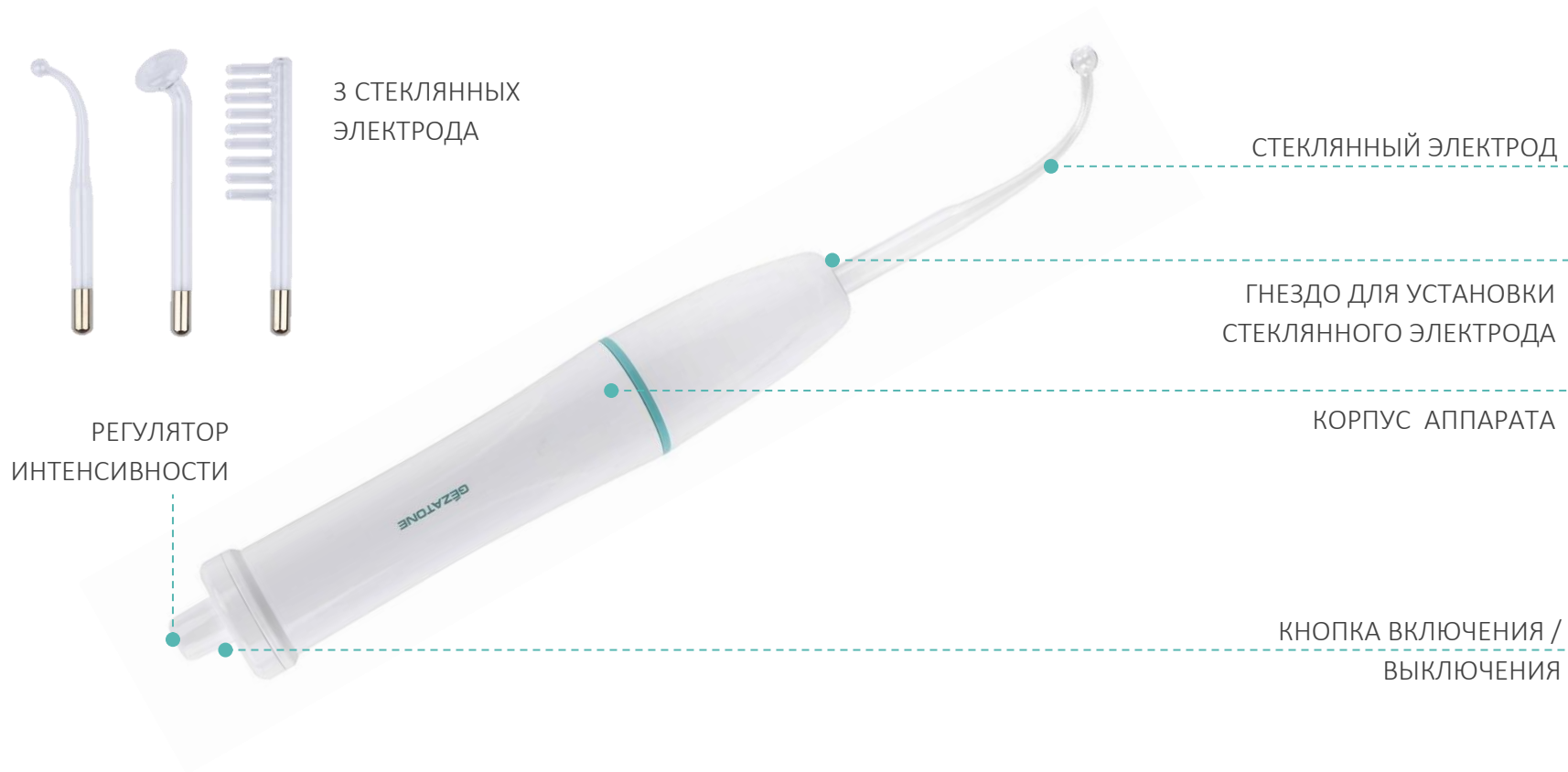



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА GEZATONE BIOLIFT4 D307 ПРОВОДЯТСЯ ПО СУХОЙ КОЖЕ.
КОЖА ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧИЩЕНА ОТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

**ЖИРНАЯ, ПРОБЛЕМНАЯ,
ПОРИСТАЯ КОЖА**

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И
СМЕШАННОЙ КОЖИ
«КОНТРОЛЬ»
4515477A – 150 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



СЫВОРОТКА ДЛЯ
ЖИРНОЙ И
СМЕШАННОЙ КОЖИ
«КОНТРОЛЬ»
4515479A – 30 мл

**КОЖА СО СНИЖЕННЫМ
ТОНУСОМ,
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ**

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



ТОНИК
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
«МАТРИКСИЛ»
4515866A – 150 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



СЫВОРОТКА С
ПЕПТИДАМИ ДЛЯ
ЛИЦА «СИЯЮЩИЙ
ЦВЕТ»
4506020K – 30 мл

**ПРОБЛЕМЫ ВЫПАДЕНИЯ,
ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС,
СЛАБЫЕ, ТУСКЛЫЕ ВОЛОСЫ**

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



ШАМПУНЬ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
БИОТИНА, КАТИВА
65503155 – 250 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



КОНЦЕНТРАТ
ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
БИОТИНА, КАТИВА
65503160 – 12
ампул x 4 мл

**ЦЕЛЛЮЛИТ
ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
САХАРНЫЙ СКРАБ
PHYTOSONIC
4516201 – 200 мл

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ УХОД



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ PHYTOSONIC
4516207 – 200 мл



РЕЗУЛЬТАТЫ*

- УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА, СОКРАЩАЮТСЯ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ
- НОРМАЛИЗУЕТСЯ САЛОТДЕЛЕНИЕ, УМЕНЬШАЕТСЯ ЖИРНЫЙ БЛЕСК, КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗДОРОВОЙ И МАТОВОЙ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ВОСПАЛЕНИЕ,
- ИНФИЛЬТРАТЫ, РУБЦЫ И ШРАМЫ БЫСТРЕЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ОТЕЧНОСТЬ
- ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС КОЖИ
- УСКОРЯЕТСЯ РОСТ ВОЛОС, УМЕНЬШАЕТСЯ СЕБОРЕЯ, СОКРАЩАЕТСЯ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
- УМЕНЬШАЮТСЯ ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ОТЕЧНОСТЬ
- ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ ПРОЦЕДУР

**При курсовом применении прибора*



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- АРИТМИИ (МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ, ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ, ГРУППОВАЯ ЭКСТРАСИСТОЛИЯ), НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ТРОМБОФЛЕБИТЫ, ПОНИЖЕННАЯ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
- КУПЕРОЗ И ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИИ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ГИРСУТИЗМ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЭПИЛЕПСИЯ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА
- ОСТРЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ТУБЕКУЛЁЗ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ)
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОКОВ.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА: ИМПУЛЬСНЫЙ С
ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ: 100Гц
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ: 60 мкс
ЧАСТОТА ВЧ ЗАПОЛНЕНИЯ: 120 кГц
СРЕДНИЙ ТОК НЕ БОЛЕЕ: 200 мкА
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: не более 30 кВ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: сеть АС 220В, 50Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 10 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИБОР Gezatone Biolift4 D307 – 1 шт.
СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД ГРИБОК – 1 шт.
СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД КАПЛЯ – 1 шт.
СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОД РАСЧЕСКА – 1 шт.
КОРОБКА – 1
ИНСТРУКЦИЯ – 1

