

Fairywill

Model 5020E

Умный ирригатор для полости рта Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за выбор Fairywill ирригатор для полости рта (5020E). Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием прибора и сохраните руководство по эксплуатации в надежном месте для использования в будущем.



1. Важная информация:

Вся информация в этом разделе предназначена для того, чтобы проинструктировать вас о правильной и безопасной эксплуатации этого устройства, чтобы вы могли избежать травм для себя и окружающих, а также материального ущерба.


- Младенцы, малыши, люди, которые не могут пользоваться устройством, не должны использовать его самостоятельно. Также рекомендуем хранить его в недоступном для детей месте.
- Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть или упасть в ванну или раковину.
- Не дотрагивайтесь до продукта, если он упал в воду. Немедленно отключите от сети.
- Не используйте изделие во время купания.

2. Примечание:

- Данным прибором могут пользоваться дети от 8 лет и старше; а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находились под наблюдением или были проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимали связанные с этим опасности.
- Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Использовать устройство можно только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.
- Батарея в устройстве должна быть извлечена из устройства перед его утилизацией.
- При извлечении аккумулятора устройство должно быть отключено от источника питания.
- Батарею следует утилизировать безопасно.
- Относительно извлечения аккумулятора см. «Утилизация» на стр. 7.
- Не наполняйте резервуар водой, температура которой превышает 40 °C.
- Если внешний гибкий кабель или шнур прибора поврежден, он должен быть заменен производителем, специалистом по обслуживанию или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать любой опасности.

- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
- Пожалуйста, не используйте его, если вы потеряете насадку.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не используйте для каких-либо целей, кроме чистки полости рта.
- Держите насадки подальше от маленьких детей. Насадки достаточно малы, и могут застрять в горле, если ребенок попытается проглотить.
- Некоторые типы жидкостей для полоскания рта могут повредить оборудование. Поэтому не используйте жидкость для полоскания рта в резервуаре для воды.
- Людям, которые испытывают зубную боль или боль в деснах, перед использованием прибора следует проконсультироваться со своим стоматологом.
- Не прижимайте насадку слишком сильно к зубам или деснам, во избежание повреждения десен.

3. Конструкция:

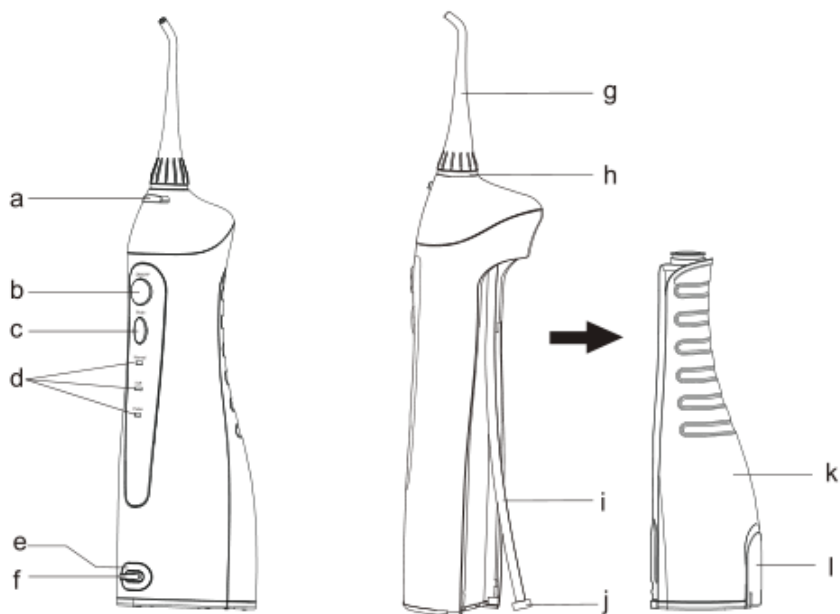

a – Кнопка разблокировки насадок	g – Насадки
b – Кнопка включения / выключения	h – Идентификационное кольцо
c – Кнопка режима	i – Всасывающая трубка насадок
d – Индикатор режима	j – Фильтр
e – Вход для зарядного устройства	k – Резервуар для воды (300 мл.)
f – Крышка зарядного устройства	l – Крышка резервуара для воды

Примечание:

Перед использованием внутри основного устройства (резервуара, всасывающей трубки для воды и т.д.) Может остаться немного жидкости, это оставшаяся дистиллированная вода, которая использовалась для теста производительности (потока воды), поэтому проблем с прибором нет.

4. Применение:

4.1 Зарядка прибора

- Перед использованием Ирригатора для полости рта, плотно закройте крышку резервуара, чтобы избежать утечки воды.
- Сдвиньте нижнюю крышку зарядного устройства вниз и вставьте гнездо устройства (убедитесь, что внутри вилки устройства не осталось жидкости).
- Плотно вставьте зарядный адаптер в розетку.
- Индикатор «СН» мигает, когда устройство заряжается, и гаснет после полной зарядки устройства.
- После завершения зарядки снова наденьте крышку на базу зарядного устройства.

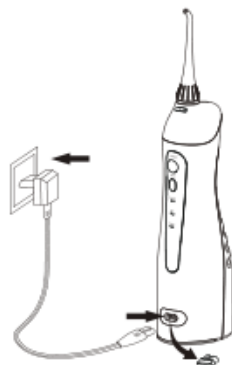


Fig. 1

Примечание:

Если индикатор «СН» мигает во время или после использования, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить. Полная зарядка займет около 4 часов.

4.2 Использование ирригатора

- Присоедините насадку к устройству.
- Откройте крышку резервуара для воды, чтобы наполнить резервуар водой, температура которой не должна превышать 40°C, затем закройте крышку.
- Или сдвиньте резервуар для воды вниз с устройства, наполните резервуар водой, температура которой не должна превышать 40 °C, затем прикрепите резервуар к устройству.

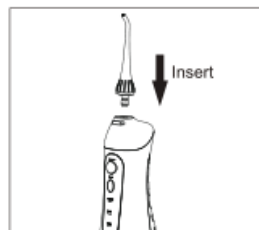


Fig. 2

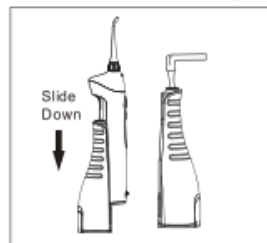


Fig. 4

- Нажмите кнопку «Mode», чтобы выбрать желаемый режим. Во время полива можно изменить рабочий режим.

Clean: при нормальной чистке его хватит примерно на 90 секунд. (+/-15с).

Soft: для бережной очистки чувствительных десен около 110 секунд (+/-15с).

Massage: для чистки и массажа десен около 100 секунд (+/-15с).

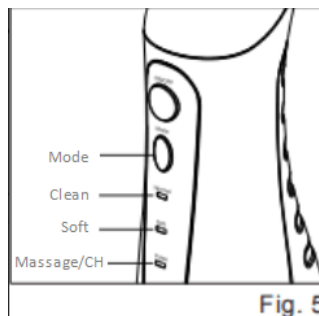


Fig. 5

- Удерживайте устройство в вертикальном положении так, чтобы наконечник насадки был направлен к зубам.
 - Держите рот приоткрытым, чтобы вода могла вытечь.
 - Нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.».
- 1) Направляйте струю воды под углом 90 градусов к зубам и деснам.
 - 2) Медленно направьте струю воды вдоль зубов.
 - 3) Направьте струю воды вдоль линии десен кончиком форсунки под углом 90 градусов к тканям десны.
 - 4) Чистка между зубами и вокруг брекетов, коронок или мостовой кладки тщательно.
- Нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.», а затем нажмите кнопку фиксатора сопла, чтобы при необходимости заменить другие сопла.
 - После завершения чистки снова нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.», чтобы выключить устройство.

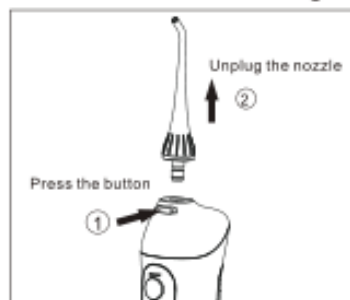


Fig. 7

4.3 После использования прибора

- Откройте крышку резервуара для воды и слейте воду из резервуара.
- Нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.», чтобы включить блок, и слейте воду внутри устройства.

- Нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.» Еще раз, чтобы выключить прибор, и закройте подачу воды крышки бака.
- Протрите устройство сухой тканью.

Примечание:

Чтобы бактерии не размножались, убедитесь, что в нем нет остатков воды внутри устройства. Если вы не собираетесь использовать этот прибор в течение длительного времени, обязательно протрите и просушите прибор как можно скорее перед тем, как убрать его на хранение.

5. Техническое обслуживание:

Устройство можно мыть только водой или нейтральным чистящим средством. Никогда не используйте едкие или абразивные вещества (например, уксус или средства для удаления накипи), так как они могут повредить устройство. Не используйте для мытья горячую воду с температурой выше 50 ° C. Держите устройство подальше от мест с высокой температурой и избегайте попадания прямых солнечных лучей.

5.1 Основной модуль

- Удалите грязь, очистите влажной тканью, и потом протрите сухой тканью.
- При чистке основного блока не погружайте его в воду.
- Высушите прибор после мытья водой.

5.2 Крышка резервуара для воды

Вытрите загрязнения тканью.

5.3 Насадки

- Промойте водой и протрите мягкой тканью.
- Меняйте насадки каждые 6 месяцев.

5.4 Трубка всасывания воды

- Смойте водой и протрите мягкой тканью.
- Не сгибайте, не тяните и не перекручивайте трубку.

5.5 Резервуар

- Промыть водой и протереть мягкой тканью.
- Сушите резервуар, когда он не используется в течение длительного периода времени.

6. Исправление проблем:

Проблемы	Возможные причины	Вариант Решения
Ирригатор не работает	Вы только что получили продукт после покупки или Вы уже 3 месяца или больше не включали его для использования.	Зарядите продукт минимум 4 часа.
Продукт работает только на несколько минут даже после зарядки	Срок службы батареи подошел к концу.	Обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью.
	Времени зарядки было недостаточно.	Заряжайте устройство не менее 4 часов.
Напор воды очень низкий.	Насадка загрязнена.	Заменить насадки.
Напор воды очень низкий. Вода не выходит.	Насадка деформирована.	


Напор воды очень низкий. Вода не выходит.	Загрязнение фильтра.	Очистите фильтр.
Вода не выходит.	Резервуар пуст	Заполните резервуар
	Во время использования устройство слишком сильно наклонено.	Используя прибор держите его ровно.

7. Утилизация:

Перезаряжаемую батарею внутри вашего устройства легко извлечь для утилизации.

По окончании срока службы продукта и перед утилизацией удалите перезаряжаемый аккумулятор из ручки, следуя приведенным ниже инструкциям.

Во время операции, описанной ниже, обязательно защищайте глаза, руки, пальцы и поверхность, на которой вы работаете.

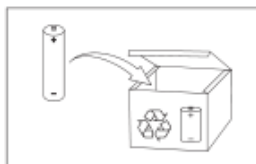

- Снимите 2 резиновые ножки в нижней части ручки
- Вставьте отвертку в прорезь в нижней части ручки и поверните против часовой стрелки, чтобы снять нижнюю крышку.
- Сдвиньте резервуар для воды с устройства и открутите два винта. рядом с всасывающей трубкой.
- Откройте верхнюю крышку и выньте внутреннюю часть за пределы устройства, затем отвинтите все винты внутренней части.
- Отрежьте аккумуляторный провод и извлеките аккумуляторы из внутренней части.

Если у вас есть вопросы по переработке, обратитесь в местную службу управления отходами офис.

8. Гарантия:

- Гарантия 1 год, начиная с первого дня покупки, свяжитесь с Fairywill.
- В течение гарантийного срока в случае любого дефекта, который может возникнуть из-за материалов или производственного процесса, мы заменим детали или весь продукт в соответствии с определенными обстоятельствами.
- При подаче заявки на бесплатный ремонт вы должны предоставить продукт и доказательства, которые могут подтвердить Fairywill дату покупки.
- Гарантия не распространяется на следующие условия:
 - Повреждения, вызванные неправильным использованием, например, неправильным использованием источника питания,
 - Прибор вставлен в неправильную розетку, искусственное повреждение и т. д.
 - Старение и естественный износ в результате использования.
 - Проблемы, возникшие из-за его использования для других целей или неправильного использования, или использования компонентов, не поставляемых Fairywill.

9. Контакты:



Fairywill



www.fairywill.com



support@fairywill.com



Printed in China