

GÉZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ



6

ФУНКЦИЙ

BIO SONIC 1010

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ **ПРИБОР GEZATONE BIO SONIC 1010** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПИЛИНГА, ДЕЗИНКРУСТАЦИИ, ФОНОРЕЗА, МИКРОМАССАЖА, ИОНОРЕЗА И МИКРОТОКОВОГО ЛИФТИНГА. ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ КОЖУ, ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ, УСИЛИВАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ТОНИЗИРУЕТ И УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА. ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННОЕ СИЯНИЕ, СОХРАНЯЕТ ЛИЦО МОЛОДЫМ И ПОДТЯНУТЫМ.



РАСШИРЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ, КОМЕДОНЫ И ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ, САЛЬНЫЙ БЛЕСК



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, АТОНИЯ, МОРЩИНЫ, СНИЖЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ



ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА, УСТАЛЫЙ ВИД, ОТЕКИ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ, ПОСТАКНЕ, РУБЦЫ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА



ТОНКИЕ МОРЩИНКИ, НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ, АТОНИЯ

ФУНКЦИИ

ПРИБОР **BIO SONIC 1010** ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ: УЛЬТРАЗВУК, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ И МИКРОТОКИ В СТИЛЬНОМ, ЯРКОМ И ОРИГИНАЛЬНОМ КОРПУСЕ.

С ПОМОЩЬЮ **BIO SONIC 1010** МОЖНО ПРОВЕСТИ УЗ ПИЛИНГ И ДЕЗИННКУСТАЦИЮ, ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНОГО БЛЕСКА, ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И НЕСОВЕРШЕНСТВ, А ТАКЖЕ СОКРАТИТЬ МОРЩИНЫ, УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА, СКОРРЕКТИРОВАТЬ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ, УВЛАЖНИТЬ И НАПИТАТЬ КОЖУ, ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ УВЯДАНИЕ.

ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ УЛУЧШАЮТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПОВЫШАЮТ ТОНУС КОЖИ И УСКОРЯЮТ ОБНОВЛЕНИЕ.

БЛАГОДАря ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ **BIO SONIC 1010** ЭФФЕКТИВНО, КАК ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДОЙ, ТАК И УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.



Артикул 1301303

6


ФУНКЦИЙ



УЗ ПИЛИНГ



ДЕЗИННКУСТАЦИЯ –
ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

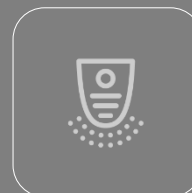

ИОНОФОРЕЗ



МИКРОТОВОКОВЫЙ
ЛИФТИНГ



УЗ ФОНОФОРЕЗ



УЗ МИКРОМАССАЖ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ **BIO SONIC 1010** ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОЖЕ ЛЮБОГО ТИПА ДЕЛИКАТНОЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ И ДИСКОМФОРТА, ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД, ПОМОГАЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РАННЕГО УВЯДАНИЯ.



УЗ ПИЛИНГ

- ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОР, ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ САЛЬНЫХ ПРОБОК
- УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- РЕГУЛЯЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОМЕДОНОВ И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР И НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ



ИОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



МИКРОТОКИ

- УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН И ПОДЪЯЖКА КОЖИ
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ВЫВЕДЕНИЕ ТОКСИНОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



УЗ ФОНОФОРЕЗ


- ГЛУБОКОЕ ВВЕДЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ.



УЗ МИКРОМАССАЖ

- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДЪЯЖКА КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УКРЕПЛЕНИЕ МЕЛКИХ СОСУДОВ
- СОКРАЩЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

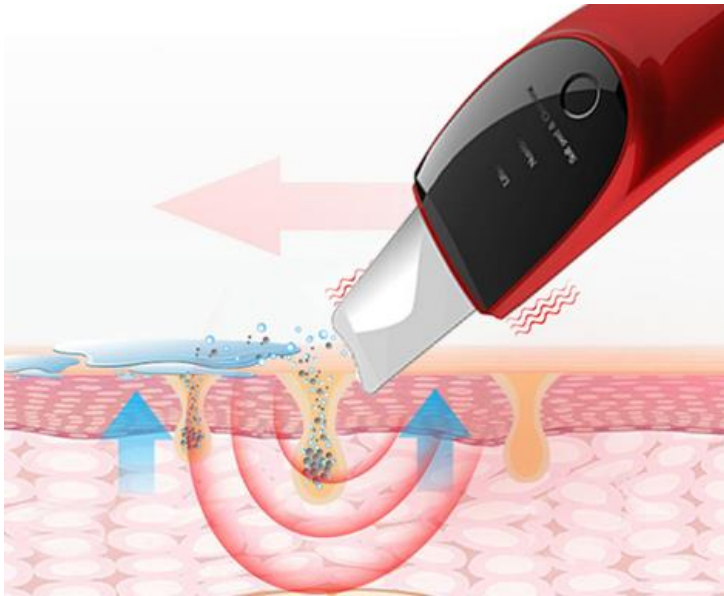

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ РАЗРЫВАЮТ СВЯЗИ МЕЖДУ КЛЕТКАМИ С НАРУШЕННЫМ ОБМЕНОМ, СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ РАЗРЫХЛЕНИЯ И ОТШЕЛУШИВАНИЯ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК. ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ОТ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК.

ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА УСИЛИВАЕТСЯ КОНТАКТНЫМ ГЕЛЕМ ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА. В КОСМЕТИЧЕСКОМ ГЕЛЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПУЗЫРЬКИ, КОТОРЫЕ ВМЕСТЕ С ЕГО АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ЭМУЛЬГИРУЮТ И УДАЛЯЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ПОР И С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ.

ЭФФЕКТЫ



КОМФОРТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ



УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ



ОЧИЩЕНИЕ И
СОКРАЩЕНИЕ ПОР



ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ




ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



СОКРАЩЕНИЕ
САЛОУДЕЛЕНИЯ




ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ

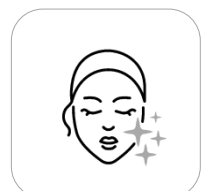

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

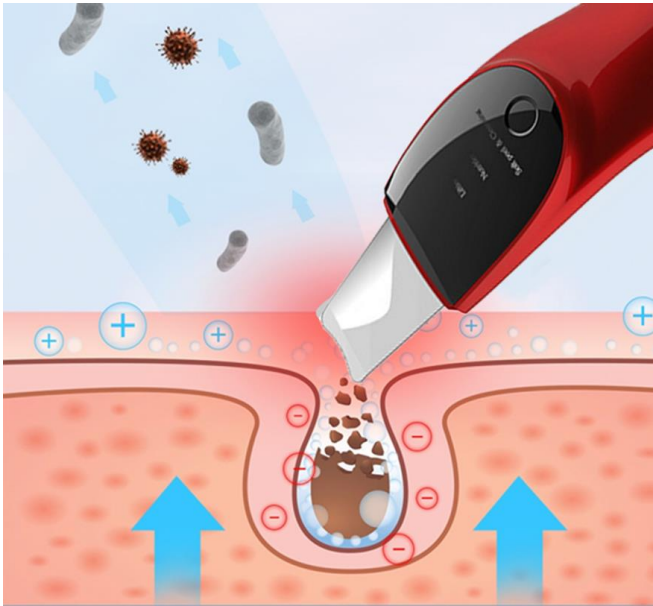

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ – ПРОЦЕСС ОМЫЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЛОСЬОНА-ДЕЗИНКРУСТАНТА.

ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА, ПРОИСХОДИТ РЕАКЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЫЛО И ЛЕГКО ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

ЭФФЕКТЫ



СОКРАЩЕНИЕ ПОР



УСТРАНЕНИЕ «ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ БЕЗ ТРАВМЫ



УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛОУДЕЛЕНИЯ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА




ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ



УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

ИОНОФОРЕЗ

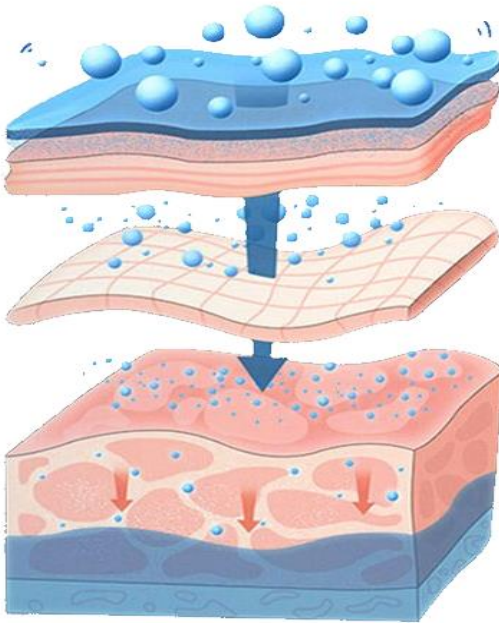

ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ + ИОНИЗИРОВАННОЕ КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.

ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ПЕРЕДВИГАЯСЯ В ТКАНЯХ, УСКОРЯЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

ВЕЩЕСТВА В ИОНИЗИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ БОЛЕЕ АКТИВНЫ. ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВОЗНИКАЕТ ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ «ДЕПО» В ТКАНЯХ.


ЭФФЕКТЫ



УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ КОЖИ



УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ

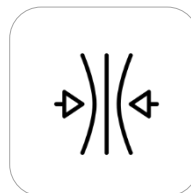

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС




УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ

МИКРОТОКИ

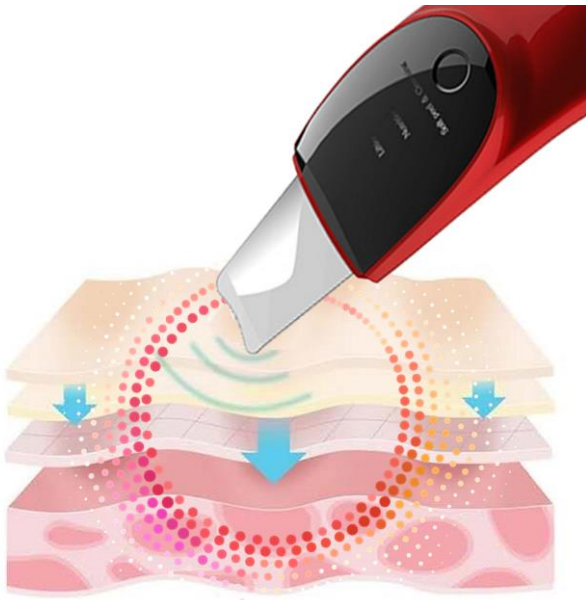

МИКРОТОКИ ОБЛАДАЮТ РАЗНОУРОВНЕВЫМ ВЛИЯНИЕМ, КАК НА ТКАНЕВЫЕ СТРУКТУРЫ, ТАК И НА САМИ КЛЕТКИ КОЖИ.

УСКОРЯЮТ ПРОЦЕССЫ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКАХ КОЖИ, ЧТО ВЕДЕТ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ АКТИВНОСТИ.

ДЕЙСТВИЕ МИКРОТОКОВ ВЛИЯЕТ НА ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ЛИМФЫ, ТКАНИ ПОЛУЧАЮТ ПИТАНИЕ И КИСЛОРОД, ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ЗАСТОЯ, ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ, АКТИВИЗИРУЮТСЯ ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, БЫСТРЕЕ РАССАСЫВАЮТСЯ РУБЦЫ И УХОДЯТ ОТЕКИ.

БЛАГОДАря СТИМУЛИРУЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ МИКРОТОКОВ НА ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, КОЖА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ УПРУГОЙ, БОЛЕЕ ПЛОТНОЙ И ПОДТЯНУТОЙ.

ЭФФЕКТЫ




ЛИФТИНГ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН




УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ

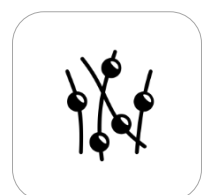

АКТИВИЗАЦИЯ
СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА




ТОНИЗАЦИЯ И
ПОВЫШЕНИЕ
УПРУГОСТИ КОЖИ

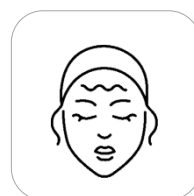

КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ




ДРЕНАЖ
ДЕТОКСИКАЦИЯ

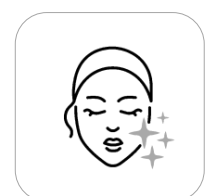

УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ, УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

УЗ ФОНОФОРЕЗ И МИКРОМАССАЖ

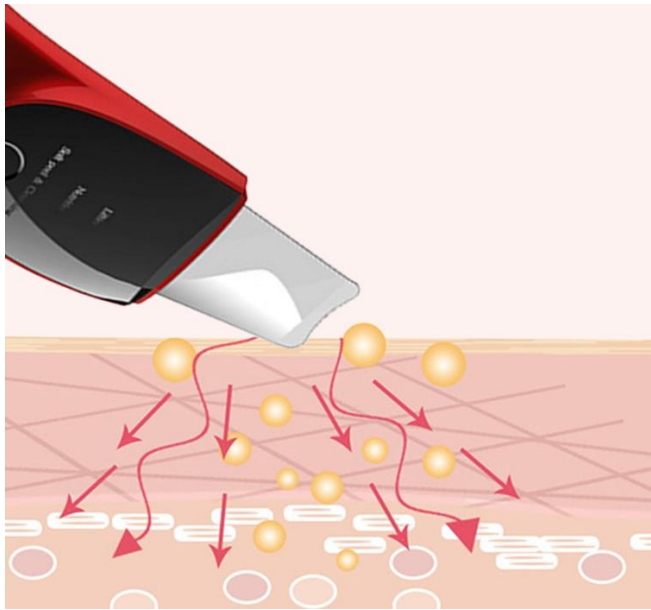

УЛЬТРАЗВУК ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ, СПОСОБСТВУЕТ ИХ ГЛУБОКОМУ ПРОНИКНОВЕНИЮ, УДЛИНЕНИЮ ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОНИКАЮТ В ЭПИДЕРМИС И ВЕРХНИЕ СЛОИ ДЕРМЫ ЧЕРЕЗ ВЫВОДНЫЕ ПРОТОКИ САЛЬНЫХ И ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЧЕТАНИЯ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ (МЕХАНИЧЕСКОГО, ТЕПЛОВОГО) КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ УСИЛИВАЮТСЯ И СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ.

ЭФФЕКТЫ



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОСМЕТИКИ



СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



УСКОРЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ



КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



СОКРАЩЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

3 РЕЖИМА РАБОТЫ



1

SOFT PEEL & CLEANSING



- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
- ВВЕДЕНИЕ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

2

NUTRITION



- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УКРЕПЛЕНИЕ МЕЛКИХ СОСУДОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- СОКРАЩЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ
- УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

3

LIFTING



- ПОДТЯЖКА КОЖИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УКРЕПЛЕНИЕ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ
- УСКОРЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УДОБНЫЙ УГОЛ
НАКЛОНА УЗ ЛОПАТКИ



БЕСПРОВОДНАЯ
МАГНИТНАЯ ЗАРЯДКА

Артикул 1301303

6

6
ФУНКЦИЙ



РАБОТАЕТ
ОТ АККУМУЛЯТОРА

1

УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ

3

3 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- **УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** УЗ ЛОПАТКА НАХОДИТСЯ ПОД НУЖНЫМ УГЛОМ. С ЗАДАЧЕЙ СПРАВЯТСЯ ДАЖЕ НОВИЧКИ, НЕ ИМЕВШИЕ ДЕЛА С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ АППАРАТАМИ.
- **ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ.** СТОИМОСТЬ АППАРАТА, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИТ НЕСКОЛЬКО ПРИБОРОВ И ПРОСЛУЖИТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ДЕШЕВЛЕ ОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ САЛОНА.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО:** БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ЭЛЕКТРОРОЗЕТКЕ.
- **ЛЕГКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ,** ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА, НА ОТДЫХЕ И В ПОЕЗДКАХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОН ХОРОШ СОБОЙ, ДОСТАТОЧНО ВЗГЛЯНУТЬ НА ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ КОРПУСА, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ВНЕШНЮЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. ЯРКИЙ И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРИТЯГИВАЕТ ВНИМАНИЕ



НЕСКОЛЬКО ПРИБОРОВ В ОДНОМ

В КРАСИВОМ КОРПУСЕ СКРЫВАЕТСЯ ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ. КОГДА ХОЧЕТСЯ НЕСКОЛЬКО АППАРАТОВ: ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ, ДЛЯ ФОНОФОРЕЗА, ИОНОФОРЕЗА И МИКРОТОКИ, ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ BIOSONIC 1010, ЧТОБЫ ОБЛАДАТЬ ВСЕМИ ПРИБОРАМИ СРАЗУ.

БЕСПРОВОДНАЯ МАГНИТНАЯ ЗАРЯДКА

УДОБНО ЗАРЯЖАТЬ, ПРИБОР ОСНАЩЕН ИНДУКЦИОННОЙ ЗАРЯДКОЙ-ПОДСТАВКОЙ. БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ, НЕТ ПРИВЯЗКИ К РОЗЕТКЕ, ПРОВОДНЕ ЗАДЕВАЕТ ЛИЦО .



Soft peel & Cleansing

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ, СМЕНА ПРОГРАММ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ 1 КНОПКИ. ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

АППАРАТ ВЕСИТ 87 ГРАММ, ЕГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬ В СУМКУ И ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ КОМАНДИРОВКУ, ОН НЕ ОТТЯНЕТ РУКУ И БУДЕТ ВСЕГДА ДОСТУПЕН ДЛЯ ПРОЦЕДУР В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ.



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА



Артикул 1301303



ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА 2,5 часа



ШНУР USB ДЛЯ ЗАРЯДКИ В КОМПЛЕКТЕ



ВЕС ПРИБОРА БЕЗ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ
87 ГРАММ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ



1

УДАЛИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ КОСМЕТИКУ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА



2

ИСПОЛЬЗУЯ АППАРАТНЫЙ ГЕЛЬ, ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ



3

СМОЙТЕ ОСТАТКИ ОЧИЩАЮЩЕГО ПРЕПАРАТА, ПРОТРИТЕ ЛИЦО ТОНИКОМ ИЛИ ЛОСЬОНОМ



4

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ АППАРАТНЫЙ ГЕЛЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ В РЕЖИМЕ **NUTRITION** И **LIFTING** ДЕРЖИТЕ ЛОПАТКУ ВЫПУКЛОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ ПОД УГЛОМ 45°



5

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ КОСМЕТИЧЕСКУЮ МАСКУ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 15 – 20 МИНУТ. УДАЛИТЕ ОСТАТКИ КОСМЕТИЧЕСКОГО РАСТВОРА, ПРОТРИТЕ ЛИЦО ТОНИКОМ.



6

ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ НАНЕСЕНИЕМ СЫВОРОТКИ И КРЕМА ПО ТИПУ КОЖИ.



РЕЗУЛЬТАТЫ*

КОЖА ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОТМЕРШИХ КЛЕТОК, СОКРАЩАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ ПОРЫ.

ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС И УПРУГОСТЬ, УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА, СОКРАЩАЮТСЯ МОРЩИНКИ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. КОЖА НАПОЛНЯЕТСЯ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, СТАНОВИТСЯ МЯГКОЙ И НЕЖНОЙ.




ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ ПОР



УСТРАНЕНИЕ
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЯ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА

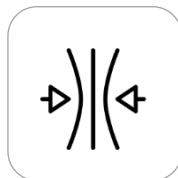

ЛИФТИНГ,
ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА
ЛИЦА



КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ КОЖИ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при регулярном использовании*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ




- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ БОТОКСА, ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ, ФИЛЛЕРЫ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА 25 КГЦ	25 кГц
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	не более 0,8 Вт/см ²
РЕЖИМ SOFT PEEL & CLEANSING	
НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ	-3,5 В
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА	0,8 мс
РЕЖИМ NUTRITION	
НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ	+3,5 В
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА	0,9 мс
РЕЖИМ LIFTING	
НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ	+/- 3,5 В
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА В РЕЖИМЕ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ	0,8 мс
НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТА ПИТАНИЯ СЕТИ, В	220, 50 Гц для зарядного устройства
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, ТИП ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	3,7 В 600 мА Li-PoL
ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ	2,5 часа
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	5 В постоянного тока, не менее 600 мА, разъем USB, тип А
ЭФФЕКТИВНАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ПЛОЩАДЬ УЗ ЩУПА	1,6 см ²
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ	210x150x35 мм
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	+15...+30°C
ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 70%
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА (ДХШХВ), мм	170x48x33
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ), мм	206x75x86
ВЕС БЕЗ УПАКОВКИ	87 грамм
ВЕС В УПАКОВКЕ	0,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул 1301303

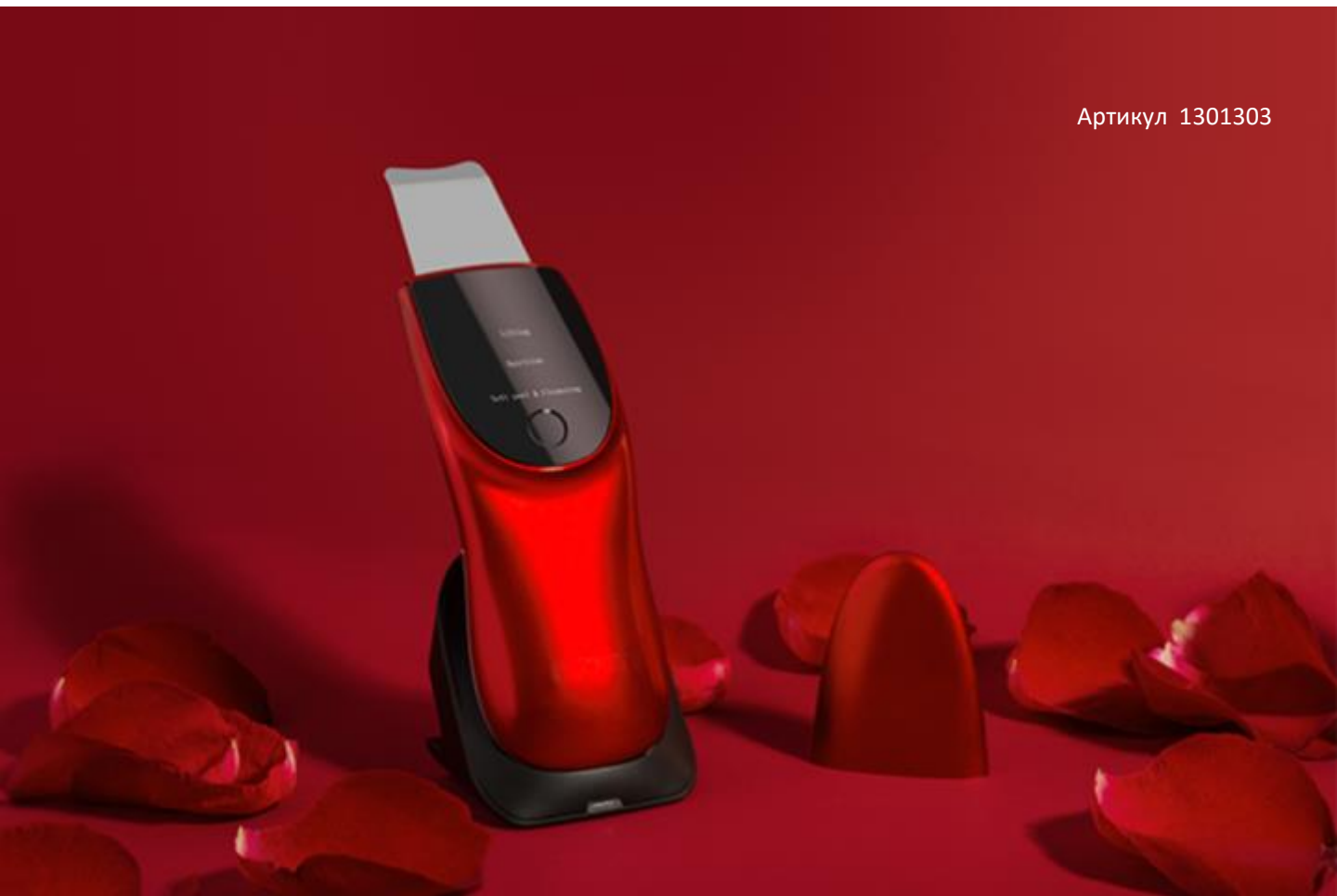

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа лица Gezatone Bio Sonic 1010 - 1шт

Шнур USB - 1шт.

Магнитная зарядная подставка - 1шт.

Инструкция по эксплуатации - 1шт.

Гарантийный талон - 1шт.



GÉZATONE

