

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd,
No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu,
Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик : ООО «Форевер-Мобил»
г.Минск ул. Кульман 9 пом.17
гарантия 12 месяцев с момента покупки.
Срок службы 24 месяца.


Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г.Минск Кульман9,
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10
8 029 366-33-22 (Velcom),
8 033 366-33-22 (МТС)
Понедельник - выходной.
Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China

CE FC RoHS   Made in China

Naipo

Массажная накидка (массажер) на кресло для спины, шеи, ягодиц Шиаци с подогревом Naipo MGM-C11C

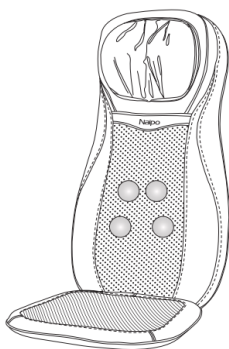

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: MGM-C11C Напряжение: DC12V Рабочий ток: 4A Мощность: 48 Вт Автоматический таймер: 15 минут
Форм-фактор: накидка
Материал: искусственная кожа, текстиль, дышащая сетка
Эластичный ремень для крепления на кресло
Оптимальный угол между спинкой и сиденьем: 105°
Вид массажа: Шиаци, вибромассаж
Область массажа: шея, спина, поясница, ягодицы, задняя поверхность бедер
Смена направления и выбор зоны массажа
Инфракрасный подогрев
Вибромассаж: 3 уровня интенсивности
Управление: пульт ДУ
Кармашек для пульта
В комплекте:
Сетевое зарядное устройство
Автомобильное зарядное устройство

Меры предосторожности:

Чтобы массаж принес только пользу, не используйте массажер при наличии противопоказаний. Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление. Онкологические заболевания. Травмы позвоночника и остеопороз. Кожные заболевания (экзема, псориаз) - не следует массировать в пораженной области. Варикозное расширение вен. Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме. Период беременности.
Перед выполнением программы упражнений проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что вы способны проводить регулярную процедуру, не нанося чрезмерного напряжения на свое тело. Не используйте массажер во время сонливости или сна. Не разбирайте устройство самостоятельно. Не используйте устройство под подушкой, одеялом, в случае пожара. Не ударяйте изделие острым предметом. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не подключайте его к другому источнику питания. После использования устройства отключите питание, чтобы предотвратить использование. Не используйте не оригинальные детали или адаптеры питания для устройства. Не используйте массажер в легко доступном солнечном месте. Данное устройство не является медицинским или терапевтическим устройством.

Функции :

Массажер медленно и мягко массирует биологически активные точки спины. Такой массаж восстанавливает мышцы, снимает усталость и напряжение, устраняет болезненные ощущения и гармонизирует душевное состояние. Массаж Шиаци поможет расслабиться после тренировки и рабочего дня. Вибрационный массаж расширяет сосуды, улучшает кровообращение и помогает клеткам активно насыщаться кислородом. Это повышает иммунитет, ускоряет кровообращение и устраняет отечность. После вибромассажа вы почувствуете себя свежим и отдохнувшим. При регулярном вибромассаже бедер и ягодиц заметно уменьшается жировая прослойка, а, следовательно, и объем. Привыкайте к массажу постепенно. Для начала достаточно одного сеанса в день по 10-15 минут. Если ваша проблема – переутомление и головные боли, рекомендуем этим и ограничиться. Массажер поможет расслабиться, укрепит здоровье и поднимет настроение. Это лучший подарок для человека, который работает в офисе, ведет сидячий образ жизни или проводит много времени за рулем. Массажером Naipo будут с удовольствием пользоваться ежедневно, каждый раз с благодарностью вспоминая вас.

- 01 -



Адаптер



Офисное кресло




Диван

Как это работает

Накидка имеет анатомическую форму – повторяет контуры спины и шеи. Чехол сделан из искусственной кожи – приятная на ощупь, прочная и износостойкая. Каркас спинки толстый и твердый, как стул. Сзади есть ремень – закрепите массажер на кресле. Со стороны спины накидка обтянута сеткой, в области шеи – тканевая вставка. Чехол застегивается на молнию. Внутри – 8 массажных 3D-роликов. Они вращаются во всех направлениях, имитируя реальные движения рук массажиста. Есть инфракрасный подогрев. Он дополнительно расслабляет мышцы и усиливает эффект от массажа. Настройте массажер по своему желанию с помощью пульта. Выберите направление и зону массажа шеи. Выберите зону массажа спины. Включите инфракрасный подогрев. Он дополнительно расслабляет мышцы и усиливает эффект от массажа. Включите вибромассаж сиденья и выберите один из трех уровней интенсивности. Пульт можно спрятать в специальный кармашек. Через 15 минут массажер автоматически отключается.

- 02 -

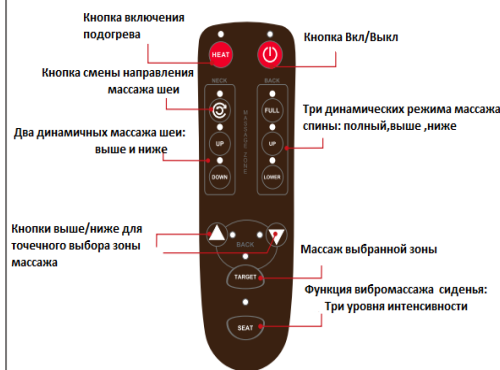

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите адаптер переменного тока к источнику питания и вставьте конец в штекер подушки двойного назначения.
2. Закрепите задний ремень на кресле.
3. Поднимитесь до упора.
4. Нажмите кнопку включения, массажер начнет работать.
5. Выберите необходимый режим для массажа- расслабьтесь и получайте удовольствие.

- 03 -