



---

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА**  
**SA-5561W**



---


Технология чистки: звуковая  
38 000 колебаний в минуту  
2 насадки в комплекте

5 режимов работы  
100% удаляет налет  
USB зарядка

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником дома и в дороге. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

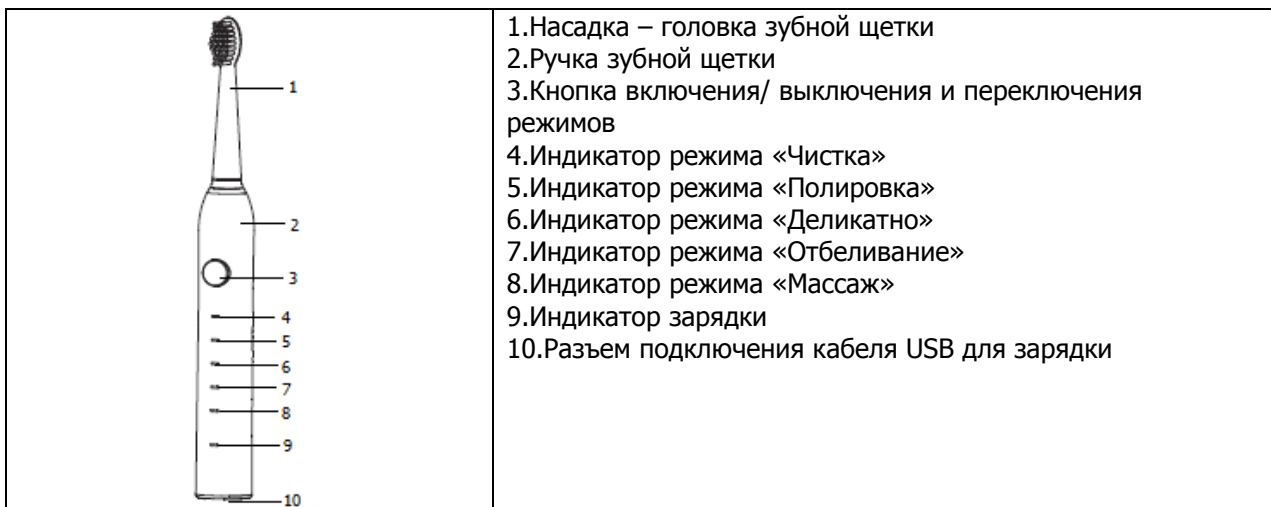

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрическая зубная щетка предназначена для удаления зубного налета и остатков пищи с зубов с целью снижения риска образования кариеса и улучшения здоровья зубов и полости рта.

Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

Данный прибор не предназначен для детей до 6 лет. Дети от 6 до 14 лет и лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц, отвечающих за их общую безопасность, либо после инструктирования по вопросам использования и мерам безопасности.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед первым использованием зубной щетки.

- В случае если Вы проходите стоматологическое лечение, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования.

**Внимание:** при первом использовании может ощущаться зуд или наблюдаться слабое кровотечение. Это связано с тем, что ваши десна еще не привыкли к настолько эффективной чистке. Рекомендуется первое время использовать режим работы «Деликатно». Как правило, через 1-2 недели эти симптомы исчезают. Если они не исчезнут через 2 недели, прекратите использование прибора и обратитесь к стоматологу.

**Предупреждение:**

- Пользователи, которым установлен внутри челюстной зубной имплантат или которые получают стоматологическую помощь по лечению зубов, деформации зубов и челюстей, должны пользоваться изделием с учетом рекомендаций стоматолога.

- Зубная щетка Sakura соответствует стандартам безопасности для электромагнитных устройств.

В случае появления сомнений по поводу кардиостимулятора или других имплантированных устройств, проконсультируйтесь с врачом перед первым использованием прибора.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

- Держите розетку и зарядное устройство вдали от воды.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.
- Проверьте зарядный шнур на предмет повреждений перед первым использованием и в дальнейшем использовании прибора.
- Не используйте прибор в душе или во время ванн процедур.
- Не располагайте и не храните прибор вблизи от воды находящейся в ванной, раковине, и т.д.
- Убедитесь в том, что зарядное устройство полностью сухое, перед тем как включать его в источник питания.
- Не включайте прибор в электросеть с напряжением не соответствующим указанному на приборе

или на зарядном устройстве. Вы можете повредить их.

- Не используйте прибор, если его шнур или зарядное устройство повреждено, если прибор работает неправильно, если прибор упал или повредился или упал в жидкость.
- В случае поломки обратитесь в сервисный центр официального дистрибьютора. Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- Держите провода вдали от горячих поверхностей.

#### **Примечание:**

- Данное изделие предназначено для чистки зубов, десен и языка. Используйте его строго по назначению. При возникновении боли и дискомфорта немедленно прекратите использование зубной щетки и обратитесь к врачу.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины.
- Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми, а также острые предметы, которые могут поранить ребенка.

## **ЗАРЯДКА ПРИБОРА**

Для зарядки аккумулятора необходимо прибор подключить в электросеть к устройству или блоку питания с USB разъемом – адаптеру (5V, 1A) посредством кабеля, входящего в комплект. Заряжайте прибор при температуре от 15 до 35 °С.

1. Аккуратно вставьте один штекер кабеля, входящего в комплект в разъем для зарядки (10), второй штекер подсоедините к адаптеру.
2. Аккуратно вставьте адаптер в розетку.
3. Если прибор разряжен, то при подключении зарядки индикатор зарядки будет гореть красным. Время полной зарядки аккумулятора составляет 1,5-2 часа, в зависимости от источника питания. По завершении зарядки индикатор загорится зеленым светом.

Внимание: если вы не использовали прибор более 6 месяцев, оставьте его заряжаться минимум на 12 часов. После такой полной зарядки прибор может работать до 45 дней при условии ежедневного использования (2 раза в день по 2 минуты).  
Во время зарядки запрещается пользоваться прибором!

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА**

- Прикрепите головку зубной щетки к ручке зубной щетки.
- Смочите головку щетки и нанесите на нее зубную пасту. Вы можете пользоваться любым типом зубной пасты. Чтобы избежать разбрызгивания, поднесите головку зубной щетки к зубам в полости рта, затем включите ее с помощью кнопки включения (3).
- Начните чистить зубы выметающими движениями от линии десен до режущего края зуба. Следите за тем, чтобы щетинки чистящей головки располагались под углом 45° к линии десен. Сначала очистите внешние поверхности зубов, затем внутренние и закончите чисткой жевательных поверхностей зубов.
- С помощью кнопки включения/выключения (3) Вы можете переключать режимы очистки во время работы зубной щетки.
- Чистка зубов длится не менее 2-х минут – по 30 секунд на квадрант. Короткая пауза в работе щетки укажет, когда нужно переходить к следующему участку. Если работу щетки не приостановить, то через 2 минуты работы она автоматически отключится.

#### **Режимы чистки**

1. Режим «Чистка» - обеспечивает эффективное удаление налета для правильной ежедневной гигиены полости рта и ухода за зубами и деснами.
2. Режим «Полировка» - комбинированный режим с автоматическим переключением скорости колебаний щетинок для очистки от чайного, кофейного и других типов налета, а также для придания дополнительного блеска эмали.
3. Режим «Деликатно» - подходит для пользователей, которые имеют проблему кровоточивости десен, стоматит, удаленные зубы, зубные имплантаты, брекеты.
4. Режим «Отбеливание» - применяется для очистки стойкого налета от чая, кофе, сигарет.
5. Режим «Массаж» - эффективное очищение и массаж десен.

**Примечание:** Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку (сменную насадку) каждые 3 месяца. Если щетинки изнашиваются до истечения данного срока, необходимо заменить сменную насадку и снизить давление на зубы и десны при чистке зубов.

## ОЧИСТКА И УХОД

- После использования выключите зубную щетку, снимите головку зубной щетки, промойте ее под водой и просушите.
- Ручку зубной щетки очистите с помощью полотенца или мягкой ткани.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных на сайте [www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку, настройку изделия у владельца и не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации;
  - при попадании внутрь прибора воды, посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.

**Срок службы прибора: 2 года.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сменная головка зубной щетки	2 шт.
2. Ручка зубной щетки	1 шт.
3. USB кабель для зарядки	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота пульсации: 38000 импульсов в минуту  
Тип аккумулятора: Li-ion 500 мАч  
Время работы аккумулятора: до 45 дней  
Номинальная мощность: 1,8 Вт  
Номинальное напряжение: 3,7 В, 0,55 А  
Время зарядки аккумулятора: 2 часа  
Автоотключение: через 2 минуты работы  
Степень пылевлагозащиты: IPX7  
Условия хранения: от -10°C до +40°C  
Размеры в индивидуальной упаковке: 83\*38\*230 мм

Производитель: NINGBO LEXON BEARING CO.,LTD  
Адрес: Rm 2210, Shinger Mansion, No.1277, Kaifa Road, Gutang Street, Cixi City, Ningbo, Китай

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"  
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, Северный проезд, 24а.  
Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30, [www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Отметки о продаже:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись продавца)      (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись покупателя)      (расшифровка подписи)

### Сведения о ремонте

№	Дата	Код Работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял, подпись заказчика