

# Руководство по эксплуатации Массажная накидка Calmer Flash MS-018



## ● Технические параметры

Название продукта Массажная накидка

Входное напряжение 12 В

Входной ток 1.5-2.0

Номинальная мощность 24Вт

Безопасная конструкция

Адаптер питания — — ● — +

## Часто задаваемые вопросы

№	Проблема	Возможная причина	Решение
1	Легкий шум или скрип во время работы	Трение между массажными шариками и тканевой набивкой	Устранение проблемы не требуется
2	Массажер не включается	Активация защиты от перегрева	Отключите и дайте массажеру остыть в течение 30 минут
		Отсоединение шнура питания от электричества	Убедитесь, что шнур питания не отключен
		Нажатие кнопки выключено	Убедитесь, что кнопка выключения

Если учесть вышесказанное, все равно возникает какая-то непонятная ситуация, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором и попросите его провести техническое обслуживание и ремонт.

Спасибо, что вы выбрали наш продукт. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности и наслаждайтесь своим новым массажером. Сохраните руководство после прочтения.

### Правила использования

1. Храните в местах, недоступных для детей и животных.
2. Храните вдали от нагревательных приборов, жидкостей.

### Противопоказания


Беременность, заболевания сердца, наличие кардиостимулятора или другого медицинского устройства, диабет, флебит, тромбоз, проблемы с суставами и позвоночником, воспаления, травмы, остеопороз. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

## Меры безопасности

1. Не трогать мокрыми руками.
2. Не роняйте массажную накидку на пол или в воду.
3. Не ставить на массажную накидку тяжёлых предметов.
4. Не используйте массажную накидку в помещении с температурой выше 40 градусов.
5. Отключайте прибор от электросети после использования.

## Основные правила использования

1. Подсоедините шнур питания к розетке или используйте автомобильный адаптер питания, находясь в автомобиле.
2. Включите массажер при помощи блока управления.
3. Для изменения режима воспользуйтесь кнопками управления.
4. Сеанс массажа не должен превышать 30 минут.
5. Во время проведения массажа обращайте внимание на то, чтобы ролики прибора не касались позвоночника. Не массируйте непосредственно кисти, локтевые суставы, колено, грудь или область живота.
7. После окончания массажа выключите прибор с помощью блока управления, а затем отсоедините шнур питания или автомобильный адаптер питания.

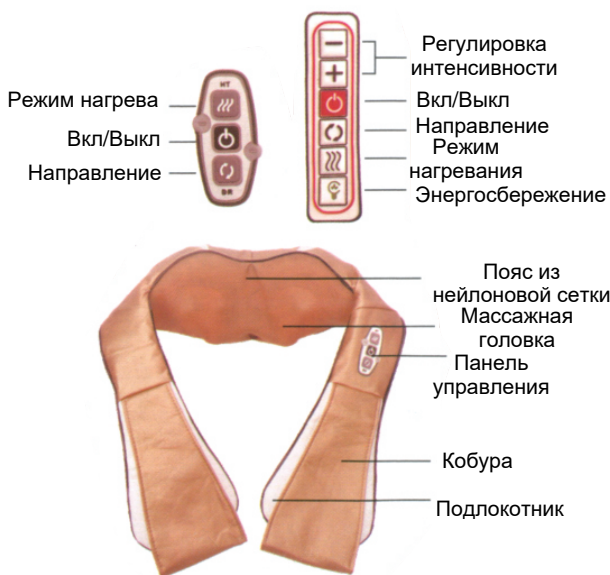

## МОМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра. Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур питания и не используйте в качестве ручки.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте при температуре выше 40°C.
- Перед протиранием массажной накидки отключите её от питания.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если на массажную накидку попала вода, немедленно прекратите использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не используйте во время вождения автомобиля.
- Не используйте при появлении неприятного запаха.
- На прибор нельзя садиться.
- На прибор нельзя вставать ногами.