

Руководство по эксплуатации Массажная накидка Calmer Beam MS-003


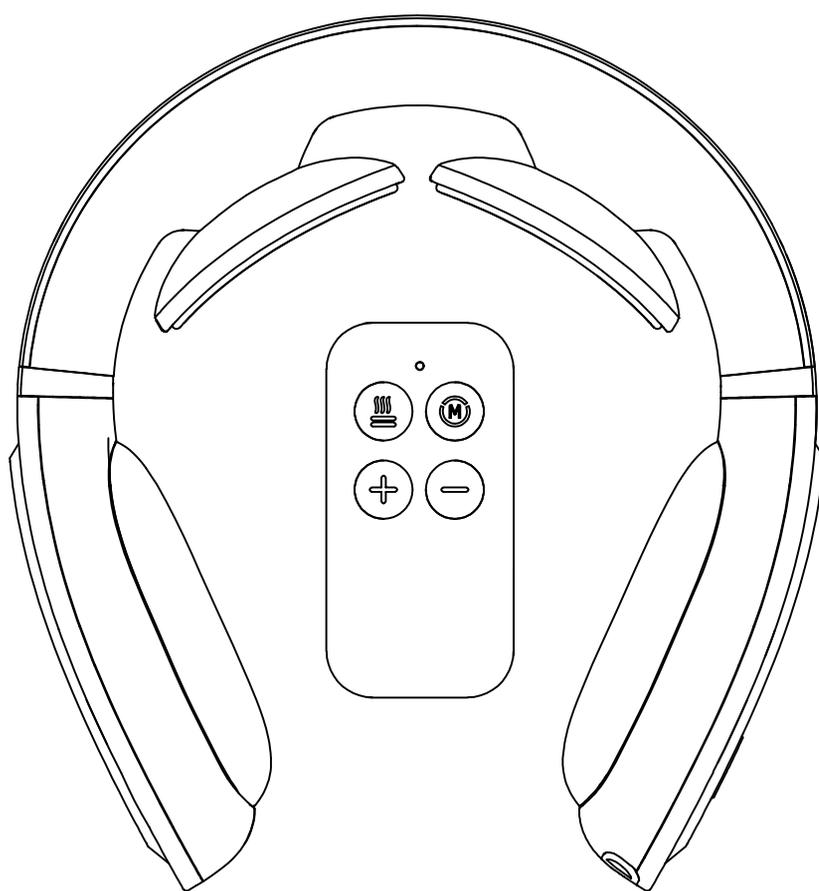


Схема продукта

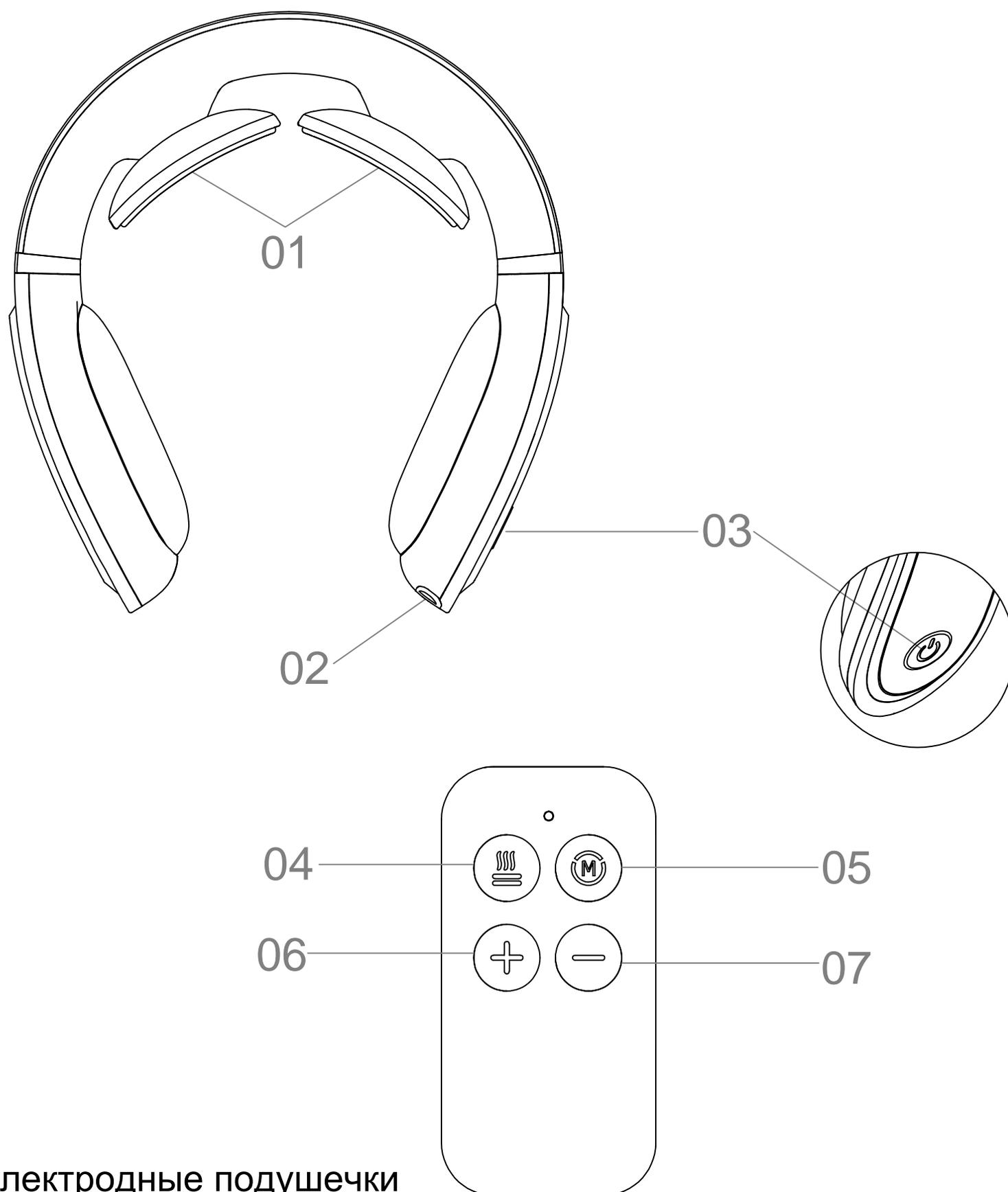

01.Электродные подушечки

02.Слот для зарядки

03.Кнопка включения питания

04.Нагревание

05.Переключение режимов

06.Мощность +

07.Мощность -

Работа основного блока

1. Перед использованием сначала смочите кожу шейного отдела позвоночника влажным полотенцем, а затем положите изделие на шею так, чтобы подушечки электродов были близко к коже шейного отдела позвоночника, отрегулируйте положение, включите и отрегулируйте соответствующий режим массажа и интенсивность.

2. Нажмите и удерживайте колесо прокрутки в течение 2 секунд и включите основной блок с помощью голосовой подсказки. Уровень по умолчанию равен 0. Он увеличивается на 1 уровень, когда вы прокручиваете колесо вверх; Когда вы прокручиваете колесо вниз, оно уменьшается на 1 уровень. Уровни варьируются от 0 до 9. Во время прокрутки основной блок будет давать голосовую подсказку о текущем уровне.

3. Существует 4 режима массажа: "автоматический комбинированный режим", "режим биения", "режим выскобливания" и "режим иглокалывания". 4 режима можно переключать циклически. Пульт дистанционного управления M - это кнопка переключения режимов. Каждый раз, когда вы нажимаете на неё со звуковым сигналом, режим переключается один раз. При повторном включении устройство восстанавливает режим массажа, выбранный в последний раз перед его выключением.

4. Выбор мощности

4.1. Пульт дистанционного управления "+" - это кнопка для усиления мощности массажа. В состоянии включения каждый раз, когда вы нажимаете на неё, сила увеличивается на один уровень (всего 15 уровней)

4.2. Кнопка "-" на пульте дистанционного управления - это кнопка уменьшения мощности массажа. В состоянии включения при каждом нажатии интенсивность уменьшается на один уровень (всего 15 уровней)

5. Варианты подогрева

Кнопка "☺" на пульте управления - это включение нагревания. Нажмите кнопку нагрева, чтобы включить функцию нагрева массажера.

Две электродные пластины изделия будут постепенно нагреваться в течение 10 секунд и стабилизируются при 42°C. Нажмите её ещё раз для остановки функции нагрева. Существует 3 уровня нагрева: 38°C, 40°C, 42°C

Меры предосторожности

ОПАСНОСТЬ

Пожалуйста, никогда не используйте продукт вместе со следующими медицинскими электронными устройствами:

1. Кардиостимуляторы и другие имплантируемые медицинские электронные устройства;
2. Медицинские электронные устройства, такие как ЭКМО, поддерживающие жизнь;
3. Электрокардиограф и другие медицинские электронные устройства;

* Это может привести к неисправности этих медицинских электронных устройств, что может быть опасным для жизни.

Примечание

Этот продукт запускает сокращения мышц, имитируя биоэлектрические сигналы мышц для достижения цели массажа. Если электродные подушечки плохо соприкасаются с телом человека, или кожа сухая, это может вызвать покалывание. Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы массажная накидка лежала на участке тела равномерно, или используйте влажное полотенце для увлажнения кожи.

Применение запрещено при следующих обстоятельствах:

1. Пациенты со злокачественными опухолями.
2. Пациенты со склонностью к кровотечениям.
3. Больные с острым гнойным воспалением.
4. Беременные женщины и роженицы.
5. Дети или люди, которые не имеют способности выразить сознание.
6. Пациенты с нарушениями кожного восприятия или кожными аномалиями.
7. Пациенты с проблемами нервной системы.
8. Пациенты с высоким кровяным давлением.
9. Пациенты, у которых температура тела превышает 38 градусов.
11. Пациенты с инфекционными заболеваниями.
12. Пациенты, принимающие наркотики.
13. Пациенты, у которых на коже аллергия на электроды из нержавеющей стали.
14. Пользователи, которые не чувствительны к теплу или склонны к тепловой аллергии.

Безопасность

1. При одновременном воздействии на пациента высокочастотного хирургического оборудования и массажера массажные подушечки массажера могут вызвать ожоги или повредить массажер.
2. Когда продукт применяется близко к (1 м) устройству для коротковолновой или микроволновой обработки, мощность массажера может быть нестабильной.
3. Во время массажа не касайтесь массажными подушечками ран и шрамов.
4. Во время массажа не кладите массажные подушечки рядом с сердцем. В противном случае это повысит риск фибрилляции сердца.
5. Продукт рекомендуется использовать одному пользователю. В случае использования двумя или более пользователями, массажные подушечки следует очистить перед использованием.
6. При использовании средства массажные подушечки должны плотно прилегать к коже с равномерным контактом.
7. Массажные подушечки массажера имеют функцию нагрева. Горячий компресс на одно и то же место в течение длительного времени (более 15 минут) может вызвать низкотемпературный ожог.
8. В случае дискомфорта во время или после использования прекратите использование и обратитесь за медицинской помощью.
9. Этот продукт содержит литиевую батарею. Не разбирайте, не модифицируйте, не погружайте изделие и не бросайте его в огонь, иначе это может привести к повреждению или взрыву изделия.
10. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом в следующих ситуациях.

Невыполнение этих требований может привести к несчастному случаю или дискомфорту.

11. Не подключайте и не отсоединяйте USB-кабель для зарядки мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или несчастным случаям.

12. При отсоединении USB-кабеля для зарядки от основного корпуса не тяните за кабель, а возьмитесь за штекер кабеля и вытащите его, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

13. Не поднимайте и не переносите устройство за кабель.

Рекомендации

1. Перед использованием убедитесь, что кнопки на устройстве работают нормально.

2. Если устройство используется впервые или не используется в течение длительного времени, зарядите его в соответствии с руководством пользователя, чтобы обеспечить его нормальную работу.

3. При утилизации данного изделия утилизируйте его в соответствии с действующими в городе правилами защиты окружающей среды. В противном случае это может привести к загрязнению окружающей среды.

4. Основной блок массажа рассчитан на 15 минут и автоматически остановит массаж через 15 минут. Рекомендуется использовать его не более 30 минут в день .

Внимание! Изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Технические характеристики

Цвет	белый/ розовый/ красный/голубой		
Материал	АБС-пластик, силикон		
Страна производства	Китай	Разъём	DC/5V
Батарея	1200 мАч	Номинальная потребляемая мощность	5Вт
Батарея пульта управления	CR2032		

Функция синхронизации и защиты

- 1.Работа устройства рассчитана на 15 минут. Когда устройство включено, оно автоматически выключится через 15 минут.
- 2.При включении ударного импульса, если изделие не надето или не используется нормально, устройство отключит ударный импульс в течение 2 секунд, чтобы предотвратить накопление статического электричества. После повторного контакта с человеческим телом вам необходимо вручную включить ударный импульс, чтобы продолжить массаж.
- 3.После того, как массажёр будет снят с участка тела, устройство автоматически отключится через 30 секунд.

Сигнал низкого напряжения и функция зарядки

1. Сигнал тревоги о низком напряжении: во время использования, когда в устройстве не хватает питания, значок питания попеременно мигает с обеих сторон. Вы можете подключить один конец зарядного кабеля к порту зарядки устройства, а другой конец - к зарядному устройству мобильного телефона. При полной зарядке мигает значок полного питания

Производитель оставляет за собой право улучшать продукты и руководства, а также вносить в них изменения без предварительного уведомления. Внешний вид продукта зависит от поставки.

Диагностика

- Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами и решениями.
- Если устройство все ещё находится в неисправном состоянии или не может быть использовано, выключите питание. Пользователи не должны самостоятельно разбирать или ремонтировать изделие
- Повреждение изделия, вызванное самостоятельной разборкой или ремонтом, приведёт к аннулированию гарантии на изделие, и компания не будет нести никаких последствий, вызванных этой ситуацией.

Проблема	Возможная причина/решение
Невозможно начать	<ul style="list-style-type: none"> - Разряжена батарея. - Пожалуйста, убедитесь, что питания продукта включено и батарея заряжена.
Не горит индикатор заряда	<ul style="list-style-type: none"> - Пожалуйста, проверьте, подключены ли кабель USB и адаптер питания.
Устройство включено, но не работает	<ul style="list-style-type: none"> - Контактируют ли подушечки непосредственно с кожей? Отрегулируйте положение - Между подушечками и кожей есть волосы или одежда, украшения и т. д.? Отодвиньте или удалите предметы. - Уровень интенсивности равен 0? Увеличьте интенсивность массажа.
Ощущение покалывания	<ul style="list-style-type: none"> - Длительность массажа слишком велика? Рекомендуется делать массаж по 15 минут за один раз два раза в день. - Интенсивность массажа слишком высока? Установите низкий уровень - На коже есть рана? Не накладывайте массажные подушечки на рану во время использования - Климат холодный, а кожа сухая? Используйте влажное полотенце, чтобы увлажнить участок кожи перед использованием.
Слабые вибрации	<ul style="list-style-type: none"> - Массажные подушечки загрязнены? Очистите поверхность массажных подушечек. - Батарея разряжена? Пожалуйста, зарядите, если батарея разряжена. - Уровень интенсивности массажа слишком низкий? Увеличьте интенсивность массажа.

Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Место происхождения	
Гарантийный срок	
Номер счёта	
Дата покупки	
Запись о ремонте	
Дата отправки в ремонт	
Неисправности, ремонт и обращение	
Дата осмотра	Подпись