

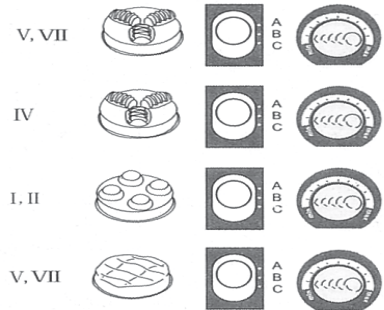
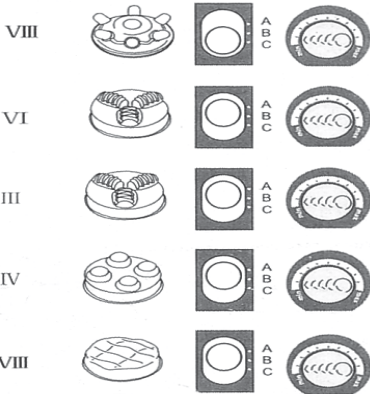


# Руководство по эксплуатации Массажер ручной Calmer Pearl К-18С

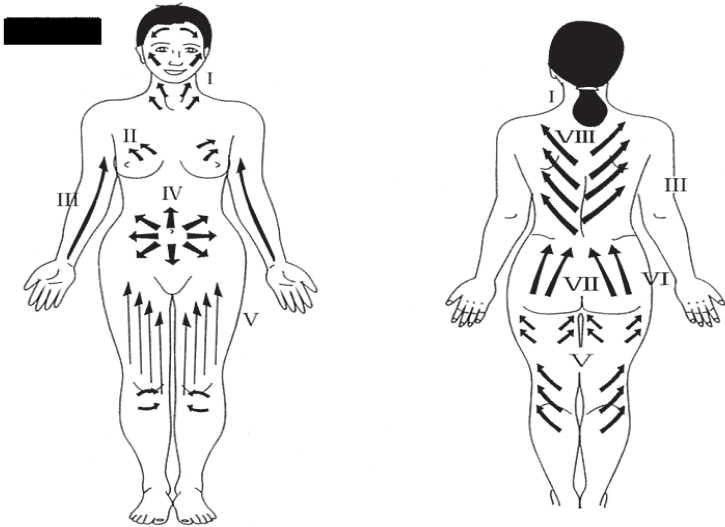

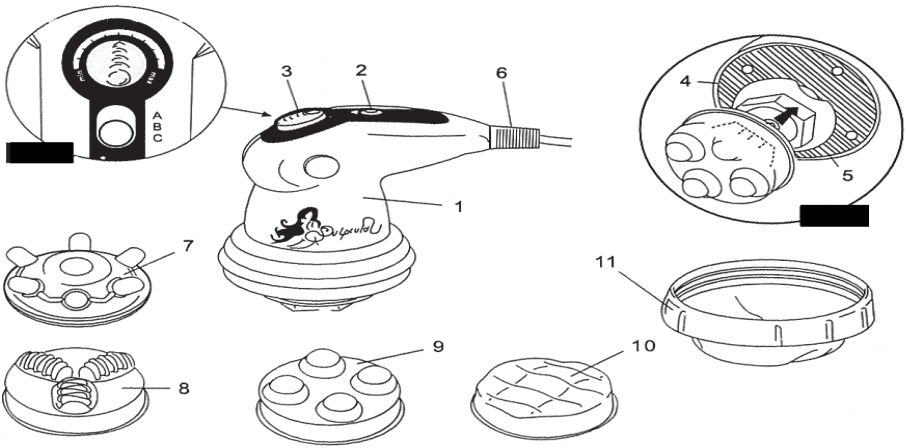

## **Уважаемый клиент**

Поздравляем вас с выбором данного массажёр. Наша продукция разработана и изготовлена таким образом, чтобы более чем удовлетворить ожидания наших самых требовательных клиентов, бытовая техника соответствует самым строгим стандартам качества и безопасности. Этот продукт соответствует требованиям европейской электромагнитной совместимости Директива 89/336/ЕЕС и Европейская директива о низком напряжении 73/23/ЕЕС.

## **Инструкция по технике безопасности**

- Перед использованием прибора полностью прочтите эти инструкции.
- Данный прибор предназначен только для домашнего, а не профессионального использования, его использование иным способом, кроме как в соответствии с инструкциями, может быть опасным. Не используйте этот прибор в качестве замены надлежащей медицинской помощи.
- Всегда храните прибор и его упаковку в недоступном для детей месте. Когда вы используете его в их присутствии детей, будьте предельно осторожны.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей), чьи физические, сенсорные или умственные способности ослаблены.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. При возникновении каких-либо проблем со кабелем или любой другой частью прибора не используйте его и отнесите в сервисный центр.
- Если шнур питания повреждён, он должен быть заменён производителем или аналогичным квалифицированным персоналом для предотвращения возможных опасностей.
- Не используйте насадки, не поставляемые или не рекомендованные производителем.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что указанное напряжение соответствует напряжению в вашем доме.
- Всегда отключайте прибор от сети после использования. Также отключайте его от сети в случае отключения электроэнергии. Когда вы подключаете или вынимаете прибор из розетки, он должен быть выключен.
- Не тяните за шнур питания и не подвешивайте прибор за шнур. Всегда отключайте прибор от сети, потянув за вилку, а не за шнур.
- Не используйте рядом с водой. Если массажёр упадёт в воду, не пытайтесь его поднять. Немедленно отключите его от сети.
- Никогда не оставляйте прибор на открытом воздухе.



**ВАЖНО:** Если вы хотите утилизировать прибор, НИКОГДА не выбрасывайте его в мусорное ведро. Отнесите его на переработку в ближайший к вашему дому пункт очистки или центр сбора отходов. Таким образом, вы будете помогать заботиться об окружающей среде.

## **Основные части массажера**

- 1 Основной корпус прибора
- 2 Выкл./массаж/массаж + ИК-переключатель
- 3 Переменная регулировка интенсивности массажа
- 4 Излучатель инфракрасного излучения
- 5 Адаптер для массажной насадки
- 6 Шнур
- 7 Пальцевая массажная насадка
- 8 Роликовая массажная насадка
- 9 Шариковая массажная насадка
- 10 Волнообразная насадка
- 11 Волнообразная насадка

## **Электрические характеристики**

Напряжение питания зарядного устройства: 220-240 В, 50 Гц, 25 Вт

## **Профессиональная система липомоделирования**

Эффективно борется с целлюлитом и дряблостью кожи в домашних условиях.

Вдохновленный профессиональными техниками массажа, этот массажер последнего поколения обеспечивает эффективный лечебный массаж в домашних условиях и особенно подходит для тех, кто страдает от целлюлита, задержки жидкости и дряблости кожи. Его эффективность заключается в мощном двигателе, который производит одновременные вращательные и вибрирующие движения. Это обеспечивает подкожный массаж, увеличивая приток крови, стимулируя лимфодренаж и кровообращение, улучшая эластичность кожи.

Продукт обеспечивает эффективный массаж, усиленный воздействием его инфракрасного тепла, перемещает жир, нагревая и дренируя жир, а также разглаживая бугристую "апельсиновую корку". Массажер применяет фрикционные и разминающие движения, копируя движения рук опытного терапевтического массажа. Эргономично спроектирован для удобного домашнего использования, позволяя пользователю делать себе массаж в любое время и в любом месте.

Для достижения эффективных результатов мы рекомендуем использовать массажер в течение 15 минут каждый день.

Массажер можно использовать со специальными лечебными кремами (укрепляющими или антицеллюлитными).

## **Общие рекомендации по использованию**

1 Массируйте область не более пяти минут. Используйте свою чувствительность в качестве ориентира для определения продолжительности массажа.

2 Используйте массажную насадку, указанную для вашего лечения. Подходит для деликатных зон, таких как лицо, грудь, шея и молочные железы.

Активизирует, тонизирует и укрепляет мышцы, помогая укрепить кожу, придавая ей более упругий и пухлый вид. Улучшает кровообращение в области живота, выводит локализованные токсины и улучшает работу кишечника, предотвращая запоры.

Использование головки "волнообразной формы"(10)

Имитирует профессиональный массаж, выполняемый ладонью, тонизируя и улучшая кровоток. Используйте в области бедер и ягодиц.

\* Использование тканевой насадки(11). Для повышения комфорта накройте соответствующую насадку тряпичной насадкой.

Этот аксессуар нельзя использовать с кремами.

\*Тканевую насадку (11) можно использовать только с волнообразной головкой (10). Использование его с другими головками может повредить ткань, и массаж будет менее эффективным.

3 Регулятор интенсивности позволяет регулировать интенсивность массажа по мере необходимости.

Используйте низкую скорость для обработки деликатных зон (лицо, шея, грудь, ноги с варикозным расширением вен) или беременных женщин. Используйте самую высокую скорость для обработки менее чувствительных участков тела.

## Эксплуатация

Это устройство было создано для проведения терапевтического массажа против целлюлит, задержка жидкости и дряблости кожи. Не используйте его для других целей.

Проконсультируйтесь с врачом, есть ли у вас какие-либо проблемы со здоровьем.

! Не используйте массажёр непосредственно, если вы страдаете от кожной сыпи или воспаления.

! Не используйте этот продукт перед сном. Массаж может оказать стимулирующее действие и заставить вас засыпать дольше.

! Не используйте массажёр, лежа в постели.

! Массажёр имеет нагретую поверхность. Люди, нечувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании устройства.

! Защитите глаза от воздействия инфракрасного излучения.

Чрезмерное инфракрасное излучение может быть вредным, поэтому избегайте длительного воздействия инфракрасных лучей.

! Не используйте прибор более 15 минут. Непрерывное использование прибора более 15 минут может привести к его перегреву, что сократит срок службы прибора. Дайте ему остыть, прежде чем продолжать его использовать.

1 Подключите прибор к розетке.

2 Установите переключатель (2) в положение (Вкл/массаж) или в положение (С/массаж +инфракрасное излучение (ИК)) в зависимости от требуемой процедуры.

3 Установите соответствующую насадку .

4 При желании накройте насадку защитной тканью поставляемой в комплекте.

5 Установите интенсивность массажа с помощью регулятора в соответствии с областью, над которой вы собираетесь работать, и ее чувствительностью к массажу. Для этого поверните регулятор пальцем в ту или иную сторону в соответствии с желаемой настройкой интенсивности

6 Когда вы закончите пользоваться массажером, переведите переключатель в положение (А/выкл.).

7 Отключите прибор от сети.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ :

## **Очистка**

Отсоедините прибор от розетки и дайте ему остыть перед очисткой.

Очищайте прибор только мягкой, слегка влажной губкой.

- Никогда не позволяйте воде или любым другим жидкостям прийти в соприкосновение (соприкоснуться) с прибором.
- Не погружайте прибор ни в какую жидкость для очистки.
- Никогда не используйте для очистки абразивные очистители, щетки, средства для полировки мебели/стекла, разбавители для краски и т.п.

## **Хранение**

Поместите прибор в его упаковку или в безопасное, сухое, прохладное место. Во избежание поломки НЕ оборачивайте провод электропитания вокруг прибора. НЕ вешайте прибор за электрический провод.