


GÉZATONE

СВЕТОДИОДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ LED МАСКА
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ

m 1040

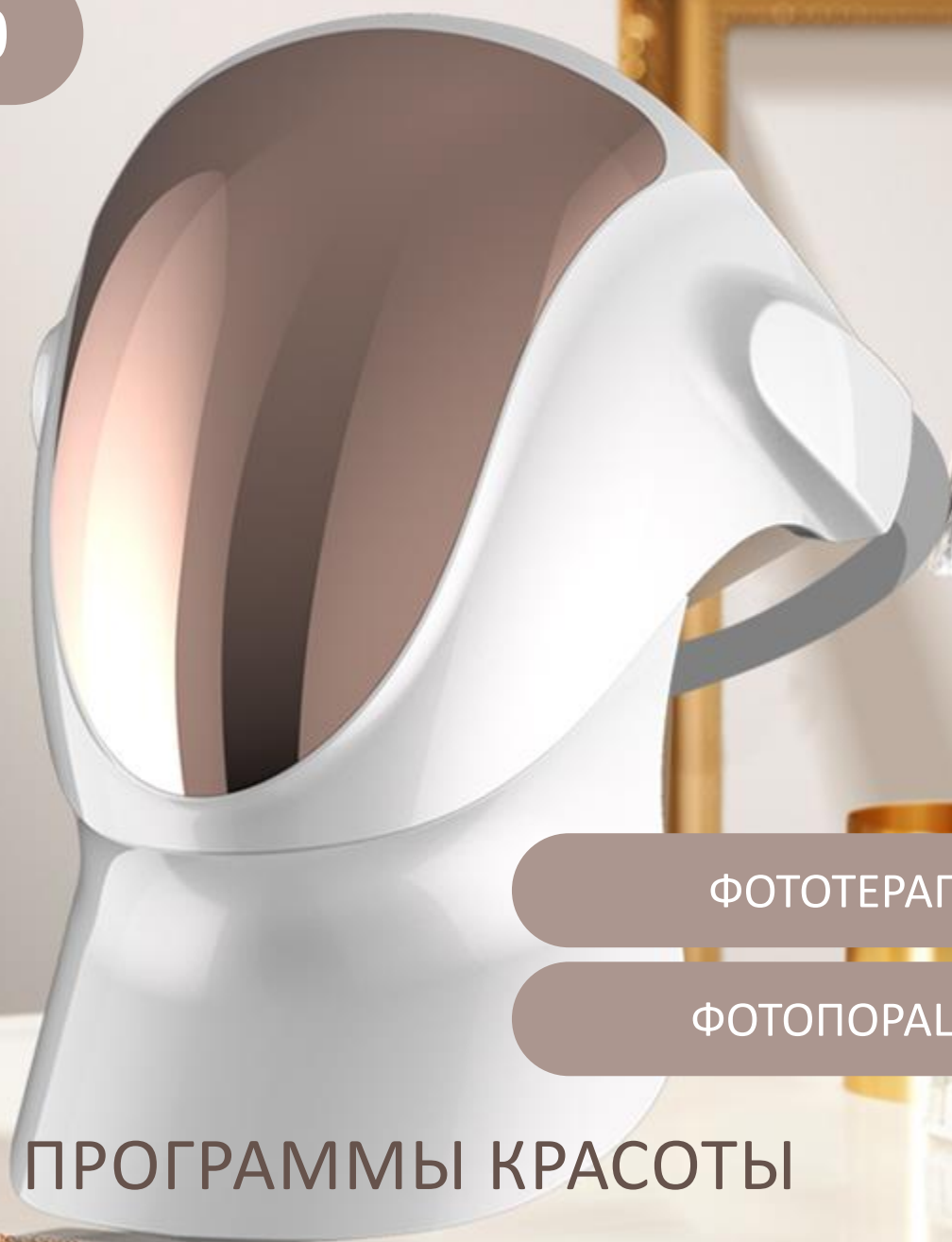

ФОТОТЕРАПИЯ

ФОТОПОРАЦИЯ

ПРОГРАММЫ КРАСОТЫ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ


РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА

ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЖУ СЕТЕОВЫМИ
ВОЛНАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ
СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА И
ЭЛАСТИНА, СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ
ВОСПАЛЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ,
НОРМАЛИЗУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ,
ПОМОГАЕТ ПОВЫСИТЬ
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КОЖИ ВНЕШНИМ
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ И ПОВРЕЖДАЮЩИМ
ФАКТОРАМ.

В АППАРАТЕ m1040 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЦВЕТА С **КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННОЙ**
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

807 СВЕТОДИОДОВ БЕЗОПАСНО И
БЕЗБОЛЕЗНЕННО ВОЗДЕЙСТВУЮТ
НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

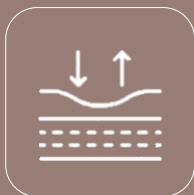

СНИЖЕНИЕ
ЭЛАСТИЧНОСТИ И
УПРУГОСТИ КОЖИ



ВОЗРАСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ



ПОВЫШЕННАЯ СЕКРЕЦИЯ
СЕБУМА, САЛЬНЫЙ
БЛЕСК, ВОСПАЛЕНИЯ



ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



РАЗДРАЖЕННАЯ,
ПОВРЕЖДЕННАЯ,
СТРЕССОВАЯ КОЖА



МОРЩИНЫ
ГЛУБОКИЕ
И МЕЛКИЕ



НЕРОВНЫЙ ТОН,
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА,
ПИГМЕНТАЦИЯ



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ДИСКОМФОРТ

ФУНКЦИИ

LED МАСКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 16+ , ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ БЛАГОДАРЯ СВЕТОДИДНОЙ МАСКЕ.


ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ LED МАСКИ НА КОЖУ ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО СВЕТОВОЙ СПЕКТР, В КОТОРОМ НЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ, НЕТ ТЕРМИЧЕСКОГО ИЛИ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.



Артикул 1301321

**ФОТОТЕРАПИЯ /
СВЕТОТЕРАПИЯ**

3 ЦВЕТА С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ: КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ И ФИОЛЕТОВЫЙ СТИМУЛИРУЮТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА, ВЫРАВНИВАЮТ ТОН КОЖИ, ДЕЛАЮТ ЕЕ ЭЛАСТИЧНОЙ, СПОСОБСТВУЮТ СНИЖЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЙ И РЕГУЛИРУЮТ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ.

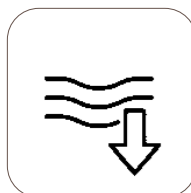**ФОТОПОРАЦИЯ**


СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ ДОСТАВЛЯЮТ В КОЖУ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ ОТКРЫВАЮТ МИКРОКАНАЛЫ НА МЕМБРАНЕ КЛЕТКИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВНУТРИ ПОСТУПАЮТ ВЕЩЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫВОДЯТСЯ ТОКСИНЫ.



МЕТОД ФОТОТЕРАПИИ / СВЕТОТЕРАПИИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ

СВЕТОТЕРАПИЯ ОСНОВАНА НА СПОСОБНОСТИ КОЖИ ПОГЛОЩАТЬ СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК, СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА, ДЕТОКСИКАЦИИ, ДЛЯ БОРЬБЫ С ВНЕШНЕЙ АГРЕССИЕЙ И БАКТЕРИЯМИ.

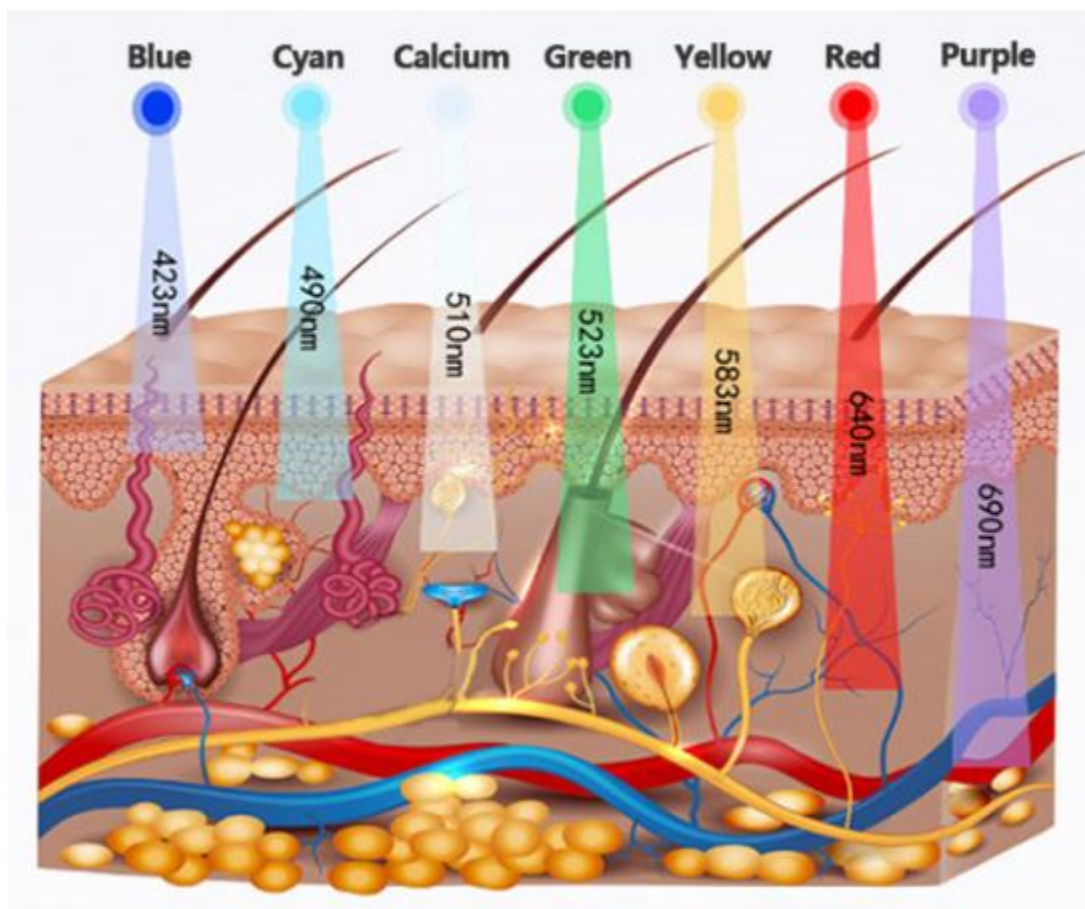

ПРИ СВЕТОТЕРАПИИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ВОЛНЫ С
КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

СВЕТОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ОБЛАДАЮТ
СПОСОБНОСТЬЮ ПРОНИКАТЬ В КОЖУ НА
ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ И ВЛИЯТЬ, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА, НА РАЗЛИЧНЫЕ
ПРОЦЕССЫ, ОКАЗЫВАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ.

МЕТОД ФОТОТЕРАПИИ / СВЕТОТЕРАПИИ

807 СВЕТОДИОДОВ БЕЗОПАСНО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

КАЖДЫЙ ЦВЕТ ПРОНИКАЕТ В КОЖУ

НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГЛУБИНУ И ИМЕЕТ СВОЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ



КРАСНЫЙ

длина волны 635 нм

- АКТИВИЗАЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И КРОВООБРАЩЕНИЯ
- СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА
- КРАСНЫЙ ЦВЕТ СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ NMF, ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ.
- СТИМУЛЯЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
- СТИМУЛИРУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ И СУЖЕНИЕ ПОР



ФИОЛЕТОВЫЙ

длина волны 415 нм

- СОЧЕТАЕТ ДЕЙСТВИЕ КРАСНОГО И СИНЕГО
- СНИЖЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УСПОКАИВАЕТ РАЗДРАЖЕННУЮ КОЖУ
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
- УМЕНЬШАЕТ КРАСНОТУ
- ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ РУБЦОВ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ



ОРАНЖЕВЫЙ

длина волны 605 нм

- ПОВЫШАЕТ ТОНУС ИКОЖИ
- УСКОРЯЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
- СТИМУЛИРУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
- УСКОРЯЕТ ДЕТОКСИКАЦИЮ
- УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА
- СОКРАЩАЕТ ПИГМЕНТАЦИЮ
- СТИМУЛИРУЕТ ДРЕНАЖ И УМЕНЬШАЕТ ОТЕЧНОСТЬ
- ПОВЫШАЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ КОЖИ СТРЕССАМ

МЕТОД ФОТОПОРАЦИИ

ДОСТАВКА СВЕТОВЫМИ ВОЛНАМИ В ГЛУБОКИЕ СЛОИ КОЖИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОСМЕТИКИ



- СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО АГЕНТА, ДОСТАВЛЯЯ В КОЖУ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ВОЛНЫ «ТЯНУТ» ЗА СОБОЙ ИНГРЕДИЕНТЫ ПРЕПАРАТОВ, НАНЕСЕННЫХ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ, ЧТО УСИЛИВАЕТ КОСМЕТИЧЕСКОЕ И КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.
- ПРОЦЕСС ФОТОПОРАЦИИ ПРОИСХОДИТ В СОЧЕТАНИИ С ФОТОТЕРАПИЕЙ И ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА УРОВНЕ КЛЕТКИ, ПОЭТОМУ НЕОЩУТИМ И ПРОЦЕДУРА ОЧЕНЬ КОМФОРТНА.

Артикул 1301321

КОЖА ПОГЛОЩАЕТ ДО 80% СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ И ЦВЕТА ЗАВИСИТ ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ,
ЧЕМ БОЛЬШЕ ДЛИНА ВОЛНЫ, ТЕМ ГЛУБЖЕ ОНА ПРОНИКАЕТ.

60

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА на 60%



ДВОЙНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ПРОБЛЕМУ



ВОЗДЕЙСТВИЕ
«ТОЧНО
В ЦЕЛЬ»



СОЧЕТАНИЕ С
КОЛЛАГЕНОВЫМИ,
ГИДРОГЕЛЕВЫМИ
МАСКАМИ



КОЛЛАГЕНОВАЯ
СЫВОРОТКА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С LED МАСКОЙ



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ

БЫСТРЫЙ СТАРТ ИЛИ ГДЕ У НЕГО КНОПКА



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР. ДЛЯ ЭТОГО ПОДКЛЮЧИТЕ USB КАБЕЛЬ ЗАРЯДКИ К РАЗЪЕМУ TYPE C НА ЗАРЯДНОЙ БАЗЕ ИЛИ НА САМОМ ПРИБОРЕ И К РАЗЪЕМУ TYPE A КОМПЬЮТЕРА, БЛОКА ПИТАНИЯ ИЛИ УСТРОЙСТВА POWER BANK.



УДАЛИТЕ ДЕКОРАТИВНУЮ КОСМЕТИКУ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДИТЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРАБА ИЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ.



НАНЕСИТЕ НА ЧИСТУЮ КОЖУ КОЛЛАГЕНОВУЮ СЫВОРОТКУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ФОТОПОРАЦИИ.



НАДЕНЬТЕ МАСКУ, ЗАФИКСИРУЙТЕ МАСКУ НА ЛИЦЕ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛАСТИЧНЫХ РЕМНЕЙ. УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД, ВКЛЮЧИТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ.



ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ, ЕЩЁ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ – НА ОРАНЖЕВЫЙ, И ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧИТСЯ (20 минут). КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ЦВЕТ ПОДСВЕТКИ ПО КРУГУ: КРАСНЫЙ-ФИОЛЕТОВЫЙ-ОРАНЖЕВЫЙ.

защитные
насадки для глаз

маска для лица

дополнительная
маска для
процедур
на шее



сенсорная кнопка
"вкл/выкл"

индикатор зарядки
аккумулятора

разъем зарядки
USB Type C



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ СРЕДСТВА НА МАСЛЯНОЙ / КРЕМОВОЙ ОСНОВЕ



ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТИП КОЖИ

ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕ КРАСОТЫ, РАЗРАБОТАННОЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

[НОРМАЛЬНАЯ](#)

[ЖИРНАЯ И СМЕШАННАЯ](#)

[СУХАЯ](#)

[ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ](#)

[УВЯДАЮЩАЯ](#)



НОРМАЛЬНАЯ
КОЖА

СВЕТОДИОДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ LED МАСКА
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ m 1040

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА "CLEANSING UNIVERSAL" ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ



4516074 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ

ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА, СМОЧЕННОГО НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ, ОЧИСТИТЕ ЛИЦО И ШЕЮ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДИТЕ ДЕМАКИЯЖ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ГУБ. МАНИПУЛЯЦИИ ПОВТОРЯЮТСЯ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ К КОЖУ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ ЧАЩЕ 2 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ



4516070 – 50 мл

1

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ «CLEANSING UNIVERSAL»

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСФОЛИАНТА НАНЕСИТЕ НА ОЧИЩЕННУЮ ОТ МАКИЯЖА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ, ИЗБЕГАЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ. АККУРАТНО ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ СУХИМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

3й ШАГ: ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КОЛЛАГЕНОВАЯ СЫВОРОТКА



4515119K – 6 x 5 мл

1



НАНЕСИТЕ СЫВОРОТКУ НА СУХУЮ, ЧИСТУЮ КОЖУ



РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕ СЫВОРОТКУ ПО КОЖЕ, СЛЕДУЯ НАПРАВЛЕНИЮ МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ. ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ.

1 ФЛАКОН = 1 ПРОЦЕДУРА

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ: КОРРЕКЦИЯ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, УСПОКАИВАЮЩЕЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА, СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ.

2



20

НАДЕНЬТЕ МАСКУ, УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД, ВКЛЮЧИТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ.

ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ, ЕЩЁ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ – НА ОРАНЖЕВЫЙ, И ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ЦВЕТОВ ПО КРУГУ.



4й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С БЕТА-
ГЛЮКАНОМ "SEA ICE SPRING"



4515939K- 30 мл

ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»



4516083 – 15 мл

ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ "БОТОХ - LIKE HYDRO
ACTIVE"



4516098 – 30 мл

1



ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ **20 - 25 МИНУТ**. ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, УДАЛИТЕ ОСТАТКИ РАСТВОРА.

2



НАНЕСИТЕ НА КОЖУ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ, ЛЕГКО ПОМАССИРУЙТЕ.

3



НАНЕСИТЕ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН С БОТО-ЭФФЕКТОМ "БОТОХ - LIKE HYDRO ACTIVE" ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА – ЭТО «ИДЕАЛЬНЫЙ» ТИП, КОТОРОМУ ХАРАКТЕРЕН ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС. ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ РАВНОВЕСИЕ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 h»



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА КОЖИ, НАСЫЩАЕТ ВЛАГОЙ И ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4516421K
КАРБОКСОТЕРАПИЯ
МАСКА ПУЗЫРЬКОВАЯ
"ДЕТОКС И СИЯНИЕ"



4515939K
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С
БЕТА-ГЛЮКАНОМ "SEA ICE
SPRING"

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

15-20
ПРОЦЕДУР

2-3 раза в
неделю

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ ПО 10
МИНУТ, ЗАТЕМ ПЕРЕЙДИТЕ
К ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ
КУРСУ.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ

В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.



ЖИРНАЯ И СМЕШАННАЯ КОЖА

СВЕТОДИОДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ LED МАСКА
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ m 1040

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА, ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516503 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИЦЕЛЛЯРНОГО ОЧИЩАЮЩЕГО ГЕЛЯ «UNIMATT + »

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕЛЯ НАНЕСИТЕ НА ЛИЦО И ШЕЮ, ИЗБЕГАЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ. СЛЕГКА ПОМАССИРУЙТЕ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ.

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК С ПРЕБИОТИКОМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516501 - 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТИРУЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОНИКА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ К КОЖУ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ ЧАЩЕ 2 РАЗ В НЕДЕЛЮ

САЛИЦИЛОВЫЙ ПИЛИНГ-СКАТКА С АНА
КИСЛОТАМИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ



4516512 – 250 мл

1

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
САЛИЦИЛОВЫЙ ПИЛИНГ «UNIMATT + »

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ СЛОЕМ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИЩЕННУЮ КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ. ПРЕПАРАТ НЕ НАНОСИТСЯ НА ОБЛАСТЬ ГЛАЗ
И ГУБ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ: 7-10 МИНУТ. ЗАТЕМ
ПРОВЕДИТЕ ЛЕГКИЙ МАССАЖ ПО ГЕЛЮ, СКАТЫВАЯ
ЕГО В КРУПИНКИ. ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА СМОЙТЕ
ТЕПЛОЙ ВОДОЙ, ПРОМОКНИТЕ КОЖУ САЛФЕТКОЙ.

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК С ПРЕБИОТИКОМ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516501 - 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТИРУЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОНИКА НАНЕСИТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА
И ШЕИ.

3й ШАГ: ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КОЛЛАГЕНОВАЯ СЫВОРОТКА



4515119K – 6 x 5 мл

1



НАНЕСИТЕ СЫВОРОТКУ НА СУХУЮ, ЧИСТУЮ КОЖУ



РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕ СЫВОРОТКУ ПО КОЖЕ, СЛЕДУЯ НАПРАВЛЕНИЮ МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ. ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ.

1 ФЛАКОН = 1 ПРОЦЕДУРА

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ: КОРРЕКЦИЯ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, УСПОКАИВАЮЩЕЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА, СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ.

2



20

НАДЕНЬТЕ МАСКУ, УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД, ВКЛЮЧИТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ.

ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ, ЕЩЁ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ – НА ОРАНЖЕВЫЙ, И ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ЦВЕТОВ ПО КРУГУ.



4й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ, ПРЕДОТВРАТИТЬ САЛЬНЫЙ БЛЕСК И ВОСПАЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА
«БОТОКС ЛАЙК» С
КОМПЛЕКСОМ COVA В ТРОХ



4501707K

СЫВОРОТКА - СЕБОКОРРЕКТОР
для сужения пор для жирной
и смешанной кожи



4516508 – 30 мл

КРЕМ-КОРРЕКТОР ПОР И
САЛЬНОГО БЛЕСКА для жирной
и смешанной кожи



4516506 – 30 мл

1



ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ, ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 20 - 25 МИНУТ. ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, УДАЛИТЕ ОСТАТКИ РАСТВОРА

2



НАНЕСИТЕ НА КОЖУ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ, ЛЕГКО ПОМАССИРУЙТЕ.

3



НАНЕСИТЕ КРЕМ-КОРРЕКТОР ПОР И САЛЬНОГО БЛЕСКА ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

ЖИРНАЯ КОЖА ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ В УВЛАЖНЕНИИ И СОХРАНЕНИИ БАЛАНСА. ЧТОБЫ КОЖА БЫЛА ЧИСТОЙ, МАТОВОЙ И ЗДОРОВОЙ, НЕОБХОДИМ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «UNIMATT +»



ПРЕПАРАТЫ СЕРИИ **UNIMATT +** НОРМАЛИЗУЮТ ПРОЦЕССЫ САЛОТДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ И БЛЕСК, УМЕНЬШАЮТ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, ВОССТАНАВЛИВАЮТ МИКРОБИОМ КОЖИ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЩАДЯЩИЙ УХОД.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4516421K
КАРБОКСОТЕРАПИЯ
МАСКА ПУЗЫРЬКОВАЯ
"ДЕТОКС И СИЯНИЕ"



4515939K
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С БЕТА-
ГЛЮКАНОМ "SEA ICE SPRING"

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

**15-20
ПРОЦЕДУР**

2-3 раза в
неделю

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ ПО 10
МИНУТ, ЗАТЕМ ПЕРЕЙДИТЕ
К ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ
КУРСУ.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ

В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.



СУХАЯ
КОЖА

СВЕТОДИОДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ LED МАСКА
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ m 1040

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ
ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА "CLEANSING
UNIVERSAL" ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ



4516074 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ

ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА, СМОЧЕННОГО
НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МИЦЕЛЛЯРНОЙ
ВОДЫ, ОЧИСТИТЕ ЛИЦО И ШЕЮ, А ТАКЖЕ
ПРОВЕДИТЕ ДЕМАКИЯЖ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ГУБ.
МАНИПУЛЯЦИИ ПОВТОРЯЮТСЯ ДО ПОЛНОГО
УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ К КОЖУ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ



4516070 – 50 мл

1

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ «CLEANSING UNIVERSAL»

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСФОЛИАНТА НАНЕСИТЕ НА ОЧИЩЕННУЮ ОТ МАКИЯЖА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ, ИЗБЕГАЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ. АККУРАТНО ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ СУХИМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

3й ШАГ: ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КОЛЛАГЕНОВАЯ СЫВОРОТКА



4515119K – 6 x 5 мл

1



НАНЕСИТЕ СЫВОРОТКУ НА СУХУЮ, ЧИСТУЮ КОЖУ



РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕ СЫВОРОТКУ ПО КОЖЕ, СЛЕДУЯ НАПРАВЛЕНИЮ МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ. ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ.

1 ФЛАКОН = 1 ПРОЦЕДУРА

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ: КОРРЕКЦИЯ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, УСПОКАИВАЮЩЕЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА, СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ.

2



20

НАДЕНЬТЕ МАСКУ, УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД, ВКЛЮЧИТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ.

ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ, ЕЩЁ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ – НА ОРАНЖЕВЫЙ, И ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ЦВЕТОВ ПО КРУГУ.



4й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ КОМФОРТ, НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА
«ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ» С
КОМПЛЕКСОМ ГИАЛОМАТРИКС



4501706K

ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»



4516083 – 15 мл

ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ "БОТОХ - LIKE HYDRO
ACTIVE"



4516098 – 30 мл

1

ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ **20 - 25 МИНУТ**. ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, УДАЛИТЕ ОСТАТКИ РАСТВОРА

2

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ, ЛЕГКО ПОМАССИРУЙТЕ.

3

НАНЕСИТЕ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН С БОТО-ЭФФЕКТОМ "БОТОХ - LIKE HYDRO ACTIVE" ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

СУХАЯ КОЖА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ, ЕЙ НЕОБХОДИМА ВЛАГА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕОБХОДИМ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 h»



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА КОЖИ, НАСЫЩАЕТ ВЛАГОЙ И ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УВЛАЖНЕННОСТИ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4515939K
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА С
БЕТА-ГЛЮКАНОМ "SEA ICE
SPRING"



4501706K
ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА
«ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ» С
КОМПЛЕКСОМ ГИАЛОМАТРИКС

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

15-20
ПРОЦЕДУР

2-3 раза в
неделю

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ ПО 10
МИНУТ, ЗАТЕМ ПЕРЕЙДИТЕ
К ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ
КУРСУ.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ

В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.





ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

СВЕТОДИОДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ LED МАСКА
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ m 1040

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ
ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА "CLEANSING
UNIVERSAL" ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ



4516074 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ

ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА, СМОЧЕННОГО
НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МИЦЕЛЛЯРНОЙ
ВОДЫ, ОЧИСТИТЕ ЛИЦО И ШЕЮ, А ТАКЖЕ
ПРОВЕДИТЕ ДЕМАКИЯЖ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ГУБ.
МАНИПУЛЯЦИИ ПОВТОРЯЮТСЯ ДО ПОЛНОГО
УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ К КОЖУ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ПИЛИНГ-СКАТКА С МОЛОЧНОЙ
КИСЛОТОЙ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ



4516066A – 250 мл

1

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПИЛИНГ С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ

НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ СЛОЕМ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИЩЕННУЮ КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ. ПРЕПАРАТ НЕ НАНОСИТСЯ НА ОБЛАСТЬ ГЛАЗ
И ГУБ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ: 5-7 МИНУТ. ЗАТЕМ
ПРОВЕДИТЕ ЛЕГКИЙ МАССАЖ ПО ГЕЛЮ, СКАТЫВАЯ
ЕГО В КРУПИНКИ. ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА СМОЙТЕ
ТЕПЛОЙ ВОДОЙ, ПРОМОКНИТЕ КОЖУ САЛФЕТКОЙ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УВЛАЖНЯЮЩЕГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ.

3й ШАГ: ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КОЛЛАГЕНОВАЯ СЫВОРОТКА



4515119K – 6 x 5 мл

1



НАНЕСИТЕ СЫВОРОТКУ НА СУХУЮ, ЧИСТУЮ КОЖУ



РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕ СЫВОРОТКУ ПО КОЖЕ, СЛЕДУЯ НАПРАВЛЕНИЮ МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ. ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ.

1 ФЛАКОН = 1 ПРОЦЕДУРА

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ: КОРРЕКЦИЯ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ, УСПОКАИВАЮЩЕЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА, СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ.

2



20

НАДЕНЬТЕ МАСКУ, УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД, ВКЛЮЧИТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ.

ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ, ЕЩЁ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ – НА ОРАНЖЕВЫЙ, И ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ЦВЕТОВ ПО КРУГУ.



4й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ КОМФОРТ, НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА «РЕГЕНЕРАЦИЯ»
С КОМПЛЕКСОМ ДЕЛИСЕНС



4501709K

ИНТЕНСИВНО
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
«HYALURON - HYDRO ACTIVE»



4516083 – 15 мл

ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ "БОТОХ - LIKE HYDRO
ACTIVE"



4516098 – 30 мл

1



ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 20 - 25 МИНУТ. ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, УДАЛИТЕ ОСТАТКИ РАСТВОРА

2



НАНЕСИТЕ НА КОЖУ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ, ЛЕГКО ПОМАССИРУЙТЕ.

3



НАНЕСИТЕ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН С БОТО-ЭФФЕКТОМ "БОТОХ - LIKE HYDRO ACTIVE" ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ, ЕЙ НЕОБХОДИМА ВЛАГА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕОБХОДИМ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «HARMONY»



ФОРМУЛЫ ПРЕПАРАТОВ «ГАРМОНИЯ» ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ, ПОМОГАЮТ ЗАМЕДЛИТЬ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЭФФЕКТИВНО БОРЮТСЯ С КУПЕРОЗОМ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4501709K
ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА «РЕГЕНЕРАЦИЯ»
С КОМПЛЕКСОМ ДЕЛИСЕНС



4516404K
УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
ПРОТИВ КУПЕРОЗА С
ПАНТЕНОЛОМ И
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

15-20
ПРОЦЕДУР

2-3 раза в
неделю

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ ПО 10
МИНУТ, ЗАТЕМ ПЕРЕЙДИТЕ
К ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ
КУРСУ.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ

В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.





УВЯДАЮЩАЯ КОЖА

СВЕТОДИОДНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ LED МАСКА
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ m 1040

.....

ПРОГРАММА КРАСОТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ




СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

1й ШАГ: ОЧИЩЕНИЕ / ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ
ОТ МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

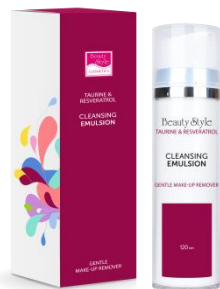

4516030 – 120 мл

1

ОЧИСТИТЕ КОЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОЧИЩАЮЩЕЙ ЭМУЛЬСИИ.

НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА
ВАТНЫМИ ДИСКАМИ ИЛИ РУКАМИ НА КОЖУ ЛИЦА
И ШЕИ. СЛЕГКА ПОМАССИРУЙТЕ ВЛАЖНЫМИ
КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ, ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО
СМОЙТЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЕ
МАНИПУЛЯЦИИ. ПРОМОКНИТЕ КОЖУ
САЛФЕТКОЙ.

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК



4516032 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИАЛУРОНОВОГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ.

2й ШАГ: ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ К КОЖУ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ



4516070 – 50 мл

1

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ «CLEANSING UNIVERSAL»

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСФОЛИАНТА
НАНЕСИТЕ НА ОЧИЩЕННУЮ ОТ МАКИЯЖА КОЖУ
ЛИЦА И ШЕИ, ИЗБЕГАЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ.
АККУРАТНО ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ
ДВИЖЕНИЯМИ СУХИМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ,
ЗАТЕМ ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА.

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК



4516032 – 120 мл

2

ЗАВЕРШИТЕ ОЧИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИАЛУРОНОВОГО ТОНИКА

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ
ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА НА КОЖУ ЛИЦА И
ШЕИ.

3й ШАГ: ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КОЛЛАГЕНОВАЯ СЫВОРОТКА



4515119K – 6 x 5 мл

1



НАНЕСИТЕ СЫВОРОТКУ НА СУХУЮ,
ЧИСТУЮ КОЖУ



РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЕ
СЫВОРОТКУ ПО КОЖЕ, СЛЕДУЯ
НАПРАВЛЕНИЮ МАССАЖНЫХ ЛИНИЙ.
ПОМАССИРУЙТЕ КРУГОВЫМИ
ДВИЖЕНИЯМИ КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ.

1 ФЛАКОН = 1 ПРОЦЕДУРА

КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ: КОРРЕКЦИЯ ПРИЗНАКОВ
СТАРЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ,
УВЛАЖНЕНИЕ, УСПОКАИВАЮЩЕЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА, СТИМУЛЯЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИИ.

2



20

НАДЕНЬТЕ МАСКУ, УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ КНОПКУ
ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД,
ВКЛЮЧИТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ.
ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ,
ЕЩЁ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ – НА ОРАНЖЕВЫЙ,
И ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ
ВЫКЛЮЧИТСЯ

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ ПРИВЕДЕТ К
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ ЦВЕТОВ ПО КРУГУ.



4й ШАГ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ КОМФОРТ, НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ АГРЕССИИ.

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА «ОМОЛОЖЕНИЕ»
С КОМПЛЕКСОМ ЮВИНИТИ И
МАТРИКСИЛОМ



4501708K

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА "МАТРИКСИЛ"



4515967K – 50 мл

ДНЕВНОЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
"МАТРИКСИЛ"



4515960K – 50 мл

1



ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО, РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ. ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ 20 - 25 МИНУТ. ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, УДАЛИТЕ ОСТАТКИ РАСТВОРА

2



НАНЕСИТЕ НА КОЖУ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ С МАТРИКСИЛОМ, ЛЕГКО ПОМАССИРУЙТЕ.

3



НАНЕСИТЕ ДНЕВНОЙ КРЕМ С МАТРИКСИЛОМ ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД – ЗАЛОГ УСПЕХА

КОЖЕ С ПРИЗНАКАМИ УВЯДАНИЯ НЕОБХОДИМЫ АНТИОКСИДАНТЫ И «СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ» ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ, ВЛАГА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ЧТОБЫ ЗАМЕДЛИТЬ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ И СОХРАНИТЬ КРАСОТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, НЕОБХОДИМ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД СЕРИЯ «МАТРИКСИЛ»



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТОВ С МАТРИКСИЛОМ, НАБЛЮДАЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН, ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ, КОЖА ОБРЕТАЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДОЙ КОЖИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ.

ЭКСПРЕСС – УХОД



4501707K
ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ
МАСКА «БОТОКС ЛАЙК» С
КОМПЛЕКСОМ COVA B TROX



4515938K
УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА
С УРСОЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
И МАТРИКСИЛОМ "MATRYX
S6 "

МАСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА ПОМОГУТ БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ КОЖИ, ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ.

КУРС ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

**15-20
ПРОЦЕДУР**

**2-3 раза в
неделю**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ

2 – 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ ПО 10
МИНУТ, ЗАТЕМ ПЕРЕЙДИТЕ
К ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ
КУРСУ.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД

**1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ**

**В ТЕЧЕНИЕ
1 МЕСЯЦА**

ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ 1
МЕСЯЦА ПОСЛЕ
ОСНОВНОГО КУРСА
КОРРЕКЦИИ.






сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE

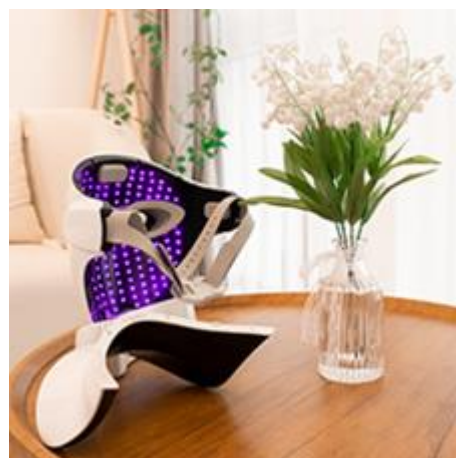

Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>