



Сиэс МЕДИКА

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрическая зубная щетка

CS Medica  
CS-20040-F, CS-20040-HБлагодарим Вас за приобретение  
зубной щетки CS Medica CS-20040

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуется правильного его заполнения: предоставления печати продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для гигиены полости рта.

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


**Предупреждение:** Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.

- Рекомендованный возраст для пользования данной зубной щеткой – от 18 лет.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
  - чувствительные зубы или десны;
  - недавно перенесенная стоматологическая хирургическая операция;
  - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.
- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного использования. Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед тем, как начать использование зубных паст с повышенным содержанием абразивных веществ.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Храните щетку в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Внимание:** Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Не используйте элементы питания, не указанные для данного устройства. Вставляйте элемент питания, соблюдая полярность.
- Извлекайте элемент питания из зубной щетки, если Вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени (от трех и более месяцев).
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

### 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

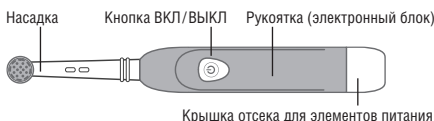

Дополнительно можно приобрести:  
Насадки CS Medica RP-040 для электрической зубной щетки CS-20040 (в комплекте 2 насадки).

### 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 000 возвратно-вращательных движений в минуту
- Умный таймер
- Щетка оснащена 2-х минутным умным таймером, который делает паузу каждые 30 секунд, чтобы сориентировать пользователя на равномерную очистку каждого из четырех квадрантов ротовой полости, и отключает прибор по прошествии двух минут – времени, рекомендованного стоматологами для чистки зубов.
- Эргономичный дизайн
- Защита корпуса от попадания влаги IPX7
- 1 насадка в комплекте
- До 120 дней работы от одного комплекта элементов питания

### 4. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Чтобы открыть крышку отсека для элементов питания, удерживая рукоятку в одной руке, возьмитесь указательным и большим пальцами другой руки за углубления на крышке и потяните ее.

Установите два алкалиновых элемента питания типа AA, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для элементов питания.

**Примечание:** Перед тем как вставлять батарею, насухо вытрите руки и корпус зубной щетки.

Плотно закройте крышку, совместив направляющие на крышке батарейного отсека и внутренней части корпуса.

**Примечание:** Если отсек для элемента питания закрыт неплотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.

- Срок службы элементов питания зависит от его модели, времени использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Замените батарею, когда движения щетки станут более слабыми.
- Время работы от одного комплекта элементов питания составляет около 120 дней при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемые элементы питания для демонстрационных целей, они могут проработать менее 120 дней.
- Рекомендуем использовать алкалиновые (щелочные) элементы питания типа AA.

### 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Установите насадку на рукоятку, совместив направляющие на насадке и металлическом стержне рукоятки. Прижмите насадку до упора.

Для того чтобы снять насадку, просто потяните ее вверх.

**Примечание:** Не прилагайте излишних усилий при установке насадки.


### 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**1. Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого введите щетку в ротовую полость.**

**Примечание:** Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

**2. Включите питание, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.** Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.

### Правильная чистка зубов:

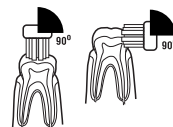

**Поверхность зуба и окклюзионная поверхность.** Во время чистки держите щетину под углом 90° к поверхности зуба.



**Граница между зубами и десной:** во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.

**Задняя сторона резцов или область неровно расположенных зубов:** Вертикально прижимайте головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.

- 3. Рекомендованное время чистки зубов – не менее 2 минут. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить зубную щетку.
- 4. Снимите насадку и тщательно промойте ее, как указано в пункте «Очистка» настоящего руководства по эксплуатации.

### 7. ОЧИСТКА

#### Очистка насадки

1. Снимите насадку с рукоятки.
2. Промойте насадку под углом к струе воды через отверстие 1. Вода, пройдя по насадке, выдет через отверстие 2.



Промойте насадку под углом к струе воды через отверстие в головке насадки во включенном состоянии. Вода, пройдя по головке насадки, выдет через это же отверстие.

#### Очистка рукоятки

Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющем средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью. Не погружайте щетку в воду.

Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель.

Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства.

### 8. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой, не погружайте ее в воду на длительное время.
- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства.
- После каждого использования промывайте щетину водой.
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Храните щетку в недоступном для детей месте.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

### 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Наименование</b>	Электрическая зубная щетка CS Medica CS-20040-F, CS-20040-H
<b>Модель</b>	1,2 Вт
<b>Потребляемая мощность</b>	2 алкалиновых (щелочных) элемента питания типа AA
<b>Источник питания</b>	Около 120 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты)
<b>Время работы от одного элемента питания</b>	6 000
<b>Количество возвратно-вращательных движений в минуту</b>	6 000
<b>Условия эксплуатации:</b>	температура относительная влажность
	От 5 до 40 °C
	От 0 до 90%
<b>Условия хранения и транспортирования:</b>	температура относительная влажность
	От -10 до 50 °C
	От 10 до 50%
	От 70 до 106 кПа
<b>Масса</b>	84 г
<b>Габаритные размеры</b>	218 x 40 x 29,4 мм

### Срок службы

Рюкзак (электронный блок) – 2 года, Насадка – 3 месяца. Элементы питания – устанавливаются производителем этих элементов.

### Комплект поставки

Рюкзак (электронный блок) с насадкой, комплект алкалиновых элементов питания типа AA (2 шт.), руководство по эксплуатации с гарантийным талоном



Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза



Обратитесь к руководству по эксплуатации



Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения твердых предметов и воды



XXXX

Возможности утилизации использованной упаковки. XX – цифровое обозначение материала упаковки. YYYU – буквенное обозначение материала упаковки



Температурный диапазон / Диапазон влажности / Ограничение атмосферного давления



Знак соответствия Директиве ЕС

03 Поливинилхлорид  
22 Бумага  
PAP Бумага  
PVC Поливинилхлорид

### 9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на упаковке прибора и имеет структуру YYMMNNNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNNN – порядковый номер изделия, а также в LOT номере, который расположен в отсеке для элементов питания и имеет структуру YYMMNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер партии.

### 10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зубная щетка перестала работать, возможно, батарея разрядилась. В случае если даже после замены батарей зубная щетка не работает, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. Обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания (адреса центров технического обслуживания указаны в конце данного руководства).

Проблема	Возможная причина	Способ решения
Зубная щетка не включается.	Элемент питания исчерпал свой ресурс.	Установите новый элемент питания (см. п. 4).
Движения головки щетки отсутствуют, слишком медленные и слабые.	Вы слишком сильно прижимаете щетину к поверхности зубов.	Во время чистки слегка касайтесь щетиной поверхности зубов.



### Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Сроки гарантии:**  
**рюкзак (электронный блок) – 2 года**  
**насадка – 3 месяца**



**Сиэс МЕДИКА**

Произведено по заказу и под контролем ООО «Сиэс Медика», импортера и уполномоченного представителя производителя, официального представителя торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9  
**Тел.:** (495) 363–16–52 • **E-mail:** csinfo@csmedica.ru  
**www.csmedica.ru, siessmedika.rf**

### Часы работы:

пн – пт: с 9:30 до 18:00 (без перерыва на обед), сб, вс и праздничные дни – выходной

### Центр технического обслуживания в Москве:

ООО «Сиэс Медика ТехЭксперт»  
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 14 (м. «Маяковская») **Тел/факс:** (499) 995-11-32 (многоканальный) **E-mail:** cstechexpert@mail.ru **www.cstechexpert.ru**

### Часы работы Центра технического обслуживания в Москве:

пн – пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед), сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед), вс и праздничные дни – выходной

### Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

### Производитель:

NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD  
(НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)  
No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China.  
(№ 239 Цзянху Род, Зоун С Гонтанг Индастриал Парк, Цзянбэи Дистрикт, Нинбо, Китай)  
Сделано в Китае

### Адреса региональных торговых представительств и центров технического обслуживания продукции CS Medica в России

- Арзамас, ООО «Сиэс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arg\_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «Сиэс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs\_medicarm@mail.ru
- Ангелгск, ООО «Сиэс Медика Поморье», ул. Суворова, 2, оф. 7, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «Сиэс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, корп.5 тел.: (8512) 38-20-78, csmedica30@mail.ru
- Барнаул, ООО «Сиэс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «Сиэс Медика Белгород», ул. Архирейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, cs-belmed@mail.ru
- Благовещенск, ООО «Сиэс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «Сиэс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «Сиэс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №11, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «Сиэс Медика Северо-Запад», ул. Мерещикова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «Сиэс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «Сиэс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «Сиэс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф. 24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «Сиэс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «Сиэс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, (473) 255-08-71, (910) 732-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «Сиэс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «Сиэс Медика Ярославль», ул. Степанова, дом 5, оф. 105, (4932)26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «Сиэс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru

- Иркутск, ООО «Сиэс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, (3952) 43-69-05 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО « Сиэс Медика Чебоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@marl-el.ru
- Казань, ООО «Сиэс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «Сиэс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65, 8 (963) 737-79-94, kalininград@csmedica.ru
- Калуга, ООО «Сиэс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica\_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «Сиэс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemertov@csmedica.ru
- Киров, ООО «Сиэс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, корп. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru
- Кострома, ООО «Сиэс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф. 7, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «Сиэс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omrgon@kubannet.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «Сиэс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «Сиэс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «Сиэс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «Сиэс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «Сиэс Медика Махачкала», ул. Богатырева, д. 11а, корп. 119, подъезд № 5, тел.: (928) 941-00-20, director5@csmedica.ru
- Минеральные Воды, ООО «Сиэс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «Сиэс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Колынский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 55-52-43, murtmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «Сиэс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «Сиэс Медика Тюмень», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, мо.: (982) 970-32-23, nvk@csmedica.ru
- Нижний Новгород, ООО «Сиэс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «Сиэс Медика Кемерово», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464-05-18 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, ООО «Сиэс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «Сиэс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedica\_omsk@mail.ru
- Орел, ООО «Сиэс Медика Орел», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «Сиэс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «Сиэс Медика Подмосковье», Московская обл., Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, spsdmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «Сиэс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «Сиэс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «Сиэс Медика Карелия», ул. Маршала Мерещикова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «Сиэс Медика Северо-Запад», ул. Леопа Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Росошь, ООО «Сиэс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru

- Ростов-на-Дону, ООО «Сиэс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85, (863) 231-03-86, (863) 231-04-85, (863) 231-04-86, (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «Сиэс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «Сиэс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 405, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru Сервисно-консультационный центр, ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 406, тел.: (846) 254-14-19, csmedica-samara@sama.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «Сиэс Медика Северо-Запад», Малодетскоельскый пр-т, д. 36, тел.: (812) 467-46-26, csnw@csmedica.ru Сервисно-консультационный центр, Малодетскоельскый пр-т, д. 36, лит. Н, тел. (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «Сиэс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «Сиэс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, saratov@csmedica.ru
- Саров, ООО «Сиэс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arg\_cs1@bk.ru, arg\_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцовоой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68, (978)137-90-68, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «Сиэс Медика Смоленск», ул.2-я Линия Красноармейской Слободы, д. 5, тел.: (4812) 35-85-88, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «Сиэс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs\_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «Сиэс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, оф.3 тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicav@mail.ru
- Сургут, ООО «Сиэс Медика Тюмень», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №3, тел.: (3462) 25-46-17, (922) 074-32-72 surgut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «Сиэс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «Сиэс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «Сиэс Медика Самара», б-р Гаг. д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tlt@csmedica.ru
- Томск, ООО «Сиэс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-70-35, info\_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «Сиэс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «Сиэс Медика Тюмень», ул. Амурская, д.4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, (919) 944-10-11, cstuytmen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «Сиэс Медика Иркутск», ул. Терешковской, д. 26, пом. 23, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «Сиэс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.ulf@yandex.ru
- Уфа, ООО «Сиэс Медика Башкортостан», ул. Наталья Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «Сиэс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Владивостокская, д.16, оф.116, тел.: (4212) 70-12-65, csmedica\_hab@mail.ru
- Чебоксары, ООО «Сиэс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «Сиэс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «Сиэс Медика Вологда», пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, moe.(921)834-78-65 csmedicacheropovets@rambler.ru
- Чита, ООО «Сиэс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чаплова, д. 124, оф. 116, тел.: (3022) 21-05-05, 8 (914) 368-56-05, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «Сиэс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «Сиэс Медика Ярославль», ул. Сальткова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 cs-yar76@yandex.ru

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Дата обращения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Заключение мастера, выполненные работы \_\_\_\_\_

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись или штамп мастера \_\_\_\_\_

Работу принял \_\_\_\_\_ (подпись клиента).

## 11. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03335/21 от 27.04.2021 г. Срок действия до 26.04.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.08799/21 от 16.07.2021. Срок действия до 15.07.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».