

**ТВОЙ БЬЮТИ  
УХОД!**



**Аппарат  
для ультразвуковой  
чистки лица KT-3123**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	5
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица .....	6
Подготовка к работе и использование.....	9
Чистка и обслуживание .....	14
Уход и хранение .....	15
Устранение неполадок .....	15
Технические характеристики .....	18
Меры предосторожности.....	19
Другие товары Kitfort .....	22



## Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица КТ-3123 предназначен для удаления омертвевших клеток кожи, устранения жирного блеска и черных точек, способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу.

Ультразвуковая чистка воздействует на кожу 3 способами:

- механическим — звуковые волны создают давление на ткани, массируют их, усиливая проводимость клеточных структур;
- термическим — тепло звуковых колебаний разогревает кожу на 1–2 °С, поры расширяются, кожа становится мягкой и податливой, улучшается кровообращение;
- физико-химическим — во время процедуры на лицо наносится лечебный или косметологический гель или сыворотка. Воздействие ультразвука способствует их проникновению в слои кожи, таким образом, обменные процессы в клетках протекают быстрее.

Устройство работает в 4 режимах:

- микромассаж при высокочастотном ультразвуке;
- микромассаж при низкочастотном ультразвуке;
- очищение;
- питание.

Похлопывающие движения лопатки в режиме «Микромассажа» создают эффект микромассажа, который улучшает тон кожи, упругость и разглаживает морщины.

Хромотерапия (синий свет) оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие, обладает антибактериальными свойствами, помогает уменьшить раздражение кожи. Синий свет включается автоматически во всех режимах.

Использование аппарата для ультразвуковой чистки лица не уступает по эффективности профессиональным процедурам.

Комплексный подход позволяет максимально улучшить состояние кожи: очистить разные слои эпидермиса от загрязнений, а также нормализовать кровообращение и выровнять тон кожи.

Устройство имеет небольшие габариты: его удобно положить в сумку, взять с собой в путешествие.


У устройства класс защиты IPX5. Это означает, что устройство защищено от водяных потоков с любого направления. Имейте в виду, что база для зарядки и шнур не устойчивы к влаге.

### Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. База для зарядки — 1 шт.
4. Шнур Micro-USB — 1 шт.
5. Сумка — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально



## Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица

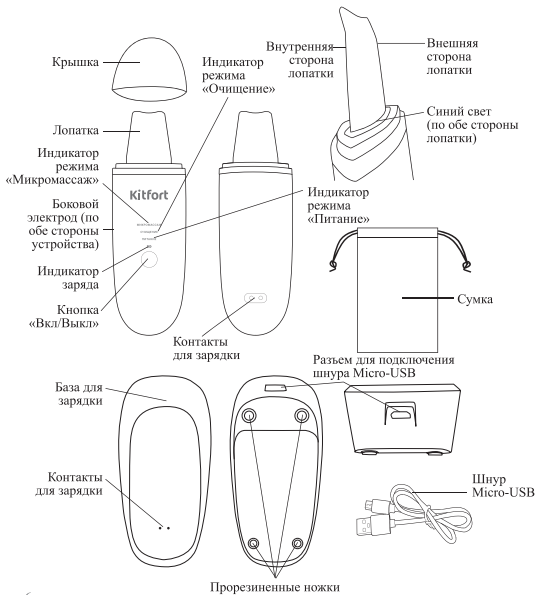

Включить, выключить и выбрать режим работы аппарата для ультразвуковой чистки лица можно при помощи **кнопки «Вкл/Выкл»**:

- одно нажатие — включение устройства в режиме ожидания;
- два нажатия — режим «Микромассаж» при высокочастотном ультразвуке;
- три нажатия — режим «Микромассаж» при низкочастотном ультразвуке;
- четыре нажатия — режим «Очищение»;
- пять нажатий — режим «Питание»;
- шесть нажатий — режим ожидания.

Для отключения устройства удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.

Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» при включении устройства и при переключении режимов сопровождается коротким звуковым сигналом, а при выключении — длинным звуковым сигналом.

**Индикаторы режимов работы** на передней части корпуса устройства информируют о режиме ожидания и режиме работы:

- все индикаторы плавно мигают — включен режим ожидания;
- горит индикатор «Микромассаж» — включен режим «Микромассаж» при высоком ультразвуке;
- мигает индикатор «Микромассаж» — включен режим «Микромассаж» при низком ультразвуке;
- горит индикатор «Очищение» — включен режим «Очищение»;
- горит индикатор «Питание» — включен режим «Питание».

**Индикатор заряда** во время работы устройства мигает, если аккумулятор разряжен.

**Индикатор заряда** во время зарядки устройства:

- мигает — устройство заряжается;
- горит непрерывно — устройство полностью заряжено.

При низком уровне после 5 звуковых сигналов устройство отключится. Синий свет включается автоматически во всех режимах.



**Kitfort**

**Режимы работы**

**Режим «Микромассаж» при высокочастотном ультразвуке** способствует:

- разглаживанию мелких морщин;
- повышению тонуса мимических мышц лица;
- устранению отечности;
- выравниванию тона лица.

**Внимание!** Перед использованием наносите на кожу питательный крем, сыворотку или специальный гель для проведения ультразвуковых процедур.

**Режим «Микромассаж» при низкочастотном ультразвуке** благодаря похлопывающим движениям лопатки способствует проникновению уходовых средств в более глубокие слои кожи.

**Внимание!** Перед использованием наносите на кожу питательный крем, сыворотку или специальный гель для проведения ультразвуковых процедур.

**Режим «Очищение»** способствует:

- удалению загрязнений с поверхности кожи;
- устранению комедонов и загрязнений из пор;
- уменьшению размеров пор;
- улучшению тона кожи;
- выравниванию кожного рельефа.

**Внимание!** Перед использованием наносите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, пилинг-гель, тоник или просто смочите кожу водой.

**Режим «Питание»** способствует:

- повышению тонуса и упругости кожи;
- уменьшению глубины морщин;
- улучшению тона кожи;
- уменьшению отечности.

**Внимание!** Перед использованием наносите на кожу питательный крем, сыворотку или специальный гель для проведения ультразвуковых процедур.



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте устройство, базу для зарядки и шнур Micro-USB из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство и базу для зарядки влажной, а затем сухой тканью. Тщательно продезинфицируйте лопаточку: ее можно протереть ватным спонжем, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

### Зарядка аккумулятора

Если аккумулятор полностью разрядится, при включении аппарата для ультразвуковой чистки лица в режимах «Микромассаж», «Очищение», «Питание» после 10 секунд работы индикаторы режимов погаснут, индикатор заряда будет мигать, прозвучат 5 звуковых сигналов, и устройство выключится.

Подключите шнур Micro-USB к разъему на базе для зарядки, а затем к источнику питания. Убедитесь, что контакты на базе и устройстве чистые и сухие. При необходимости протрите спиртовой салфеткой. Поместите устройство на базу для зарядки таким образом, чтобы контакты для зарядки на задней части корпуса устройства и на базе для зарядки совпали.

Заряжайте устройство в течение 2,5–3 часов.

Во время зарядки индикатор заряда мигает. При полной зарядке аккумулятора индикатор заряда будет гореть непрерывно.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

### Использование

1. Перед началом процедуры необходимо удалить загрязнения и макияж с кожи лица. При использовании аппарата для ультразвуковой чистки кожа лица должна быть влажной. В зависимости от выбранного режима нанесите на кожу гель, сыворотку или смочите кожу водой, чтобы лопатка лучше скользила и не повреждала кожу.
2. Снимите крышку с устройства.
3. Возьмите устройство в руку, зажав боковые электроды.
4. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При включении устройства раздастся один звуковой сигнал. Устройство включится в режиме ожидания.



Индикаторы режимов на передней части корпуса устройства будут плавно мигать. Нажатие на кнопку при переключении режимов сопровождается одиночным звуковым сигналом. Выберите необходимый режим работы, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»:

- один раз — режим «Микромассаж» при высокочастотном ультразвуке;
  - два раза — режим «Микромассаж» при низкочастотном ультразвуке;
  - три раза — режим «Очищение»;
  - четыре раза — режим «Питание»;
  - пять раз — режим ожидания.
5. Чтобы выключить устройство, необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. При выключении прозвучит длинный звуковой сигнал.

**Примечание.** Аппарат ультразвуковой чистки лица не обладает встроенной памятью. При повторном включении устройство начнет работать в режиме ожидания независимо от того, в каком режиме вы работали ранее.

#### *Режим «Микромассаж» при высокочастотном ультразвуке*

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу питательный крем, сыворотку или специальный гель для проведения ультразвуковых процедур.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 2 раза. Частота ультразвуковых колебаний — высокая.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица в течение 10 минут. Затем умойте лицо теплой водой.




**Режим «Микромассаж» при низкочастотном ультразвуке**

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу питательный крем, сыворотку или специальный гель для проведения ультразвуковых процедур.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 3 раза. Частота ультразвуковых колебаний — низкая.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица в течение 10 минут. Затем умойте лицо теплой водой.



**Режим «Очищение»**

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу специальный гель для проведения ультразвуковых процедур, пилинг-гель, тоник или просто смочите кожу водой.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 4 раза. Частота ультразвуковых колебаний — высокая.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внутренней стороной лопатки к коже лица. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в чистке, в течение 10 минут. Затем умойте лицо теплой водой.

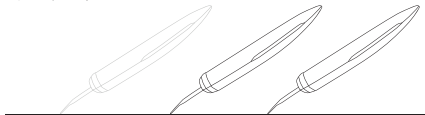



### *Режим «Питание»*

1. Умойте лицо теплой водой. Удалите с кожи лица загрязнения и макияж.
2. Нанесите на кожу питательный крем, сыворотку или специальный гель для проведения ультразвуковых процедур.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» 5 раз. Частота ультразвуковых колебаний — низкая.
4. Приложите устройство под углом 30–45° к коже лица внешней стороной лопатки. Слегка надавите на кожу и продвигайте устройство как показано на рисунке по зонам лица, нуждающимся в уходе, в течение 10 минут. После процедуры умойте лицо теплой водой.



### **Советы**

У устройства срабатывает автоотключение через 10 минут работы. При этом звучит 5 звуковых сигналов, и устройство выключается.

У устройства класс защиты IPX5. Это означает, что устройство защищено от водяных потоков с любого направления.



**Внимание!** База для зарядки и шнур Micro-USB не устойчивы к влаге.

Во время использования не задерживайтесь на одном участке лица, вы должны медленно продвигать лопатку по коже в направлении, как показано на рисунке.



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, прорабатывая устройством обе стороны лица по горизонтали



Для очищения зоны вокруг носа используйте искривленный угол лопатки



Двигайтесь от шеи вверх по лицу, действуя прибором вертикально. Такое направление движений стимулирует естественный лимфатический дренаж организма



Используйте вырезанную среднюю часть лопатки, чтобы очистить область подбородка под нижней губой вертикальными короткими движениями



Если у вас на лице есть воспаление, нужно подождать, пока воспаление пройдет, и только потом пользоваться устройством.

Рекомендуется пользоваться устройством 2–3 раза в неделю. Не пользуйтесь устройством повторно в течение одного дня.

Перед использованием убедитесь, что лопатка и корпус устройства чистые.

Запрещается пользоваться устройством при следующих показаниях:

- онкологические заболевания кожи;
- имплантированный кардиостимулятор;
- нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
- нарушения свертываемости крови;
- нарушения кожной чувствительности;
- наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- эпилепсия;
- тромбоз;
- беременность;
- выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
- индивидуальная непереносимость электрического тока.

Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:

- глаза;
- область над сердцем и щитовидной железой;
- половые органы;
- над силиконовыми имплантатами;
- области с гелевой контурной пластикой.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Очищайте лопатку перед и после каждого использования: продезинфицируйте лопатку спонжем, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не используйте для чистки лопатки жесткие моющие средства и абразивные ткани. Протирайте спиртовой салфеткой контакты на базе и устройстве.

## Уход и хранение

Храните аппарат для ультразвуковой чистки лица в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С.

Аккумулятор аппарата для ультразвуковой чистки литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить устройство в течение 1,5 часов. Таким образом, устройство будет заряжено примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 4–5 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса устройства и базы для зарядки, в область кнопки «Вкл/Выкл», в область разъема шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB, на контакты для зарядки.

Храните и устройство в сумке, которая идет в комплекте.

## Устранение неполадок

**Аппарат для ультразвуковой чистки не включается, индикация не горит, нет ультразвуковой вибрации**

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство в течение 2,5–3 часов

**Аппарат для ультразвуковой чистки перестал работать**

Возможная причина	Решение
По истечении 10 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»



**Аппарат для ультразвуковой чистки не заряжается, индикация не горит**

Возможная причина	Решение
Слабый ток питания	Подключите устройство к другому источнику питания
Поврежден шнур Micro-USB	Обратитесь к производителю за новым шнуром Micro-USB или приобретите такой же шнур
Повреждена база для зарядки	Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности
Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем на базе для зарядки, в разъем компьютера или пауэрбанка	Проверьте соединение шнура Micro-USB с разъемом базы для зарядки, разъемом компьютера или пауэрбанка
Компьютер или пауэрбанк выключены	Включите компьютер или пауэрбанк
Вы не совместили контакты для зарядки устройства с контактами для зарядки базы для зарядки	Совместите контакты для зарядки устройства с контактами для зарядки базы для зарядки

**Нет ультразвуковой вибрации**

Возможная причина	Решение
Вы слишком сильно давили на лопатку во время использования	Устройство вышло из строя. Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправности



### Лопатка нагревается во время использования

Возможная причина	Решение
Лопатка слегка нагревается из-за воздействия ультразвуковых колебаний	Это нормально и не является неисправностью

### Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы не смазали кожу гелем или сывороткой	До процедуры или во время процедуры смазывайте кожу гелем или сывороткой, чтобы не травмировать верхние слои кожи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB  $\approx$  5 В, 1 А
2. Мощность: 2,2 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,6 А\*ч (2,22 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 24000 Гц  $\pm$ 13%
6. Уровень шума:  $\leq$ 64 дБ
7. Длина волны синего света: 450 нм  $\pm$ 1%
8. Время зарядки: 2,5–3 ч
9. Время работы от аккумулятора: около 60 мин
10. Количество режимов работы: 4
11. Автоотключение: через 10 мин
12. Длина шнура Micro-USB: 1 м
13. Размер устройства: 52  $\times$  22  $\times$  172 мм
14. Размер упаковки: 90  $\times$  210  $\times$  77 мм
15. Вес нетто: 0,24 кг
16. Вес брутто: 0,47 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Пефэкт Айдиа Текнолэджи Ко., Лтд. Билдинг 1, Фухуа Индастриэл Парк, Танвэй, Фуюн, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства и базы для зарядки, в область кнопки «Вкл/Выкл», в область разъема шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB, на контакты для зарядки не считается гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Запрещается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица при следующих показаниях:



**Kitfort**

- онкологические заболевания кожи;
  - имплантированный кардиостимулятор;
  - нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
  - нарушения свертываемости крови;
  - нарушения кожной чувствительности;
  - наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
  - эпилепсия;
  - тромбофлебит;
  - беременность;
  - выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
  - индивидуальная непереносимость электрического тока.
4. Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:
    - глаза;
    - область над сердцем и щитовидной железой;
    - половые органы;
    - над силиконовыми имплантатами;
    - области с гелевой контурной пластикой.
  5. Перед подключением базы для зарядки к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
  6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
  7. Не заряжайте устройство, если шнур Micro-USB поврежден. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
  8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных

- за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  10. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите базу для зарядки от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
  11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  13. Храните устройство в недоступных детям местах.
  14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства и базы для зарядки, в область кнопки «Вкл/Выкл», в область разъема шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB, на контакты.
  16. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87