

# Искусство очищения кожи!



Вакуумный  
очиститель кожи  
КТ-3125

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство вакуумного очистителя кожи .....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12

## Общие сведения

Вакуумный очиститель кожи КТ-3125 поможет очистить кожу от черных точек, сальных пробок и других загрязнений в порах. Также благодаря набору насадок с помощью вакуумного очистителя кожи можно провести процедуру микродермабразии. Вакуумная чистка кожи стимулирует кровообращение и регенерацию кожи, что улучшает цвет лица и убирает неглубокие морщины.

Вакуумный очиститель кожи имеет 3 уровня силы всасывания для очищения разного типа кожи (сухой, нормальной и жирной) и функцию вибрации.

В комплекте к устройству предусмотрено 6 видов насадок. Большая круглая насадка нужна для удаления загрязнений из пор крупных участков кожи, например, Т-зоны. Эта насадка подойдет для удаления особенно стойких загрязнений кожи. Малая круглая насадка подходит для проведения вакуумной чистки чувствительных участков кожи на лице. Для удаления загрязнений на труднодоступных участках кожи лица, таких как крылья носа и уголки губ, предназначена овальная насадка.

Использование микрокристаллических насадок способствует отшелушиванию поверхностного слоя кожи, который состоит из омертвевших клеток, а также полировке кожи. Эти насадки помогают в борьбе с морщинами, пигментными пятнами и растяжками. Микрокристаллические насадки разного размера подходят для очистки тела, лица и труднодоступных участков кожи лица.

Вакуумный очиститель кожи работает от аккумулятора и имеет небольшие габариты, поэтому его удобно брать с собой в поездки. В комплекте есть сумка, в которой вы можете хранить устройство с аксессуарами, чтобы не потерять их.




Ухаживать за устройством просто, так как в комплекте предусмотрены запасные фильтры и набор уплотнительных колец.

## Комплектация

1. Вакуумный очиститель кожи с двумя большими уплотнительными кольцами — 1 шт.
  - Переходник с фильтром и малым уплотнительным кольцом — 1 шт.
2. Запасной фильтр — 5 шт.
3. Запасное большое уплотнительное кольцо — 4 шт.
4. Запасное малое уплотнительное кольцо — 2 шт.
5. Большая круглая насадка — 1 шт.
6. Малая круглая насадка — 1 шт.
7. Овальная насадка — 1 шт.
8. Малая микрокристаллическая насадка — 1 шт.
9. Средняя микрокристаллическая насадка — 1 шт.
10. Большая микрокристаллическая насадка — 1 шт.
11. Сумка — 1 шт.
12. Шнур Micro-USB — 1 шт.
13. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
14. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство вакуумного очистителя кожи

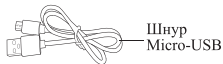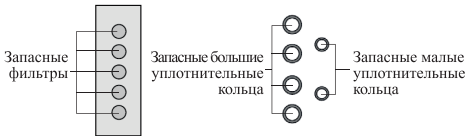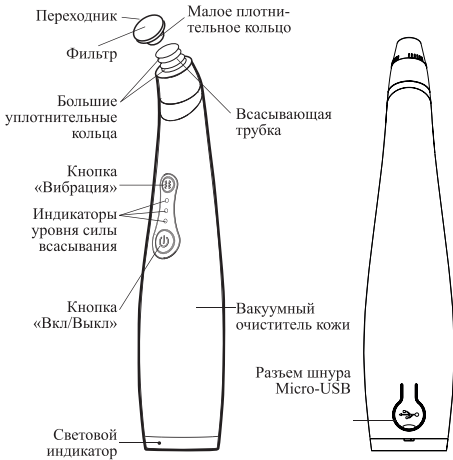



**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и отключает устройство, а также регулирует уровень силы всасывания. Для включения и выключения устройства нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд. При включении по умолчанию выбран 1 уровень силы всасывания. Каждое последующее нажатие циклически переключает уровни силы всасывания и режим ожидания. В режиме ожидания все индикаторы мигают, устройство не работает в режиме вакуумной чистки, вибрация выключена. После 15 минут бездействия в режиме ожидания устройство отключается.

Вакуумный очиститель кожи имеет 3 уровня силы всасывания: уровень 1 — для сухой и чувствительной кожи, а также при проведении чистки чувствительных участков кожи, уровень 2 — для нормальной кожи, уровень 3 — для жирной кожи. Чем больше уровень, тем сильнее сила всасывания. В зависимости от выбранного уровня силы всасывания загораются от одного до трех индикаторов над кнопкой «Вкл/Выкл».

**Кнопка «Вибрация»** включает и отключает функцию вибрации.

При нажатии на кнопки устройство подает звуковой сигнал и **световой индикатор мигает белым**. Также световой индикатор мигает красным при низком заряде аккумулятора и во время зарядки, горит зеленым, когда устройство полностью заряжено.

**Большая круглая насадка** нужна для удаления загрязнений на любом участке лица, кроме области вокруг глаз. Эта насадка подойдет для удаления особенно стойких загрязнений кожи.

**Малая круглая насадка** предназначена для проведения вакуумной чистки чувствительных участков кожи на лице.

**Овальная насадка** подходит для удаления загрязнений на труднодоступных участках кожи лица, таких как крылья носа и уголки губ.

Во время проведения вакуумной чистки кожи с применением микрокристаллических насадок происходит процедура микродермабразии — удаляется поверхностный слой кожи, состоящий из омертвевших клеток, а также происходит полировка кожи. **Большая микрокристаллическая насадка** используется для очищения кожи тела, помогает бороться с растяжками и небольшими рубцами. **Средней микрокристаллической насадкой** проводят чистку лица, кроме области вокруг глаз. Помимо проведения процедуры микродермабразии средняя микрокристаллическая насадка используется при борьбе с морщинами и небольшими пигментными пятнами. **Малой микрокристаллической насадкой** удобно удалять загрязнения на труднодоступных участках кожи лица, таких как крылья носа и уголки губ.

**Фильтр** на переходнике предназначен для предотвращения попадания грязи и омертвевших частиц кожи в устройство.

В комплекте предусмотрены запасные фильтры и набор уплотнительных колец.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.

Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно продезинфицируйте и просушите насадки: протрите их ватным диском, смоченным в хлорексидине или 70% растворе спирта. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

### Зарядка аккумулятора

Если при включении устройства световой индикатор мигает красным, зарядите вакуумный очиститель кожи. Положите устройство на устойчивую сухую ровную горизонтальную поверхность, подключите шнур Micro-USB к разъему устройства, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, не менее 0,5 А. Также вы можете заряжать устройство через компьютер или пауэрбанк. Во время зарядки световой индикатор мигает красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор горит зеленым. После зарядки отсоедините шнур Micro-USB сначала от источника питания, затем от устройства.

Если устройством не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Время полной зарядки составляет 1,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Заряжайте прибор не более 1,5 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому лучше хранить устройство наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 45 минут. При длительном хранении устройства подзаряжайте аккумулятор наполовину раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 50 °С. Если устройство перевозится или доставляется до места эксплуатации в зимний период, то перед зарядкой подождите, пока устройство нагреется до комнатной температуры.

**Примечание.** Вы можете использовать устройство во время зарядки.

### Использование

1. Перед началом процедуры удалите макияж и тщательно очистите кожу.
2. Раскройте поры удобным вам способом. Например, положите на лицо горячее полотенце на 5 минут.
3. Убедитесь, что насадки и фильтр чистые, на всасывающую трубку и переходник установлены уплотнительные кольца, а сам переходник плотно вставлен в всасывающую трубку.



4. Установите одну из насадок: наденьте насадку на всасывающую трубку до упора.
5. Для включения вакуумного очистителя кожи нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Вкл/Выкл». Загорится световой индикатор. По умолчанию устройство начнет работать на первом уровне силы всасывания.
6. Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл» для изменения силы всасывания.
7. Нажмите на кнопку «Вибрация», если хотите включить функцию вибрации. Вибрация работает не зависимо от работы устройства в режиме вакуумной чистки.
8. Проведите чистку лица, продвигая устройство по коже медленными круговыми движениями в одном направлении.  
**Внимание!** Не задерживайтесь на одном участке кожи более чем на 3 секунды и не давите насадкой на кожу.
9. Через 15 минут сработает автоотключение. Если вы хотите выключить устройство раньше, то нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «Вкл/Выкл».
10. Для легкого отделения насадки от кожи отклоните насадку в сторону, чтобы запустить воздух. Это поможет предотвратить появления синяков и повреждений на вашей коже.  
**Внимание!** Никогда не убирайте насадку от кожи, предварительно не запустив воздух в насадку.
11. После проведения вакуумной чистки обязательно протрите кожу успокаивающим тоником и нанесите увлажняющий крем.

### Советы

Держите устройство только сухими руками во избежание попадания влаги на кнопки, в корпус устройства и разъем шнура Micro-USB. Вода может попасть в корпус устройства и вывести его из строя.

Для эффективного проведения процедуры вакуумной чистки кожа должна быть хорошо распарена. Распарьте кожу любым удобным вам способом. Например, вы можете распарить кожу, используя горячее полотенце. Для этого намочите его в горячей воде, отожмите и накройте им лицо на 5 минут.

При первом использовании проводите процедуру чистки кожи на самом низком уровне силы всасывания.

Во время использования не задерживайтесь на одном участке кожи более чем на 3 секунды и не давите насадкой на кожу. Продвигайте устройство по коже медленными круговыми движениями в одном направлении.

Перед тем как убрать насадку от кожи, запустите в нее воздух, отклонив насадку в сторону. Это защитит вашу кожу от повреждений.

Не используйте скраб или другое отшелушивающее средство перед проведением вакуумной чистки лица.

Проводите вакуумную чистку лица 1–2 раза в неделю в зависимости от вашего типа кожи. Не проводите вакуумную чистку лица повторно в течение одного дня.

Проводя вакуумную чистку кожи лица, избегайте область вокруг глаз.



Противопоказания к применению:

- онкологические заболевания кожи;
- нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
- герпес, розацеа, экзема;
- воспаления на коже (акне);
- нарушения свертываемости крови;
- нарушения кожной чувствительности;
- наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- эпилепсия;
- тромбофлебит;
- беременность;
- выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
- тонкость кожных покровов с близким расположением сосудов.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления, в область разъема шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB.

Очищайте насадки перед и после каждого использования — протирайте ватным диском, смоченным в хлоргексидине или 70% растворе спирта. Не используйте для чистки насадок жесткие моющие средства и абразивные ткани.

По мере загрязнения фильтра меняйте его. Для этого снимите насадку с вакуумного очистителя кожи, отклейте фильтр от переходника, выбросьте старый фильтр и приклейте на переходник новый фильтр из комплекта.

Если вы потеряли уплотнительное кольцо или оно вышло из строя, замените его на запасное уплотнительное кольцо из комплекта. Малое уплотнительное кольцо надевается на переходник, а большое — на всасывающую трубку.

## Уход и хранение

Перед хранением тщательно очистите устройство и насадки, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните вакуумный очиститель кожи в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Храните устройство и аксессуары в сумке из комплекта, чтобы насадки, шнур Micro-USB и запасные части устройства не потерялись.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 45 минут. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

## Устранение неполадок

**Вакуумный очиститель кожи не включается, световой индикатор не горит**

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство

**Вакуумный очиститель кожи не заряжается, световой индикатор не мигает**

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Недостаточное напряжение источника питания	Подключите устройство к другому источнику питания
Поврежден шнур Micro-USB	Обратитесь к производителю за новым шнуром Micro-USB или приобретите такой же шнур
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур Micro-USB неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания	Проверьте соединение шнура Micro-USB с разъемом на устройстве и источнике питания

### Вакуумный очиститель кожи перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 15 минут использования сработало автоотключение устройства	Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство
Низкий уровень заряда аккумулятора	Зарядите устройство

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB  $\approx$  5 В, 0,5 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А\*ч (1,85 Вт\*ч)
3. Мощность: 5 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Автоотключение: через 15 мин
6. Максимальное разрежение: 59 кПа
7. Уровень шума:  $\leq$ 60 дБ
8. Время зарядки: 1,5 ч
9. Время работы от аккумулятора: 1,5–3,5 ч
10. Длина шнура Micro-USB: 0,7 м
11. Размер устройства: 44 × 39 × 203 мм
12. Размер упаковки: 108 × 45 × 229 мм
13. Вес нетто: 0,2 кг
14. Вес брутто: 0,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэдджи Ко., Лтд. 4 Флор, Хуаньянь Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область органов управления, в область разъема шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непродолжительной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте вакуумный очиститель кожи только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением вакуумного очистителя кожи к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Запрещается пользоваться вакуумным очистителем кожи при следующих показаниях:
  - онкологические заболевания кожи;
  - нарушения целостности кожных покровов — раны, ссадины, трофические язвы, кровотечения;
  - герпес, розацеа, экзема;
  - воспаления на коже (акне);
  - нарушения свертываемости крови;
  - нарушения кожной чувствительности;
  - наличие имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);

- эпилепсия;
  - тромбоз;
  - беременность;
  - выраженные формы купероза (например, сетка расширенных красных сосудов на лице);
  - тонкость кожных покровов с близким расположением сосудов.
5. Проводя вакуумную чистку кожи лица, избегайте область вокруг глаз.
  6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
  7. Не переносите прибор, взявшись за шнур Micro-USB. Не тяните за шнур Micro-USB при отключении устройства от источника питания.
  8. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
  9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться вакуумным очистителем кожи только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
  10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
  12. Устанавливайте вакуумный очиститель кожи только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
  13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  14. Не допускайте падения вакуумного очистителя кожи и не подвергайте его ударам.
  15. Храните устройство в недоступных детям местах.
  16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
  18. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг вакуумного очистителя кожи.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1





**Kitfort**

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87