

Glory

Аппарат для ухода
за кожей лица



ReadySkin

Руководство
по эксплуатации

Оглавление

Введение	4
Режимы аппарата	5
Противопоказания и ограничения к использованию	6
Меры безопасности	8
Внешний вид и управление аппаратом	13
Комплектация	15
Подготовка аппарата к работе	16
Перед применением	18
Проведение процедур	19
Возможные неполадки и их устранение	34
Чистка и обслуживание аппарата . . .	36
Технические характеристики	38
Правила хранения и реализации . . .	39
Правила транспортировки	39
Сертификация и гарантия	40
Утилизация продукта	41

*Внимание!
Бытовой аппарат
ReadySkin Glory
не является
медицинским
оборудованием.
Не предназначен
для применения в
медицинских целях.*

Введение

Благодарим Вас за покупку аппарата для ухода за кожей лица ReadySkin Glory! Этот многофункциональный аппарат с программами предназначен для ухода за кожей лица.

Перед применением внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Уделите особое внимание главе «Меры безопасности».

Аппарат ReadySkin Glory позволяет осуществлять комплексный уход за кожей лица на основе современных эффективных методик с использованием ультразвука. Принцип действия аппарата основан на генерации ультразвукового сигнала с частотой 25 кГц, который вызывает невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата — металлической лопатки.

Режимы аппарата



Ежедневное очищение



Глубокое очищение пор



Питание и увлажнение



Успокаивающий массаж



ReadySkin

Противопоказания и ограничения к использованию

- Беременность и лактация.
- Острые инфекционные и вирусные заболевания.
- Повышенная температура тела.
- Онкологические заболевания.
- Наличие кардиостимулятора.
- Тяжелые стадии гипертонической болезни, нарушения сердечного ритма.
- Психические заболевания.
- Заболевания кожи и соединительной ткани (напр. склеродермия, красная волчанка).
- Острые воспалительные или гнойные процессы.
- Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения.
- Акне в стадии обострения.
- Наличие купероза в предполагаемой

зоне воздействия аппарата.

- Склонность к образованию келоидов.
- Наличие силиконовых имплантатов, золотых нитей, металлических имплантатов в области обработки (не распространяется на зубные коронки, штифты, брекететы).
- Тяжелые формы сахарного диабета.
- Детский или подростковый возраст.
- Прием дерматропных препаратов.
- При посещении солярия или в период активного солнечного загара.

Во время процедуры следует избегать таких областей тела, как:

- глаза;
- области над сердцем и щитовидной железой;
- области половых органов;
- области над силиконовыми имплантатами, области с гелевой контурной пластикой.

Меры безопасности

Аппарат ReadySkin Glory достаточно прост в использовании, однако, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с аппаратом.

Внимание

- Аппарат рассчитан на питание от встроенного аккумулятора. Для зарядки используйте идущие в комплекте USB кабель и адаптер питания. Перед подключением кабеля к сети убедитесь, что кабель не имеет видимых повреждений изоляции.
- Проводите регулярную проверку состояния металлических аппликаторов аппарата. При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности аппликаторов дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки.

- Запрещается эксплуатация и хранение аппарата в местах с повышенной влажностью (саунах, ванных комнатах) и высокой температурой, под прямыми солнечными лучами.
- После внесения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и началом использования.
- Во время проведения процедуры с использованием ReadySkin Glory запрещается касаться или быть подключенным к другому электрооборудованию или заземлению.
- Запрещается работать металлической лопаткой аппарата по сухой коже. Поддерживайте поверхность кожи постоянно увлажненной при помощи специальных средств.
- Во время процедуры не рекомендуется многократная (более 3-х раз) обработка металлической лопаткой одного и того же участка кожи.
- Выключайте питание аппарата

во время перерывов в работе, если их продолжительность превышает более 30 сек.

- Не допускайте попадания воды или косметических средств внутрь аппарата, регулярно удаляйте влагу с металлических поверхностей аппликаторов. Категорически запрещается погружать аппарат в жидкость.
- После использования аппарата более 20 минут необходимо сделать перерыв, чтобы дать аппарату остыть.
- Не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
- Перед и после проведением процедуры очищайте рабочую поверхность металлической лопатки дезинфицирующим раствором (70% раствор спирта/хлоргексидин/перекись водорода).
- Не нажимайте на кнопку управления аппаратом острыми предметами или кончиками ногтей.
- Храните аппарат вдали от нагрева-

тельных приборов и в защищенном от солнечных лучей месте.

- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не используйте аппарат в помещениях с высокой влажностью и температурой.
- Использование аппарата допускается только в возрасте от 18 лет. Людям с ограниченными физическими возможностями, с особенностями развития перед использованием аппарата необходимо внимательно ознакомиться с устройством и возможными рисками.
- Не рекомендуется разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство. Сервисное обслуживание аппарата должно производиться только в специализированных центрах.
- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- В случае необходимости ремонта


обратитесь в уполномоченный
сервисный центр.

Внимание

*Фирма-производитель и торгующая
организация не несут никакой ответ-
ственности за последствия применения
аппарата, вызванные нарушением
текущих правил эксплуатации или
несоблюдением методик проведения
процедур.*




Внешний вид и управление аппаратом

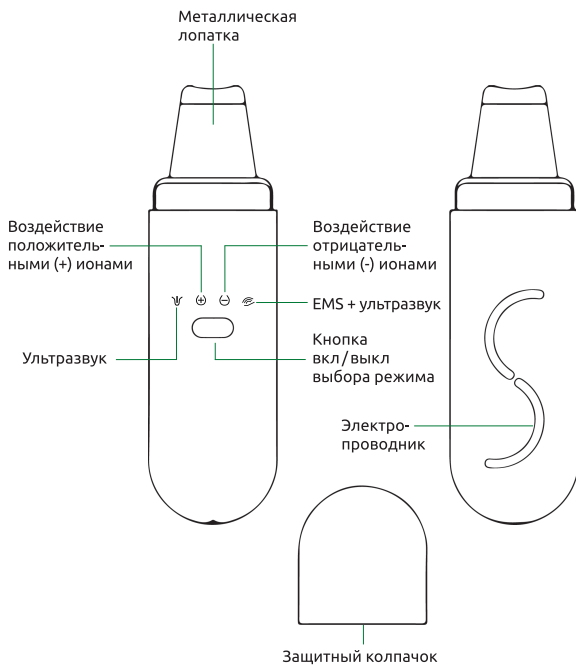

- Управление аппаратом осуществляется посредством кнопки вкл/выкл. и выбора режима.
- Аппарат включается при длительном нажатии (2 сек.) на кнопку управления на режиме «Ежедневное очищение» (также об этом сигнализирует подсветка индикатора режима).
- Для переключения режимов необходимо нажать кнопку управления. Для выключения аппарата нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку управления.


Комплектация

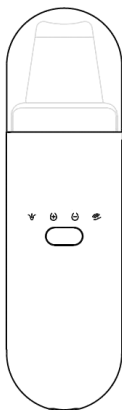


Аппарат
ReadySkin Glory x1



Руководство
по эксплуатации

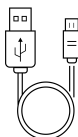

Micro USB
кабель x1

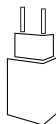

Адаптер
питания x1

Подготовка аппарата к работе

Подготовка

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что металлическая лопатка не имеет повреждений и острых сколов.

Цвета светодиода означают различную степень заряда прибора:

- *Красный – идет процесс зарядки*
- *Фиолетовый – устройство полностью заряжено.*

Зарядка аппарата

От компьютера:

Включите компьютер и затем подключите аппарат при помощи micro USB кабеля.

От розетки

Подсоедините аппарат с помощью кабеля к адаптеру, затем подсоедините адаптер в розетку.

После окончания зарядки отключите устройство от источника питания.



Внимание

1. Если аппарат не включается после длительного нажатия кнопки питания, то его следует зарядить.
2. Если аппарат не эксплуатировался в течение более 90 дней, то его следует зарядить.
3. Полного заряда аккумулятора хватает на 60-120 минут работы.
4. Таймер автоотключения: аппарат автоматический выключается через 10 минут работы.

Рекомендуемые производителем параметры адаптера питания:

Выходной ток	1 A
Разъем выходной	USB, тип A
Входное напряжение	AC 220 В
Выходное напряжение	DC 5 В

Примечание

Прибор не предназначен для использования во время зарядки.



Перед применением

*Внимание!
Бытовой аппарат
ReadySkin GLORY
не является
медицинским
оборудованием и
предназначен для
ухода за кожей
лица в домашних
условиях.*

Перед применением внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Для обеспечения своей безопасности перед использованием внимательно прочтите главу «Меры безопасности».

Перед проведением процедур рекомендуется предварительная консультация врача-дерматолога.

Проведение процедур

Пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица ReadySkin Glory очень просто.

Для Вашего удобства мы сняли подробную видео-инструкцию о том, как применять аппарат для различных процедур по уходу за кожей лица дома.



Для того, чтобы посмотреть видео-инструкцию, возьмите мобильный телефон с камерой.

1. *Запустите программу для сканирования кода или наведите объектив камеры на код.*
2. *Приятного просмотра!*

Чтобы посмотреть видео-ролик, воспользуйтесь Вашим смартфоном — отсканируйте QR-код.

Рекомендации по проведению курса процедур:

- Основной курс процедур: 1-2 раза в неделю, курсом по 10-20 процедур.
- Поддерживающий курс: 1 раз в месяц.

Для достижения максимального эффекта основной курс процедур рекомендуется проводить 1-2 раза в год. Между основными курсами желательно прове-



дение поддерживающих процедур один раз в месяц. Длительность процедуры и количество прохождений по одному участку кожи в течение одного сеанса рекомендуется увеличивать постепенно.

Общее время проведения процедуры не должно превышать 30 минут.

Количество прохождений лопаткой по одному участку кожи в течение одного сеанса не должно превышать 3-х раз.

*Внимание!
Во время проведения процедур кожа лица не должна быть сухой, используйте специальные средства.*

Перед проведением процедуры тщательно очистите кожу от макияжа и внешних загрязнений, умойте лицо чистой теплой водой и вытрите полотенцем.

В процессе обработки кожи аппаратом вы можете чувствовать легкое покалывание, легкий дискомфорт.

Во время работы наблюдайте за ощущениями и состоянием кожи. При появлении дискомфорта следует прекратить работу. Немедленно

остановите процедуру, если почувствуете боль — незамедлительно обратитесь к врачу.

Во время процедур рекомендуем двигаться металлической лопаткой по массажным линиям лица, как показано на рисунке справа.



Ежедневное очищение

Частота проведения процедуры: не более 1 раза в день.

Принцип действия

Ультразвуковая чистка (пилинг) — процедура мягкого щадящего очищения кожи лица от поверхностных загрязнений.



За счет ультразвуковых волн, проникающих в верхние слои кожи, происходит отшелушивание ороговевших клеток эпидермиса, удаление поверхностных загрязнений и скоплений кожного сала. Ультразвуковая обработка способствует очищению, легкому массажу, стимуляции процессов кислородно-восстановительного обмена и регенерации в клетках.

Режим аппарата:

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые




ReadySkin

следует наносить на кожу лица

- гель для ультразвуковых процедур/термальная вода/очищенная вода.

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на лицо гель для ультразвуковых процедур/термальную воду/очищенную воду.
3. Снимите защитный колпачок. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим ежедневного очищения Ψ .
5. Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45° , как показано на рисунке.

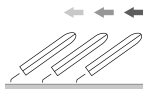

Лопатка смотрит
вверх. Лезвие
обращено внутрь

6. Проводите лопаткой по массажным-

линиям лица, регулярно очищая лопатку от скопившегося на ней средства и загрязнений ватным диском.

7. Смойте остатки средства с лица чистой водой.

*Интенсивность
ощущений
зависит от
чувствитель-
ности кожи.
После проведения
процедуры
допустимо легкое
покраснение
кожи.*

Возможные ощущения во время процедуры

Допустимо легкое покалывание и вибрация.



Глубокое очищение пор

Принцип действия:



Частота проведения процедуры: не более 2-3 раз в неделю.

Глубокое очищение + воздействие положительными ионами: процедура глубокого очищения кожи лица.

Метод основан на действии химической реакции, для запуска которой необходимо нанести на кожу специальные ионизированные гели-дезинкрустанты, которые проводят электрические импульсы.

Под действием положительного электрода и геля-дезинкрустанта на коже образуются ионы щелочей и кислот, которые проникают в слои кожи, вступают в реакцию с кожным салом, шлаками, токсинами и другими загрязнениями, образуя мыло. Таким образом комедоны (черные точки) растворяются и выводятся из кожи.

Происходит отшелушивание ороговевших клеток и обновление кожных покровов.

Режим аппарата: (+)

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица

- гель для дезинкрустации.

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите на лицо гель для дезинкрустации.
3. Снимите защитный колпачок.
Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд.
По умолчанию включится режим ежедневного очищения Ψ .



Переключите аппарат в режим глубокого очищения пор (⊕).

5. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцы руки расположились на электропроводниках на задней панели устройства.



Лопатка смотрит вверх. Лезвие обращено внутрь

6. Расположите металлическую лопатку аппарата под углом в 45°, как показано на рисунке.
7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки геля и загрязнений с лопатки ватным диском.
8. Смойте остатки средства с лица теплой чистой водой.

Интенсивность ощущений зависит от чувствительности кожи. После проведения процедуры допустимо легкое покраснение кожи.

Возможные ощущения во время процедуры

Допустимо легкое покалывание и вибрация.



ReadySkin

Питание и увлажнение

Принцип действия:



Частота проведения процедуры: не более 2-3 раз в неделю.

Ультразвуковой микро-массаж + воздействие отрицательными ионами: процедура глубокого питания и увлажнения кожи.

Ультразвук и отрицательные ионы активизируют кровообращение и обменные процессы внутри клеток кожи, усиливая проникновение в более глубокие слои кожи специальных косметических средств.

Режим аппарата: ⊖

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица

- косметические средства для ухода за кожей лица (эссенции, сыворотки, концентраты, крема, имеющие



в своем составе активные компоненты, направленные на увлажнение/питание/омоложение и др. — в зависимости от необходимого эффекта, подходящего Вашему конкретному типу кожи);

- гель для ультразвуковых процедур.


Этапы проведения процедуры

*Время процедуры
на одну
сторону —
3 минуты.
6 минут на обе.*

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него — гель для ультразвуковых процедур.
3. Снимите защитный колпачок. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим ежедневного очищения Ψ . Переключите аппарат в режим питания и увлажнения $\ominus$.



5. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцы руки расположились на электропроводниках на задней панели устройства.

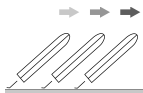

Лопатка
обращена
внутрь. Лезвие
направлено вверх

6. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже, как показано на рисунке.
7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки средства с лопатки ватным диском.
8. Смойте остатки геля теплой водой.

*Интенсивность
ощущений
зависит от
чувствитель-
ности кожи.
После проведения
процедуры
допустимо легкое
покраснение кожи.*

Возможные ощущения во время процедуры

Допустимо легкое покалывание и вибрация.



Успокаивающий массаж

Принцип действия



Частота проведения процедуры: не более 1 раза в день.

Ультразвуковой микро-массаж + микротоковый лифтинг. Ток поступает в клеточные ткани, оказывает стимуляцию высокочастотной вибрацией.

В ходе процедуры запускается регенерация, стимулируется выработка эластина и коллагена. Ультразвуковой микромассаж обеспечивает проникновение в глубокие слои кожи косметических средств для их лучшего воздействия.

Режим аппарата: 

Дополнительные средства для проведения процедуры, которые следует наносить на кожу лица

- косметические средства для ухода



за кожей лица (эссенции, сыворотки, концентраты, крема, имеющие в своем составе активные компоненты, направленные на увлажнение/питание/омоложение и др. — в зависимости от необходимого эффекта, подходящего Вашему конкретному типу кожи);


- гель для ультразвуковых процедур.

Этапы проведения процедуры

1. Тщательно очистите кожу лица.
2. Нанесите косметическое средство для ухода за кожей лица, а поверх него — гель для ультразвуковых процедур.
3. Снимите защитный колпачок. Обработайте лопатку антисептическим средством.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2-ух секунд. По умолчанию включится режим ежедневного очищения Ψ .

Переключите аппарат в режим успокаивающего массажа .

5. Возьмите в руку аппарат таким образом, чтобы пальцы рук расположились на задней панели устройства.

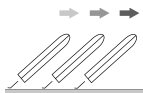

Лопатка
обращена внутрь.
Лезвие направ-
лено вверх

6. Расположите металлическую лопатку аппарата плоской стороной к коже, как показано на рисунке.
7. Проводите лопаткой по массажным линиям лица. Удаляйте излишки средства с лопатки ватным диском.
8. Смойте остатки геля теплой водой.

*Интенсивность
ощущений
зависит от
чувствитель-
ности кожи.
После проведения
процедуры
допустимо легкое
покраснение
кожи.*

Возможные ощущения во время процедуры

Допустимо легкое покалывание и вибрация.



Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправ- ность	Возможные причины	Решение
Не заря- жается	Прибор неправильно подключен к зарядному устройству	Убедитесь, что прибор подключен кабелем micro USB к источнику питания
	Отсутствует локальное се- тевое питание	Проверьте, име- ется ли сетевое напряжение. Если индикатор зарядки не загорается, то обратитесь к продавцу
Не вклю- чается	Неправильно нажимаете кнопку пита- ния	Нажмите и удерживайте кнопку питания на протяжении 3 сек
	Аккумулятор прибора разряжен	Зарядите устройство
	Низкий заряд батарей	

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера

по телефону

8 800 755-56-29

или e-mail

garotdel@mail.ru

Нагрев прибора во время использования

Данная особенность не является неисправностью, потому что во время работы прибора осуществляется выработка тепла



ReadySkin

Чистка и обслуживание аппарата

Перед началом и по окончании каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку металлических аппликаторов аппарата при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Периодически протирайте корпус аппарата мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством.

*Внимание!
Антисептическое средство не должно попадать внутрь пластикового корпуса аппарата. Используйте салфетки с умеренным количеством жидкости.*

Запрещается:

- Погружать аппарат в жидкость.
- Использовать для протирки аппликаторов и корпуса агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем.
- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию.



- Внутри аппарата ReadySkin Glory нет компонентов или частей, требующих обслуживания.

Технические характеристики

Модель	Glory
Частота ультразвука	25 кГц
Выходная мощность ультразвуковых колебаний	1 Вт/см ²
Выходное напряжение адаптера	5 В
Входное напряжение адаптера	220 В
Сила тока адаптера	1 А
Емкость аккумулятора	600 мАч
Время полной зарядки	2-3 ч
Размеры аппарата	168x48x18 мм
Масса нетто	89 г

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 ° и относительной влажности воздуха до 80% в соответствии с ГОСТ В9.003 и ГОСТ 21552.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ В 9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

Readyskin Glory соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 020 / 2011, ТР ТС 004 / 2011, ТР ЕАЭС 037 / 2016.

Гарантийный период на изделие Readyskin Glory составляет 12 месяцев с даты получения товара.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменении конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или



Readyskin

неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;

- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

Надлежащая утилизация продукта



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте

его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный аппарат для экологически безопасной переработки.



Производитель

Shenzhen Trendz Technology Co., Ltd., 4 / F., Bldg. B&C,
Hedong Industrial Park, Hangcheng industrial Zone,
Qianjin Road #2, Xixiang Town, Bao' an Dist., Shenzhen.
Сделано в КНР

Импортер

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: Россия, 195267, г.
Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, дом № 86,
корпус 1, офис 12-Н

Горячая линия

8 800 775-56-29 звонок по России бесплатный

Дата производства

1 кв. 2023 г.



ReadySkin



readyskin.su

EAC