

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

H-MG895



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
СХЕМА ПРИБОРА.....	6
КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
ОЧИСТКА И УХОД	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	10
УТИЛИЗАЦИЯ	10
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА	10
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	10
УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ	11
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.

- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом шнуре питания.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Не следует использовать прибор после падения. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Если кабель поврежден, во избежание травм необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей. Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Не допускается использование прибора с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины или др.). Если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети, выдернув вилку прибора из розетки сухими руками. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду и не пытайтесь включить прибор повторно. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не переносите прибор за шнур питания.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только

квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Прибор не предназначен для использования, в случае если вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор ли у вас есть электронные имплантаты и искусственные суставы;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: термочувствительность, нарушение кровообращения, грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, акне, воспаление вен или мышц, выпадение межпозвоночных дисков, повреждения кожи и др.;
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте прибор, если на вашей коже есть какие-либо крема или масла.
- Примите меры, чтобы не заснуть во время использования прибора.
- Не используйте прибор, находясь за рулем или под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования прибора появилась боль, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
- Не используйте прибор в постели: чрезмерный нагрев может стать причиной возгорания или удара током.
- Если прибор используется непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессоницу.

НАЗНАЧЕНИЕ

Массажер для тела обеспечивает глубокий разминающий массаж и предназначен для массажа всего тела.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: от сети; аккумулятор
- Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Мощность: 25 Вт
- Время зарядки: 1,5 ч.
- Работа от аккумулятора: до 120 мин.
- Емкость батареи: 2200 мА·ч
- Режимы интенсивности: 3
- Функция прогревания
- Цвет: белый/серый
- Материал: экокожа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Массажер для тела
- Сумка для хранения
- Адаптер для зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СХЕМА ПРИБОРА

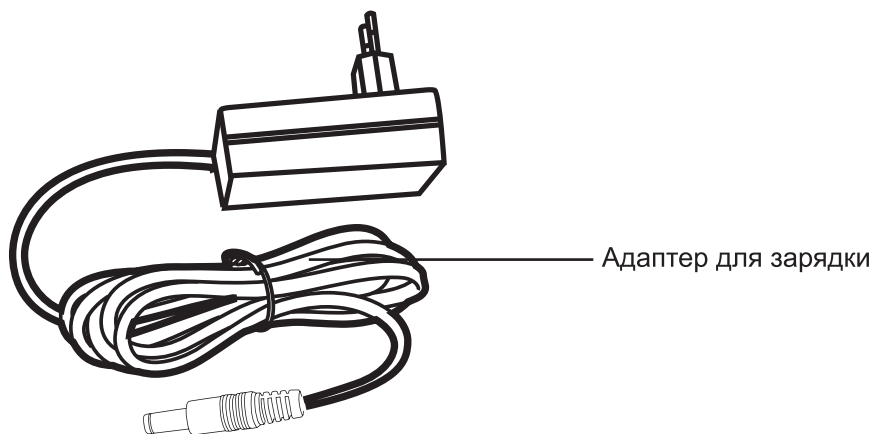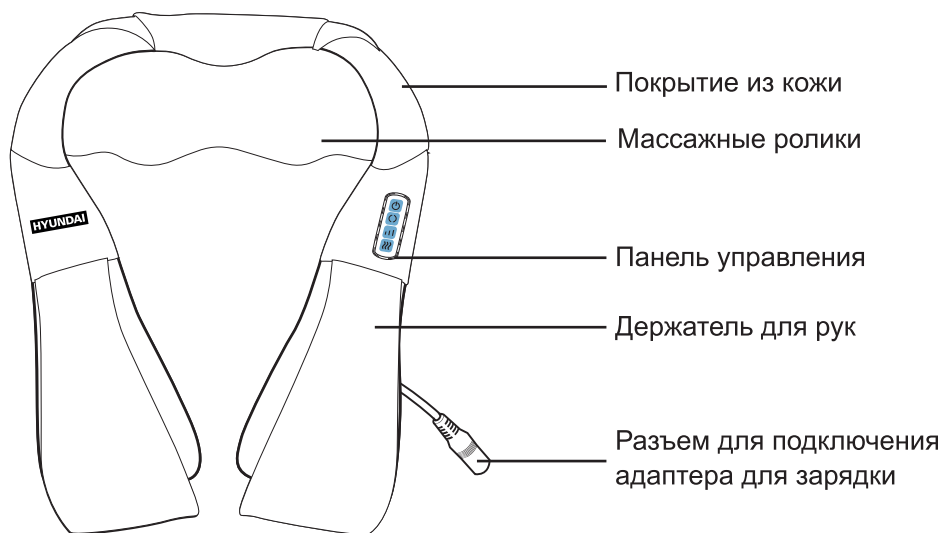


КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

	Кнопка включения и выключения прибора.
	Кнопка выбора скорости массажа.
	Кнопка выбора направления массажа.
	Кнопка включения и выключения нагрева. Режим нагрева помогает расслабить мышечную боль, снять усталость и улучшить кровообращение.


ЭКСПЛУАТАЦИ

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а элементы прибора и сам прибор не повреждены.
3. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов.
4. Перед использованием зарядите прибор в течение полутора часов.
5. Обратите внимание, что прибор может работать как от сети, так и от аккумулятора. Время работы прибора от аккумулятора составляет 120 минут.
6. Включите прибор и выберите предпочитаемые настройки массажа.
7. Прибор оснащен функцией автоматического отключения во избежание перегрева, он отключится через 15 минут массажа.


Зоны для массажа:

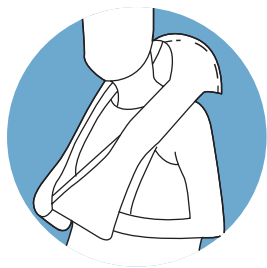


Шея и плечи

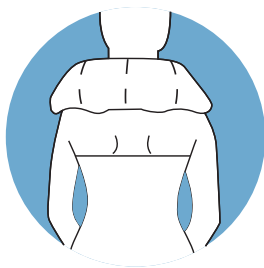


Шея

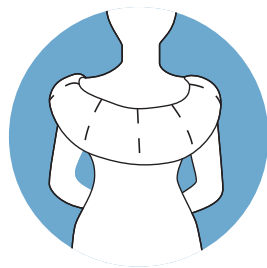

Спина

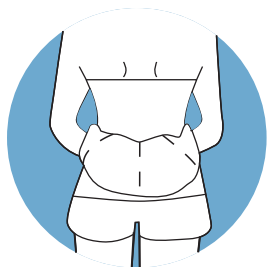

Талия

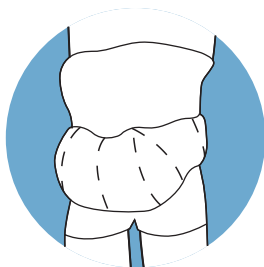

Живот




Бедра



Ноги/голенки



Стопы

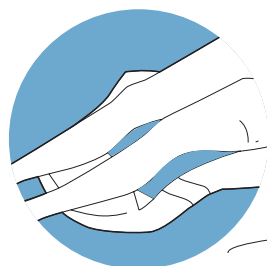

Икры

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите прибор сначала слегка влажной тряпкой, а затем сухой тряпкой.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не включайте прибор влажным.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт и внесение изменений в его конструкцию!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не включается.	Прибор не подключен к сети или разряжен.	Подключите прибор к сети зарядите его.
	Прибор перегрелся от долгого использования.	Подождите, пока прибор остынет, и включите его заново.
	Прибор поврежден.	Обратитесь в сервисный центр.
Прибор отключается во время массажа.	Прибор автоматически отключается через 15 минут использования.	Подождите, пока прибор остынет, и включите его заново.
	Прибор перегрелся от долгого использования.	

ВНИМАНИЕ! Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.