

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**ПЕРКУССИОННЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
H-MG900**



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
СХЕМА ПРИБОРА.....	6
НАСАДКИ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.	8
СМЕНА НАСАДОК.	9
ОЧИСТКА И УХОД.....	10
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	11
УТИЛИЗАЦИЯ	11
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА	11
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА.	11
УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	14

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.

- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и сетевом шнуре питания.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Не следует использовать прибор после падения. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Если кабель поврежден, во избежание травм необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей. Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Не допускается использование прибора с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины или др.). Если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети, выдернув вилку прибора из розетки сухими руками. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду и не пытайтесь включить прибор повторно. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не переносите прибор за кабель.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только

квалифицированными специалистами сервисного центра.

- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Прибор не предназначен для использования, в случае если вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор ли у вас есть электронные имплантаты и искусственные суставы;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: термочувствительность, нарушение кровообращения, грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, акне, воспаление вен или мышц, выпадение межпозвоночных дисков, повреждения кожи и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте прибор, если на вашей коже есть какие-либо крема или масла.
- Примите меры, чтобы не заснуть во время использования прибора.
- Не используйте прибор, находясь за рулем или под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования прибора появилась боль, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
- Не используйте прибор в постели: чрезмерный нагрев может стать причиной возгорания или удара током.
- Если прибор используется непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессоницу.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПеркуSSIONный массажер для тела обеспечивает глубокий разминающий массаж, проработку мышц и триггерных точек и предназначен для массажа всего тела.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: от аккумулятора
- Напряжение: 7,4 В
- Блок питания:
Вход: 100-240 В, ~50/60 Гц, 0,5 А
Выход: 8,4 В --- 1,0 А
- Мощность: 24 Вт
- Полная зарядка: 3 часа
- Обороты в минуту: до 3 600
- Время работы после полной зарядки: 80 мин.
- ПеркуSSIONный принцип действия
- Скоростные режимы работы: 6
- Цвет: синий


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ПеркуSSIONный массажер для тела
- 4 сменные насадки
- Кабель для зарядки с сетевым адаптером
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

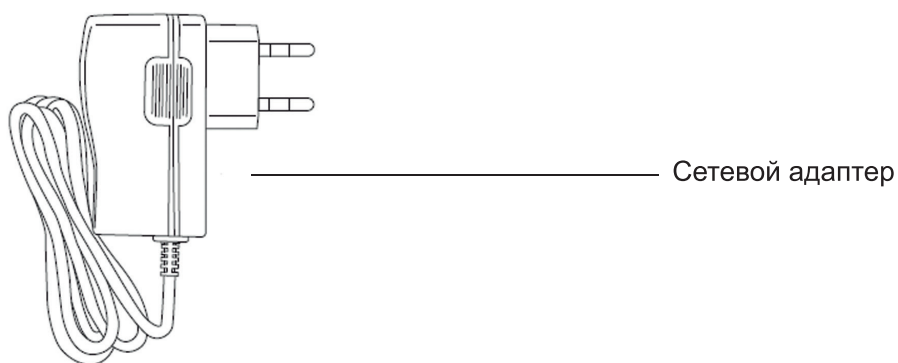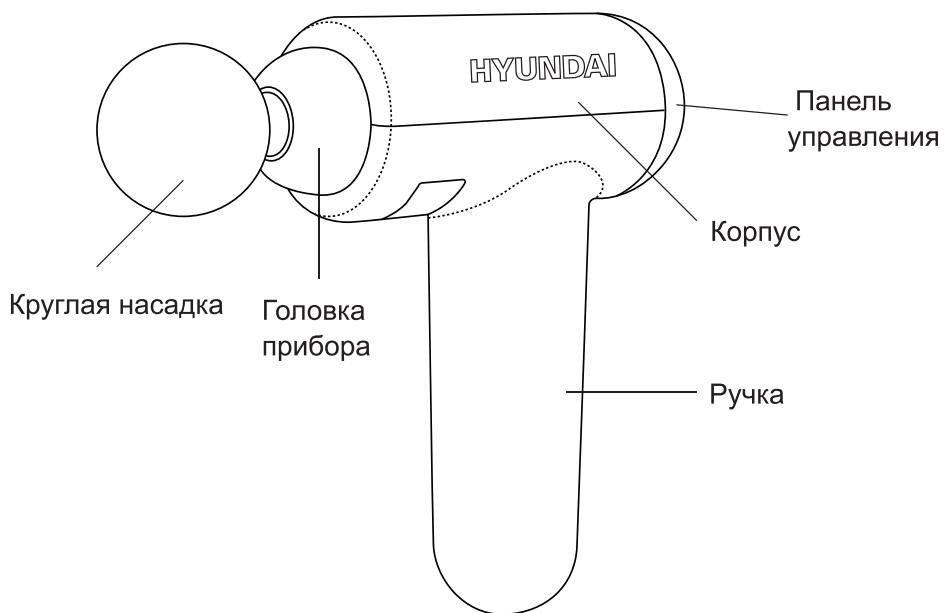


СХЕМА ПРИБОРА

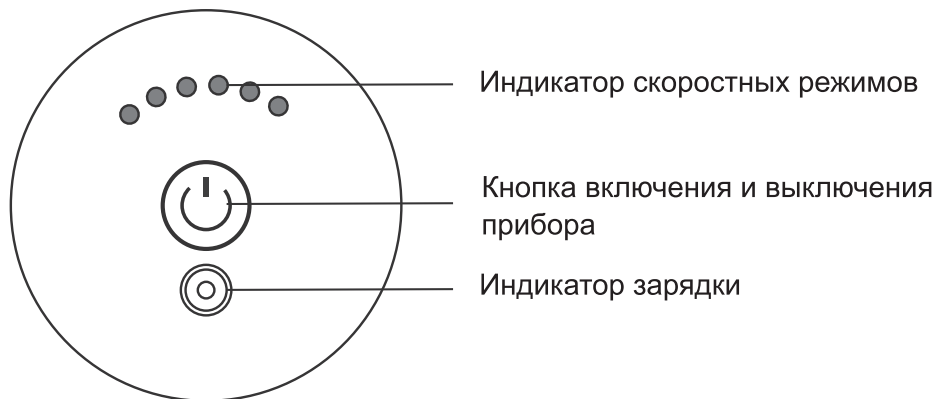

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



НАСАДКИ

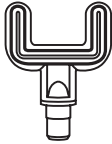	Круглая насадка – используется для массажа рук, спины, ягодиц и ног.
	Насадка-диск – используется для проработки крупных мышц тела, бедренных и икроножных мышц.
	Пулевидная насадка – используется для глубокой проработки триггерных точек, а также для массажа стоп.
	U-образная насадка – используется для проработки околопозвоночных мышц без контакта с позвонками. Также подходит для работы с ахиллесовыми мышцами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Извлеките прибор из упаковки, освободив от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а элементы прибора и сам прибор не повреждены.
3. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать его в тепле в течение двух часов.
4. Протрите корпус сухой чистой тканью.
5. Перед использованием зарядите прибор в течение трех часов.
6. При зарядке индикатор горит красным цветом и становится зеленым, когда прибор полностью заряжен.
7. После зарядки прибор можно использовать до 80 минут.
8. Выберите насадку и установите ее в привод.
9. Включите прибор и выберите предпочитаемые настройки массажа.
10. При включении автоматически выберется первый скоростной режим и загорится одна красная лампочка на индикаторе скоростных режимов.
11. Установите нужный скоростной режим, нажимая на кнопку включения. В соответствии с выбранным режимом загорятся световые индикаторы. Например: если вы выберете шестой режим, загорится шесть индикаторов.
12. Если выбран шестой скоростной режим, то при нажатии на кнопку включения скоростной режим переключится на первый.
13. Для максимального эффекта аккуратно массируйте выбранный участок тела не более 5 минут.
14. Перейдите к следующей зоне. Затем можно сменить насадку, предварительно выключив прибор.
15. Для выключения прибора удерживайте кнопку включения.

ВНИМАНИЕ!


Не используйте прибор дольше 15 минут, т. к. прибор может перегреться. Перед возобновлением работы подождите, пока прибор остынет.

СМЕНА НАСАДОК

1. Снимите насадку с прибора.

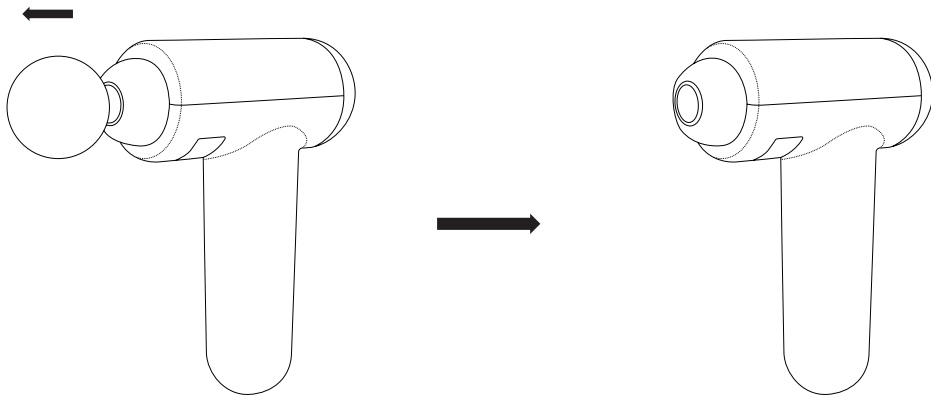

2. Наденьте нужную насадку на прибор

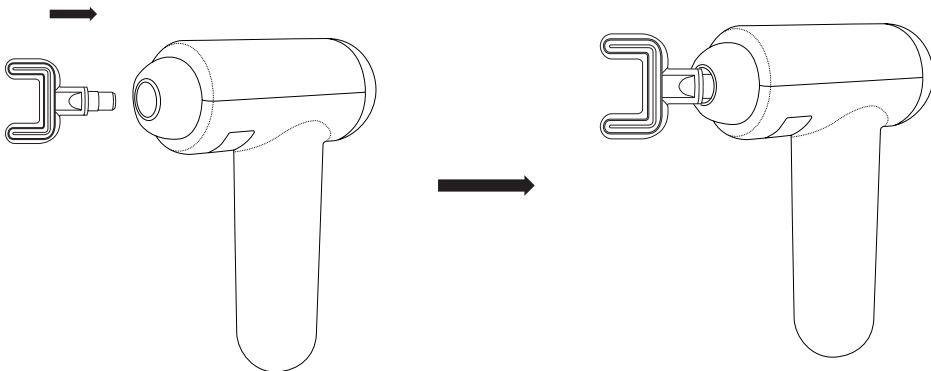

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите прибор сначала слегка влажной тряпкой, а затем сухой тряпкой.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Храните в месте, недоступном для детей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не включается.	Прибор не заряжен	Подключите кабель к устройству и к сети для подзарядки.
	Прибор перегрелся от долгого использования.	Подождите, пока прибор остынет, и включите его заново.
	Прибор поврежден.	Обратитесь в сервисный центр.
Прибор отключается во время массажа.	Прибор автоматически отключается через 15 минут использования.	Подождите, пока прибор остынет, и включите его заново.

ВНИМАНИЕ! Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.