

**BORK**



ИРРИГАТОР F650

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Мобильное приложение BORK

Зарегистрируйте технику в мобильном приложении.

Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, напоминаниям о необходимости замены расходных материалов, а также к рецептам, новинкам и эксклюзивным коллекциям.



Насадка

Резервуар для воды  
и хранения насадки

Гнездо для насадки

Резервуар для воды



Кнопка извлечения насадки

Гнездо зарядки

Включение | выключение


Индикатор режима

Индикатор заряда аккумулятора

Выбор режима



Стандартная насадка  
Замена каждые 3 месяца

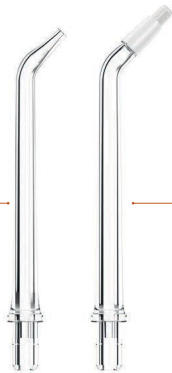


Ортодонтическая насадка  
Замена каждые 3 месяца


## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте упаковочные материалы.
- Зарядите устройство в течение 3 часов.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

- Для установки насадки вставьте ее в гнездо до щелчка.
- Для извлечения насадки нажмите кнопку  и потяните насадку вверх, как указано на рисунке.

Храните насадку внутри корпуса ирригатора.

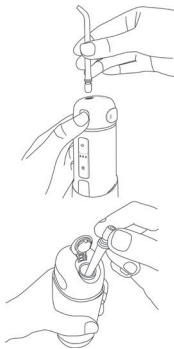

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРРИГАТОРА

- Потяните основной модуль корпуса вверх до фиксации.
- Установите насадку.
- Откройте гнездо для залива воды и наполните резервуар.
- Нажмите кнопку включения.
- Выберите силу напора струи.

## ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Прибор имеет степень защиты от воды IPX7. Допускается использовать прибор в душе, однако не рекомендуется помещать прибор в воду на долгое время.

После попадания влаги на прибор тщательно протрите и высушите корпус прибора.

*Данное определение относится только к прибору и не распространяется на зарядную станцию. Ни в коем случае не помещайте ее в воду и не допускайте попадания воды на зарядную станцию.*




#### ЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА

- Придерживайте корпус ирригатора одной рукой и потяните резервуар для воды свободной рукой для того, чтобы отсоединить его.
- Промойте резервуар водой комнатной температуры.

#### ЧИСТКА КОРПУСА

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении используйте мягкую влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

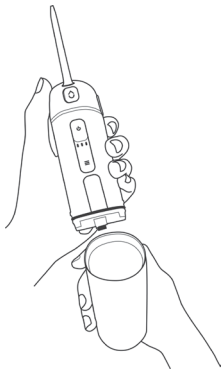

## ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур.

При длительном хранении рекомендуется заряжать прибор раз в 6 месяцев.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте прибор без установленных насадок.
- Не используйте никакие другие насадки, кроме оригинальных насадок, идущих в комплекте.

- Не заполняйте резервуар горячей водой выше 40 °С.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не рекомендуется использовать прибор людям с заболеваниями ротовой области, а также перенесшими операции на зубах и в ротовой области.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать прибор.
- Используйте обычную воду из под крана или очищенную воду.
- Не используйте ароматические добавки для воды или другие жидкости.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В = 1 А

Защита от влаги: IPX7

Ёмкость аккумулятора: 1100 мА·ч

Габариты (Ш × Г × В): 47,5 × 57 × 125 мм

Вес: 200 г.

Сделано в Китае.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.

Насадки: 2 шт.

Зарядный провод: 1 шт.

Чехол: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем  
в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ

«О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам  
с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям,  
изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.  
Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3,  
пом. 104. Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ИРРИГАТОР .....

Модель F650 .....

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

(наименование, юридический адрес)

.....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

М. П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### **Гарантия не распространяется:**

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### **Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

### **Адрес сервисного центра**

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10.  
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.



