



iledea



КОМПРЕССИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ГОЛОВЫ С ПОДОГРЕВОМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА

Благодарим за приобретение компрессионного аппарата для головы с подогревом. Это руководство пользователя нацелено на то, чтобы обеспечить Вас инструкциями и гарантировать, что использование данного продукта будет безопасным и не будет нести рисков пользователю. Любое использование, которое не отвечает требованиям настоящего руководства, может аннулировать ограниченную гарантию.

Пожалуйста, прочтите все указания до использования устройства и сохраните руководство пользователя для последующих обращений к нему. Данный продукт предназначен только для домашнего использования и не является медицинским прибором.

Меры предосторожности

Устройство запрещается использовать следующим лицам:

- Людям, которым врачами запрещено использовать массажные устройства (тромбоз, тяжелой артериальная аневризма, острая флемангиома и др.);
- Людям, у которых имеются в голове или в тканях лица силиконовые, металлические, пластиковые импланты, установленные при лечении переломов или при пластической или иной операции;
- Людям с нарушениями регуляции температуры тела, а также с проблемами кожи;
- Людям с онкологическими заболеваниями, в том числе находящихся на лечебной терапии;
- Людям с последствиями происшествия (ДТП и иных) в виде повреждений, нарушений работы головы или зрения (глаз);
- Людям, у которых есть повреждения или болевые ощущения в зоне ношения и применения устройства.

Необходимо придерживаться вышеприведенных ограничений для предотвращения несчастных случаев и ухудшения симптомов и т.д.

Пожалуйста, для предотвращения причинения вреда телу и кожи, не используйте при следующих обстоятельствах:

- Вы чувствуете дискомфорт или у Вас повышенная температура;
- При повреждениях кожи (экзема, опухоли и пр.);
- При дерматитах, солнечных ожогах, иных неестественных состояниях кожи;

Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что тканевая накладка массажной части не повреждена. При ее повреждениях, не используйте устройство во избежание негативных последствий.

Пожалуйста, храните устройство в недоступных для детей местах.

Детям запрещено использовать устройство во избежание травм или иных негативных последствий.

Для предотвращения низкотемпературных ожогов, не используйте устройство при следующих ситуациях:


- Ваше тело разогрето;
- При высоких температурах окружающей среды, вблизи от печи или иных источников жара, в сауне, инфракрасной сауне, бане, в солярии и т.д.

Меры предосторожности

- Беременным женщинам запрещается использовать устройство во избежание проблем с кожей по причине гормонального дисбаланса.
 - Не повреждайте, не разрушайте, не перегибайте кабель питания, не растягивайте его, не тяните иначе как за штекеры, не используйте его для переноски предметов во избежание его повреждений, пожаров, поражения электрическим током и коротких замыканий.
 - Во избежание негативных последствий, прекратите какую-либо иную деятельность перед применением устройства.
 - Не прикрепляйте иглы или иные инородные предметы к коннекторам кабеля питания во избежание пожара, повреждения прибора, по причине удара электрическим током или короткого замыкания.
 - Пожалуйста, не подвергайте устройство ударам, встряскам, иным физическим воздействиям во избежание повреждений и травм.
 - Пожалуйста не используйте устройство во время сна, примените меры чтобы не уснуть во время использования.
 - Применение устройства в бессознательном состоянии, в том числе во сне, может повлечь негативные последствия и травмы.
 - Не использовать устройство более 15 минут за одно применение.
 - Не использовать устройство более 4 раз за один день. Продолжительное, длительное, использование устройства может вызвать чрезмерную стимуляцию, травмы и иные неблагоприятные последствия.
 - Если почувствуете дискомфорт во время использования, пожалуйста, корректно отключите устройство и проконсультируйтесь с врачом для предотвращения негативного влияния на здоровье.
 - Немедленно прекратите применение устройства и отключите его от питания при сбоях в сети и некорректной работе во избежание негативных последствий, несчастных случаев, причинения травм.
 - После длительного периода неиспользования устройства, пожалуйста, повторно прочитайте инструкцию.
 - Убедитесь в корректной работе и правильном управлении устройством перед использованием во избежание негативных последствий, несчастных случаев, причинения травм.
- ! Устройство не применяется в качестве медицинского прибора и не рассматривается в качестве такового.**
- Перед использованием, снимите с себя все аксессуары, такие как очки и украшения, в зоне использования на голове и лице, во избежание негативных последствий, несчастных случаев, причинения травм.
 - Людям, которые не могут выразить или передать свои ощущения, также людям с ограничениями движения запрещается использование устройства во избежание негативных последствий, несчастных случаев, причинения травм.
 - Пожалуйста, соблюдайте требования к электрическому питанию устройства. При несоблюдении, устройство, разъемы, кабель или розетки могут перегреться что может привести к пожару, возгоранию, иным происшествиям.


Наименования частей устройства

Лицевая сторона устройства

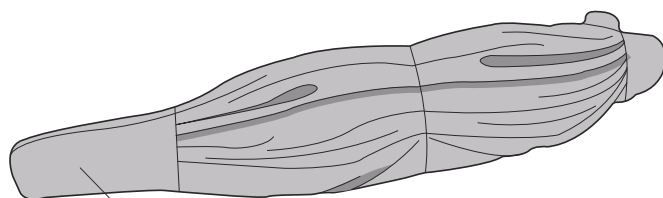

Липучка

Обратная сторона устройства

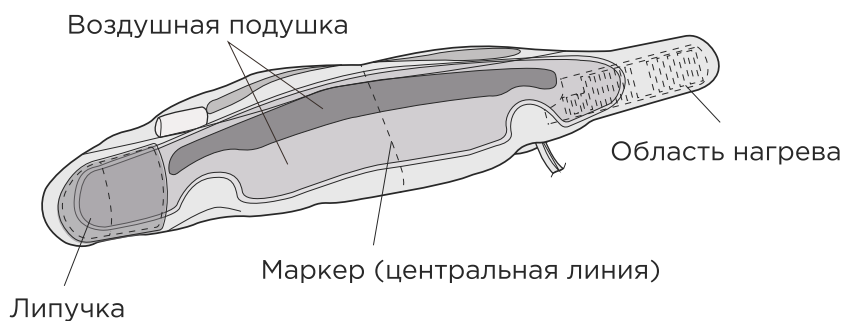


Методика применения

ШАГ 1

Перед использованием полностью зарядите устройство (приблизительно 5 часов).



ШАГ 2

Центральная линия (промаркирована на устройстве) сопоставляется с серединой лба, нижняя часть устройства выравнивается по уровню линии бровей.

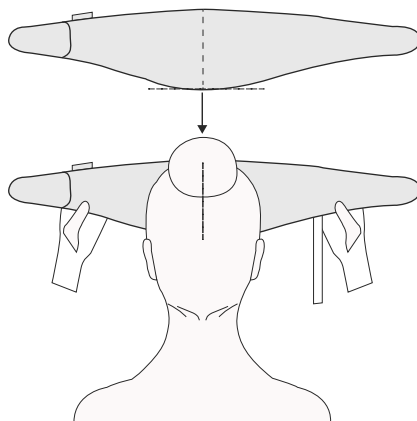

ШАГ 3

Закрепите аппарат на задней части головы с помощью крепления на липучке.

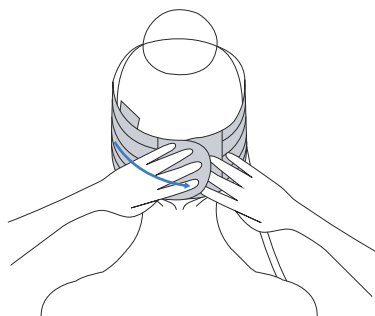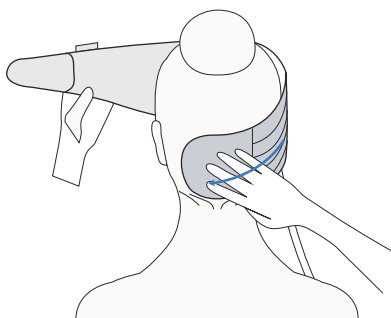


Технические характеристики

Номинальное напряжение и мощность	5 В (V), 8 Вт (W)
Требования к переменному току AC	100-240 В (V), 50/60 Гц (Hz)
Таймер	Автоматическое отключение через 15 минут
Масса, нетто	Около 400 грамм
Габариты устройства (ширина / длина / высота)	Аппарат: 750 x 20 x 130 (мм) Пульт управления: 55 x 13 x 30 (мм)
Подходит для головы с окружностью	55-65 см (приблизительно)
Материал	Пульт управления: пластик ABS
Тканевое покрытие	Смотрите ярлык с информацией по стирке и уходу

Управление

ШАГ 1

Длительное нажатие на кнопку питания  в течение трех секунд включает устройство.

Кнопка питания



ШАГ 2

Нажимайте на кнопку питания для выбора требуемого режима.

Режим 1: Dredging Meridian -

Режим 2: Relieve Fatigue – Снятие усталости и болезненности

Режим 3: Acupressure – Точечный массаж

ШАГ 3

Отрегулируйте уровень нагрева кнопкой настройки температуры.

Уровень 1: низкий уровень

Уровень 2: средний уровень

Уровень 3: высокая температура


Дополнительное нажатие:

отключение функции нагрева

Кнопка настройки температуры




ШАГ 4

После использования, длительное нажатие на кнопку питания. 

Применение режимов (программ)

Dredging Meridian -

Возьмитесь за устройство и потяните вверх для ощущений растягивания вверх и вниз при массаже.

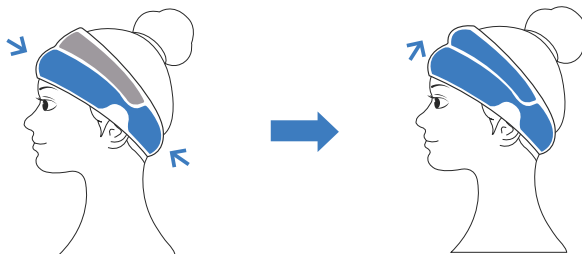


Нижняя воздушная подушка
Наполняется и фиксируется

Верхняя воздушная подушка
наполняется для поднятия и натяжения

Relieve Fatigue - Снятие усталости и болезненности

Чередование движений верхней и нижней воздушных подушек.
Ощущения ритмического массажа.

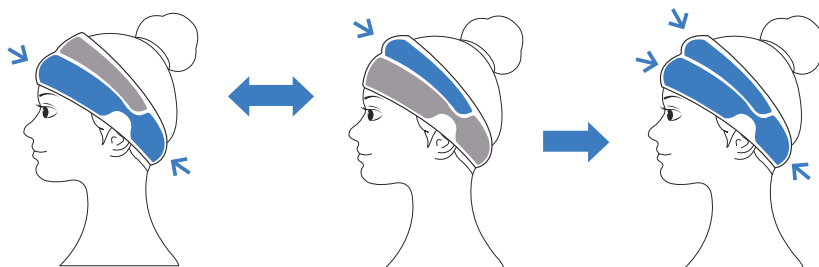


Нижняя воздушная подушка
наполняется и сжимает

Верхняя воздушная подушка
наполняется и сжимает

Общее сжатие
после чередования

Acupressure - Точечный массаж . Массаж кожи головы.

Одновременное сжатие верхней и нижней воздушных подушек.
Ощущение массажа всей головы при надавливании пальцами.

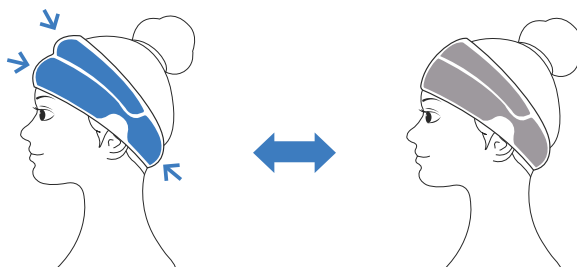


Сжатие всей головы

Выпуск воздуха и ослабление после сжатия

Обслуживание устройства


Тканевая накладка снимается для чистки.

1. Расстегните застежку накладки.

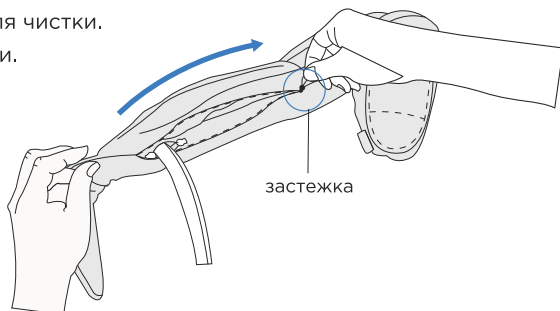

2. Извлеките корпус устройства из тканевой накладки.



Очистите тканевую накладку согласно ярлыку с указаниями о стирке и уходе.

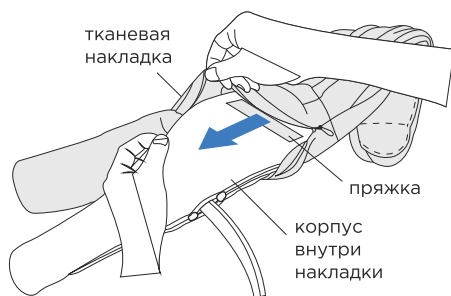

3. После очистки, убедитесь, что накладка сухая.

Вставьте один конец корпуса устройства внутрь накладки.

Отрегулируйте положение. Застежка и тканевая накладка должны быть скреплены. После этого поместите устройство полностью в накладку и застегните накладку.

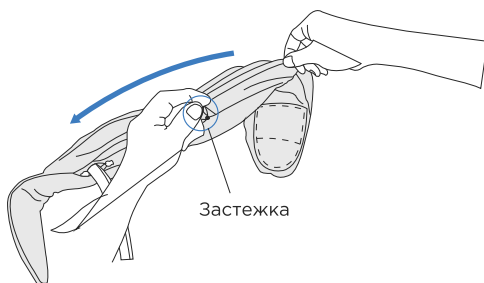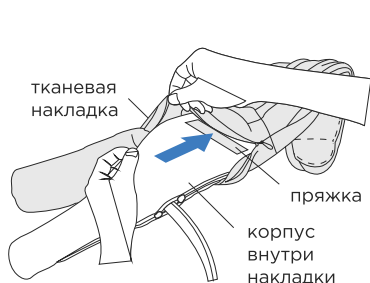

Уход за корпусом устройства и пультом управления.

Мытье и стирка запрещены в отношении корпуса устройства и пульта управления. При протирке корпуса устройства и пульта управления мягкой тканью, убедитесь, что ткань хорошо отжата.


Перед очисткой отключите кабель и адаптер питания.

Пожалуйста, не используйте для очистки спирт, растворители, бензин во избежание повреждения устройства и пульта управления и сбоев в работе, а также их окрашивания.

Надевание и ношение

Сопоставьте центральную
отмеченную линию с центром лба

Немного прикройте уши

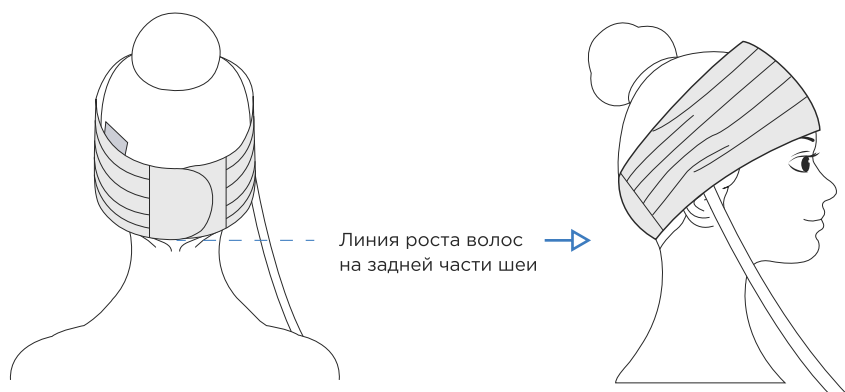

Неправильное ношение может привести к негативным последствиям.
Слишком высокое положение может привести к падению устройства во время работы.
Слишком низкое положение может привести к давлению на глаза и травмам
в результате такого давления. Пожалуйста, надевайте и носите устройство правильно.

Комплектация

- воздушная подушка
- кабель
- пульт управления
- инструкция

Гарантии производителя

На изделие дается гарантия сроком на 12 месяцев со дня продажи. Гарантируется, что изделие не имеет дефектов, связанных с производством и качеством произведенных материалов. Любая дефектная часть будет заменена, если не производилось вмешательство в устройство изделия и изделие надлежащим образом эксплуатировалось во время этого периода. Удостоверьтесь, что любой сбой в работе не происходит из-за неадекватного ухода за изделием или несоблюдения инструкции. В случае возникновения неисправности при соблюдении требований по эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации, производитель производит текущий ремонт или замену изделия или его частей. Техническое обслуживание изделия должен производить специалист.

Сведения об утилизации

Утилизация изделия должна осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-2010. Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – эйдологические безопасные отходы.

Изделие подлежит утилизации в случае:

- окончания срока службы;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медработников и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации так же подлежит вся упаковка, в том числе и транспортировочная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, дерево, полиэтилен и пластмасса в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации упаковки.

Соответствие нормативным требованиям ЭМС

При правильной эксплуатации, оборудование соответствует международным и национальным законам и стандартами по электромагнитной совместимости (ЭМС). В этих законах и стандартах изложена дозировка электромагнитного излучения допустимая для эксплуатации оборудования и возможность оборудования противостоять помехам электромагнитного излучения извне. Подробнее вы всегда можете уточнить у сотрудников Iledea по электронной почте: iledea.toy@gmail.com.



Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Сведения о сертификации

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно дополнительно запросить у производителя

Товар сертифицирован № ЕАЭС КГ 417/036.CN.02.00091

Срок действия — с 20.10.2021 по 19.10.2026 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — ООО «Азиястандарт».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники, вы можете проконсультироваться по электронной почте iledea.toy@gmail.com (служба информационной поддержки).

Условия сервисного обслуживания

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия распространяется на:

— на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием или работой аппарата, пожалуйста, обратитесь по адресу: iledea.toy@gmail.com.

⚠ Предупреждение

Внимание! Поскольку данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, работа других медицинских и не медицинских приборов и беспроводной связи может перебиваться. Для него характерно создание электромагнитных помех в воздушной или кабельной среде. Конструкция данного изделия полностью соответствует стандартам ЭМС и предоставляет разумную защиту против таких помех.

Примечание:

Использование рядом с данным изделием таких устройств, как сотовые телефоны, приемопередатчики или приборы с дистанционным управлением, которые создают радиоволны, может создавать помехи в работе этого изделия. Выключайте данные устройства при их нахождении рядом с оборудованием.

При установке следите за тем, чтобы это оборудование располагалось как можно дальше от другого электронного оборудования.

Используйте только кабели, предоставленные производителем и их подключение должно производиться только квалифицированным техническим персоналом.

Используйте периферийные устройства, утверждённые для подключения к данному оборудованию. Избегайте использования неутвержденных устройств, так как это может снижать характеристики ЭМС оборудования.

Не пытайтесь модифицировать данное оборудование, внесение изменений изделия может привести к снижению характеристик ЭМС. Под изменениями подразумеваются модификации кабелей, несоблюдение правил установки и размещения изделий, изменений его конфигурации и его компонентов, внесение изменений в установленные процедуры, работы с устройством или принадлежностями и т.д.

После проведения технического обслуживания, проверяйте фиксацию всех болтов. Плохо закрученные болты могут приводить к снижению характеристик ЭМС.

Меры по устранению проблем, связанных с ЭМС

Если выявлено, что данное оборудование создает помехи, то пользователь должен устранить проблему одним или несколькими методами, перечисленными ниже:

Располагайте другие устройства как можно дальше от данного оборудования для уменьшения создаваемых электромагнитных помех.

Для уменьшения электромагнитных помех можно отрегулировать положение оборудования и других устройств или угол между ними.

Электромагнитные помехи можно сократить путем изменения точки подключения кабелей питания/сигнальных кабелей устройств.

Для уменьшения электромагнитных помех можно так же изменить канал подачи питания на другие устройства.

ⓘ Предупреждение

Подключение, соединение, замена и отключение любых кабелей, входящих в состав данного оборудования, должны выполняться только квалифицированным техническим персоналом.

Производитель не несет никакой ответственности за помехи, вызванные использованием не рекомендованного соединяющего кабеля, модификации или изменением оборудования без разрешения. Не санкционированное изменение или изменение оборудования может лишить пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Если следующее технически не запрещено, то все соединительные кабели, связанные с периферийным оборудованием, должны быть правильно экранированы и заземлены. В случае не правильного экранирования и заземления какого-нибудь кабеля, испытываемое оборудование может производить высокочастотные помехи.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ: Компрессионный аппарат для головы с подогревом

ДАТА И СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: 10.2021 г., Китай


МОДЕЛЬ: BM-FE7121, Iledea

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/АРТ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАВЕЦ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: _____



ШТАМП ПРОДАВЦА

Изделие проверено, повреждений не имеет.
С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи.
По вопросам гарантии обращаться в сервисный центр:

Внимание! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Серийный номер изделия/артикул должен в точности соответствовать номеру в талоне. Все графы талона (за исключением граф для гарантийного центра) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной. Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях. Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных механических агентов. Эксплуатация изделия допускается только в соответствии с руководством по эксплуатации к изделию.

ОТМЕТКА О ГАРАНТИИ

ДАТА	ОПИСАНИЕ	ГАРАНТИЙНЫЙ ЦЕНТР