


**Здоровье
зубов?
Я ГОТОВ!**



**Ирригатор
для полости рта
КТ-2957**

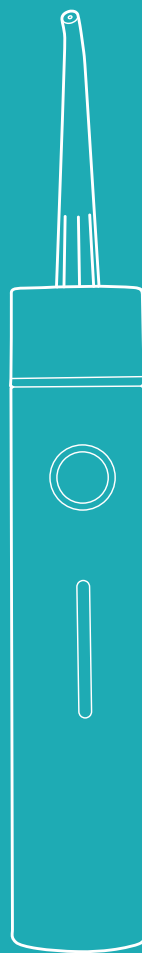

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание


Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство ирригатора для полости рта.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	13

Общие сведения

Ирригатор КТ-2957 — важное вспомогательное устройство для поддержания гигиены полости рта. Он позволяет справиться с налетом и остатками пищи в труднодоступных местах, например, межзубном пространстве и пародонтальных карманах.

После еды остатки пищи застревают между зубами, забиваются в карманы десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флоссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Также зубной нитью можно механически повредить десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флоссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и налет из межзубного пространства и десневых карманов. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболевания десен. Ирригатор считается самым гигиеничным вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен людям, которые носят брекеты, и людям с протезами или коронками.

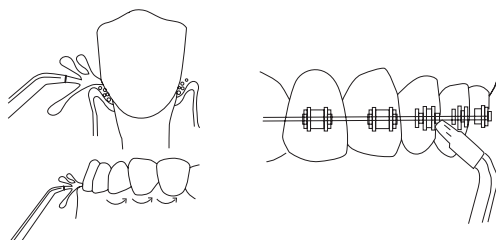

Модель Kitfort КТ-2957 является портативным ирригатором, который можно брать с собой в путешествие или на работу. Заряжать его также можно в любом удобном месте через резервуар от компьютера или сетевого адаптера (в комплект не входит), используя USB-шнур, поставляемый в комплекте. Прибор автоматически отключается после 1,5 минут использования. В комплектацию также входят 2 струйные насадки.

Управление осуществляется с помощью одной кнопки. Данная модель оснащена тремя режимами работы, каждый из которых регулирует напор струи воды. Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с самого слабого режима «Мягко», так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и тонкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете переходить на более сильные режимы.

Цвет индикатора меняется в зависимости от выбранного режима работы.

В комплекте к ирригатору идет резервуар для воды емкостью 320 мл, чего хватает для тщательной обработки полости рта.


В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменит собой зубную щетку, он является частью комплексного ухода за полостью рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш лечащий врач-стоматолог, обычно уход включает в себя: ирригацию, чистку зубов зубной щеткой и ершиками, полоскание рта ополаскивателем и использование зубной нити, если это необходимо. Этот прибор рекомендуют стоматологи во всем мире.

Комплектация

1. Ирригатор — 1 шт.
2. Струйная насадка — 2 шт.
3. Всасывающая трубка с катушкой и переходником — 1 шт.
4. Резервуар — 1 шт.
5. Шнур USB — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ирригатора

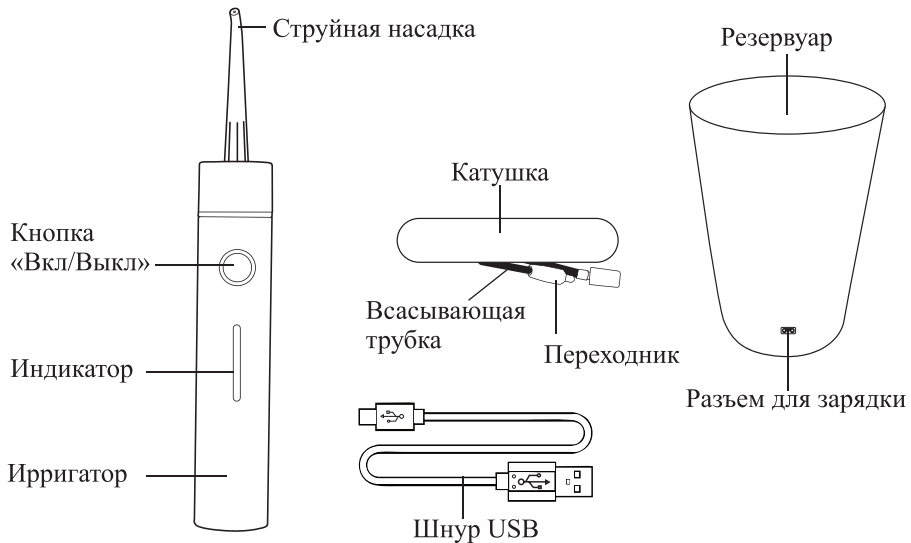

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство, а также циклически переключает режимы работы.

Ирригатор прост в использовании: на ирригатор надевается **струйная насадка**. **Резервуар** заполняется водой или специальной жидкостью для ирригаторов. Затем в резервуар помещается **всасывающая трубка с катушкой**, а переходник всасывающей трубки присоединяется к ирригатору. Катушка служит для более удобного хранения всасывающей трубки, а также для защиты от повреждений. Всасывающую трубку с катушкой также можно поместить в любую другую емкость с водой, а резервуар использовать для зарядки устройства и как подставку для ирригатора.

Индикатор горит непрерывно во время работы прибора, а также когда устройство полностью заряжено, и плавно мигает при зарядке. Цвет индикатора меняется

в зависимости от выбранного режима работы. Зарядка ирригатора происходит при помощи **шнура USB**, который подключается к резервуару от компьютера, пауэрбанка или сетевого адаптера. Ирригатор устанавливается в резервуар, который работает как беспроводное зарядное устройство.

Режимы работы

Ирригатор оснащен тремя режимами работы.

В режиме **«Мягко»** струя самая слабая. Если вы до этого не пользовались ирригатором, рекомендуется начинать им пользоваться, установив этот режим, так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды. В режиме «Мягко» индикатор горит желтым.

В режиме **«Сильно»** струя самая сильная, для лучшего очищения межзубного пространства и других труднодоступных мест во рту. В режиме «Сильно» индикатор горит зеленым.


В режиме **«Умеренно»** точно направленная струя воды очищает межзубное пространство и другие труднодоступные места во рту. В режиме «Умеренно» индикатор горит фиолетовым.

Для переключения режимов нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Устройство сменит режим, и индикатор поменяет цвет.

Чтобы отключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», не удерживая ее. При следующем использовании прибор включит последний выбранный режим.

Классическая струйная насадка

С помощью данной насадки можно очистить труднодоступные места во рту. Остатки пищи, которые глубоко «забиваются» в зубных или междесневых пространствах, с легкостью вымываются потоком воды или специального раствора.

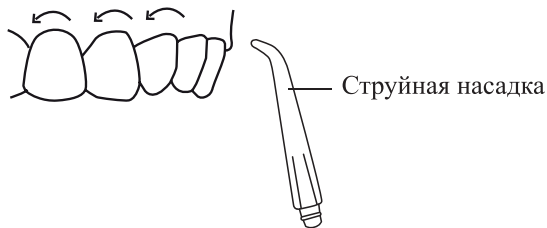

Подготовка к работе и использование

Достаньте прибор из коробки и удалите весь упаковочный материал.

Перед первым использованием зарядите ирригатор.

Вымойте насадки. Протрите резервуар сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания воды в область разъема для зарядки на резервуаре. Установите струйную насадку в отверстие для насадки на ирригаторе до щелчка. Заполните резервуар или другую емкость водой или специальной жидкостью для ирригаторов. Размотайте всасывающую трубку с катушки. Переходник всасывающей трубки присоедините к ирригатору, а катушку поместите в резервуар или емкость. Включите прибор, направив насадку в раковину.

Зарядка ирригатора

Для зарядки подходит шнур USB из комплекта. Если у вас есть в наличии сетевой адаптер, то другой конец шнура вставьте в сетевой адаптер, а сам адаптер подключите в сеть. Для зарядки устройства рекомендуется использовать сетевой адаптер с выходными параметрами ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Перед подключением шнура USB к разъему для зарядки убедитесь, что резервуар сухой. Один конец шнура подсоедините к разъему для зарядки, другой — к источнику питания.

Установите ирригатор в резервуар для зарядки.

Во время подзарядки индикатор будет плавно мигать. Когда устройство полностью зарядится, индикатор будет гореть непрерывно. Время полной зарядки составляет около 8 часов.

Внимание! Во время зарядки пользоваться ирригатором нельзя.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С.

Если вы планируете не пользоваться ирригатором в течение длительного времени, зарядите его наполовину перед тем, как убрать на хранение.

Для увеличения срока службы батареи не оставляйте ирригатор разряженным на длительное время. Если вы оставите ирригатор разряженным, то батарея из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога, и электрическая схема заблокирует батарею. В этом случае попробуйте зарядить ирригатор в течение 16 часов.

Если ирригатор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите ирригатор, затем заряжайте примерно 4 часа.

Как налить воду

Используйте кипяченую воду или специальные жидкости для ирригаторов. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С. Измерять температуру воды необязательно, достаточно, чтобы она была комфортной. Горячая вода не повышает качество чистки и может навредить вам, а слишком холодная вода вызывает неприятные ощущения.

Размотайте всасывающую трубку с катушки. Конец всасывающей трубки на катушке расположите на дне резервуара. Переходник всасывающей трубки вставьте в отверстие в нижней части ирригатора. Наполните резервуар водой или специальным раствором.

Установка насадки

Насадка для ирригатора является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи.

Примечание. Насадки рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев.

Вставьте насадку в место установки насадки так, чтобы углубления на насадке попали в пазы на ирригаторе. Слегка надавите на насадку, чтобы она зашла внутрь, и поверните ее против часовой стрелки до упора. Обязательно поворачивайте насадку, завершая процесс ее фиксации, во избежание ее выпадения под давлением воды.


Чтобы извлечь насадку, поверните насадку по часовой стрелке, после чего потяните ее вверх.

Использование

1. Перед тем как нажать на кнопку «Вкл/Выкл», наклоните ирригатор под углом 45° и направьте струйную насадку себе в рот.

Примечание. При включении ирригатор запускает последний выбранный режим. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмированы резким и сильным потоком воды. В режиме «Мягко» индикатор загорится желтым цветом.

2. Наклонитесь над раковиной, а рот слегка приоткройте, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке: двигайтесь от жевательных зубов к перед-

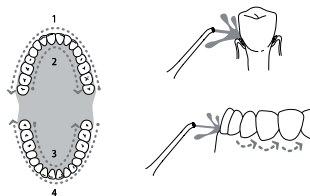

ним, направляйте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте прибор только при нахождении насадки во рту.

3. По истечении 1,5 минут ирригатор автоматически отключается. Если вода закончилась или вы хотите прекратить чистку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Чтобы снять насадку, поверните ее по часовой стрелке и потяните вверх. Вылейте воду из резервуара, промойте резервуар и насадку.

Примечание. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для ирригатора, обязательно промойте ирригатор после него. Для этого налейте в резервуар чистую воду, включите ирригатор с установленной насадкой, направляя сам прибор и насадку вниз в раковину.

Протрите резервуар влажной мягкой тканью. При необходимости аккуратно промойте резервуар изнутри, не допуская попадания воды в разъем для зарядки. После мытья просушите все части прибора. Всасывающую трубку следует сматывать на катушку — это обеспечит более компактное хранение, а также защитит всасывающую трубку от повреждений.

Советы

Для ирригатора подходит отфильтрованная, кипяченая, питьевая, а также бутилированная (не минеральная) вода. Также можно использовать специальные жидкости для ирригаторов. Травяные отвары, которые могут вызвать отложения в системе ирригатора, использовать нельзя во избежание его повреждения. Также запрещено использовать антисептики, любые химические вещества, жидкости с содержанием масел — они способны разредить некоторые элементы внутри ирригатора. Обычный ополаскиватель для полости рта или раствор зубной пасты также заливать внутрь

резервуара нельзя — при начале работы ирригатора начнет выделяться обильная пена, после чего прибор выйдет из строя.

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко», иначе чувствительные десны могут быть травмированы резким потоком воды. Спустя несколько недель, когда десны привыкнут, можно будет попробовать установить другие режимы.

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, проконсультируйтесь с врачом по этому поводу.

Будьте готовы к тому, что в начале использования ирригатора будет много брызг, поэтому процедуру очистки следует проводить над раковиной.

У ирригатора есть функция памяти. Устройство запомнит режим, который был установлен на момент отключения, и следующую работу начнет с него.

Рекомендуемая температура воды или раствора, используемого в ирригаторе, должна быть не выше 45 °С. Горячая вода не повышает качество чистки и может навредить устройству, а слишком холодная вода вызывает неприятные ощущения и вредит зубам. Ориентируйтесь на свои ощущения, со временем вы поймете, воду какой температуры использовать комфортнее всего.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для ирригатора, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать — промывайте устройство сразу же после использования таких жидкостей.

Соблюдайте правила личной гигиены. Насадка является индивидуальным аксессуаром, не позволяйте другим людям использовать ее. При семейной эксплуатации устройства у каждого члена семьи должна быть собственная насадка.

Насадки рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования.

Не применяйте зубную нить перед использованием ирригатора — она может повредить десну, а ирригатор только усугубит проблему.

Не отказывайтесь от чистки зубов с помощью зубной щетки. Ирригатор не является полноценной заменой зубной щетки — напротив, основную пользу данное устройство приносит только в комплексе со стандартной процедурой чистки зубов.

Оптимальным решением будет использовать ирригатор два раза в день, утром и вечером, после чистки зубов. Если вы носите брекететы — пользоваться прибором стоит после каждого приема пищи, так как остатки еды застревают чаще. Пользоваться ирригатором рекомендуется регулярно, не делая длительных перерывов — только в этом случае вы получите отличную профилактику заболеваний десен и качественное очищение труднодоступных участков полости рта.

Если вы носите брекететы, виниры, коронки или иные ортодонтические конструкции — используйте режим «Мягко». Минимального напора воды хватит для очистки, при этом вы не повредите данные системы. Рекомендуется применять ирригатор не ранее 24 часов после установки в ротовой полости каких-либо ортодонтических конструкций.

Если во рту появились воспаления, острые инфекции, обострились заболевания десен или вам провели какую-либо хирургическую операцию, вроде удаления зуба или установки имплантов — приостановите использование ирригатора. Возобнови-

те использование устройства только после снятия острых симптомов, полного заживления тканей или консультации с лечащим врачом.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Периодически промывайте насадки водой с мылом. Насадки рекомендуется менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от частоты использования прибора.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, после чего направьте сам прибор и насадку вниз в раковину.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для ирригатора, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы избежать этого, промывайте устройство сразу же после использования специальных жидкостей для ирригаторов, а также протирайте резервуар влажной мягкой тканью. При необходимости промойте резервуар изнутри. Не допускайте попадания воды в разъем для зарядки.

Как избавиться от известкового налета

Внутри ирригатора по истечении некоторого времени начинают скапливаться известковый налет и прочие отложения в зависимости жесткости воды. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет со всех поверхностей и скрытых элементов устройства.

Также вы можете воспользоваться лимонной кислотой из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте 150 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар. Включите прибор, направив насадку в раковину, и выключите. Оставьте устройство на 15–20 минут. Затем включите ирригатор с чистой водой несколько раз.

Уход и хранение

Храните ирригатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра.

Аккумулятор устройства литий-ионный, поэтому при длительном хранении устройство лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем полностью разрядить устройство, после этого зарядить его примерно наполовину в течение 4 часов. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, отсоедините от него насадку. Очистите устройство, как это указано в главе «Чистка и обслуживание». Просушите все части прибора и уберите их на хранение.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Ирригатор не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки ирригатора от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Шнур USB неплотно подключен к разъему на задней части резервуара или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB с устройством и с источником питания
Ирригатор установлен в углубление для зарядки в резервуаре для воды	Поместите ирригатор в углубление для зарядки в резервуаре для воды
Поврежден шнур USB	Замените шнур USB на новый

Вода вытекает из места соединения насадки с корпусом

Возможная причина	Решение
Насадка установлена не плотно	Установите насадку в место установки насадки и поверните ее против часовой стрелки до упора
Струйная насадка повредилась, между насадкой и корпусом образовался зазор	Замените насадку на новую и установите ее согласно инструкции

Ирригатор шумит при работе

Возможная причина	Решение
Катушка задевает емкость во время работы	Это нормальное явление. Для уменьшения шума вы можете придерживать катушку во время работы устройства

Низкое давление или ирригатор не включается

Возможная причина	Решение
Ирригатор разрядился	Произведите зарядку согласно главе «Зарядка ирригатора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора

Вода не поступает

Возможная причина	Решение
Насадка не закреплена	Надавите на насадку и зафиксируйте, повернув против часовой стрелки до упора
Всасывающая трубка размещена неправильно	Катушку с всасывающей трубкой следует располагать концом трубки вниз. Убедитесь, чтобы переходник всасывающей трубки был плотно присоединен к ирригатору
Насадка засорилась	Хорошо промойте насадку и вставьте ее в прибор. При необходимости замените насадку
Налет скопился на внутренних поверхностях прибора	Произведите очистку ирригатора так, как описано в разделе «Чистка и обслуживание»

Насадка не снимается

Возможная причина	Решение
Вы не повернули насадку	Поверните насадку по часовой стрелке до упора, затем потяните ее вверх

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈ 5 В, 1 А
2. Мощность: 4 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,4 А*ч (5,18 Вт*ч)
5. Макс. частота пульсации струи: 1600 имп/мин
6. Давление воды: от 3,44 до 6,89 бар (в зависимости от выбранного режима)
7. Емкость резервуара для воды: 320 мл
8. Время зарядки: 8 ч
9. Режимов работы: 3
10. Автоотключение: через 1,5 мин
11. Время работы ирригатора: 30 мин
12. Длина шнура: 1 м
13. Размер устройства: 80 × 80 × 253 мм
14. Размер упаковки: 141 × 87 × 218 мм
15. Вес нетто: 0,3 кг
16. Вес брутто: 0,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фучжоу Ланьсан Криейтив Текнолэджи Ко., Лтд. Фэктори №702, Билдинг А01, №99, Тинцзян Роуд, Тинцзян Таун, Мавэй Дистрикт, Фучжоу Сити, Фуцзянь Провинс (Бизнес Локейшен: Мавэй Дистрикт, Фучжоу Сити), Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение всасывающей трубки, насадки или резервуара органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую воду и регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Людям, которые недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию, имеющим острые сердечно-сосудистые заболевания, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением ирригатора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним.
3. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
4. Используйте ирригатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите ирригатор, взявшись за шнур USB. Не тяните за шнур USB при отключении от источника питания.
7. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
8. Проводите зарядку устройства в сухом месте. Все компоненты, включая ирригатор шнур USB и источник питания должны быть сухими.
9. После зарядки отсоедините шнур USB сначала от источника питания, затем от устройства.
10. Не используйте устройство, если шнур USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
11. При повреждении шнура USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться ирригатором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором, ирригатор не игрушка.
13. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
14. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования.
15. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С.
16. Не допускайте падения ирригатора и не подвергайте его ударам. Запрещено пользоваться устройством в случае видимых повреждений на нем.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получения травм.
19. Убедитесь, что насадка ирригатора зафиксирована так, как написано в данной инструкции. В случае некорректной фиксации есть вероятность вылета насадки из устройства под давлением воды.
20. Не используйте ирригатор без насадки во избежание его повреждения.
21. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмированы резким и сильным потоком воды.
22. Категорически запрещено направлять ирригатор в сторону глаз во избежание нанесения травм.
23. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
24. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
25. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
26. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87