


Руководство по эксплуатации Массажер электронный Calmer Concern K-02 для ног

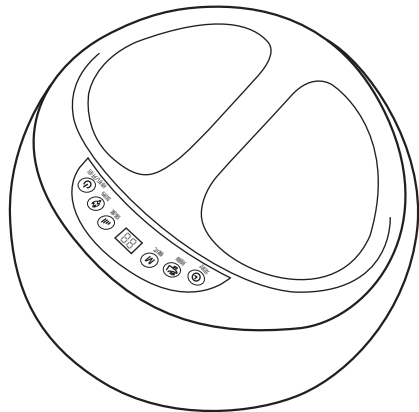

Технические характеристики

Название продукта: Массажер электронный
Модель продукта: K-02
Номинальное напряжение: 12 В
Номинальная мощность: 24 Вт
Номинальное время работы: 15 мин
Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005
GB4706.10-2008

Массажер для ног оказывает комплексное действие на стопы, расслабляет, снимает напряжение и избавляет от усталости. Благодаря воздействию на акупунктурные точки стопы, прибор улучшает общее состояние, активизирует обменные процессы, а также дарит ощущение внутреннего комфорта после использования.

Позволяет решить такие проблемы как: малоподвижный образ жизни и сидячая работа, повышенная статическая нагрузка на ноги, чувство тяжести и помоты в ногах, стресс, усталость, профилактика варикозного расширения вен и заболеваний суставов.

Перед началом использования данного прибора внимательно изучите руководство и ознакомьтесь с инструкцией по безопасности, а так же ознакомьте всех пользователей данного массажера.


Руководство подлежит хранению и использованию в качестве справочного материала.

Прибор не является медицинским оборудованием. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменение в дизайн и технические характеристики изделия, не ухудшающие его потребительские свойства.

Схема панели управления

режим ожидания с автоматическим
отсчётом времени на 15 минут

Для сохранения здоровья вас и вашей семьи мы устанавливаем режим работы массажера для ног на 15 минут, который автоматически прекращает работу, что позволяет избежать длительной перегрузки и продлить срок службы аппарата.

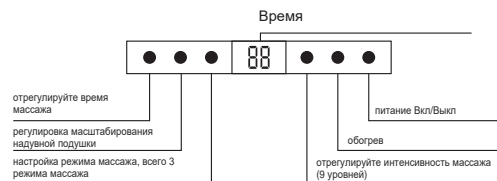

Подготовка перед использованием

1. Проверьте, не повреждено ли изделие
2. Убедитесь, что оно надёжно закреплено и удобно в использовании.
3. Отвяжите жгут проводов и вставьте внешний адаптер 12 В в розетку с напряжением 220 В ~.



Способ эксплуатации

- Время:** Время массажа по умолчанию составляет 15 минут, которое можно настроить на 10, 15, 20, 25 и 30 минут.
- Кнопка закрывания ног:** на дисплее отображается шкала силы надувной подушки С1, а на дисплее - синхронизация срабатывания надувной подушки С0.
- Клавиша выбора режима:** На дисплее отображаются значения Р1 "легкий массаж", Р2 "комфортный массаж" и Р3 "интенсивный массаж".
- Клавиша интенсивности:** Интенсивность массажа можно регулировать на девяти уровнях, от L1 до L9. Интенсивность постепенно увеличивается от L1 до L9 и может регулироваться в соответствии с потребностями каждого человека.
- Клавиша обогрева:** на экране дисплея отображается, что функция обогрева Н0 выключена
- Кнопка включения:** на дисплее отображается значение 0F выкл., а на дисплее - 15 мин автоматического выключения. Функции: Функция полного обертывания поверхности стопы воздушной подушкой, функция массажа кончиков пальцев ног, подъём и надавливание на свод стопы для обеспечения спокойного сна, а также нагрев подошв для улучшения кровообращения. Функция Р1 foot elastic включает в себя полный комплекс расслабляющих массажей, массаж передней поверхности стопы, массаж середины стопы, надавливающий массаж верхней части и разогрев стопы. Функция Р2 Воздушная подушка для ног с полным набором функций: сжимающий массаж, массаж передней поверхности стопы, массаж середины стопы, надавливающий массаж верхней части и подогрев стопы. Функция Р3 (управление одним воздушным клапаном): Экструзионный массаж с подогревом надувной подушки для ног, массаж передней части стопы, массаж средней части стопы с максимальным давлением, подогрев стопы. Интеллектуальный массажный диск, имитирующий технику массажа человеком, охватывает 64 рефлекторных зоны на подошве стопы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что технические параметры массажера соответствуют напряжению электросети, к которой подсоединяется устройство.
2. Не подключайте массажёр к сети, если у Вас мокрые или влажные руки во избежание удара электрическим током.
3. Убедитесь в исправном состоянии шнура питания и вилки.
4. Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от горячих поверхностей и предметов. Тренажёр рассчитан на подключение к сети с номинальным напряжением ~220-240В. Если у Вас возникают сомнения в правильности подключения тренажера к сети, обратитесь к квалифицированному электрику.
5. Для снижения риска поражения электрическим током всегда отсоединяйте массажер от электрической сети после его использования.
6. Не применяйте изделие в случае, если у Вас гиперчувствительная кожа.
7. Не размещайте массажер на хранение в холодном помещении.
8. Во время использования массажера не накрывайте его одеялом, пледом и прочими вещами во избежание пожара или повреждения устройства.
9. Используйте массажер в сухом закрытом помещении.
10. Не используйте массажер в ванной комнате, в душе.
11. Не вставляйте на платформу массажера.
12. Не помещайте на платформу массажера мокрые или влажные ноги.
13. Не вставляйте во вращающиеся валики массажера посторонние предметы.
14. Если массажер имеет какие-либо повреждения, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
15. Немедленно прекратите использование массажера при ощущении дискомфорта.
16. Не используйте и не храните массажер под прямыми солнечными лучами.
17. Не устанавливайте прибор в помещениях с высокой температурой (баня, сауна).
18. Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство как игрушку.
19. Не используйте прибор во время или сразу после еды (массаж ног перед приёмом пищи или после него отрицательно влияет на переваривание пищи).

Противопоказания

- Беременность
- Сахарный диабет
- Злокачественные образования
- Эпилепсия, тяжёлые неврологические заболевания
- Варикоз, склонность к тромбозам, повышенная свёртываемость, патология крови
- Наличие медицинских искусственных частей в ногах: имплантатов или штифтов
- Нарушения артериального кровообращения
- Гипертоническая болезнь
- Туберкулез
- При дисфункции суставов, (ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз)
- Электрокардиостимулятор
- Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIB и III, прогрессирующий артериосклероз
- Заболевания почек и выделительной системы
- Алкогольное или наркотическое опьянение
- Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре, при обострении хронических воспалительных заболеваний.
- Не используйте массажер при патологических изменениях или травмах в области ног (например, открытые раны, шишки, грибковое поражение кожи ног)

Предупреждение

Использование прибора детьми возможно только под наблюдением ответственных лиц. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом. Используйте прибор только по его прямому назначению.

Прибор предназначен исключительно для бытового использования. Производитель/ Продавец не берут на себя ответственность в случае возникновения проблем при его использовании в коммерческих целях. При использовании прибора в коммерческих целях: общественных (медицинских, оздоровительных и т.п.) организациях, на него не распространяются гарантийные обязательства продавца по ремонту и обслуживанию.

Если массажер хранился или транспортировался при низких/отрицательных температурах и/или в условиях повышенной влажности (более 75%), необходимо перед эксплуатацией выдержать не менее 4х часов. Далее можно приступить к эксплуатации массажера.

1. Эргономичный дизайн позволяет вам наслаждаться профессиональным массажем стоп в любое время. Разработанный в соответствии с принципами эргономики, уникальный дизайн формы и распределение акупунктурных точек полностью соответствуют строению стопы человеческого тела, вы можете каждый день расслаблять ноги перед сном и просмотром телевизионных программ.
2. Двойная защита, более удобная в использовании. Двойная гарантия защиты от перегрева и перегрузки по току обеспечивает безопасность и надежность, позволяя вам с удовольствием наслаждаться массажем ног.
3. Шесть кнопок (переключатель, режим, интенсивность, нагрев, покрытие стопы, время): Разминание стопы, массаж, волнообразный массаж с функцией подогрева; Обертывание воздушной подушкой и сдвигивающий массаж на подъеме стопы; Три режима, и в каждом режиме предусмотрена сила, которую можно свободно выбирать; Расчетное время работы - 15 минут.
4. Съёмный и моющийся чехол из ткани для ног обеспечивает постоянную чистоту.

НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Пути устранения
Прибор не включается	1. Отсутствует подключение к электросети.	1. Проверить подключение прибора к электросети
	2. Не нажата кнопка запуска.	2. Нажать кнопку запуска
Внезапная остановка	1. Отсутствие электропитания в сети.	1. Проверьте подключение к электросети.
	2. Продолжительность работы более 15 минут, перегрев прибора.	2. Перезапустите прибор после того, как он остынет.

Примечание: Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог решить проблему, обратитесь в сервисный центр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Не используйте массажёр ни для каких других целей, кроме массажа; это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте массажёр, если тканевый чехол порван или его части отсутствуют.
- Не позволяйте детям или лицам, не способным обращаться с оборудованием, пользоваться массажёром, храните массажёр в недоступном для детей месте.
- Не стойте и не садитесь на массажёр.
- Не вставляйте металлические предметы или легковоспламеняющиеся материалы в основной корпус.
- Не закрывайте массажёр во время использования. Это может привести к повышению температуры двигателя и последующей поломке или возгоранию.
- Не отключайте массажёр от сети во время работы. Это может привести к травмам.
- Не спите во время использования массажёра.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР В СЛУЧАЯХ:
 - Если на массажёр случайно попала вода, это может привести к поражению электрическим током. - Если во время массажа ощущается сильная или ненормальная боль, немедленно прекратите работу и обратитесь к врачу.
 - Если вы обнаружите какую-либо неисправность или любое другое ненормальное состояние во время работы, прекратите использование.
 - В случае сбоя питания при неожиданном восстановлении питания могут возникнуть травмы.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Перед очисткой массажера, отключите его от сети.
2. Не используйте для очистки корпуса жёсткие металлические щётки, различные растворители и полироли, содержащие спирт и бензол.
3. Для очищения корпуса массажера протирайте его сухой хлопковой тряпкой .
4. Если Вы не используете массажер в течение долгого времени, то рекомендуется хранить его в чистом и сухом помещении.
5. Берегите массажер от попадания на него прямых солнечных лучей , источников открытого огня и разогретых поверхностей.

Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Дата продажи	
ФИО покупателя	
Номер телефона	

- * 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его иностранных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год