

Руководство по эксплуатации
Массажер электронный Calmer Felicity K-30
для ног



Внимательно прочтите руководство перед началом эксплуатации данного массажера и сохраните её для дальнейшего использования.

Примечание: производитель оставляет за собой право изменять устройство данного изделия без дополнительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ: 220В, 50 Гц,

МОЩНОСТЬ: 45 Вт,

НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: 15 МИНУТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Шнур питания и адаптер

- Проверьте, соответствует ли напряжение питания стандарту адаптера.
- Не отсоединяйте вилку переменного тока от электрической розетки резко.
- Не подключайте и не отсоединяйте вилку от электрической розетки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности аппарата.
- При отсоединении держитесь за вилку, а не за шнур. Не кладите шнур под массажер или какие-либо тяжёлые предметы.
- Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от горячих поверхностей и предметов.
- Не наматывайте шнур питания на массажёр, так как это может повредить его и привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не используйте массажёр с повреждённым шнуром, обратитесь в сервисный центр для проверки или замены.
- Используйте адаптер, который соответствует техническим характеристикам для данного массажера.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Перед очисткой массажера, отключите его от сети.
2. Не используйте для очистки корпуса жёсткие металлические щётки, различные растворители и полироли, содержащие спирт и бензол.
3. Для очищения корпуса массажера протирайте его сухой хлопковой тряпкой .
4. Если Вы не используете массажер в течение долгого времени, то рекомендуется хранить его в чистом и сухом помещении.
5. Берегите массажер от попадания на него прямых солнечных лучей , источников открытого огня и разогретых поверхностей.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не используйте массажёр в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не используйте массажёр на мокром теле, это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

НАЗНАЧЕНИЕ

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Массажёр для ног оказывает комплексное действие на стопы, расслабляет, снимает напряжение и избавляет от усталости. Благодаря воздействию на точки стопы, прибор улучшает общее состояние, активизирует обменные процессы, а также дарит ощущение внутреннего комфорта после использования.

Позволяет решить такие проблемы как: малоподвижный образ жизни и сидячая работа, повышенная статическая нагрузка на ноги, чувство тяжести и ломоты в ногах, стресс, усталость, профилактика варикозного расширения вен и заболеваний суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ✦ Беременность
- ✦ Сахарный диабет
- ✦ Злокачественные образования
- ✦ Эпилепсия, тяжёлые неврологические заболевания
- ✦ Варикоз, склонность к тромбозам, повышенная свёртываемость, патологии крови
- ✦ Наличие медицинских искусственных частей в ногах: имплантатов или штифтов
- ✦ Нарушения артериального кровообращения
- ✦ Гипертоническая болезнь
- ✦ Туберкулёз
- ✦ При дисфункции суставов, (ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз)
- ✦ Электрокардиостимулятор
- ✦ Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIВ и III, прогрессирующий артериосклероз
- ✦ Заболевания почек и выделительной системы
- ✦ Алкогольное или наркотическое опьянение
- ✦ Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре, при обострении хронических воспалительных заболеваний .
- ✦ Не используйте массажёр при патологических изменениях или травмах в области ног (например, открытые раны, шишки, грибковое поражение кожи ног)


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Не используйте массажёр ни для каких других целей, кроме массажа; это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте массажёр, если тканевый чехол порван или его части отсутствуют.
- Не позволяйте детям или лицам, не способным обращаться с оборудованием, пользоваться массажёром, храните массажёр в недоступном для детей месте.
- Не стойте и не садитесь на массажёр.
- Не вставляйте металлические предметы или легковоспламеняющиеся материалы в основной корпус.
- Не закрывайте массажёр во время использования. Это может привести к повышению температуры двигателя и последующей поломке или возгоранию.
- Не отключайте массажёр от сети во время работы. Это может привести к травмам.
- Не спите во время использования массажёра.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР В СЛУЧАЯХ:

- Если на массажёр случайно попала вода, это может привести к поражению электрическим током.
- Если во время массажа ощущается сильная или ненормальная боль, немедленно прекратите работу и обратитесь к врачу.
- Если вы обнаружите какую-либо неисправность или любое другое ненормальное состояние во время работы, прекратите использование.
- В случае сбоя питания при неожиданном восстановлении питания могут возникнуть травмы.

Общее схема

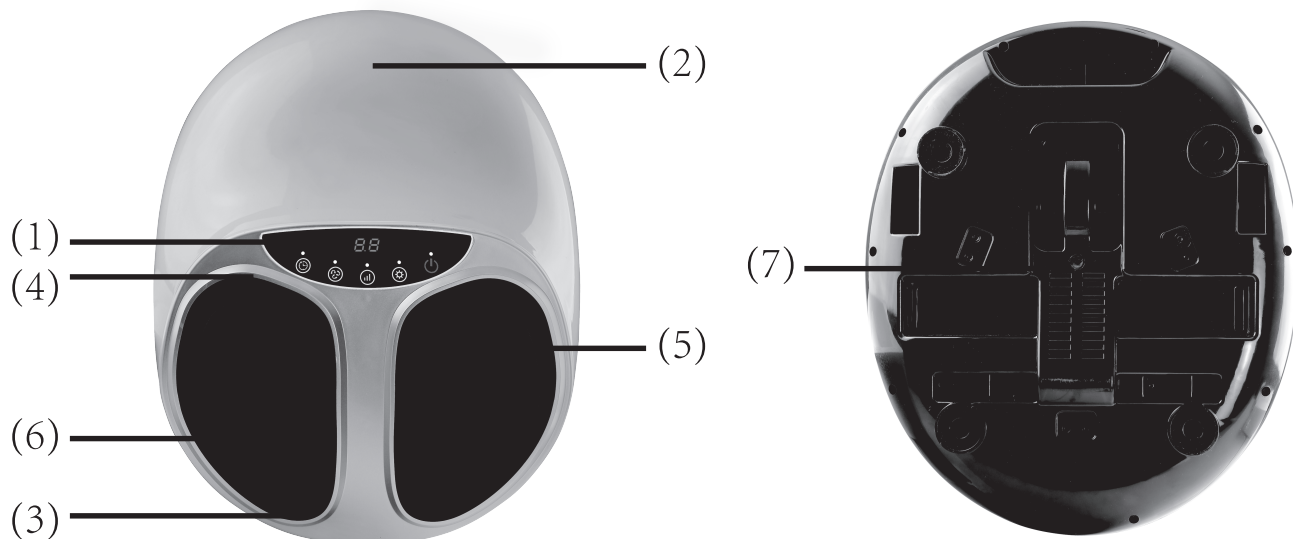

- (1) Панель управления
- (2) Массажная головка для достижения акупунктурного массажа области сгиба стопы, нагрев
- (3) Вращающаяся массажная головка для точечного массажа в области стопы
- (4) Массажная головка для точечного массажа в области пятки
- (5) Воздушная подушка - расположена близко к тыльной стороне стопы, массаж под давлением воздуха
- (6) Съёмный тканевый чехол, который можно стирать
- (7) Место намотки шнура питания

Массажер для ног оказывает комплексное действие на стопы, расслабляет, снимает напряжение и избавляет от усталости. Благодаря воздействию на акупунктурные точки стопы, прибор улучшает общее состояние, активизирует обменные процессы, а также дарит ощущение внутреннего комфорта после использования.

Позволяет решить такие проблемы как: малоподвижный образ жизни и сидячая работа, повышенная статическая нагрузка на ноги, чувство тяжести и ломоты в ногах, стресс, усталость, профилактика варикозного расширения вен и заболеваний суставов.

Перед началом использования данного прибора внимательно изучите руководство и ознакомьтесь с инструкцией по безопасности, а так же ознакомьте всех пользователей данного массажера.

Руководство подлежит хранению и использованию в качестве справочного материала.

Прибор не является медицинским оборудованием.

Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.


Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в дизайн и технические характеристики изделия, не ухудшающие его потребительские свойства.

Эксплуатация

1. Подключите массажер к сети.
2. Нажмите кнопку включения.
3. Настройте при помощи панели управления нужный режим работы массажера.
4. Поместите ступни на платформы массажера.
5. Массажер будет осуществлять работу в области пальцев ног, свода стопы, лодыжек. Во время массажа Вы можете плавно смещать ноги на платформах, чтобы получать массаж именно в той области, с которой требуется снять боль, отек, напряжение, ощущение скованности.



Панель управления

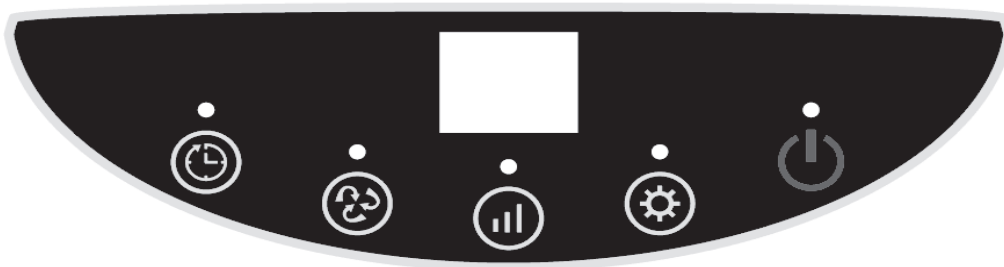

Время



Питание (ВКЛ/ВЫКЛ)



Нагревание
При включённом массажере можно активировать функцию подогрева (индикатор загорится красным)



Интенсивность
Контролируйте интенсивность L5 от низкого до высокого давления воздуха



Режим массажа
Управляйте режимом массажа. Массажер имеет три режима: 1- вращательный массаж (синий цвет), 2- массаж стоп (красный свет), 3-барометрический массаж (фиолетовый цвет)



Время
Установите время массажа: 5,10,15,20,25,30 минут

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь, что технические параметры массажера соответствуют напряжению электросети, к которой подсоединяется устройство.
2. Не подключайте массажёр к сети, если у Вас мокрые или влажные руки во избежание удара электрическим током.
3. Убедитесь в исправном состоянии шнура питания и вилки.
4. Шнур питания должен находиться на безопасном расстоянии от горячих поверхностей и предметов. Тренажёр рассчитан на подключение к сети с номинальным напряжением ~220-240В. Если у Вас возникают сомнения в правильности подключения тренажера к сети, обратитесь к квалифицированному электрику.
5. Для снижения риска поражения электрическим током всегда отсоединяйте массажер от электрической сети после его использования.
6. Не применяйте изделие в случае, если у Вас гиперчувствительная кожа.
7. Не размещайте массажер на хранение в холодном помещении.
8. Во время использования массажера не накрывайте его одеялом, пледом и прочими вещами во избежание пожара или повреждения устройства.
9. Используйте массажер в сухом закрытом помещении.
10. Не используйте массажер в ванной комнате, в душе.
11. Не вставайте на платформу массажера.
12. Не помещайте на платформу массажера мокрые или влажные ноги.
13. Не вставляйте во вращающиеся валики массажера посторонние предметы.
14. Если массажер имеет какие-либо повреждения, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
15. Немедленно прекратите использование массажера при ощущении дискомфорта.
16. Не используйте и не храните массажер под прямыми солнечными лучами.
17. Не устанавливайте прибор в помещениях с высокой температурой (банях, саунах).
18. Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство как игрушку.
19. Не используйте прибор во время или сразу после еды (массаж ног перед приёмом пищи или после него отрицательно влияет на переваривание пищи).

НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Пути устранения
Прибор не включается	1. Отсутствует подключение к электросети.	1. Проверить подключение прибора к электросети
	2. Не нажата кнопка запуска.	2. Нажать кнопку запуска
Внезапная остановка	1. Отсутствие электропитания в сети.	1. Проверьте подключение к электросети.
	2. Продолжительность работы более 15 минут, перегрев прибора.	2. Перезапустите прибор после того, как он остынет.

Примечание: Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог решить проблему, обратитесь в сервисный центр.

Гарантийный талон

Наименование	
Модель	
Дата продажи	
ФИО покупателя	
Номер телефона	

- * 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
- механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его чужеродных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год