

Технические характеристики

Напряжение: 12 В, AC110-240V 50 Гц
Мощность: 24 Вт

НАЗНАЧЕНИЕ

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Массажёр для ног оказывает комплексное действие на стопы, расслабляет, снимает напряжение и избавляет от усталости. Благодаря воздействию на точки стопы, прибор улучшает общее состояние, активизирует обменные процессы, а также дарит ощущение внутреннего комфорта после использования.

Позволяет решить такие проблемы как: малоподвижный образ жизни и сидячая работа, повышенная статическая нагрузка на ноги, чувство тяжести и ломоты в ногах, стресс, усталость, профилактика варикозного расширения вен и заболеваний суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ◆ Беременность
- ◆ Сахарный диабет
- ◆ Злокачественные образования
- ◆ Эпилепсия, тяжёлые неврологические заболевания
- ◆ Варикоз, склонность к тромбозам, повышенная свёртываемость, патологии крови
- ◆ Наличие медицинских искусственных частей в ногах: имплантатов или штифтов
- ◆ Нарушения артериального кровообращения
- ◆ Гипертоническая болезнь
- ◆ Туберкулёз
- ◆ При дисфункции суставов, (ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз) ◆ Электрокардиостимулятор
- ◆ Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIВ и III, прогрессирующий артериосклероз
- ◆ Заболевания почек и выделительной системы
- ◆ Алкогольное или наркотическое опьянение
- ◆ Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре, при обострении хронических воспалительных заболеваний .
- ◆ Не используйте массажёр при патологических изменениях или травмах в области ног (например, открытые раны, шишки, грибковое поражение кожи ног)


Руководство по эксплуатации Массажная накидка Calmer Body K10



ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый клиент,
Мы рады, что вы выбрали данную массажную накидку для сиденья, прежде чем использовать устройство в первый раз, внимательно прочитайте инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
Если устройство передано другому человеку, инструкция также должны быть переданы вместе с ним.

Общая схема

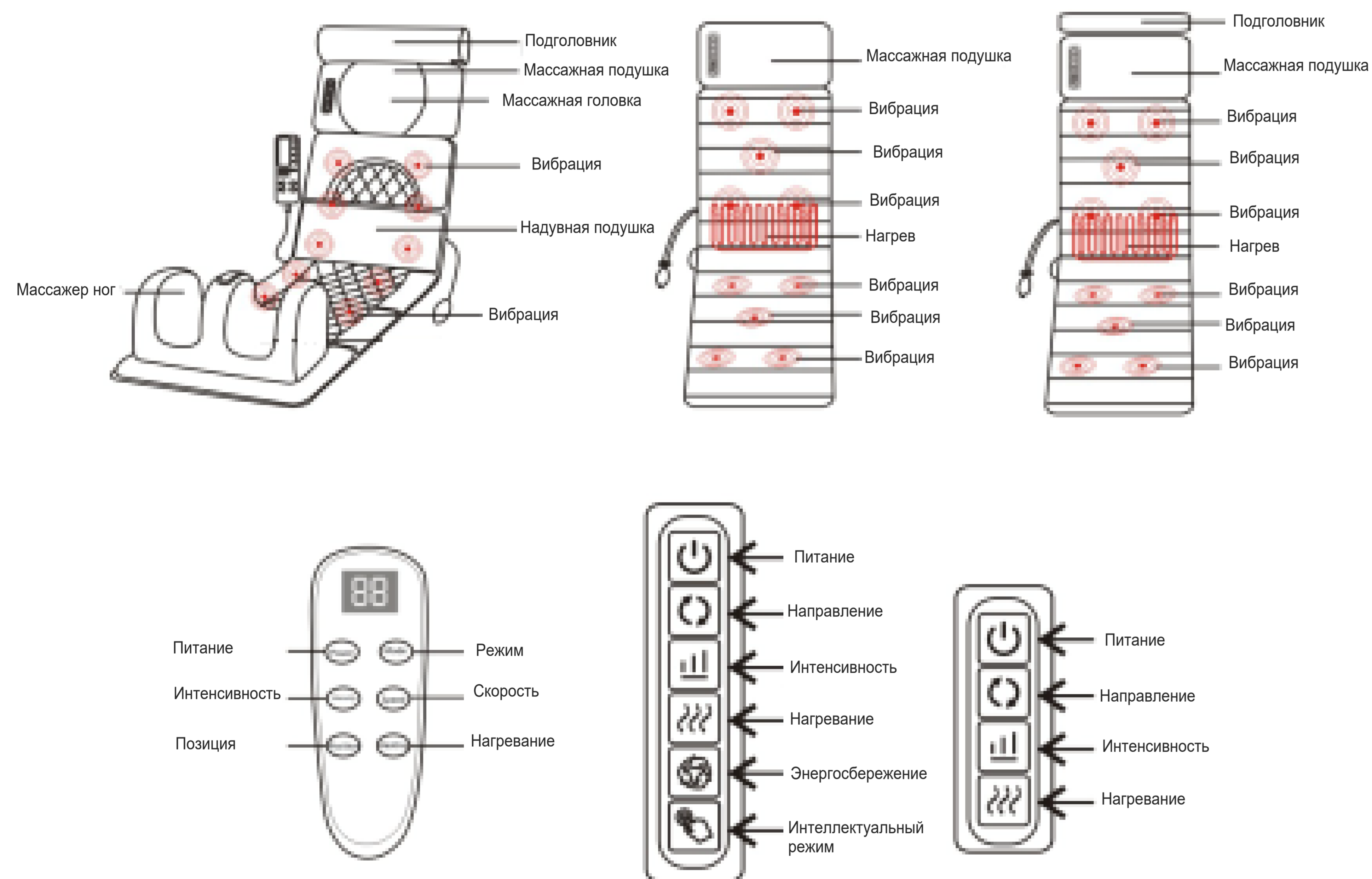

Эксплуатация

Переключатель: Выберите кнопку питания на панели управления, нажмите для включения, нажмите еще раз, чтобы установить таймер на 10 минут /20 минут /30 минут.

Выбор режима: Выберите кнопку mode/режим на авнели управления. На ваш выбор доступно 5 режимов массажа.

Регулировка интенсивности: Выберите кнопку интенсивности на панели управления, есть 3 уровня интенсивности массажа на ваш выбор.

Регулировка зоны: Выберите кнопку положения на панели управления и выберете зону массажа: плечи, спина, руки и ноги.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Перед очисткой массажера, отключите его от сети.
2. Не используйте для очистки корпуса жёсткие металлические щётки, различные растворители и полироли, содержащие спирт и бензол.
3. Для очищения корпуса массажера протирайте его сухой хлопковой тряпкой .
4. Если Вы не используете массажер в течение долгого времени, то рекомендуется хранить его в чистом и сухом помещении. Берегите массажер от попадания на него прямых солнечных лучей , источников открытого огня и разогретых поверхностей.

Безопасность

- Не используйте массажёр ни для каких других целей, кроме массажа; это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не используйте массажёр, если тканевый чехол порван или его части отсутствуют.
- Не позволяйте детям или лицам, не способным обращаться с оборудованием, пользоваться массажёром, храните массажёр в недоступном для детей месте.
- Не отключайте массажёр от сети во время работы. Это может привести к травмам.
- Не спите во время использования массажёра.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖЕР В СЛУЧАЯХ:

- Если на массажёр случайно попала вода, это может привести к поражению электрическим током.
- Если во время массажа ощущается сильная или ненормальная боль, немедленно прекратите работу и обратитесь к врачу.
- Если вы обнаружите какую-либо неисправность или любое другое ненормальное состояние во время работы, прекратите использование.
- В случае сбоя питания при неожиданном восстановлении питания могут возникнуть травмы.
- Не используйте массажёр в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не используйте массажёр на мокром теле, это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Не используйте массажёр с повреждённым шнуром, обратитесь в сервисный центр для проверки или замены.
- Используйте адаптер, который соответствует техническим характеристикам для данного массажера.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Массажная накидка не работает	1. Не подключён адаптер 2. Не включена кнопка питания	1. Проверить подключение 2. Включите питание
Необычный звук	Используется на твёрдой поверхности	Поместите накидку на мягкую поверхность
Низкая интенсивность	Напряжение слишком низкое	Используйте стабилизатор напряжения

Примечание: Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог решить проблему, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать массажёр самостоятельно.