



Руководство по эксплуатации Массажное кресло Calmer ZRWK-30

Гарантия и сервис

Модель	National Lounge	Заводской №615		Срок гарантии	1 год
Данные клиента	ФИО:		Детали доставки:		
	Адрес:		Индекс:		
	Телефон:		email:		
Продавец			Цена продажи:		
Записи о техническом обслуживании:					

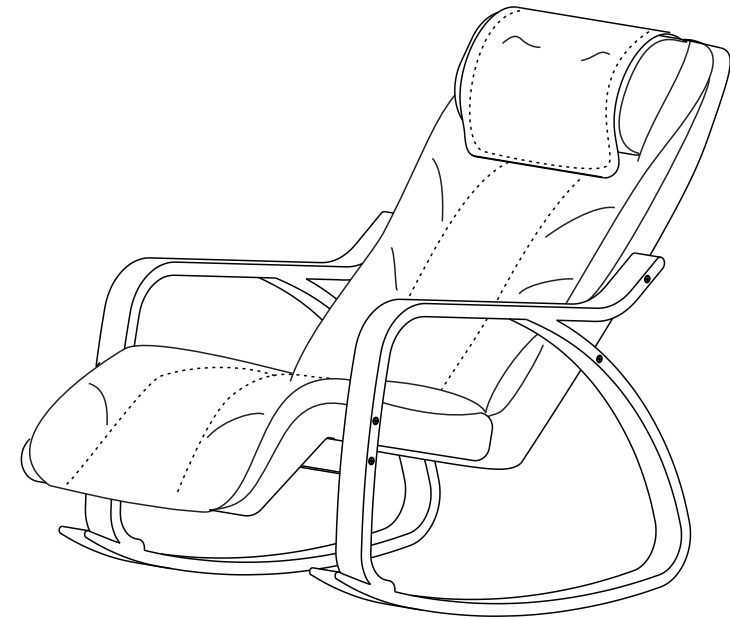

Спасибо, что вы выбрали наш продукт.
Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя, уделите особое внимание мерам предосторожности по технике безопасности.
Пожалуйста, сохраните инструкцию на время всего пользования массажным креслом.

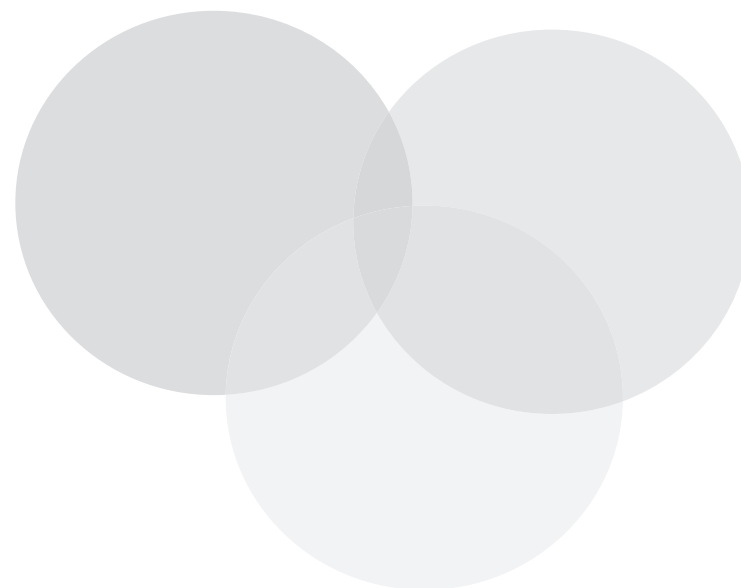

Содержание

1. Введение	-----	01
2. Уведомления	-----	01-03
3. Компоненты	-----	04-05
4. Эксплуатация	-----	06-08
(1) Перед использованием	-----	06
(2) Описание кнопок пульта управления	-----	07-08
5. Уборки и обслуживание	-----	09
6. Рекомендации	-----	09
7. Неисправности	-----	10
8. Спецификация	-----	10

Введение

Мы разработали уникальное массажное кресло-качалку в своей линейке. Кресло обладает функциями прогрева в области поясни и вибрационного массажа в сиденье. Отличительные возможности данного кресла, это выбор ручных техник массажа: разминание, постукивание, вибрация и точечный массаж.

Уведомления

1. Пожалуйста, не используйте кресло во влажных помещениях (в ванной комнате, на кухне, рядом с водой и т. д), под прямым солнечным светом, в помещениях с высокой загрязненностью, а также в местах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.
2. Если вы находитесь на лечении или есть заболевания указанные ниже, пожалуйста, не используйте кресло и обратитесь за советом к врачу.
 - Беременная женщина или период менструации.
 - Вы уязвимы к электрическим помехам с кардиостимулятором, имплантируемый дефибриллятор сердца и другие медицинские средства.
 - Люди с нарушением свертываемости крови, сепсисом, лихорадкой, парестезией.

- с заболеваниями спины, шеи или бедер.
 - с такими заболеваниями, как злокачественная опухоль, болезни сердца, гипертония, острые фазы других заболеваний.
 - с остеопорозом, переломами позвоночника, тяжелыми ранами.
3. Дети и люди с физическими и умственными отклонениями, недостаточным опытом и знаниями должны контролироваться взрослыми, кто будет отвечает за их безопасность.
 4. Дети должны быть под присмотром, чтобы убедиться, что они не испортят кресло. Во избежание несчастного случая, пожалуйста, держите детей подальше от массажного кресла, пока вы им пользуетесь.
 5. Кресло обладает нагревательной поверхности, поэтому клиенты, которые не чувствительны к тепло должны быть осторожны в использовании.
 6. Пожалуйста, не используйте его, когда ваше тело или волосы мокрые.
 7. Никогда не вынимайте вилку из розетки и не прикасайтесь к шнуру питания, вилке и розетке мокрыми руками.
 8. Для клиентов с длинными волосами, пожалуйста, не допускайте контакта во избежании запутанности.
 9. Никогда не вставляйте пальцы в щель под массажными роликами, чтобы избежать травм пальцев.
 10. Пожалуйста, не стойте на нем и не кладите на него тяжелые вещи.
 11. Пожалуйста, не регулируйте угол наклона голени, когда вы лежите на стуле, чтобы избежать несчастного случая.
 12. Пожалуйста, не садитесь на пульт управления и не роняйте его.
 13. Пожалуйста, не перегибайте, не тяните, не скручивайте, не ставьте тяжелые предметы и не завязывайте шнур питания в узел и соединительный провод пульта управления.

14. Запрещается самостоятельный ремонт и разборка кресла. Если массажное кресло вышло из строя, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
15. Если произойдет поломка ткани или корпуса, пожалуйста, прекратите использование и отправьте его в наш авторизованный сервисный центр для обмена или ремонта сломанной части.
16. Если есть какие-либо повреждения на шнуре питания, он должен быть заменен на оригинальный. Обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
17. Пожалуйста, не используйте кресло, во время молний и отключите оборудование из розетки.
18. Данное кресло предполагает работы через поставляемый адаптер. Не используйте другие адаптеры для работы, это может привести к пожару или поломке кресла. В случае утери адаптера, обратитесь к продавцу.
19. Если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, пожалуйста, незамедлительно прекратите использование и отсоедините кресло от питания. Затем обратитесь в службу технического обслуживания или к продавцу для диагностики.
20. Когда вы не используете его, пожалуйста, выключите тумблер питания и вытяните вилку из розетки.
21. Кресло оснащено интеллектуальной систему управления, с защитой от перегрева. Если это если это произойдет, пожалуйста, отключите кресло от источника питания и дождитесь восстановления нормальной температуры для дальнейшей работы.
22. Шум во время работы может быть вызван массажной кареткой. Это нормальное состояние.

Компоненты | Пульт управления


! Мы не рекомендуем использовать данное кресло людям более 150 кг, во избежание травм.

Компоненты



Пульт управления

Компоненты

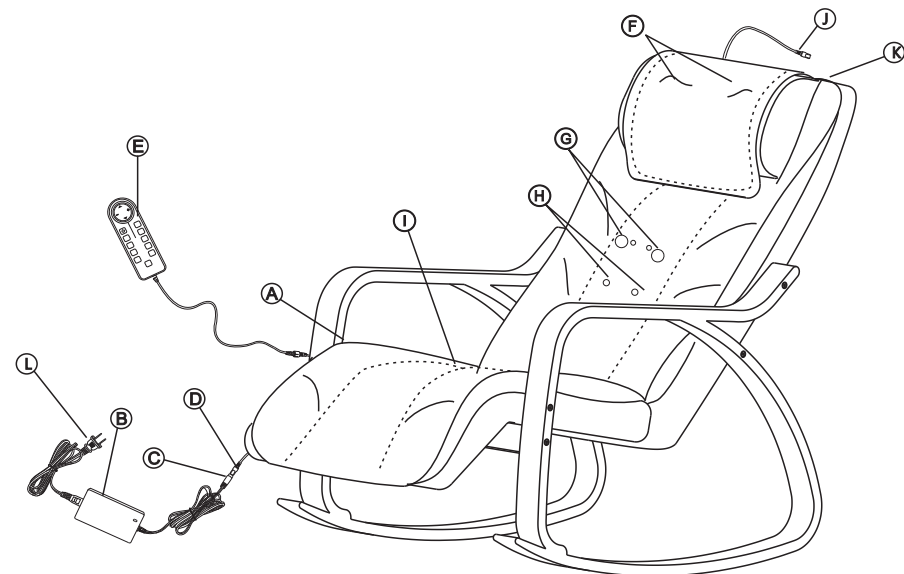

- (A) Карман для пульта
- (B) Адаптер
- (C) Переходник адаптера
- (D) Входная линия постоянного тока
- (E) Пульт управления
- (F) Ролики для массажа шеи
- (G) Массажные ролики с подогревом
- (H) Ролики для постукивающего массажа
- (I) Вибрационный массаж
- (J) Входной переходник массажной подушки
- (K) Ответный переходник массажной подушки
- (L) Вилка

Эксплуатация


Перед использованием

1. Пожалуйста, соберите массажное кресло согласно рисунку. Соедините входной и ответных переходник массажной подушки для шеи.

Отрегулируйте наиболее удобное положение массажной подушки по высоте и крепко зафиксируйте застежкой-липучкой. Затем подключите переходник адаптера с входной линией постоянного тока. Вставьте вилку в розетку с напряжением 220В. После этого загорится световой индикатор.


Примечание: пожалуйста, осуществляйте сборку на ковре или полу, который будет защищен от царапин.

№	Название	Кол-во
1	Подушка	1
2	Подкладка	1
3	Рама	2
4	Балка	1
5	Винт М6x83	6
6	Винт М6x108	2
7	Гайка М6	2

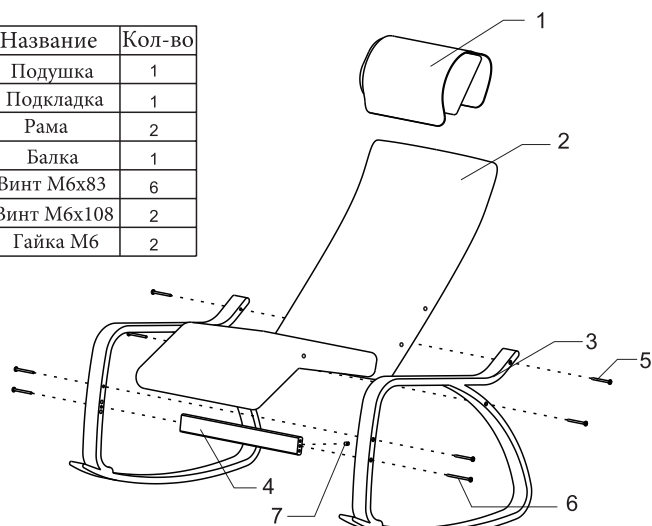





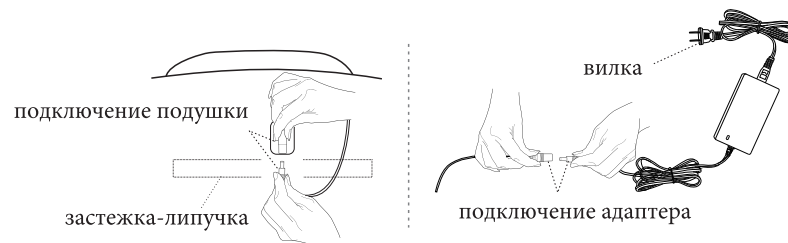

Инструкция по сборке

Описание кнопок пульта



2. Пожалуйста, сядьте прямо, опустите спину и шею на стул. Пожалуйста, не садитесь на пульт управления.
3. Выберите режим массажа на пульте управления, чтобы кресло начало сеанс массажа.

Описание кнопок пульта управления

-  Кнопка питания. Нажмите эту кнопку чтобы включить массажное кресло, после чего можете выбрать программу. Повторное нажатие - выключит массажное кресло.
-  Кнопка включения автоматического режима массажа. Повторное нажатие отключит автоматический режим массажа.
-  Вертикальное перемещение роликов для массажа шеи вверх. Нажмите и удерживайте кнопку, до необходимого положения.
-  Вертикальное перемещение роликов для массажа шеи вниз. Нажмите и удерживайте кнопку, до необходимого положения.
-  Кнопка массажа шеи. Нажмите на нее один раз, для работы по часовой стрелке. Нажмите кнопку еще раз, для реверсивного движения роликов. Третье нажатие на кнопку отключит данную функцию.
-  Массаж с функцией прогрева. Нажмите на нее один раз, чтобы массажные ролики начали работать с мягким теплом. Нажмите на нее еще раз, чтобы отключить данную функцию.

Описание кнопок пульта



Кнопка настройки диапазона перемещения массажных роликов по спине. Нажмите на кнопку (индикатор мигает), для выбора начальной точки массажа. Повторное нажатие (индикатор горит постоянно), зафиксирует конечную точку диапазона. Массажные ролики будут работать в заданном диапазоне. При третьем нажатии, индикатор на кнопке режима перестанет гореть и выбранный диапазон будет сброшен.



Массаж всей спины. Массажная зона работы роликов: от нижней части спины до верхней.



Массаж верхней части спины. Массажная зона работы роликов: от середины спины до верхней её части.



Массаж нижней части спины. Массажная зона работы роликов: от середины спины до нижней её части.



Разминающий массаж. Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить разминающий массаж всей спины. В то же время вы можете выбрать зоны "верхняя часть спины", "нижняя часть спины" и "точечный массаж" для выбора области массажа. Повторное нажатие кнопки остановит режим массажа.



Кнопка для увеличения скорости постукивания. Доступно 3 режима. Каждое нажатие будет увеличивать скорость до максимальной.



Постукивание: нажмите эту кнопку, чтобы включить постукивающий режим массажа. Вы можете регулировать интенсивность массажа с помощью клавиши +/-, а клавишами вверх/вниз можете регулировать зону воздействия. Повторное нажатие на кнопку завершит работу постукивающего массажа;

Обслуживание | Рекомендации



Кнопка для уменьшения скорости постукивания. Доступно 3 режима. Каждое нажатие будет уменьшать скорость до минимальной.



Вибрационный массаж в сиденье. Есть 3 режима вибрации, от минимального к максимальному. Четвертое нажатие на кнопку отключит данную функцию.

Уборка и обслуживание

1. После использования и перед чисткой и техническим обслуживанием, пожалуйста, выключите кресло и отключите питание.
2. После использования, пожалуйста, протрите кресло сухой тканью, при необходимости вы можете использовать мягкое моющее средство. Никогда не используйте химические растворители, абразивный материал или металлические щетки для очистки кресла. Чтобы снять наволочку с подушки для головы, расстегните молнию сверху, а затем расстегните молнию снизу.
3. Держите кресло вдали от влаги и воды, обильно мочите и не мойте кресло под струями воды.
4. Не используйте его на открытом воздухе или во влажном месте. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и держите дальше от нагревателей и открытого огня.

Рекомендации

1. Для того чтобы продлить срок службы изделия и гарантировать нормальную работу, пожалуйста, не нажимайте и не давите сильно на массажные части.
2. Это не медицинское оборудование, и не стоит использовать в каких-либо лечебных целях, а так же запрещено использовать кресло в коммерческих целях. Если вы чувствуете себя некомфортно, во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

Неисправности | Спецификация

Неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работает	Плохое соединение в переходниках	Проверьте плотно ли вставлены соединения в переходниках
Остановка во время работы	Завершился 20 минутный сеанс	Нажмите кнопку питания и выберите массаж
	Перегрев	Подождите пока кресло остынет. Перезапустите его
	Перегружен (сильное давление на массажные механизмы)	Наклоните кресло вперед, чтобы снизить нагрузку
	Перебой в электрической сети	Проверьте питание
Шум	Шум во время работы массажных механизмов	Это нормальное состояние

Любые ненормальные обстоятельства возникшие во время использования, которые не могут быть решены с помощью вышеописанных решений, требуют квалифицированной диагностики. Обратитесь к продавцу или авторизованный сервисный центр.

Спецификация

Название	Массажное кресло		
Модель	Напряжение	Мощность	Полярность
LOUNGE	12В	48 Вт	--⊖+
Стандарт	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008		

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.