

Руководство по эксплуатации Массажное кресло Calmer ZRWK-200

Благодарим Вас за выбор массажного кресла. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, обратите особое внимание на требования техники безопасности, чтобы обеспечить надлежащую работу и эксплуатацию оборудования. Храните настоящее руководство в доступном месте для дальнейшего использования.

Обращаем Ваше внимание на то, что в данной инструкции изложены общие сведения о мерах предосторожности и правилах эксплуатации массажных кресел. Некоторые модели кресел могут иметь индивидуальные особенности по технике безопасности, правилам эксплуатации противопоказания. Следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации именно той модели, которую Вы приобрели.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимо получить консультацию лечащего врача перед использованием массажного кресла в следующих случаях:

1. Людям с вживлённым кардиостимулятором и другими устройствами.
2. Если вы проходите курс лечения, особенно, если вы испытываете дискомфорт.
3. Во время обострений остеохондроза, воспаления межпозвоночной грыжи и других обострений.
3. При наличии злокачественных опухолей, заболеваний сердца.
4. В случае беременности и менструации.
5. При наличии остеопороза или переломов позвоночника.
6. При наличии заболеваний кожи или нарушениях целостности кожных покровов.
7. В случае, если температура тела превышает 37 градусов (жар).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Запрещается использовать массажное кресло людям с нарушением восприятия.
- Запрещается использовать кресло людям старше 80 лет.
- Не допускается использование кресла детьми, а так же людьми в состоянии алкогольного опьянения.
- Запрещается спать в массажном кресле.
- Запрещается курить в массажном кресле.
- Не используйте кресло, если ваше тело влажное.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что рядом с креслом (под ним, над ним, перед ним) нет детей и домашних животных, а так же посторонних предметов, которые могут препятствовать раскладке кресла.
- Перед использованием кресла снимите украшения для волос, браслеты, часы и другие предметы, которые могут нанести травму во время массажа.
- В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов при массаже ягодиц и бедер.
- Подключите шнур питания к розетке с подходящими параметрами. Убедитесь, что вилка вставлена до конца, во избежание короткого замыкания или возникновения пожара.
- Запрещено пользоваться неисправными шнуром питания, вилок, или розеткой.
- Запрещается использовать поврежденный, перекрученный или сдавленный провод.
- Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «ВЫКЛ.», перед тем, как вставить вилку в розетку.
- Убедитесь, что шнур питания не влажный и не поврежден.
- Убедитесь, что заземление проведено надлежащим образом. (В противном случае возможен риск поражения током. Если вы не можете самостоятельно провести заземление, воспользуйтесь услугами профессионального электрика).
- Не используйте переходник (если вилка в комплекте поставки не совпадает с разъемом розетки, не пытайтесь самостоятельно переоборудовать ее, и воспользуйтесь услугами электрика для установки подходящего разъема).
- Перед использованием осмотрите материал обивки, нет ли повреждений. Если нашли, перестаньте пользоваться креслом и обратитесь к продавцу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА

- Если во время массажа вы чувствуете недомогание, немедленно прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с врачом.
- Не производите слишком интенсивный массаж головы.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при массаже шеи.
- Не допускайте детей и домашних животных к креслу, особенно, когда оно работает. Не разрешается сидеть на спинке и подлокотниках кресла.
- За людьми с ограниченными возможностями, которые пользуются креслом, необходимо тщательно следить.
- Запрещено держать кресло работающим вхолостую в течение длительного времени.
- Пульт управления следует держать в кармане или на специальной подставке во избежание его возможной поломки и случайной активации.
- Не сдавливайте руками, не пытайтесь деформировать и не наступайте на массажные ролики.
- Избегайте попадания конечностей между роликами во время работы кресла.
- Избегайте попадания рук или ног в пространство между механическими частями кресла.
- Не вставляйте и не роняйте ничего в щели между спинкой, сиденьем и подлокотниками в массажном кресле.
- Запрещается сидеть, вставать, а также класть вещи на спинку, подлокотники, подставку для ног.
- Запрещается вставать на кресло во время массажа.


- Не перемещайте работающее кресло.
- Не выключайте питание и не вытаскивайте шнур питания из сети во время массажа.
- Избегайте попадания различных частей тела в пространство между подставкой для ног и креслом.
- Не садитесь и не надавливайте на спинку кресла, если та откинута.
- Производите массаж через тонкую ткань, поскольку таким образом достигается лучший эффект от массажа. Однако, возможно раздражение кожи и крио-ожоги.
- В случае отключения электроэнергии немедленно вытащите шнур из розетки.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- По завершении массажа убедитесь, что в зоне рабочих частей кресла нет домашних животных и посторонних предметов.
- Верните кресло в первоначальное положение
- Выключите питания с помощью кнопки на пульте управления
- Вытащите вилку из розетки. Держите за вилку, не тяните за провод.
- При необходимости, почистите кресло.





Снимите защитную плёнку

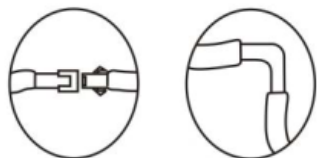

Закрепите подушку на кресле


Гнездо для подушки должно быть плотно подсоединено к воздушному шлангу массажного кресла.

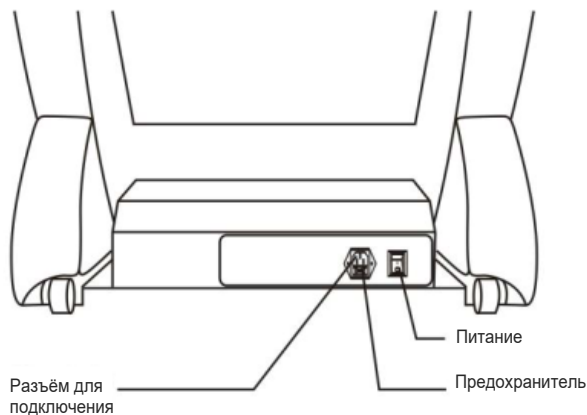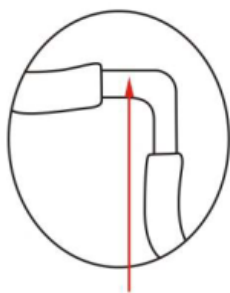

Разъём для подключения

Питание

Предохранитель

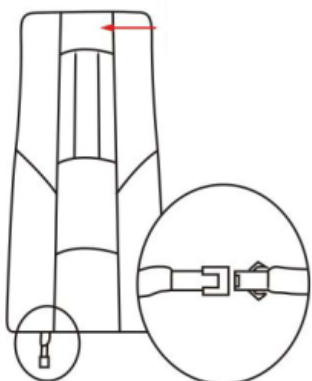

Провод для подогрева накидки соединяется с проводом под массажным креслом

РАЗБОРКА КРЕСЛА И РЕМОНТ:

- Если в работе кресла наблюдаются неисправности, если обнаружена поломка, если на кресло попала вода, воспользуйтесь услугами мастера из сервисного центра Вашего дилера. Самостоятельный разбор, попытки ремонта или вмешательство в устройство кресла запрещаются и автоматически снимают гарантию.
- Если провод или вилка повреждены, обратитесь к дилеру.
- Не пытайтесь разобрать кресло самостоятельно, возможен удар током или травма.
- Если при осмотре материала обивки Вы нашли повреждения, не используйте кресло и обратитесь к дилеру.

УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА :

- Устанавливайте заземление. Вилку можно вставлять только в заземленную розетку. Разъем для заземления на вилке нельзя удалять.
- Устанавливайте кресло на ровную поверхность.
- Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия.
- Не перемещайте кресло с человеком внутри.
- Отключите кресло от розетки перед перемещением.
- Не удерживайте кресло за подлокотник во время перемещения, удерживайте кресло только за держатели, расположенные в задней и передней части устройства.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Храните кресло вдали от нагревательных предметов, мокрых, острых и вызывающих коррозию предметов, а также от взрывчатых и горючих веществ.
- Запрещается использование чехлов с электрообогревом и других предметов с обогревом.
- Не храните кресло в сильно запыленных местах, а также в местах со скоплением коррозирующих газов.
- Не храните кресло в слишком тесных помещениях, и не используйте его в плохо проветриваемых местах.
- Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Не используйте и не храните кресло в помещениях с высокой влажностью (бассейн, ванная и пр.).
- Кресло и пульт управления всегда должны оставаться сухими.
- Выключите питание и вытащите шнур из розетки перед чисткой кресла.
- Не вынимайте вилку из розетки влажными руками во избежание поражения электрическим током. Во время чистки задней поверхности спинки следите, чтобы жидкость не попала на блок питания.
- Не используйте едкие и спиртосодержащие моющие средства. Используйте нейтральное моющее средство и х/б ткань для протирки обивки кресла и спинки.
- Пульт д/у протирать только сухой тканью.
- Не распыляйте жидкость или моющее средство на кресло

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	Проблема	Причина	Решение
1	Посторонние звуки.	Это нормально, звуки издаются мотором и механизмами.	Не является поломкой.
2	Кресло не включается.	Провод не вставлен в розетку.	Вставьте вилку провода в розетку.
		Не включена клавиша на блоке питания.	Установите клавишу в положение Вкл.
		Неисправен предохранитель.	Замените предохранитель.

Если вам не удалось устранить неисправность используя таблицу, обратитесь в сервисную службу компании дилера. Не в коем случае не производите ремонт самостоятельно!