

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Ирригатор для полости рта
Ауыз қуысына арналған ирригатор

GL5000

EAC

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. У вас может быть незаполнен гарантийный талон (например, при покупке в интернет-магазине). В этом случае рекомендуем распечатывать и сохранять кассовый чек (или любой другой документ подтверждающий покупку), чтобы подтвердить дату приобретения товара.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером изделия на ручке/корпусе изделия!

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз.

Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген және дұрыс толтырылған кепілдік талонны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде кепілдік талоны толтырылмаған болуы мүмкін (мәселен, интернет-дүкеннен сатып алу кезінде). Бұл жағдайда тауарды сатып алған күнін растау үшін кассалық чекті (немесе сатып алуды растайтын кез келген құжатты) басып шығаруды және сақтауды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның тұтқасында/корпусында бұйымның сериялық нөмірі бар жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	5
4 Требования безопасности	5
5 Функциональные элементы электроприбора	8
6 Подготовка к работе	9
7 Эксплуатация электроприбора	10
8 Техническое обслуживание	11
9 Правила хранения	12
10 Срок службы	13
11 Гарантии изготовителя	13
12 Прочая информация	14

МАЗМУНЫ

1 Жалпы нұсқаулар	15
2 Техникалық талаптары	15
3 Жиынтықтылық	16
4 Қауіпсіздік талаптары	16
5 Электр құралының атқарымдық элементтері	19
6 Жұмысқа дайындау	20
7 Электр құралын пайдалану	21
8 Техникалық қызмет көрсету	22
9 Сақтау ережелері	23
10 Қызметтік мерзімі	24
11 Дайындаушының кепілдіктері	24
12 Өзге ақпарат	26

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Ирригатор для полости рта GALAXY LINE GL5000 (далее по тексту – Ирригатор для полости рта, ирригатор, прибор, электроприбор, изделие, устройство) – это современный, удобный прибор личной гигиены для удаления зубного налета и остатков пищи с зубов с целью снижения риска образования кариеса и улучшения здоровья десен. Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования, обычно не реже раза в день. В комплекте две сменных насадки. Таймер автоматического выключения срабатывает через 2 минуты непрерывной работы и сообщает об окончании цикла чистки. Благодаря трем режимам работы вы сможете насладиться процедурой очистки полости рта в соответствии с вашими потребностями. Съемный резервуар емкостью 170 мл легко заполнять водой.



Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Мощность	5 Вт
Время непрерывной работы	до 40 минут
Время зарядки	около 10 часов
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	1400 мА*ч
Напряжение аккумулятора	3,7 В
Входное постоянное напряжение	5 В $\overline{=}$
Входной ток подставки для зарядки	1 А
Объем резервуара для воды	170 мл
Частота пульсации	1000-1800 в/мин
Давление струи	170 - 800 кПа
Длина USB кабеля	0,8 м
Степень защиты	IPx7
Класс защиты от поражения электрическим током	III \diamond III

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Ирригатор для полости рта	1 шт.
Стандартная насадка для регулярной чистки	2 шт.
Подставка для зарядки	1 шт.
USB кабель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- 4.1 Подключайте изделие к сетевому зарядному устройству (не поставляется в комплекте) только после того, как Вы убедитесь, что прибор выключен.
- 4.2 Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- 4.3 При отключении подставки для зарядки от USB порта следует держаться за разъем, а не за кабель.
- 4.4 Использование принадлежностей, не поставляемых в комплекте с изделием, может быть небезопасным и привести к поломке изделия.
- 4.5 Не пытайтесь достать подключенный к USB порту и заряжающийся электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от USB порта, затем достаньте. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки в сервисном центре и подтверждения им работоспособности.
- 4.6 Необходимо следить за целостностью подставки для зарядки с USB кабелем и изделия. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений любой его части (сменной насадки, корпуса, подставки для зарядки, USB кабеля).
- 4.7 Держите подставку для зарядки с USB кабелем вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
- 4.8 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- 4.9 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- 4.10 Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- 4.11 Не наматывайте USB кабель вокруг изделия или подставки для зарядки.
- 4.12 Данный прибор оснащен встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте электроприбор в огонь и не подвергайте его воздействию тепла.

4.13 Во избежание травм не рекомендуется использовать электроприбор со сломанной или поврежденной сменной насадкой.

4.14 Заменяйте насадку каждые 3 месяца или чаще, если появились признаки износа. Используйте только насадки, рекомендованные изготовителем прибора.

4.15 Не наполняйте резервуар горячей водой. Горячая вода может вызвать ожоги.

4.16 Данный прибор предназначен для личной гигиены и не предназначен для использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения.

4.17 Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ! Если за последние 2 месяца вы перенесли операцию ротовой полости или десен, перед использованием ирригатора проконсультируйтесь со стоматологом.

ВНИМАНИЕ! Если после использования ирригатора появляется обильное кровотечение или если кровоточивость десен не прекращается через 1 неделю, проконсультируйтесь со стоматологом.

ВНИМАНИЕ! Ирригатор соответствует стандартам безопасности для электромагнитных приборов. Если у вас установлен кардиостимулятор или другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного устройства перед использованием.

ВНИМАНИЕ! При необходимости перед использованием ирригатора проконсультируйтесь у врача.

ВНИМАНИЕ! Данный прибор предназначен для чистки зубов и десен. Не используйте его для других целей (например, глаз, носа и ушей). При появлении ощущения дискомфорта или боли прекратите пользоваться прибором и обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах и т.д. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости. Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных усло-

виях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



Рис. 1
Элементы электроприбора (рис. 1)

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Стандартная насадка для регулярной чистки | 7. Корпус |
| 2. Кнопка извлечения насадки | 8. Подставка для зарядки |
| 3. Кнопка включения / выключения | 9. Резервуар |
| 4. Кнопка выбора режима | 10. Крышка резервуара |
| 5. Индикатор режима | 11. Разъем подставки для зарядки |
| 6. Индикатор заряда аккумулятора | 12. USB кабель |

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при его наличии);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т. п.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

ВНИМАНИЕ! Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки (при их наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе электроприбора!

Примечание – При установке насадки на корпус не нажимайте на насадку с чрезмерной силой, это может повредить ее или корпус ирригатора.

6.2 Снимите резервуар с корпуса и промойте его мыльным раствором внутри и снаружи, затем сполосните водой;

6.3 Корпус протрите влажной тканью;

6.4 Насадку промойте мыльным раствором, затем сполосните водой;

6.5 Насухо вытрите корпус, резервуар и насадку;

6.6 Установите насадку на корпус электроприбора;

6.7 Установите резервуар на корпус прибора;

6.8 Установите корпус на подставку для зарядки;

6.9 Полностью размотайте USB кабель;

6.10 Подключите USB кабель к разъему питания, расположенного на задней части подставки для зарядки, затем к USB порту сетевого зарядного устройства (не поставляется в комплекте). Далее подключите сетевое зарядное устройство к розетке в сеть 220-240 В ~ 50 Гц.

Примечания

1 Время непрерывной работы – до 40 минут;

2 Цикл полного заряда аккумулятора составляет около 10 часов;

3 Индикатор заряда мигает красным, если заряд аккумулятора менее 35%, синим - если менее 85%, горит зеленым постоянно - если более 85% и заряд аккумулятора полный.

ВНИМАНИЕ! Зарядите аккумуляторную батарею электроприбора перед первым использованием, при низком уровне заряда, а также после длительного перерыва в его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь электроприбором во время зарядки.

6.11 Отсоедините USB кабель от USB порта сетевого зарядного устройства (не поставляется в комплекте), включенного в сеть;

6.12 Отсоедините USB кабель от разъема питания, расположенного на задней части подставки для зарядки;

6.13 Снимите корпус прибора с подставки для зарядки;

6.14 Прибор готов к работе.

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

7.1 Насадки

Стандартная насадка для регулярной чистки (Рис. 2)

Хорошо вымывает налёт и остатки пищи из межзубных промежутков и десневых борозд. Также эта насадка осуществляет деликатный гидромассаж дёсен, улучшая их кровообращение.

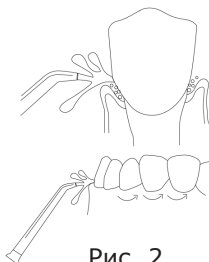


Рис. 2

7.2 Эксплуатация

7.2.1 Снимите резервуар с корпуса, откройте крышку, заполните резервуар теплой водой до отметки 170;

Примечание - Перед снятием резервуара убедитесь, что прибор выключен.

7.2.2 Закройте крышку. Установите резервуар обратно на корпус;

7.2.3 Наденьте желаемую насадку на корпус. Надавите на насадку до щелчка;

Примечание - При первом использовании после покупки и после длительного перерыва в использовании прибора первоначально направьте конец насадки в раковину, чтобы вышла первая струя воды.

7.2.4 Расположите конец насадки во рту. Во избежание разбрызгивания воды нагнитесь над раковиной и частично прикройте насадку губами. Оставьте достаточно места для того, чтобы вода вытекла изо рта в раковину;

Примечание - Расположите наконечник насадки чуть выше линии десен под углом 90°;

7.2.5 Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения;

7.2.6 Выберите необходимый режим нажав на кнопку выбора режима;

Примечания

1 Режим Normal - В этом режиме используется таймер и вода подается под стандартным давлением, обеспечивая хорошую очистку;

2 Режим Pulse - В этом режиме используется таймер и обеспечивается тщательная чистка за счет сильных, но щадящих зубы, импульсных струй воды;

3 Режим Soft - В этом режиме используется таймер и обеспечивается по-

дача успокаивающих струй воды для чувствительных десен.

Примечание - При первом использовании прибора начинайте с режима Soft, где самая низкая интенсивность подачи воды. По мере использования прибора в течение нескольких недель вы можете сменить этот режим. Так эффективность процедуры очистки повысится за счет того, что ваши десны привыкнут к более высокой интенсивности подачи воды.

7.2.7 Начиная с дальних зубов на верхней или нижней челюсти, медленно проведите кончиком насадки вдоль линии десен, делая небольшие паузы между зубами. Продолжайте чистить зубы на этой челюсти со всех сторон в течение 30 секунд;

7.2.8 Повторите процедуру для другой челюсти в течение еще 30 секунд, пока не будут очищены все участки вокруг зубов и между ними (минимум одна минута);

Примечание - Устройство автоматически отключается через 2 минуты непрерывной работы.

7.2.9 По завершении работы выключите прибор, нажав на кнопку включения/выключения;

7.2.10 Отсоедините насадку с корпуса, нажав кнопку извлечения насадки и потянув ее вверх;

7.2.11 Сполосните насадку под струей воды;

7.2.12 Установите насадку обратно на корпус;

7.2.13 Вытрите остатки воды с корпуса и насадки.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Чистка и уход

- Отсоедините USB кабель от разъема питания, расположенного на задней части подставки для зарядки. Снимите корпус с подставки;
- Аккуратно извлеките резервуар с корпуса. Резервуар можно мыть теплой водой с мылом;
- Внешнюю поверхность корпуса при необходимости можно протереть влажной мягкой тканью;
- Снимите насадку с корпуса. Промойте ее теплой водой и высушите;

Примечания

1 Каждые несколько месяцев либо при засорении замочите насадку в контейнере с раствором из белого уксуса с водой в пропорции 1:2 на пять минут. Затем тщательно промойте насадку теплой водой;

2 Каждые несколько месяцев либо при засорении заполните резервуар теплой водой и добавьте 1–2 столовые ложки белого уксуса. Направьте насадку в раковину и включите прибор, чтобы промыть его до тех пор, пока в резервуаре не закончится раствор. После этого таким же образом промойте резервуар чистой теплой водой.

• Используйте прибор только после того, как он полностью высохнет.

ВНИМАНИЕ! Насадки, резервуар, корпус, USB кабель и подставку для зарядки нельзя мыть в посудомоечной машине. Не используйте для чистки прибора химические очистители и абразивные чистящие средства.

8.2 Рекомендации

• Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +0 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;

- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

Батарея должна быть удалена из прибора перед его утилизацией. Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи. Батарея должна утилизироваться безопасно.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве. Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Срок службы прибора составляет 3 года.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

11.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

11.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, не-

соответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;

- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

11.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

11.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- Наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
- Обрывы и надрезы USB кабеля;
- Сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

11.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход прибора из строя.

11.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

11.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также принадлежности и комплектующие, поставляемые в комплекте с электроприбором (насадки, резервуар, USB кабель, подставка для зарядки).

11.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **galaxy-tecs.ru**

12 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер, уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МЕГАПОЛИС».

Адрес: 432048, Российская Федерация, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд.14А.

Адрес электронной почты: mail@simbirsk-crown.ru

Телефон: +78422324242

Изготовитель: Вэньчжоу Притек Индастриал Ко.,ЛТД.

Адрес: № 105 Гонг Диан Рoad Соуф, Вэньчжоу, Китай.

Сделано в КНР.

Дата изготовления указана на серийном номере лейбла (информационная табличка), расположенном на самом изделии. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - импортер и номер заказа/ месяц год изготовления / порядковый номер изделия.


1 ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

Ауыз қуысына арналған ирригатор GALAXY LINE GL5000 (бұдан әрі мәтін бойынша - ауыз қуысына арналған ирригатор, ирригатор, құрал, электр құралы, бұйым, құрылғы) – бұл тісжегінің пайда болу қаупін азайту және қызыл иектің денсаулығын жақсарту мақсатында тістерден тіс өңездері мен тамақ қалдықтарын кетіруге арналған заманауи, ыңғайлы жеке гигиена құралы. Бұл құрал тек тұрмыстық пайдалануға арналған, әдетте күніне бір реттен сирек емес. Жиынтықта екі ауыстырмалы саптама болады. Автоматты ажырату таймері 2 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін іске қосылады және тазалау циклінің аяқталғаны туралы хабарлайды. Үш жұмыс режимінің арқасында сіз өзіңіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес ауыз қуысын тазарту процедурасынан ләззат ала аласыз. 170 мл алынбалы резервуарды сумен жеңіл толтырылады.

ЕАС Құралдың конструкциясы КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», сондай-ақ ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» талаптарына сәйкес келеді. Тауар сертификатталған. Бұйымның барлық қызмет ету мерзімі бойы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтаңыз. Сіз сатып алған бұйымның осы нұсқаулықтан оны пайдалануға әсер етпейтін кейбір айырмашылықтары болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ

1 кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Қуаты	5 Вт
Үздіксіз жұмыс уақыты	40 минутқа дейін
Зарядтау уақыты шамамен	10 сағат
Аккумулятордың түрі	Li-Ion
Аккумулятордың сыйымдылығы	1400 мА*сағ.
Аккумулятордың кернеуі	3,7 В
Кіріс тұрақты кернеу	5 В
Зарядтау үшін қойғыштың кіріс тоғы	1 А
Суға арналған резервуардың көлемі	170 мл
Лүпілдеу жиілігі	1000-1800 в/мин
Ағыс қысымы	170 - 800 кПа
USB кабельдің ұзындығы	0,8 м
Қорғаныс деңгейі	IPx7
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс класы	III 

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 кесте

Атауы	Саны
Ауыз қуысына арналған ирригатор	1 дана
Тұрақты тазалау үшін стандартты саптама	2 дана
Зарядтау үшін қойғыш	1 дана
USB кабель	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысына келесі шарттарды сақтау кезінде ғана кепілдік беріледі:

- 4.1 Бұйымды желілік зарядтау құрылғысына (жиынтықта жеткізілмейді) құралдың сәндірілгеніне Сіздің көзіңіз жеткеннен кейін ғана қосыңыз
- 4.2 Құралға тек құралда таңбаланған қауіпсіз аса төмен кернеумен қуат берілуі керек.
- 4.3 Зарядтау үшін қойғышты USB порттан ажырату кезінде кабельден емес, ағытпадан ұстау керек.
- 4.4 Бұйыммен бірге жеткізілмеген керек-жарақтарды пайдалану қауіпті болуы мүмкін және бұйымның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- 4.5 Егер ол суға түсіп кетсе, зарядталушы және USB портқа қосылған электр құралын судан алып шығуға тырыспаңыз. Құралды USB порттан ажыратыңыз, сосын алып шығыңыз. Құралды ары қарай пайдалануға тек сервистік орталықта оның жұмысқа қабілеттілігін тексеруден кейін рұқсат етеледі.
- 4.6 USB кабелмен зарядтау үшін қойғыштың және бұйымның бүтіндігін қадағалау керек. Бұйымды кез келген оның бөліктерінде (ауыстырмалы саптамалар, корпус, зарядтау үшін қойғыш, USB кабель) бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.
- 4.7 USB кабельмен зарядтауға арналған қойғышты қызу көздерінен, майлар мен өткір заттардан алыс ұстаңыз.
- 4.8 Құралды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Құралмен жұмыс, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізулері керек.
- 4.9 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанушы сұйықтықтар мен газдардың жанында қолданбаңыз.
- 4.10 Егер ол тіпті желіден ажыратылған болса да, балаларға құралға жанасуларына рұқсат бермеу керек. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін қарауда болулары керек.
- 4.11 USB кабельді бұйымды немесе зарядтау үшін қойғышты айналдырып орамаңыз.
- 4.12 Бұл құрал кіріктірілген аккумуляторлық батареямен жабдықталған.

Электр құралын отқа тастамаңыз және оны жылудың әсеріне ұшыратпаңыз.

4.13 Жарақат алуға жол бермеу үшін алынбалы саптамасы бүлінген немесе бұзылған электр құралын қолдану ұсынылмайды.

4.14 Егер тозу белгілері пайда болса, саптаманы әрбір 3 айда немесе одан жиірек ауыстырып отырыңыз. Құралдың дайындаушысы ұсынған саптамаларды ғана қолданыңыз.

4.15 Резервуарды ыстық сумен толтырмаңыз. Ыстық су күйіктер шақыруы мүмкін.

4.16 Бұл құрал жеке гигиена үшін арналған және стоматологиялық клиниканың немесе мекеменің бірнеше пациенттеріне қолдануға арналмаған.

4.17 Аталған үлгі +0-ден +40°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климатта және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Егер сіз соңғы 2 айда ауыз қуысына немесе қызыл иекке ота жасатсаңыз, ирригаторды қолданар алдында стоматологтан кеңес алыңыз.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Егер ирригаторды қолданғаннан кейін ағыл-тегіл қан ағу пайда болса немесе 1 аптадан кейін қызыл иектен қан кетуі тоқтамаса, стоматологтан кеңес алыңыз.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Ирригатор электромагниттік құралдардың қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Егер сізде жүрекширатқыш немесе басқа имплантталған құрылғы орнатылған болса, қолданар алдында дәрігермен немесе имплантталған құрылғының өндірушісімен кеңесіңіз.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Қажет болған кезде, ирригаторды қолдану алдында дәрігермен кеңесіңіз.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Бұл құрал тістер мен қызыл иектерді тазарту үшін арналған. Оны басқа мақсаттарда қолданбаңыз (мәселен, көз, мұрын және құлақ). Егер жайсыздық немесе ауырсыну сезімі пайда болса, құралды пайдалануды тоқтатыңыз және дәрігерге жүгініңіз.



HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Құралды ванна бөлмелерінде, душ бөлмелерінде, бассейндерде және т.б. судың жанында қолданбаңыз. Электр құралын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды. Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, немесе егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен балаларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю шарттарында, немесе ақиқатты объективт қабылдауға кедергі жасаушы басқа да шарттарда қолдануға арналмаған, және құралды осындай күйдегі немесе шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы құралды пайдалану процесінде орын алуы мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы электр құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

5 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1 сур.

Электр құралының элементтері (1 сур.)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Тұрақты тазалау үшін стандартты саптама | 7. Корпус |
| 2. Саптамаларды шығару батырмасы | 8. Зарядтау үшін қойғыш |
| 3. Іске қосу/сөндіру батырмасы | 9. Резервуар |
| 4. Режимді таңдау батырмасы | 10. Резервуардың қақпағы |
| 5. Режим индикаторы | 11. Зарядтау үшін қойғыштың ағытпасы |
| 6. Аккумулятор зарядының индикаторы | 12. USB кабель |

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1 Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (ол бар болған кезде) алып тастаңыз;

ЕСКЕРТУ! Қаптау материалдарын (пластик пакеттер, полистирол және т.б.) қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін балалардың қолы жетпейтін жерлерде қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ескертуші жапсырмаларды (олар бар болған кезде) және электр құралының корпусындағы бұйымның сериялық нөмірімен жапсырманы міндетті түрде орнында сақтаңыз!

Ескерту – Саптаманы корпусқа орнату кезінде саптаманы шамадан тыс күшпен баспаңыз, бұл оны немесе ирригатордың корпусын бүлдіруі мүмкін.

6.2 Резервуарды корпустан шешіңіз және оны ішінен және сыртынан сабынды сумен жуыңыз, содан кейін сумен шайыңыз;

6.3 Корпусты дымқыл шүберекпен сүртіңіз;

6.4 Саптаманы сабынды сумен шайыңыз, содан кейін сумен шайыңыз;

6.5 Корпусты, резервуарды және саптаманы құрғатып сүртіңіз;

6.6 Саптаманы электр құралының корпусына орнатыңыз;

6.7 Резервуарды құралдың корпусына орнатыңыз;

6.8 Корпусты зарядтау үшін қойғышқа орнатыңыз;

6.9 USB кабельді толығымен тарқатыңыз;

6.10 USB кабельді зарядтау үшін қойғыштың артқы жағында орналасқан қуат беру ағытпасына, содан кейін желілік зарядтау құрылғысының (жиынтықта жеткізілмейді) USB портына қосыңыз. Әрі қарай, желілік зарядтау құрылғысын розеткаға 220-240 В ~ 50 Гц желіге қосыңыз.

Ескертулер

1 Үздіксіз жұмыс уақыты – 40 минутқа дейін;

2 Аккумулятордың толық заряды циклі шамамен 10 сағатты құрайды;

3 Заряд индикаторы қызылмен жанып-сөнеді, егер аккумулятордың заряды 35%-дан кем болса, көкпен – егер 35%-дан кем болса, жасылмен тұрақты жанып тұрады – егер 85%-дан аса және аккумулятор заряды толық болса.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралының аккумуляторлық батерясын бірінші рет қолдану алдында, заряд деңгейі төмен болған кезде, сондай-ақ оны пайдалануда ұзақ мерзімді үзілістен кейін зарядтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Зарядтау кезінде электр құралын пайдаланбаңыз.

6.11 USB кабельді желіге іске қосылған желілік зарядтау құрылғысының (жиынтықта жеткізілмейді) USB портынан ажыратыңыз;

6.12 USB кабельді зарядтау үшін қойғыштың артқы бөлігінде орналасқан қуат беру ағытпасынан ажыратыңыз;

6.13 Зарядтау үшін қойғыштан құралдың корпусын шешіңіз;

6.14 Құрал жұмысқа дайын.

7 ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

7.1 Саптамалар

Тұрақты тазалау үшін стандартты саптама (2-сур.)

Ол тіс өңездері мен тамақ қалдықтарын тіс аралық кеңістіктер мен қызылиек жүлгесінен жақсы жуады. Сондай-ақ, бұл саптама қызыл иектің нәзік гидромассажын жүзеге асырады, олардың қан айналымын жақсартады.

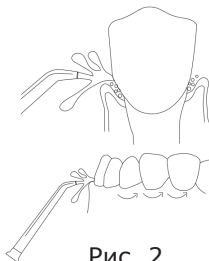


Рис. 2

7.2 Пайдалану

7.2.1 Резервуарды корпустаң шешіңіз, қақпақты ашыңыз, резервуарды 170 белгісіне дейін жылы сумен толтырыңыз;

Ескерту – Резервуарды шешудің алдында құралдың сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.

7.2.2 Қақпақты жабыңыз. Резервуарды корпусқа қайта орнатыңыз;

7.2.3 Қажетті саптаманы корпусқа кигізіңіз. Саптаманы шыртылға дейін басыңыз;

Ескерту – Сатып алғаннан кейін және құралды пайдаланудан ұзақ үзілістен кейін бірінші рет пайдаланған кезде, судың бірінші ағыны шығуы үшін саптаманың ұшын шұңғылшаға бағыттаңыз.

7.2.4 Саптаманың ұшын аузыңызға орналастырыңыз. Судың шашырандысын болдырмау үшін шұңғылшаның үстінен еңкейіңіз саптаманы еріндеріңізбен ішінара жабыңыз. Ауыздан шұңғылшаға су ағуы үшін жеткілікті орын қалдырыңыз;

Ескерту – Саптаманың ұшын қызыл иек сызығынан 90° бұрышымен жоғарырақ орналастырыңыз;

7.2.5 Құралды іске қосу үшін іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз;

7.2.6 Қажетті режимді таңдау үшін режимді таңдау батырмасын басыңыз;

Ескертулер

1 Normal режимі – Бұл режимде таймер пайдаланылады және су стандартты қысыммен беріледі, бұл жақсы тазалауды қамтамасыз етеді;

2 Pulse режимі – Бұл режимде таймер пайдаланылады және күшті, бірақ

аялағыш тістер есебінен, импульсті су ағындары арқылы мұқият тазалауды қамтамасыз етеді

3 Soft режимі – Бұл режимде таймер пайдаланылады және сезімтал қызыл иектер үшін тыныштандырғыш су ағынын берумен қамтамасыз етіледі.

Ескерту – Құралды бірінші рет қолданған кезде, су берудің ең төменгі қарқындылығы болатын Soft режимінен бастаңыз. Құралды бірнеше апта бойы қолданған кезде сіз бұл режимді ауыстыра аласыз. Осылайша, тазарту процедурасының тиімділігі сіздің қызыл иегіңіз су берудің жоғары қарқындылығына үйренетіндіктен артады.

7.2.7 Жоғарғы немесе төменгі жақтағы алыс тістерден бастап, саптаманың ұшын қызыл иек сызығы бойымен баяу жүргізіп, тістер арасында аздаған үзілістер жасаңыз. Бұл жақтағы тістерді барлық жағынан 30 секунд бойы тазалауды жалғастырыңыз;

7.2.8 Басқа жақ үшін процедураны тістердің айналасындағы және олардың арасындағы барлық жерлер тазаланғанша тағы 30 секунд қайталаңыз (кем дегенде бір минут);

Ескерту - Құрылғы 2 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде ажыратылады.

7.2.9 Жұмысты аяқтағаннан кейін іске қосу/сөндіру батырмасын басып, құраолы сөндіріңіз;

7.2.10 Саптаманы шығару түймесін басып, оны жоғары қарай тартумен саптаманы корпустан ажыратыңыз;

7.2.11 Саптаманы су ағынының астында шайыңыз;

7.2.12 Саптаманы корпусқа қайта орнатыңыз;

7.2.13 Корпус пен саптамадан су қалдықтарын сүртіңіз.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Тазалау және күтім

- USB кабельді зарядтау үшін қойғыштың артқы бөлігінде орналасқан қуат беру ағытпасынан ажыратыңыз. Корпусты қойғыштан шешіңіз;
- Корпустың сыртқы бетін қажет болған кезде дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз;
- Саптаманы корпустан шешіңіз. Оны жылу сумен жуыңыз және кептіріңіз;

Ескертулер

1 Бірнеше ай сайын немесе бітеліп қалған кезде саптаманы 1:2 пропорциясында сумен ақ сірке суынан ерітінді бар контейнерге бес минут салып қойыңыз. Содан кейін саптаманы жылы сумен жақсылап шайыңыз;

2 Бірнеше ай сайын немесе бітеліп қалған кезде резервуарды жылы сумен толтырып, 1-2 ас қасық ақ сірке суын қосыңыз. Саптаманы шұңғылшаға бағыттаңыз және резервуарда ерітінді біткенше жуып-шаю үшін құралды іске қосыңыз. Осыдан кейін резервуарды таза, жылы сумен шайыңыз.

- Құралды тек ол толықтай кепкеннен кейін қолданыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Саптамаларды, резервуарды, корпусы, USB кабельді және зарядтау үшін қойғышты ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды. Құралды тазалау үшін химиялық тазартқыштар мен қажақты тазартқыштарды қолданбаңыз.

Батареяны кәдеге жарату алдында оны құралдан алып тастау керек. Батареяны алып тастаған кезде құрал қуат беру көзінен ажыратылған болуы керек. Батареяны қауіпсіз кәдеге жаратылуы керек.

8.2 Ұсыныстар

- Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну үзілді-кесілді ұсынылады.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бүлінулерге жол бермеу үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз. Тасымалдаудан және бұйымды төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурасында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет. Сақтаудың және қайтадан пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаңыз және толықтай құрғатыңыз. Құралды құрғақ салқын орында, +0-ден +40 °C-қа дейінгі температура кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында, балалар мен жануарларға қолжетімсіз жерлерде сақтау ұсынылады. Бұйымды тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылғандардан басқа, келесі талаптарды басшылыққа алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасы бүтіндігінің бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін әлеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;

- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетуіне жол бермеу қажет. Бұрын пайданудан болған бұйымды тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және күннің тікелей сәулелерінің әсерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Электр құралдарын қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толмас зиян келтіреді. Ақаулы электр құралдарын тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін электр құралдарын мамандандырылған кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Сіз электр құралдарын қабылдау бекеттерінің мекенжайларын Сіздің қалаңыздағы муниципалдық қызметтерден ала аласыз. Батарея құралдан оны кәдеге жаратудың алдында одан алынған болуы керек. Құрал батареяны алып тастау кезінде қуат беру желісінен ажыратылған болуы керек. Батарея қауіпсіз кәдеге жаратылуы керек.

10 ҚЫЗМЕТТІК МЕРЗІМІ

Дайындаушы –компания сатып алушылардың назарын бұйымды тұрмыстық мұқтаждықтардың аясында пайдалану және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы кезінде бұйымның қызметтік мерзімінің осы нұсқаулықта көрсетілгеннен айтарлықтай асып кететіндігіне аударады. Дайындаушы-компания өзіне бұйымның пайдаланушылық сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтылауына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

11 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

Сіздің назарыңызды кепілдікті мерзімінің ішінде келесі шарттардың сақталулары кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аударамыз: Кепілдікті міндеттемелер онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы ұйымның мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілумен кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде жүзеге асырылады. Сізге дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің аталған бұйымның сапасы бойынша талаптарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастаудың алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негіздемесі Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы, әсіресе, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық заңы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады. Бұйымның кепілдікті мерзімі 24 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек желі арқылы сатылған күнінен бастап саналады. Біздің кепілдікті міндеттемелер кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған, және өндірістік, технологиялық және конструктивтік, яғни, дайындаушы-компанияның кінәсі бойынша жол берілген ақаулармен шарттас ақаулықтарға ғана таралады.

11.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралмайды:

- 11.1.1 Келесілердің нәтижесінде орын алған ақаулықтарға;
 - қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
 - сыртқы немесе кез келген басқа әсермен шақырылған механикалық бүлінулерге;
 - бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбауға;
 - бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орта-

лар, электр желісінің қуат беруші параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкессіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлерге;

- аталған үлгінің технологиялық құрылымында қарастырылмаған, өндірушімен ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтардың, шығын материалдарының және қосалқы бөлшектердің қолданылуына.

11.1.2 Уәкілетті емес тұлғалармен ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге ұшыраған бұйымға.

11.1.3 Келесілер секілді бұйымды лайықсыз қолданудың немесе сақтаудың салдарынан орын алған ақаулықтар:

- Бұйымның металл элементтерінде тотығулардың болуы;
- USB кабелдің (8) үзіктері мен кесіктері;
- Сызаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің қатты ескірулері және басқалар.

11.1.4 Бұйымның істен шығуына әкеліп соқтырған бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтар.

11.1.5 Оқылатын сериялық нөмірісіз бұйымға.

11.1.6 Мезгіл-мезгіл ауыстыруға жататын электр құралымен бірге жеткізілетін шығын материалдары, (саптамалар, резервуар, USB кабелі, зарядтау үшін қойғыш), сондай-ақ керек-жарақтар мен толымдаушылар.

- USB кабелинің үзілуі және кесілулері;

11.1.7 Асқын жүктелудің мінсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның бөлшектері мен түйіндерінің деформациялануы мен балқуы;
- ротор мен қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;
- сымдардың оқшаулағыштарының қараюы немесе күйі.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа жеткізу соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның есебінен жүзеге асырылатындығына аударамыз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылықты және жарамдылықты, сонымен бірге кепілдік талонының дұрыс толтырылуын тексеріңіз. Құралға кепілдікті жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxytecs.ru сайтынан білуге болады.

12 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы, дайындаушы уәкілеттілік берген тұлға:

«МЕГАПОЛИС» ЖШҚ

Мекен-жай: 432048, Ресей Федерациясы, Ульяновск облысы, қ.о. Ульяновск қаласы, Ульяновск қ., Локомотивная көш., ғим.14А

Электрондық поштаның мекенжайы: mail@simbirsk-crown.ru

Телефон: +78422324242

Дайындаушы: Вэньчжоу Притек Индастриал Ко., ЛТД.

Мекен-жай: №105 Гонг Диан роад соуф, Вэньчжоу, Қытай.

ҚХР жасалған.

Дайындалған күні бұйымның өзінде орналасқан лейблдың (ақпараттық тақтайша) сериялық нөмірінде орналасқан. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір - импорттаушыдан және тапсырыс нөмірінен / дайындалған жылы мен айынан / бұйымның реттік нөмірінен тұрады.

Срок гарантии 24 месяца
Кепілдік мерзімі 24 ай

GALAXY LINE


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки GALAXY LINE. Мы уверены в качестве нашей продукции и всегда стремимся улучшить его. В случае поломки готовы обеспечить Вас гарантийным обслуживанием в сервисных мастерских. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте: galaxy-tecs.ru, а также по QR-коду. Телефон горячей линии: **8-804-333-51-52** (звонок по РФ бесплатный)

Құрметті сатып алушы!

Сізге GALAXY LINE сауда таңбасын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз өніміміздің сапасына сенімдіміз және әрқашан оны жақсартуға тырысамыз. Бұзылған жағдайда, Сізді сервистік шеберханаларда кепілдікті қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге дайынбыз. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе galaxy-tecs.ru сайтынан, сондай-ақ QR-код бойынша білуге болады. Жедел желі телефоны: **8-804-333-51-52** (РФ бойынша қоңырау соғу тегін)

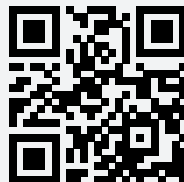

galaxy-tecs.ru

Наименование изделия

Бұйымның атауы

Модель

Моделі

Серийный номер

Сериялық нөмірі

Торговая организация

Сауда ұйымы

Дата продажи

Сатылған күні

Ирригатор для полости рта

Ауыз қуысына арналған ирригатор

GL5000

День / Күн

Месяц / Ай

Год / Жыл

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Тексерілді, менің қатысуымен наразылық сыртқы түрі және комплектации жоқ пайдалану ережелерімен және шарттарымен кепілдік таныстым.

Печать продавца
Сатушының мөрі

Подпись покупателя / Сатып алушының қолы

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ / ЖӨНДЕУ ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТ

№	Сервис-центр Сервис-орталығы	Дата приема Қабылдау күні	Дата выдачи Берілген күні	Подпись мастера Қолы шебер
1				
2				
3				

Гарантийные условия и дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия. Кепілдік шарттары және қосымша ақпаратты таба аласыз пайдалану жөніндегі басшылықта бұйымдар.

