




**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**USER MANUAL**

**Массажное кресло**  
**Massage chair**

**PLANTA MC-2000B**

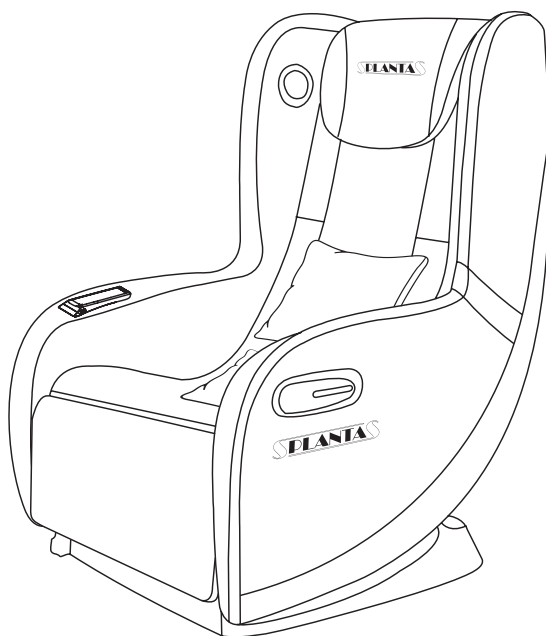

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



**[www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)**

## **ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

### **Применение и назначение**

Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за выбор **массажного кресла PLANTA MC-2000B!**

Массажное кресло PLANTA MC-2000B позволит Вам наслаждаться массажем в любое время, не выходя из дома. Массажное кресло MC-2000B помогает успокоить нервную систему, снять стресс, быстро восстановить силы, расслабив мышцы шеи, спины, бедер и ягодиц.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что это массажное кресло Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажного кресла, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: [www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)



**ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**

## Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности:

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажное кресло.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Не размещайте массажное кресло на солнце или в месте с температурой выше 40 °С, так как это приведет к выцветанию материала, из которого изготовлено массажное кресло, а также к возможному выведению из строя внутреннего механизма.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если во время или после использования устройства у Вас появилась боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя накрывать работающее устройство подушками, одеялами и т.п.
- Не допускайте зажимания провода питания или попадание его под основание кресла.
- Если у Вас длинные волосы, не позволяйте длинным волосам закрывать область массажа, чтобы избежать случайного запутывания.
- Не вставайте на кресло и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не наступайте на массажные ролики, так как это может привести к их поломке.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.

- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 30 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.
- **Максимальный вес пользователя – 100 кг.**

### **ВНИМАНИЕ!**

- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм прикладывайте к креслу только легкое усилие.

### **Предупреждения:**


Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков, любые болезни позвоночника, спины и суставов и др.;
- проходите реабилитацию после операции.


### **Примечание:**

Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

## Описание массажного кресла

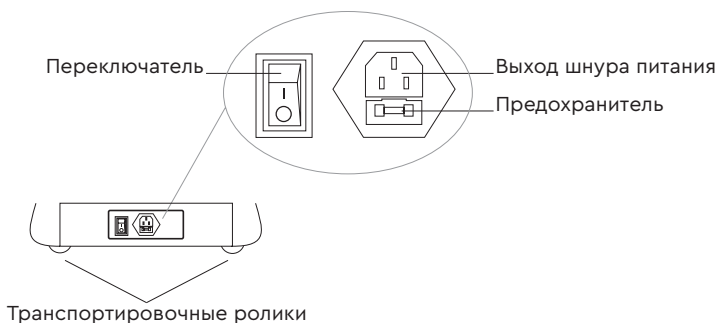

## Панель управления

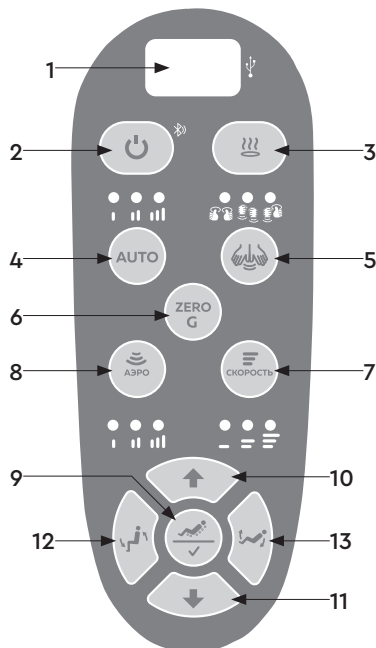

**1. USB-разъем.** Предназначен для подзарядки мобильных устройств и других гаджетов.

**2.**  **Включение/выключение** работы массажного кресла, активация функции Bluetooth.

**Примечание.** Функция Bluetooth активируется автоматически при включении массажного кресла. Для подключения функции Bluetooth на своем смартфоне выберите в списке допустимых подключений наименование «PLANTA».

**3. Подогрев.** Включение/выключение функции подогрева в области спины.

Для активации подогрева спины нажмите кнопку . Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.

**4. АВТО.** Включение/выключение и выбор одного из 3 автоматических режимов общего массажа всего тела. Выбрать необходимую программу можно,

нажимая на кнопку  до активации нужной автопрограммы. Авторежимы включают в себя чередование и/или сочетание компрессионного массажа бедер и роликового массажа всего тела.

## Автоматические программы:

- Автопрограмма 1: Общий массаж всего тела

Активация общего массажа всего тела с чередованием /сочетанием режимов роликового, постукивающего и разминающего массажа в области спины и шеи и воздушно-компрессионным массажем области бедер.

- Автопрограмма 2: Массаж нижней части тела

Активация массажа всего тела, при котором основная работа приходится на разминающий массаж нижней части тела. Дополнительно активируется чередование/сочетание режимов роликового, постукивающего и разминающего массажа в области всей спины в комбинации с разминающим массажем области шеи и воздушно-компрессионным массажем области бедер.

- Автопрограмма 3: Роликовый массаж всего тела

Активация массажа всего тела, при котором основная работа приходится на роликовый массаж всего тела. Дополнительно активируется чередование/сочетание режимов постукивающего и разминающего массажа в области спины и шеи и воздушно-компрессионным массажем области бедер.

5. **Ручной режим.** Активация одного из 3-х режимов ручного массажа: *Разминание/ Постукивание/ Разминание + постукивание*. Для активации нуж-

ного режима нажимайте кнопку  пока на панели загорится индикатор нужного Вам режима массажа: 



**Разминание:** Активация разминающего массажа всего тела.



**Постукивание:** Активация постукивающего массажа всего тела.



**Разминание + Постукивание:** Активация сочетания/чередования разминающего и постукивающего массажа всего тела.

6. **Невесомость.** Активация данной функции предусматривает приведение кресла в положение, при котором пользователь перестает ощущать вес собственного тела (на выбор предусмотрено 2 угла наклона – 135 и 140 градусов).

Для активации функции «Невесомость» после выбора необходимого режи-

ма нажмите кнопку «», угол массажного кресла перейдет в положение невесомости под углом 135 градусов. Повторное нажатие кнопки переведёт кресло в положение невесомости под углом 140 градусов. Последующее нажатие кнопки отключает функцию «Невесомость» и переводит кресло в



исходное положение.

7. **Скорость.** Выбор скорости движения массажных роликов для области активированного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 уровня скорости движения).

После выбора необходимого режима последовательно нажимая на кнопку



« », выберите комфортную для Вас скорость движения массажных роликов (1, 2 или 3 уровень скорости).

8. **Аэромассаж.** Включение/выключение режима воздушно-компрессионного массажа бедер и выбор интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек для области бедер (1, 2 или 3 уровень интенсивности).



Для активации функции «Аэромассаж» нажмите кнопку « » один раз. Запустится работа воздушно-компрессионного массажа области бедер на 1-ом уровне интенсивности. Повторное нажатие активирует 2-ой уровень интенсивности, третье нажатие – 3-ий уровень интенсивности. Последующее нажатие приведет к отключению функции аэромассажа.

9. **Общий массаж/фиксация области массажа.** Активация общего массажа всего тела, а также выбор и фиксация определенной области массажа.



Однократное нажатие на кнопку запускает активацию общего роли-



кового массажа всего тела. С помощью кнопки выберите необходимый режим массажа: *Разминание/ Постукивание/ Разминание + постуки-*



*вание*. Повторное нажатие кнопки фиксирует область массажа, на которой остановились ролики и продолжается фиксированный массаж данной области в выбранном режиме массажа. Последующее нажатие на кнопку



снова активирует общий массаж всего тела в выбранном режиме.

10. **Вверх.** Активация движения массажных роликов снизу вверх.

После активации фиксированного массажа определённой области тела, Вы можете выбрать другое положение массажных роликов. Нажимайте кнопку



« » для движения роликов вверх от исходного положения до закрепления в нужной области массажа. Затем отпустите кнопку. Новое положение массажных роликов будет зафиксировано.

**11. Вниз.** Активация движения массажных роликов сверху вниз.

После активации фиксированного массажа определённой части тела, Вы можете выбрать другое положение массажных роликов. Нажимайте кнопку

«  » для движения роликов вниз от исходного положения до закрепления в нужной области массажа. Затем отпустите кнопку. Новое положение массажных роликов будет зафиксировано.

**12. «Положение «Сидя».** Опускание подставки для ног и одновременное поднятие спинки кресла для фиксации сидячего положения. Зажмите кнопку

 и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.

**13. «Положение «Лежа».** Поднятие подставки для ног и одновременное опускание спинки кресла для фиксации лежачего положения. Зажмите кнопку

 и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.

**Примечание.** Предустановленное время работы всех режимов массажа – 15 мин. При необходимости Вы можете увеличить время массажа, активировав повторно нужный Вам режим и функции.



**Помните, что время полезного действия массажа составляет не более 30 минут.**


## Комплектация массажного кресла

Массажное кресло поставляется полностью в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

## Эксплуатация массажного кресла


⚠ Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.

- Извлеките из коробки массажное кресло. Удалите все упаковочные материалы.
  - Внимательно осмотрите массажное кресло на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
1. Осмотрите массажное кресло.
  2. Убедитесь в отсутствии повреждений на кресле и шнуре питания.
  3. Установите кресло на ровной горизонтальной поверхности.
  4. Убедитесь, что вокруг кресла достаточно пространства для его раскладывания:
    - не менее 80 см позади кресла;
    - не менее 50 см перед креслом.

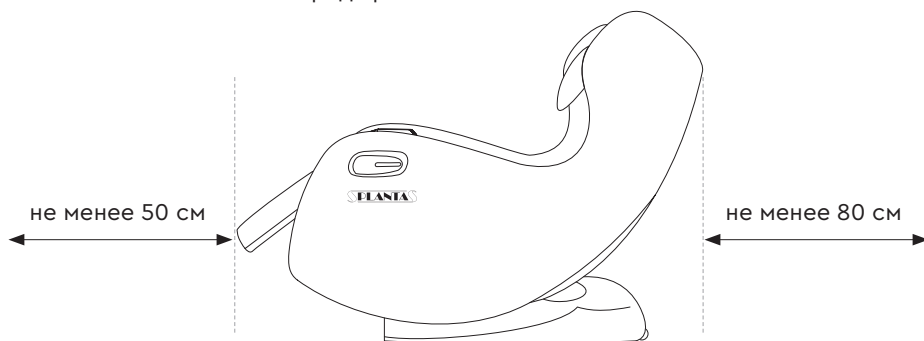

5. Убедитесь, что под креслом нет посторонних предметов.
6. Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.

7. Нажмите переключатель в положение «ВКЛ» в нижней части спинки кресла.

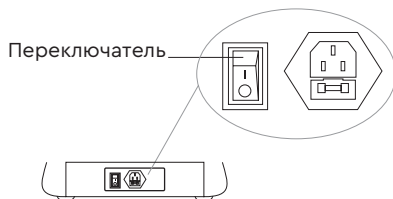

8. Нажмите кнопку  на панели управления для включения устройства. По умолчанию активируется автоматический режим «1». Данный режим предусматривает активацию общего массажа всего тела с чередованием / сочетанием режимов роликового, постукивающего и разминающего массажа в области всей спины в комбинации с разминающим массажем области шеи и воздушно-компрессионным массажем области бедер.

**Примечание.** При включении массажного кресла автоматически активируется функция Bluetooth. При этом прозвучит звуковой сигнал. Для подключения функции Bluetooth на своем смартфоне выберите в списке допустимых подключений наименование «PLANTA».

9. Выберите нужный режим массажа (1 из 3 автоматических программ или 1 из 3 программ ручного режима массажа) нажатием на соответствующую кнопку.

- С помощью кнопок  и  выберите комфортный для Вас наклон спинки и подставки для ног или с помощью кнопки  активируйте функцию «Невесомость».

- При желании Вы можете активировать функцию подогрева в области спины, нажав кнопку . Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.

10. Нажатие на кнопку  во время работы массажного кресла прерывает цикл работы программы и отключает массажное кресло.

11. По завершении массажа выключите прибор из розетки.

 **ВНИМАНИЕ!** При использовании кресла следите, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат под креслом.

## ПРИМЕЧАНИЯ:


- Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь вставать на кресло.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 30 минут. Полезное действие массажа составляет 30 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

## Внимание!

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя.
- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

## Перемещение кресла

Перед перемещением массажного кресла убедитесь, что кнопка питания находится в положении Выкл, провод питания отсоединен. Возьмитесь за углубление в задней спинке кресла двумя руками, слегка наклоните его на себя и переместите кресло на нужное место, используя транспортировочные ролики, расположенные в задней части спинки кресла.

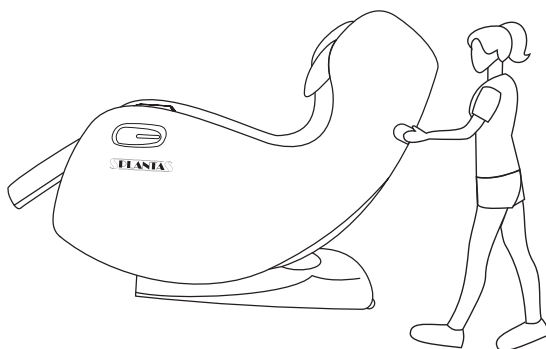

## Уход и Хранение

Правильное обслуживание поможет поддерживать массажное кресло в хорошем техническом состоянии и продлить его срок службы. Неправильное же техническое обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы массажного кресла.

**Предупреждение:** перед очисткой или обслуживанием массажного кресла обязательно отключите вилку питания.

- Регулярно удаляйте пыль влажной тряпкой.
- Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети, дайте креслу остыть.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.



**Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.**

- Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.



**Внимание! Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.**

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань.
- Во избежание поломки не сворачивайте шнур вокруг кресла.

## Возможные неполадки и способы их устранения

| Проблема                                          | Возможная причина                            | Решение                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Не включается                                     | Устройство не подключено                     | Убедитесь, что устройство включено в сеть    |
|                                                   |                                              | Проверьте правильность подключения адаптера  |
|                                                   | Устройство включено неправильно              | Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ                      |
| Устройство неожиданно отключилось                 | Вы используете массажер более 30 мин         | Это нормально, устройство исправно работает  |
| Массажные ролики двигаются слишком медленно       | Слишком большое давление на массажные ролики | Уменьшите давление на массажные ролики       |
| Слышен громкий звук во время использования кресла | Звук вызван работой массажного механизма     | Это нормальная ситуация при работе массажера |

## Технические характеристики

Модель: МС-2000В

Питание: 220 В, 50–60 Гц

Мощность: 80 Вт


Размер прибора: 110х65х105 см

Кол-во массажных роликов: 4 шт.

Вес нетто: 56 кг

Максимальный вес пользователя: 100 кг

Материал: ABS-пластик, полиэстер

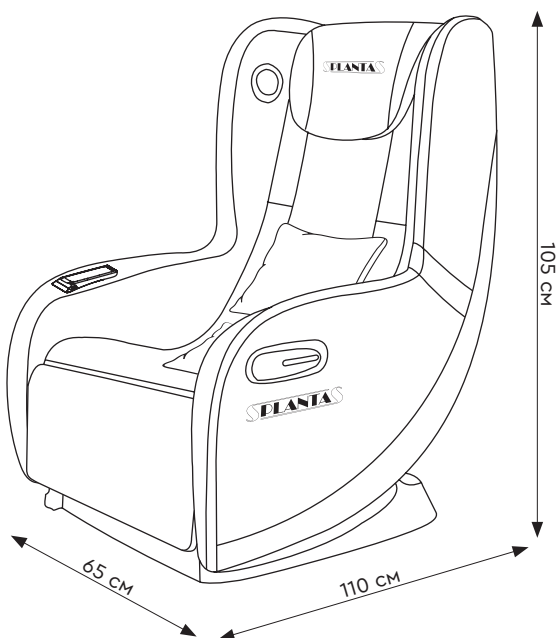



## Гарантийный талон

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li> <li>Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li> <li>Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> <li>механических повреждений;</li> <li>выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li> <li>использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li> </ul> </li> <li>Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li> <li>Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li> <li>Гарантийный срок – 1 год.</li> <li>Срок службы – 3 года.</li> </ol> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Фуцзянь Эпос Текнолоджи Ко., Лтд.»</p> <p>Адрес: Ванцзи Индастриал Парк, Фуань Сити, Провинция Фуцзянь, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p> <p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей:<br/> <a href="https://www.planta-russia.ru">https://www.planta-russia.ru</a><br/> +7 (495) 137-80-32</p> <p>Товар сертифицирован<br/> Сделано в Китае</p> <div style="text-align: right;">  <b>класс<br/>защиты I</b> </div> | <p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:<br/> _____</p> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:<br/> _____</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|