


PLANTA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажный матрас MY-8000

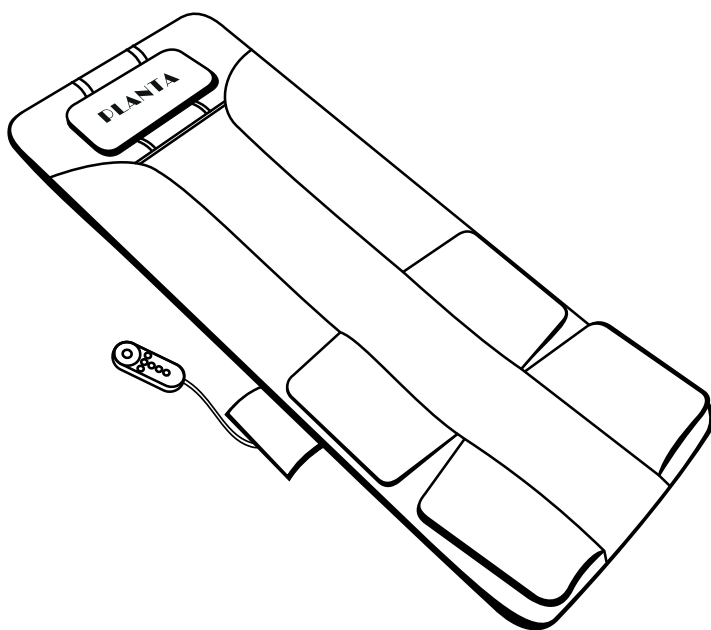

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку **массажного матраса Planta MY-8000!**

С помощью массажного матраса с 28 воздушно-компрессионными подушками Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в любом месте. Массажный матрас эффективно прорабатывает все зоны спины, шею, бедра, ягодицы и икры, уменьшая тяжесть и напряжение в мышцах и придавая им легкость и гибкость. Встроенные воздушно-компрессионные подушки массажера обеспечивают правильное вытяжение и скручивание мышц спины. Матрас можно использовать на полу, на диване, а также на любой твердой горизонтальной поверхности. Он является отличной альтернативой услугам личного массажиста. Регулярное применение массажного матраса позволит снять напряжение в мышцах, повысить жизненный тонус, улучшить обменные процессы в организме. Подогрев эффективно стимулирует кровообращение.



Внимание! Данное устройство не является заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажного матраса, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажера.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу.



ВНИМАНИЕ!

При использовании массажного матраса необходимо руководствоваться следующими правилами по безопасности:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации на весь срок службы изделия.
- Данный прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования – только для бытового (домашнего) применения.
- Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов.
- Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.

- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки.
- Запрещено разбирать устройство, снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, такими как: электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Всегда сначала подключайте вилку в розетку, затем включайте сам прибор. Для отсоединения сначала выключите сам прибор, затем уже выдерните вилку из розетки.
- Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве.
- Не погружайте электроприбор, шнур питания или вилку в воду или любую иную жидкость. Не трогайте включенный в сеть и работающий прибор мокрыми руками. Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за вилку, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы. Не оставляйте работающий прибор без присмотра!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Кроме этого, нельзя использовать устройство для лечения заболеваний суставов, позвоночника, головы и других чувствительных мест.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в мышцах или суставах, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 20 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

Примечания

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.



ВНИМАНИЕ! МАССАЖНЫЙ МАТРАС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Комплектация:


Массажный матрас – 1 шт.


Пульт управления – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

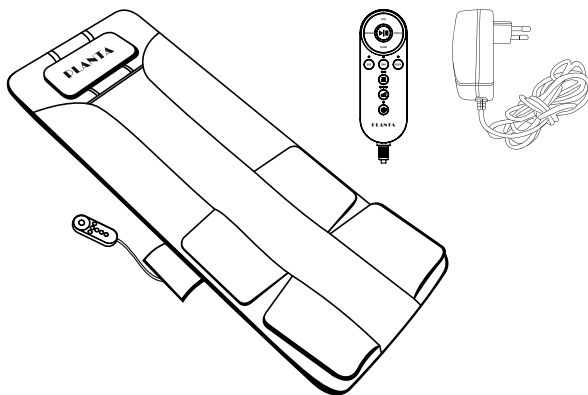

1. Воздушно-компрессионные подушки области головы и шеи
2. Воздушно-компрессионные подушки области плечевого и грудного отдела
3. Воздушно-компрессионные подушки области спины и поясницы
4. Воздушно-компрессионные подушки области бедер и ягодиц
5. Воздушно-компрессионные подушки области икр
6. Направляющие для регулировки положения массажной подушки
7. Пульт управления
8. Карман для пульта управления
9. Ручки для переноски массажного матраса

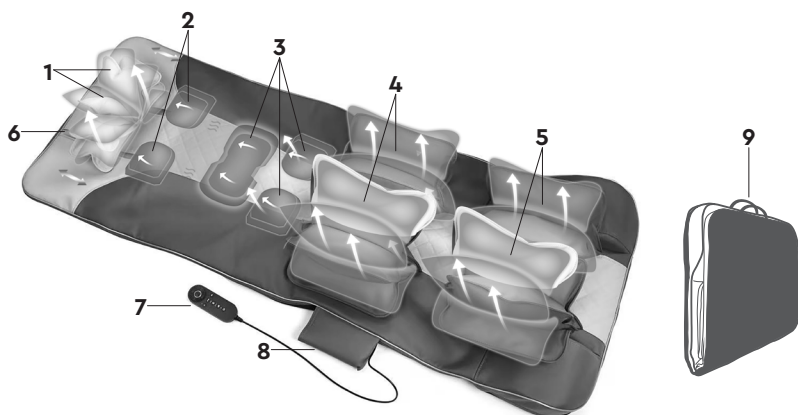

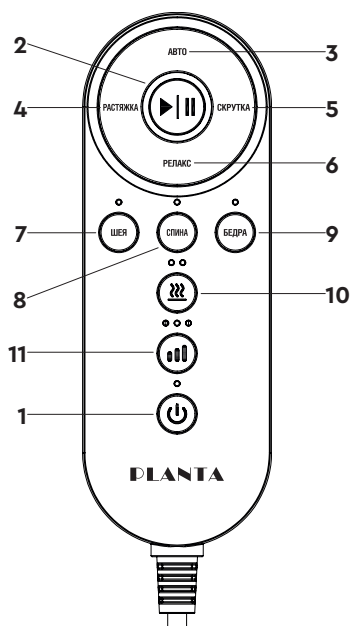

1.  – кнопка включения/выключения массажного матраса/выбора времени массажа.

Для активации работы массажного матраса зажмите кнопку в течение 3 секунд. По умолчанию при включении активируется автоматический режим работы матраса. Для отключения работы матраса зажмите кнопку в течение 3 секунд повторно.

По умолчанию время массажа составляет 20 минут (индикатор кнопки  горит синим цветом). Для изменения времени массажа нажимайте кнопку до установления необходимого времени:

- 10 минут – красный индикатор кнопки;

- 30 минут – зеленый индикатор кнопки.

2.  – кнопка приостановления/возобновления работы установленной программы массажа. Для приостановления работы активной программы массажа нажмите кнопку однократно, для возобновления работы программы нажмите кнопку повторно.

3. **«Авто»** – кнопка включения автоматического режима работы матраса.

Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа всего тела на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.

4. **«Растяжка»** – кнопка активации режима растяжки всего тела. Данный режим предусматривает активацию режима растяжки всего тела на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.

5. **«Скрутка»** – кнопка активации скручивающего режима массажа всего тела. Данный режим предусматривает активацию скручивающего режима массажа всего тела на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.

6. **«Релакс»** – кнопка активации расслабляющего массажа всего тела. Данный режим предусматривает активацию мягкого расслабляющего режима массажа всего тела на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.

7. **«Шея»** – кнопка активации воздушно-компрессионного массажа головы и шеи.

Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа головы и шеи на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.

8. **«Спина»** – кнопка активации воздушно-компрессионного массажа спины и поясницы. Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа спины и поясницы на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.

9. **«Бедра»** – кнопка активации воздушно-компрессионного массажа бедер и ягодиц. Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа бедер и ягодиц на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.

10.  – кнопка активации режима «Подогрев». В матрасе предусмотрено 2 уровня интенсивности подогрева. По умолчанию при включении любого из режимов массажного матраса активируется 2 уровень интенсивности подогрева. Нажимайте кнопку, пока индикатор не отобразит нужный Вам уровень интенсивности подогрева или отключите данную функцию.

11.  – кнопка выбора уровня интенсивности (мощности) массажа. В матрасе предусмотрено 3 уровня интенсивности массажа. По умолчанию при включении любого из режимов массажного матраса активируется 2 уровень интенсивности. Нажимайте кнопку, пока индикатор не отобразит нужный Вам уровень интенсивности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
2. Осмотрите массажный матрас. Убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве и шнуре питания.
3. Расположите матрас на подходящей горизонтальной поверхности.
4. Подключите адаптер питания массажного матраса к розетке электрической сети 220 В.
5. Чтобы включить массажный матрас, нажмите кнопку «» на пульте управления в течение 3 секунд, на пульте загорится синий индикатор, устройство начнет работу. По умолчанию массажный матрас начинает работу в автоматическом режиме на 2-ом уровне мощности и 2-ом уровне интенсивности подогрева.
6. Выберите необходимый режим работы матраса, используя кнопки на пульте управления или оставьте работу массажного матраса в автоматическом режиме.
7. С помощью кнопок  и  установите необходимый уровень интенсивности режима работы матраса и комфортный уровень подогрева.
8. По умолчанию в массажном матрасе предусмотрено время работы 20 минут. С помощью кнопки «» выберите необходимое время массажа. По истечении установленного времени работы массажный матрас автоматически выключится. Чтобы выключить устройство раньше установленного времени, нажмите кнопку «» в течение 3 секунд или кнопку , чтобы приостановить работу матраса.

ЧИСТКА И УХОД

- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством. Перед чисткой выключите устройство. Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.




ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ И АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке.
- Если Вы не используете матрас, храните его в сухом месте.
- Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Массажный матрас легко складывается и закрепляется с помощью липучек. Для переноски матраса предусмотрены 2 удобные ручки.

Размер матраса в сложенном виде:

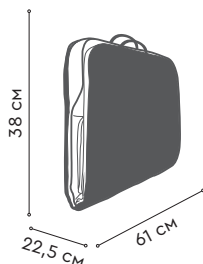

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MY-8000
Кол-во воздушно-компрессионных подушек	28 шт.
Питание	220 В, 50–60 Гц
Материал	Полиэстер, полиуретан
Номинальная мощность	36 Вт
Вес НЕТТО	7,5 кг
Размеры в разложенном виде	160 x 60 x 10 см
Размеры в сложенном виде	61 x 22,5 x 38 см

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Устройство не подключено	Убедитесь, что устройство включено в сеть
		Проверьте правильность подключения адаптера
	Устройство включено неправильно	Нажмите кнопку «  »
Устройство неожиданно отключилось	Вы используете массажер более 20 мин	Это нормально, устройство исправно работает
Недостаточная интенсивность работы массажного матраса	Установлена самая низкая интенсивность работы матраса	Установите более высокий уровень интенсивности

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата производства указана на упаковке. Изготовитель: «Сямынь Хелспал Электроник Ко., Лтд.» Адрес: №148 Бингланг Ксили, Симинг Дистрикт, Сямынь, Фуджиан, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ» Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 Сделано в Китае 	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--