

PLANTA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
КОМПРЕССИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
PLANTA MFC-80



www.planta.ru.com

 **#planta_beauty**

НАЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖЕРА

Массажер MFC-80 предназначен для проведения комплексной прессотерапии и лимфодренажа в области бедер, икроножных мышц, лодыжек и стоп одновременно. Массажер разработан специально для простого и удобного проведения процедур на дому. Мощный компрессор попеременно нагнетает воздух в воздушных камерах манжет всей длине ноги. Эта модель имеет увеличенную ширину и длину манжет, она подойдет для людей с повышенной массой тела, имеющих сильные отеки ног различного происхождения. Благодаря липучкам на манжетах достигается плотное обертывание и прилегание. Компрессионный массаж способствует улучшению кровообращения, оттоку лимфы, помогает снять напряжение мышц и освобождает конечности от отеков жидкости. Лимфодренаж с помощью этого массажера способствует похудению и эффективен в борьбе с целлюлитом. Функция подогрева в области коленей для стимулирования кровообращения. Идеально подходит для тех, кто долго стоит на работе на ногах или испытывает дискомфорт, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции!

- Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: **www.planta.ru.com**
- Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали массажера находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности не используйте массажер.
- Ремонт массажера могут проводить только квалифицированные специалисты. Не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Никогда не используйте массажер в непосредственной близости от источников тепла
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не

имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.

- Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на переключатели и кнопки массажера.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием и электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеуказанного медицинского оборудования.



Меры предосторожности при проведении процедуры массажа:

- Не оставляйте работающий массажер под подушками, одеялами и т.п.
- Не используйте массажер во время сна.
- Избегайте ситуаций, при которых Вы можете заснуть во время использования массажера.
- Используйте массажер только если Ваше тело сухое.
- Используйте массажер только в сухих помещениях.
- Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне и вне закрытых помещений.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 20 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.



Не рекомендуется проводить процедуру дольше 20 минут!

Противопоказания:

Перед использованием компрессионного массажера необходимо проконсультироваться с врачом в случае:

- Беременности,
- использования кардиостимулятора или других электромедицинских устройств,
- наличия искусственных частей ног или имплантов,

- наличия одного из заболеваний:
- грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет,
- воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.
- прохождения реабилитации после операции.


Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.

Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!

Внимание: Массажер не является медицинским прибором и предназначен для проведения профилактических процедур. Если Вы находитесь под наблюдением врача, перед использованием массажера, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ОПИСАНИЕ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖЕРА


1. Правая манжета R
2. Левая манжета L
3. Липучки
4. Подогрев в области коленей
5. Шланг подачи воздуха
6. Место подсоединения шлангов
7. Пульт управления с компрессором
8. Дисплей

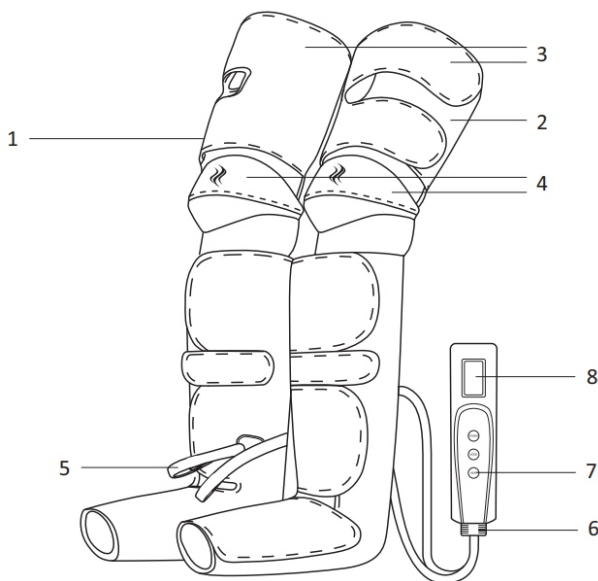

Особенности массажера

- Увеличенные размеры манжет подойдут как для людей с повышенной массой тела, так и для страдающих ожирением
- Каждая манжета обхватывает всю поверхность ноги от ступней до бедер
 - Увеличенное количество воздушных камер в манжетах для более равномерного распределения давления на ноги
 - Компрессор накачивает воздух попеременно в воздушных камерах. Воздушно-компрессионные камеры плавно меняют свой объем
 - Запрограммированные массажные циклы создают волнообразные движения и действуют на разные области, охватывая не только голень, стопу, но и бедро
 - Используя доступный контроль при помощи панели управления, Вы можете настроить каждый из режимов работы массажера под Ваши индивидуальные пожелания, исходя из вашей чувствительности и необходимой для Вас интенсивности
 - Функция прогрева коленей, уровни которого можно настроить при помощи пульта

Управление и функции массажера

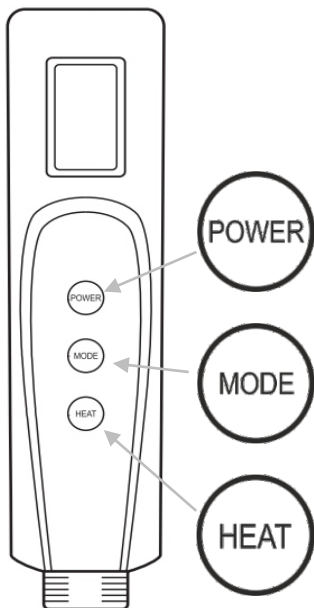

POWER Кнопка включения/выключения

Для включения массажера нажмите кнопку и удерживайте до включения подсветки дисплея. Последующие нажатия будут регулировать интенсивность:

- По умолчанию – **низкий уровень** интенсивности
- Повторное нажатие – **средний уровень** интенсивности
- Третье нажатие – **высокий уровень** интенсивности

MODE Кнопка выбора режима работы

При нажатии на кнопку происходит переключение режимов работы

HEAT Кнопка включения подогрева

При нажатии на кнопку происходит переключение уровня подогрева области коленей

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖЕРА



На время проведения процедуры рекомендуется не надевать на ноги одежду, содержащую крупные пуговицы, молнии и другие элементы, которые будут мешать при проведении массажа.

Достаньте все элементы и комплектующие массажера из упаковки. Убедитесь, что никакие детали массажера не повреждены. При наличии повреждений на новом изделии, не используйте его и обратитесь в организацию, продавшую массажер.



Совет! Начинайте проводить процедуры по 10 – 15 минут с минимальным уровнем давления. По мере необходимости постепенно повышайте давление и длительность процедуры. На время проведения процедуры рекомендуется принять горизонтальное положение. При надевании манжеты следите за тем, чтобы манжета равномерно плотно прилегала ко всей поверхности ног.

Использование массажера:

1. Наденьте манжеты на ноги, плотно зафиксируйте липучками, охватив бедра, колени, икроножные мышцы и стопы.
2. Подключите шланги для подачи воздуха к разъемам на пульте управления в соответствии с обозначениями на шлангах для подачи воздуха:

L – для левой ноги

R – для правой ноги

3. Подключите массажер к сети питания.

4. Для включения массажера нажмите кнопку включения **POWER** и удерживайте ее в течение 3-х секунд до включения подсветки дисплея. Массажер начнет работу.



5. Нажмите повторно кнопку **POWER** для регулировки интенсивности. На дисплее интенсивность обозначена **Intensity**. По умолчанию будет установлен первый уровень интенсивности - самый низкий. При повторном нажатии – средний уровень, при третьем нажатии - высокий уровень интенсивности.

6. Для выбора необходимого режима компрессии нажмите кнопку MODE. При переключении будет меняться режим работы циклично Mode 1 (Режим 1), Mode 2 (Режим 2), Mode 3 (Режим 3).

Режимы работы массажера

⊙ Mode 1 | Calf
| Foot



Mode 1 (Режим 1)



Массаж стопы, голени и бедра

⊙ Mode 2 | Calf
| Foot




Mode 2 (Режим 2)



Массаж голени и бедра

⊙ Mode 3 | Calf
| Foot

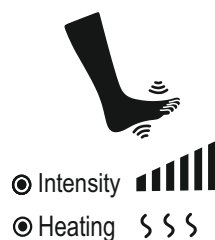

Mode 3 (Режим 3)



Массаж стопы

7. Дополнительно включите подогрев в области коленей, нажав кнопку HEAT. На дисплее эта функция отображается как Heating. Всего 3 уровня прогревания: низкий, средний, высокий.

8. Для завершения процедуры нажмите и удерживайте кнопку выключения POWER в течение 3-х секунд до отключения подсветки дисплея. Компрессор прекратит работу, давая возможность освободить ноги.



Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. При первом появлении боли или дискомфорта, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом!

ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ

- Перед проведением операций по уходу за массажером убедитесь, что прибор отключен от сети питания
- После использования массажера дождитесь полного остывания всех его частей
- Не стирайте массажер в стиральной машине, это приведет к его поломке
- Для очищения массажера от загрязнений используйте мягкую ткань или губку, слегка смоченную в мягком моющем средстве, затем дождитесь его полного высыхания
- После применения моющего средства, удалите его следы с поверхности массажера
- Храните массажер в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла



Не погружайте массажер в воду и не используйте для его очистки абразивные или агрессивные чистящие средства!

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Массажер не включается	Массажер не подключен к сети питания	Данный прибор не предназначен для автономной работы, подключите массажер к сети питания при помощи адаптера, идущего в комплекте
	В сети отсутствует напряжение	Подключите массажер к заведомо исправной розетке питания
Массажер выключился в процессе работы	Массажер работал более 20 минут	Это нормальная ситуация. Массажер предназначен для проведения процедуры в течении не более 20 минут
Массажер функционирует неправильно	Устройство находилось какое-то время при низкой температуре	Оставьте массажер на 2 часа при комнатной температуре, затем используйте

Массажер работает, но давление слишком слабое	Выставлен слишком малый для Вас уровень интенсивности	Измените уровень интенсивности, нажав на кнопку POWER необходимое количество раз
	Происходит утечка воздуха	Убедитесь, что оба шланга плотно присоединены к пульту управления
Слышен звук выходящего воздуха	Происходит коррекция давления в камерах	Это нормальная ситуация при работе массажера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **MFC-80**


Питание: **AC 100-240В / 50-60 Гц**

DC 12В/2А

Мощность: **24 Вт**

Давление воздуха:

- при высокой интенсивности: **32 кПа**
- при средней интенсивности: **24 кПа**
- при низкой интенсивности: **16 кПа**

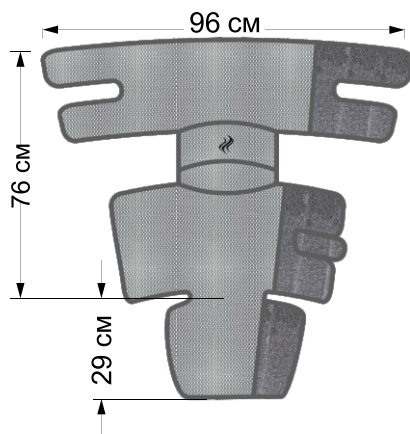

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +\ - 5-10%.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Сямынь Хелспал Электроник Ко., Лтд.», Адрес: №148 Бингланг Ксили, Симинг Дистрикт, Сямынь, Фуджиан, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «ПАЛЛАДА» 111675 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА РУДНЁВКА ДОМ 4 П IV К 1,2 ОФ 1 РМ 2/5, РОССИЯ Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta.ru.com +7 (499) 703-04-95  Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--