


**Легка,
свежа,
красива!**

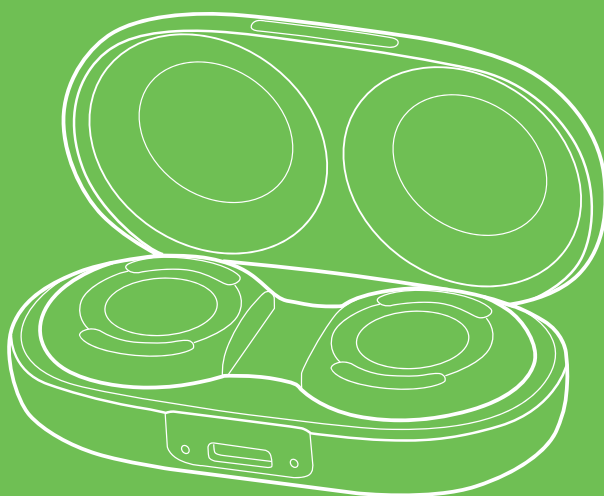

**Электронные патчи
для глаз KT-3185**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электронных патчей для глаз	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Электронные патчи для глаз КТ-3185 способствуют тонизированию кожи вокруг глаз и замедлению появления морщин, помогают избавиться от отеков и темных кругов под глазами. Использование прибора способствует повышению эластичности кожи и увеличивает эффективность от применения питательных косметических средств.

Прибор воздействует на кожу с помощью микротоков EMS (электромиостимуляция). Микротоки укрепляют и тонизируют мышцы вокруг глаз, устраняя дряблость кожи и разглаживая морщины. EMS активирует кровообращение, что ускоряет насыщение тканей кислородом, а также способствует проникновению косметических средств в глубокие слои кожи.

Прибор оснащен LED-подсветкой, которая излучает свет в красном спектре (длина волны 620–630 нм). Красное излучение (красный свет) активирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Красный свет способствует расширению сосудов и оптимизирует обменные процессы, которые замедляются с возрастом.

У патчей КТ-3185 есть два режима работы — непрерывное и импульсное воздействие. В режиме «Непрерывное воздействие» производится воздействие микротоками EMS средней интенсивности. При этом прибор излучает красный свет непрерывно с высокой интенсивностью. В режиме «Импульсное воздействие» EMS происходит с высокой интенсивностью, излучение красным светом имеет меньшую интенсивность и импульсный характер. В режиме «Непрерывное воздействие» делается упор на активацию синтеза коллагена и эластина, режим «Импульсное воздействие» направлен на массаж и тонизацию мышц вокруг глаз.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Электронные патчи для глаз КТ-3185 не являются медицинским прибором и используются только в профилактических и косметологических целях.

Комплектация

1. Патч — 2 шт.
2. Кейс для зарядки — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электронных патчей для глаз

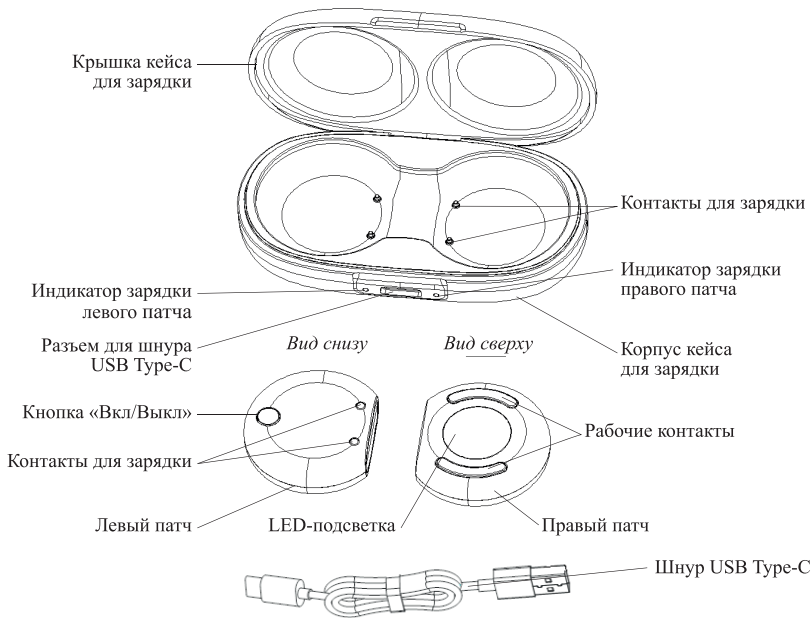

У прибора два одинаковых **патча**, на каждом из которых есть кнопка «Вкл/Выкл», что позволяет включать патчи по отдельности. Также на патчах располагаются **LED-подсветка**, **контакты для зарядки** и **рабочие контакты**, которые прикладываются к коже вокруг глаз.

Примечание. Патчи названы правым и левым только для удобства описания, разницы в патчах, их применении и установке в кейс для зарядки нет.

Включить, выключить работу патча, а также выбрать режим работы патча можно при помощи **кнопки «Вкл/Выкл»**. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, прибор будет работать в режиме «Непрерывное воздействие». При этом LED-подсветка (красный свет) будет гореть непрерывно. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», красный свет будет мигать (импульсное излучение), прибор будет работать в режиме «Импульсное воздействие». В режиме «Непрерывное воздействие» делается упор на активацию синтеза коллагена и эластина, режим «Импульсное воздействие» направлен на массаж и тонизацию мышц вокруг глаз.

Чтобы выключить патчи, нажимайте на кнопки «Вкл/Выкл», пока красный свет не погаснет. Патчи также имеют функцию автоотключения после 5 минут непрерывной работы.

Патчи заряжаются, когда установлены в **кейс для зарядки**. **Контакты для зарядки** на патчах должны совпасть с контактами для зарядки в кейсе. Патчи можно установить в любой из слотов. Во время зарядки **индикаторы зарядки** левого и правого патча горят красным. Когда патч зарядится, соответствующий ему индикатор загорится зеленым. Если кейс для зарядки подключен к источнику питания, но одного или двух патчей нет в кейсе, индикатор недостающего патча будет также



гореть зеленым. Если патчи разрядились, они автоматически выключатся, поместите их в кейс для зарядки. Кейс для зарядки подключается к источнику питания с помощью **шнура USB Type-C** из комплекта. Рекомендуется хранить патчи в кейсе для зарядки (при этом кейс должен быть отключен от источника питания).

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Протрите патчи: их можно протереть ватным диском, слегка смоченным в 70% растворе хлоргексидина. Не допускайте попадания жидкости в корпус патчей, в кейс для зарядки, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой комплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\approx 5\text{ В}$, 1 А.

Патчи заряжаются только при установке в кейс для зарядки, подключенный к источнику питания. Если кейс для зарядки не подключен к источнику питания, патчи заряжаться не будут.

Установите патчи в кейс для зарядки, контакты для зарядки на патчах должны совпасть с контактами для зарядки в кейсе. Патчи можно установить в любой из слотов. Вставьте шнур USB Type-C в разъем на кейсе и затем подключите его к источнику питания.

Во время зарядки индикаторы зарядки левого и правого патча горят красным. Когда патч зарядится, соответствующий ему индикатор загорится зеленым. Если кейс для зарядки подключен к источнику питания, но одного или двух патчей нет в кейсе, индикатор недостающего патча будет также гореть зеленым. Если патчи разрядились, они автоматически выключатся, поставьте их на зарядку в кейс.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки патчи включить нельзя. Чтобы включить патчи, достаньте их из кейса для зарядки.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от кейса для зарядки.

От одной зарядки прибор может непрерывно работать 2 часа.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы пре-

дотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 1–1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. Не используйте прибор на родинках и вблизи них. Не используйте прибор на других частях тела и лица. Если вы делали инъекции в зоне вокруг глаз или вводили филлеры, прибором пользоваться нельзя.

Не используйте прибор после проведения других видов аппаратных процедур, а также механических или химических пилингов. Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.

Внимание! Держите устройство только сухими руками во избежание попадания влаги в корпус патчей, на кнопки «Вкл/Выкл», кейс для зарядки и в разъем для шнура USB Type-C. Следите, чтобы используемые средства для лица не попадали в корпус патчей и на кейс.

Не рекомендуется использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

2. Перед началом процедуры обязательно очистите кожу и удалите макияж.
3. Нанесите на кожу вокруг глаз питательный крем или сыворотку.

Примечание. Будьте внимательны при выборе косметических средств, чтобы избежать аллергических реакций. При необходимости проконсультируйтесь с врачом, какие средства для работы с прибором вам можно использовать.

4. Достаньте патчи из кейса. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл», прибор начнет работать в режиме «Непрерывное воздействие». Красный свет будет гореть непрерывно. Чтобы включить режим «Импульсное воздействие», нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Красный свет будет мигать.

Внимание! Режим «Непрерывное воздействие» подходит для более частого использования (2–3 раза в неделю), работать с прибором в режиме «Импульсное воздействие» рекомендуется не чаще 1–2 раз в неделю.

5. Приложите патчи к зоне вокруг глаз стороной, где находятся рабочие контакты, придерживайте патчи рукой. При необходимости передвигайте патчи, чтобы провести процедуру на всех участках кожи. Проводите процедуру не дольше 3–5 минут.

Внимание! Во время проведения процедуры вы можете испытывать легкое покалывание, а также наблюдать покраснение кожи в зоне использования, это нормальное явление. При сильном дискомфорте во время работы с прибором, а также если вы продолжаете испытывать неприятные ощущения после процедуры или долгое время не проходит краснота, не используйте прибор и обратитесь к врачу.

Не кладите патчи непосредственно на глазное веко, не подносите патчи близко к глазам и не смотрите долго на включенную LED-подсветку, яркий красный свет может навредить зрению.

6. Чтобы выключить устройство, нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», пока красный свет не погаснет.

Примечание. Патчи автоматически отключаются через 5 минут работы.

7. После проведения процедуры смойте с лица остатки косметического средства. После использования прибора рекомендуется не наносить декоративную косметику в течение 8 часов.
8. После каждого использования тщательно очищайте и дезинфицируйте рабочую сторону патчей (где находятся рабочие контакты), как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Не используйте прибор чаще, чем 3–4 раза в неделю. Не проводите процедуры два дня подряд, делайте между ними перерывы. Проводите только одну процедуру в день.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора и времени проведения процедур. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать, как часто можно использовать патчи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур после или до использования патчей также согласовывайте с врачом.

Не давите слишком сильно на кожу во время использования прибора.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским устройством и используется только в профилактических целях.
3. Подросткам и детям можно пользоваться прибором только после разрешения врача и под присмотром взрослых.
4. Существует ряд противопоказаний к применению, таких как:
 - беременность;
 - онкология;
 - инфекционные заболевания кожи;
 - недавний ввод инъекций и филлеров;
 - кожа, склонная к аллергическим реакциям;
 - конъюнктивит и другие глазные инфекции;
 - наличие имплантов;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - тяжелая форма акне;
 - наличие большого количества родинок на лице;
 - хрупкие сосуды;
 - воспаления на коже лица;
 - купероз 3–4 степени;
 - парез лицевого нерва;
 - невралгия тройничного нерва;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;

- остеопороз;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- хроническая мигрень;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- почечная недостаточность;
- повышенная температура, грипп, ОРВИ;
- сахарный диабет;
- наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
- нечувствительность к теплу;
- гипогликемия;
- гипертония;
- слабость, нервозность и страх боли;
- переутомление.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки, выключайте патчи и отключайте кейс для зарядки от источника питания. Протирайте устройство слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Тщательно дезинфицируйте рабочую сторону патчей (где находятся рабочие контакты) до и после использования: их можно протереть ватным диском, слегка смоченным в 70% растворе хлоргексидина.

Не допускайте попадания жидкости в корпус патчей, на кнопки «Вкл/Выкл», в кейс для зарядки, в разъем для шнура USB Type-C и на сам шнур. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Периодически протирайте контакты на патчах и кейсе для зарядки мягкой сухой тканью.

Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать прибор на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните патчи в кейсе для зарядки, при этом кейс должен быть отключен от сети питания. На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1–1,5 часа.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С.

Устранение неполадок

Патчи не включаются, LED-подсветка не горит

Возможная причина	Решение
Патчи разряжены	Зарядите патчи

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Не до конца подключен шнур USB Type-C к разъему на кейсе для зарядки или источнику питания	Плотно подсоедините шнур к кейсу и источнику питания
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: ≈ 5 В, 1 А
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Контакты для зарядки на кейсе для зарядки или на патчах загрязнены	Протрите контакты мягкой сухой тканью

Патчи перестали работать

Возможная причина	Решение
По истечении 5 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите патчи, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл»

Патчи слегка нагреваются во время использования

Возможная причина	Решение
Патчи слегка нагреваются из-за воздействия микротоков	Это нормально и не является неисправностью

Не замечен эффект от проведения процедуры

Возможная причина	Решение
От 1–2 процедур эффект будет незаметен	Это нормально и не является неисправностью прибора. Эффект от процедуры будет замечен только после нескольких использований и при условии, что все этапы ухода за кожей лица были выполнены

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Легкое покалывание и покраснение кожи является нормальным	Внимание! Если вы испытываете сильный дискомфорт во время процедуры или продолжаете испытывать неприятные ощущения после, если долго не сходит покраснение кожи, прекратите использование прибора и обратитесь к врачу

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 0,6 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,8 В, 0,06 А*ч (0,228 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 2,5 ч
6. Время работы от аккумулятора: 2 ч
7. Количество режимов работы: 2
8. Автоотключение: через 5 мин
9. Длина шнура USB Type-C: 0,6 м
10. Размер патча: 31 × 28 × 9 мм
11. Размер устройства: 74 × 39 × 23 мм
12. Размер упаковки: 152 × 34 × 212 мм
13. Вес нетто: 0,08 кг
14. Вес брутто: 0,19 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, косметических средств, порошков и посторонних предметов в корпус патчей, на кнопку «Вкл/Выкл», контакты, кейс для зарядки, в разъем для шнура USB Type-C и на сам шнур не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электронные патчи для глаз только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор, шнур USB Type-C или кейс повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться электронными патчами только под контролем

- лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 9. Держите прибор только сухими руками.
 10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 12. Храните устройство в недоступных детям местах.
 13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в корпус патчей, на кнопки «Вкл/Выкл», контакты, кейс для зарядки, в разъем для шнура USB Type-C и на сам шнур.
 15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 16. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности и при наличии имплантов, а также филлеров и инъекций в зоне вокруг глаз, прибором пользоваться запрещено.
 17. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. Не используйте прибор на родинках и рядом с ними. Не используйте прибор на других частях тела.
 18. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать как часто можно проводить процедуры в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур после или до использования патчей также согласовывайте с врачом.
 19. Не кладите патчи непосредственно на глазное веко, не подносите патчи близко к глазам и не смотрите долго на включенную LED-подсветку, яркий красный свет может навредить зрению.
 20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
 22. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87