




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАССАЖНАЯ НАКИДКА

PLANTA MN-600

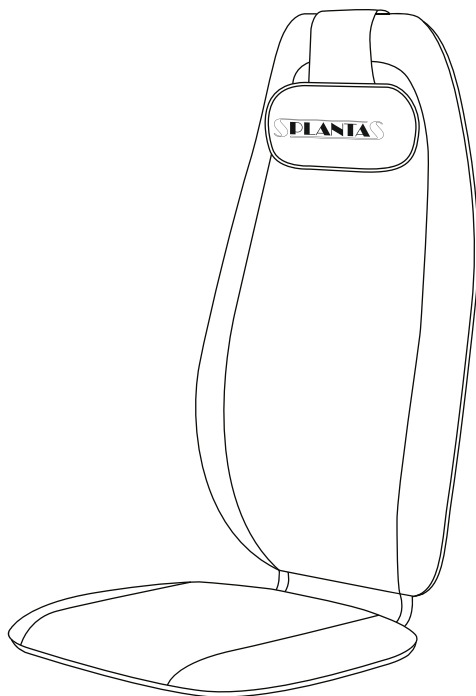

www.planta.ru.com

 #planta_beauty

ОСОБЕННОСТИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

Массажная накидка PLANTA MN-600 идеально подходит для использования дома, в офисе и автомобиле. Ультратонкая конструкция обеспечивает компактность массажной накидки и возможность разметить ее на любом сидении, не утратив при этом комфорта. Откидная мягкая подушка позволяет удобно расположить голову.

Массажные ролики с инфракрасным подогревом движутся по специально определенным траекториям, обеспечивая полноценный разминающий массаж поясницы, спины и плечевой зоны. При помощи удобного пульта управления Вы можете выбрать зону массажа или ручную установить желаемое положение массажных роликов, а также настроить уровень интенсивности массажа, включить инфракрасный подогрев и вибромассаж бедер. В комплекте с массажной накидкой поставляются 2 адаптера для питания от стандартной розетки и от прикуривателя в автомобиле.

Массажная накидка поможет Вам снять напряжение и расслабиться после тяжелого дня. Комплексный разминающий массаж с подогревом снимает усталость мышц и поднимает настроение.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции!

- Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta.ru.com
- Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашей массажной накидки, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали массажной накидки находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности не используйте массажную накидку.
- Ремонт массажной накидки могут проводить только квалифицированные специалисты. Не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Никогда не используйте массажную накидку в непосредственной близости от источников тепла.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали массажную накидку в качестве игрушки.



- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попала на кнопки пульта управления.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием и электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф.

Меры предосторожности при использовании массажной накидки:

- Не оставляйте работающую массажную накидку под подушками, одеялами и т.п.
- Не используйте массажную накидку во время сна.
- Избегайте ситуаций, при которых Вы можете заснуть во время использования массажной накидки.
- Используйте массажную накидку только в сухих помещениях.
- Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне и вне закрытых помещений.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 20 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.



 Не рекомендуется проводить процедуру дольше 20 минут!

Противопоказания:

Перед использованием массажной накидки необходимо проконсультироваться с врачом в случае:


- беременности,
- использования кардиостимулятора или других электромедицинских устройств,
- наличия искусственных частей ног или имплантов,
- наличия одного из заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.
- прохождения реабилитации после операции.

Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.

Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!


 **Внимание:** Массажная накидка не является медицинским прибором и предназначен для проведения профилактических процедур. Если Вы находитесь под наблюдением врача, перед использованием массажной накидки, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

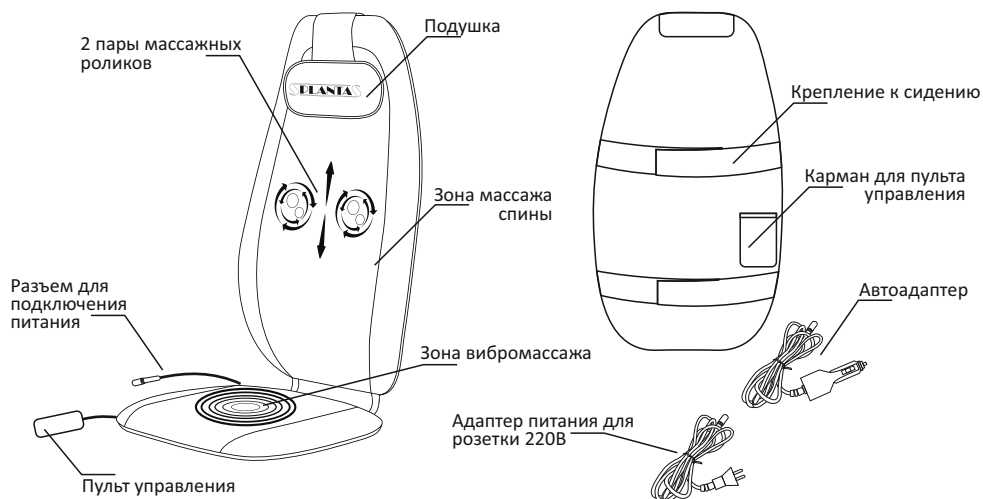

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5-10\%$.




ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

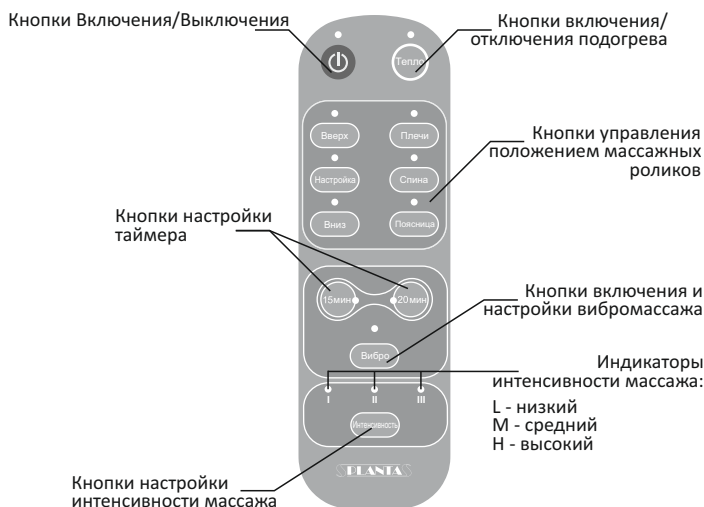

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

Включение массажной накидки:

- Разложите массажную накидку и поместите ее на сидение. Вы можете разместить накидку на диване или в кресле, на офисном стуле или на сидении автомобиля.

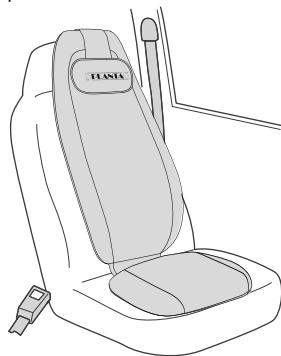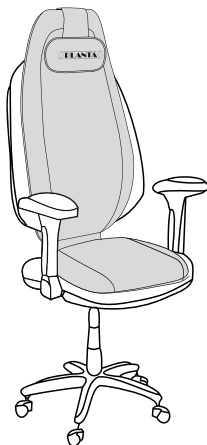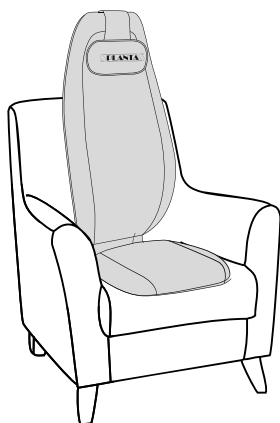

- По возможности закрепите массажную накидку на сиденье, используя специальное крепление на обратной стороне накидки.
- Подключите массажную накидку к питанию через адаптер, идущий в комплекте.



При использовании в автомобиле, подключайте массажную накидку к прикуривателю автомобиля только после того, как заведете двигатель, чтобы не повредить электрику автомобиля, так как для использования функции прогрева требуется значительное количество энергии.

- Сядьте на массажную накидку так, чтобы Вам было удобно.
- Включите устройство, нажав на кнопку .

Массаж спины, плеч или поясницы:

- Для активации массажа отдельной зоны нажмите на соответствующую кнопку на пульте управления **Плечи**, **Спина** или **Поясница**.
- После выбора желаемой зоны массажа возле кнопки на пульте управления загорится световой индикатор, а массажные ролики будут перемещаться по заданной траектории внутри определенной зоны.



Вы можете настроить интенсивность массажа, нажав на кнопку **Интенсивность**. По умолчанию установлен низкий уровень интенсивности. При повторном нажатии уровень интенсивности переключится на средний, а при третьем нажатии – на высокий. Последующее нажатие снова вернет низкий уровень интенсивности.

Ручная настройка:

- Для ручного управления положением массажных роликов нажмите кнопку .
- Массажные ролики зафиксированы в текущем положении, но продолжают вращаться.
- Для плавного перемещения массажных роликов выше или ниже нажмите и удерживайте кнопку  или кнопку  на пульте управления.

Вибромассаж и подогрев:

- Для активации подогрева массажных роликов нажмите на кнопку . Пара массажных роликов начнет нагреваться и спустя некоторое время Вы увидите красное свечение.
- Нажав на кнопку , Вы можете запустить вибромассаж бедер. При повторном нажатии кнопка уровень интенсивности вибромассажа переключиться на средний, при этом кнопка будет быстро мигать несколько секунд. При третьем нажатии включится высокий уровень интенсивности. Последующее нажатие кнопки выключит вибромассаж.
- Чтобы заново запустить вибромассаж, снова нажмите на кнопку . Первые несколько секунд кнопка будет медленно мигать. Это означает, что включен низкий уровень интенсивности вибромассажа.



При включении массажной накидки устанавливается автоотключение через 15 мин – будет гореть соответствующий индикатор на пульте управления. Но Вы также можете настроить автоотключение массажной накидки через 20 минут, нажав на соответствующую кнопку на пульте управления. Кнопка с выбранным значением таймера будет обозначена световым индикатором. Для выключения массажной накидки раньше заложенного программой времени нажмите кнопку . Индикатор кнопки начнет мигать, а массажные ролики будут двигаться еще некоторое время, возвращаясь в исходное положение.

УХОД ЗА МАССАЖНОЙ НАКИДКОЙ

- Перед проведением процедур по уходу обязательно отключите массажную накидку от сети.
- После использования массажной накидки дождитесь полного остывания всех ее частей.
- Для очищения массажной накидки от загрязнений используйте мягкую ткань или губку, слегка смоченную в мягком моющем средстве, затем дождитесь ее полного высыхания.
- Храните массажную накидку в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла.



Не погружайте массажную накидку в воду и не используйте для ее очистки абразивные или агрессивные чистящие средства!

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Массажная накидка не включается	Массажная накидка не подключена к сети питания	Проверьте правильность подключения массажной накидки

	В сети отсутствует напряжение	Подключите массажную накидку к заведомо исправной розетке
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Выставлен слишком низкий уровень интенсивности массажа	Увеличьте интенсивность массажа при помощи кнопки 
	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики
Массажная накидка выключилась в процессе работы	Вышло установленное время таймера	Это нормальная ситуация. Массажная накидка выключается автоматически после 15 минут или 20 минут
При включении подогрева, массажные ролики не нагреваются	Прошло слишком мало времени с момента включения подогрева	Подождите некоторое время, пока массажные ролики нагреются
Массажная накидка работает неправильно	Устройство некоторое время находилось при низкой температуре	Оставьте массажную накидку при комнатной температуре на 2 ч, затем включите снова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **MN-600**

Напряжение: **12 В**


Мощность: **36 Вт**

Вес массажной накидки: **3,15 кг**

Размеры массажной накидки: **43 x 37 x 80 см**

Количество уровней интенсивности массажа: **3**

Значения таймера: **15 мин / 20 мин**

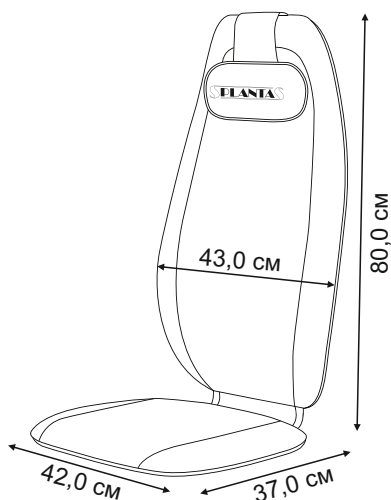

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Чжэцзян Мондиал Электроник Текнолodge Ко., Лтд.», Адрес: №15 Чаоянг роад, Хайю Сабдистрикт, Санмень Каунти, Тайжоу Сити, 317100, Чжэцзян, Китай Импортёр / Уполномоченная организация: ООО «ПАЛЛАДА», 111675, город Москва, улица Руднёвка, дом 4, п IV к 1,2 оф 1 рм 2/5 Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta.ru.com +7 (495) 137-80-32 Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
---	--