


Время для себя!

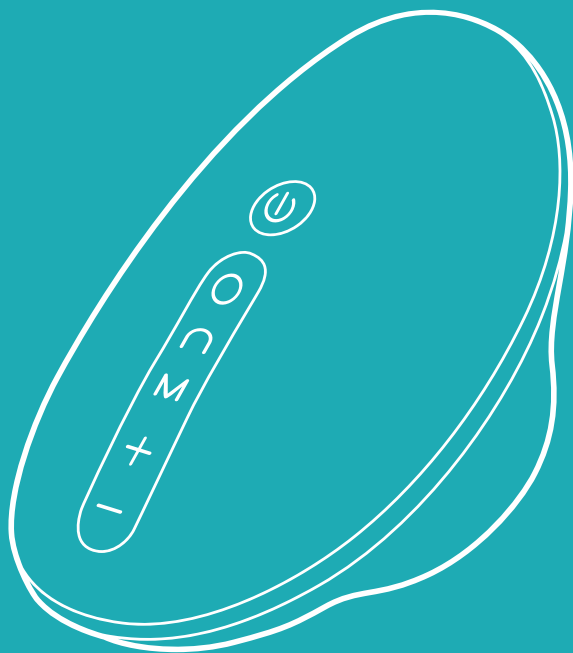

**Вакуумный массажер
КТ-5903**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство вакуумного массажера	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	14
Меры предосторожности	15
Другие товары Kitfort	17

Общие сведения

Вакуумный массаж — это техника массажа, при которой происходит воздействие на кожу с помощью отрицательного давления.

Портативный вакуумный массажер КТ-5903 отличается высокой эффективностью, компактностью, отсутствием проводов, универсальностью применения и простотой.

Из-за нехватки свободного времени визит к массажисту часто откладывается на неопределенный срок. С помощью вакуумного массажера КТ-5903 оказать расслабляющее действие на мышцы можно и дома. Сеанс массажа, проведенный в домашней атмосфере, даст возможность расслабиться и получить приятные эмоции. Массаж помогает снять усталость и напряженность.

Массажер оснащен функцией электромиостимуляции (EMS). При использовании данной функции массажер вызывает сокращение и расслабление мышц. Также у массажера есть функции прогрева и воздействия инфракрасным светом, которые усиливают воздействие массажа, улучшают обменные процессы и способствуют уменьшению отеков.

Управление массажером осуществляется с помощью шести кнопок, вы можете регулировать уровень прогрева, уровень отрицательного давления и уровень интенсивности EMS, а также менять режим EMS.

Действие массажера направлено на улучшение кровообращения, тонизирование мышц и кожи, антицеллюлитную профилактику и выведение токсинов. Прибор помогает бороться с растяжками, избавляет от отечности. Также вакуумный массаж улучшает периферическую циркуляцию крови, циркуляцию лимфы, межтканевой жидкости.

Наличие в комплекте пяти насадок разного размера позволяет выбрать подходящую для вас насадку, что позволяет сделать массаж наиболее комфортным.


Массажер не занимает много места, работает от аккумулятора, поэтому вы можете брать его с собой.


Комплектация

1. Массажер с заглушкой разъема для зарядки — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Фильтр для всасываемого воздуха — 1 шт.
4. Вакуумная насадка Ø71 мм с заглушкой и клапаном — 1 шт.
5. Вакуумная насадка Ø63 мм с заглушкой и клапаном — 1 шт.
6. Вакуумная насадка Ø55 мм с заглушкой и клапаном — 1 шт.
7. Вакуумная насадка Ø48 мм с заглушкой и клапаном — 1 шт.
8. Вакуумная насадка Ø40 мм с заглушкой и клапаном — 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
10. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вакуумного массажера

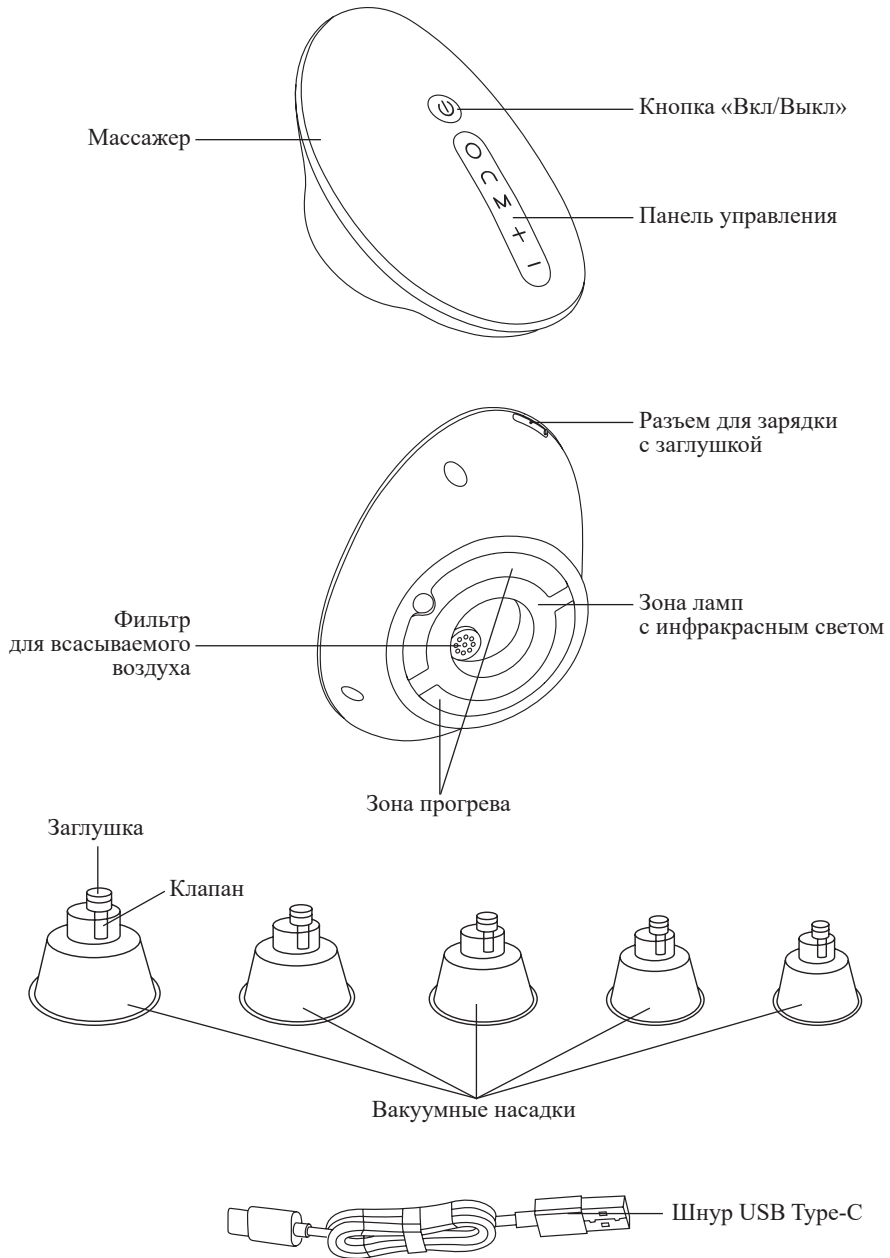

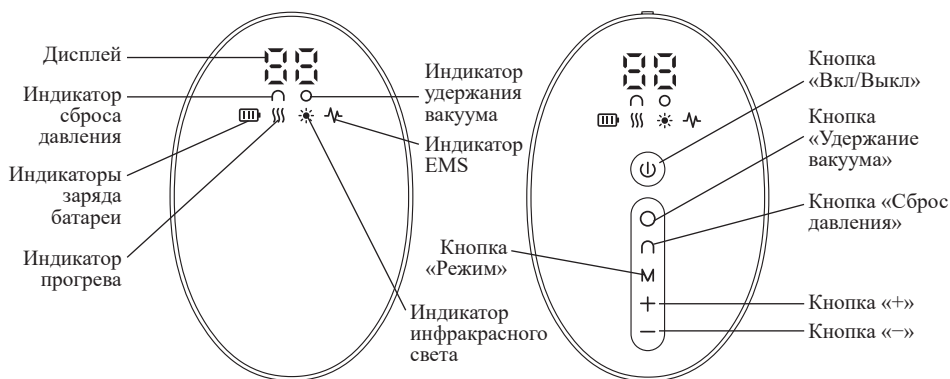

Панель управления

На *дисплее* отображаются уровень вакуума от 1 до 5, уровень прогрева от 1 до 3 и уровень интенсивности EMS от 1 до 10 во время настройки, а также обратный отсчет времени массажа.

Нажатие на *кнопку «Вкл/Выкл»* в течение 2 секунд включает и выключает массажер.

Создание вакуума начнется автоматически после включения массажера. Нажатие *кнопки «Удержание вакуума»* в первый раз позволяет вам остановить создание вакуума, нажатие кнопки во второй раз позволяет продолжить создание вакуума. При удержании определенного уровня вакуума горят *индикатор удержания вакуума* и *индикатор сброса давления*.

Индикатор удержания вакуума горит, когда остановлено создание вакуума, и гаснет, когда производится создание вакуума.

Индикатор сброса давления горит, когда происходит создание или удержание вакуума и гаснет, когда произведен сброс давления.

Примечание. По умолчанию установлен уровень вакуума «P1».

Чтобы сбросить давление, нажмите на *кнопку «Сброс давления»* и затем отсоедините массажер от насадки и потяните насадку за заглушку на себя. Чтобы продолжить массаж на другом участке кожи, вставьте насадку в массажер, а затем дважды нажмите на кнопку «Удержание вакуума».

Кнопка «Режим» включает и циклически переключает

- уровни вакуума — мигает индикатор сброса давления;
- прогрев — мигает индикатор прогрева;
- инфракрасный свет — мигает индикатор инфракрасного света;
- EMS — мигает индикатор EMS.

Нажимайте на *кнопки «+»* и *«-»*, в следующих целях:

- чтобы выбрать один из 5 уровней вакуума. На дисплее отобразится «P1» (слабый уровень вакуума), «P2» (менее слабый уровень вакуума), «P3» (средний уровень вакуума), «P4» (менее сильный уровень вакуума) или «P5» (сильный уровень вакуума). «P0» — функция создания вакуума отключена.

Индикатор сброса давления будет мигать;

- чтобы при включенной функции прогрева выбрать один из трех уровней прогрева. Температура нагрева: 40, 45 и 50 градусов. На дисплее отобразится «Н1» (низкий уровень температуры), «Н2» (средний уровень температуры) или «Н3» (высокий уровень температуры). «Н0» — функция прогрева отключена;
- чтобы включить («+») или выключить («-») инфракрасный свет;
- чтобы при включенной функции EMS выбрать один из 10 уровней EMS, которые различаются интенсивностью тока.

Индикаторы уровня заряда отображают уровень заряда аккумулятора. Во время зарядки индикаторы уровня заряда мигают. Чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Когда прибор полностью заряжен, все индикаторы горят непрерывно.

Через 15 минут работы массажера сработает автоотключение.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус массажера влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте насадки в воде с мылом. Убедитесь, что заглушка разъема для зарядки плотно закрыта. Проверьте, чтобы фильтр для всасываемого воздуха был вставлен в массажер.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор устройства. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами =5 В, 1 А. Устройство можно зарядить от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Во время зарядки индикаторы мигают. Чем больше индикаторов горит непрерывно, тем выше уровень заряда. При полном заряде все индикаторы горят непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда — перед зарядкой не требуется предварительной полной зарядки аккумулятора. Во время зарядки пользоваться прибором нельзя.


По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от массажера.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование


Вакуумный массаж

1. Снимите фильтр для всасываемого воздуха и установите вакуумную насадку необходимого вам диаметра, вставив ее в массажер до упора.

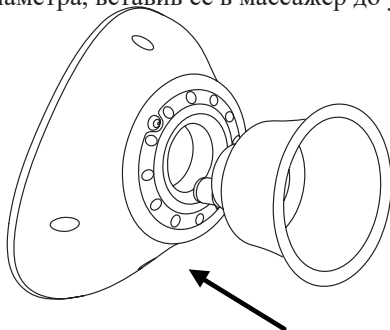

Примечание. Установить фильтр для всасываемого воздуха и вакуумную насадку одновременно невозможно.

2. Возьмите массажное масло, которое не вызывает у вас аллергии, и смажьте участок тела, который вы собираетесь массировать.
3. Прижмите насадку массажера к выбранному участку тела.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. На дисплее загорятся все индикаторы. Затем будут гореть индикаторы сброса давления и индикаторы заряда, а на дисплее будет отображаться время массажа 15 минут. По умолчанию установлен уровень вакуума «P1». Массажер начнет создавать вакуум, он как бы «присосется» к вашей коже.
5. Нажмите на кнопку «Удержание вакуума», когда будет создан необходимый вам уровень вакуума, чтобы остановить создание вакуума. Загорится индикатор удержания вакуума.
6. Чтобы сбросить давление, нажмите на кнопку «Сброс давления», индикаторы удержания вакуума и сброса давления погаснут. Затем отсоедините массажер от

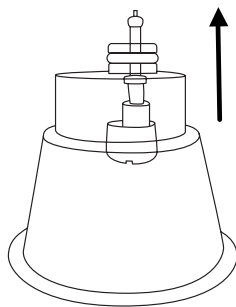

- насадки и потяните насадку за заглушку на себя.
7. Чтобы изменить уровень вакуума, нажимайте на кнопку «Режим», пока индикатор сброса давления не начнет мигать, на дисплее отобразится «P1», а затем используйте кнопки «+» и «-» для выбора уровня вакуума: «P1» (слабый уровень вакуума), «P2» (менее слабый уровень вакуума), «P3» (средний уровень вакуума), «P4» (менее сильный уровень вакуума) или «P5» (сильный уровень вакуума). «P0» — функция создания вакуума отключена.
 8. Плавными движениями перемещайте массажер по поверхности кожи выбранной зоны тела по направлению массажных линий. По истечении 15 минут массажа сработает автоотключение. Чтобы выключить устройство до истечения 15 минут, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.
 9. Чтобы отсоединить насадку от кожи, отсоедините массажер от насадки, удерживая насадку и потянув массажер на себя, и вытащите заглушку из насадки, потянув на себя.
 10. По окончании массажа удалите остатки масла и отключите массажер, нажав и удерживая кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Чтобы отсоединить насадку от массажера, потяните ее на себя.

Примечание. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве и в помещениях с повышенной влажностью.

EMS

1. Снимите вакуумную насадку и установите фильтр для всасываемого воздуха.
2. Возьмите токопроводящий гель, который не вызывает у вас аллергии, и смажьте участок тела, который вы собираетесь массировать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. На дисплее загорятся все индикаторы. Затем будут гореть индикаторы сброса давления и индикаторы заряда, а на дисплее будет отображаться время массажа 15 минут. По умолчанию установлен 1 уровень вакуума.
4. Нажмите на кнопку «Сброс вакуума», чтобы остановить создание вакуума.
5. Чтобы включить режим EMS, нажимайте на кнопку «Режим», пока индикатор EMS не начнет мигать, на дисплее отобразится «00». Затем используйте кнопки «+» и «-» для выбора уровня EMS.
6. Плавными движениями перемещайте массажер по поверхности кожи выбранной зоны тела по направлению массажных линий.
7. По окончании массажа удалите остатки токопроводящего геля и отключите массажер, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживая ее в течение 2 секунд.

Внимание! При проведении EMS-массажа необходимо снять все металлические украшения и пирсинг. Запрещено проводить EMS-массаж на участках с имплантами, пластинами и другими металлическими элементами.

Прогрев и инфракрасный свет

1. Снимите вакуумную насадку, если она была установлена в массажер. Установите фильтр для всасываемого воздуха.
2. Возьмите массажное масло, которое не вызывает у вас аллергии, и смажьте уча-

- сток тела, который вы собираетесь массировать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. На дисплее загорятся все индикаторы. Затем будут гореть индикаторы сброса давления и индикаторы заряда, а на дисплее будет отображаться время массажа 15 минут. По умолчанию установлен 1 уровень отрицательного давления.
 4. Нажмите на кнопку «Сброс вакуума», чтобы остановить создание вакуума.
 5. Чтобы включить прогрев, нажимайте на кнопку «Режим», пока не начнет мигать индикатор прогрева, на дисплее отобразится «Н0» (прогрев выключен), используйте кнопки «+» и «-» для выбора уровня прогрева: «Н1» (низкий уровень температуры), «Н2» (средний уровень температуры) или «Н3» (высокий уровень температуры).
 6. Чтобы включить инфракрасный свет, нажимайте на кнопку «Режим», пока не начнет мигать индикатор инфракрасного света, на дисплее отобразится «00». Чтобы включить инфракрасный свет, нажмите «+», на дисплее отобразится «01». С обратной стороны массажера загорятся лампы. Чтобы выключить инфракрасный свет, нажмите на кнопку «-», пока индикатор инфракрасного света мигает.
 7. Плавными движениями перемещайте массажер по поверхности кожи выбранной зоны тела по направлению массажных линий.
 8. По окончании массажа отключите массажер, удалите остатки масла и отключите массажер, нажав на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживая ее в течение 2 секунд, и удалите остатки масла.

Внимание! Рекомендуется использовать прибор не более 2 раз в неделю по 10–15 минут на сеанс. Не используйте массажер дольше 15 минут. При выборе времени и частоты использования массажера руководствуйтесь своими ощущениями. Массаж не должен доставлять дискомфорт.

Не подносите включенный прибор к голове, лицу, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, зоне сердца, молочных желез, лимфоузлов, к костным выступам, коленным и локтевым впадинам, непосредственно к позвоночнику, суставам, слизистым оболочкам и интимным зонам.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора и времени проведения процедур. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, как часто можно использовать массажер в вашем случае.

Если во время использования массажера вы почувствовали дискомфорт, прекратите процедуру и обратитесь к врачу. После проведения массажа возможно покраснение кожи в зоне массажа. Если покраснение не сошло через 15 мин, обратитесь к врачу.

Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилак-

тических целях.

3. Существует ряд противопоказаний применению:

- беременность;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- наличие имплантов, пластин;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- наличие кожных заболеваний;
- обострение хронических заболеваний;
- онкология;
- травмы, переломы;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств, например кардиостимулятора;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- гипертония;
- грипп, ОРВИ, повышение температуры;
- почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- гипогликемия;
- менструация;
- слабость, нервозность;
- переутомление;
- возраст меньше 18 лет.

Советы

Для комплексного воздействия рекомендуется выполнять сначала прогрев, затем вакуумный массаж. Однако следите, чтобы общее время массажа не превышало 15 минут.

Не принимайте пищу за час до сеанса массажа, особенно, если вы собираетесь проработать зону живота.

Проводите сеанс массажа не позднее, чем за 3 часа до сна.

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека. В среднем продолжительность массажа составляет от 3 до 15 минут.

Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Внимание! Не подносите включенный прибор к голове, лицу, передней поверхности шеи, к точкам пульсации, зоне сердца, молочных желез, лимфоузлов, к костным выступам, коленным и локтевым впадинам, непосредственно к позвоночнику,

суставам, слизистым оболочкам и интимным зонам.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно.

Если на вашей коже появились синяки после процедуры, сделайте перерыв в использовании массажера и уменьшите степень воздействия и время проведения массажа.

После массажа рекомендуется выпить стакан теплой воды.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки убедитесь, что прибор выключен, а заглушка разъема для зарядки плотно закрыта. Протирайте устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Насадки вымойте в воде с мылом. Не используйте моющие средства.

Дезинфицируйте насадки: их можно протереть ватным диском, смоченным в 75%-ом растворе спирта или хлоргексидине.

Чистку следует производить после каждого использования, т.к. влага, косметические средства, кожный жир и пот могут привести к повреждению устройства.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в место установки насадки/фильтра, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

Вытащите фильтр для всасываемого воздуха из массажера, потянув его на себя, промойте его водой и высушите, а затем вставьте обратно.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не допускайте попадание на устройство прямых солнечных лучей. Перед тем как убрать на хранение, очистите поверхность массажера, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Уберите массажер и насадки в пакет или коробу для защиты от пыли.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 2 часа (два индикатора заряда будут гореть непрерывно). Уровень заряда при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните массажер при температуре от 5 до 40 °С.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разрядился аккумулятор	Зарядите устройство
Вы нажали, но не удерживали кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд	Для запуска устройства необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд
Устройство заряжается	Это не является неисправностью. Вы не можете включить устройство, когда оно заряжается

Устройство выключилось во время работы

Возможная причина	Решение
Сработала защита от перегрева	Дайте устройству остыть в течение не менее 30 минут, а затем попробуйте включить его снова
Сработало автоотключение после 15 минут массажа	Чтобы продолжить массаж, дайте устройству остыть не менее 30 минут, а затем попробуйте включить его снова
Разрядился аккумулятор	Зарядите устройство

Устройство не заряжается, индикаторы заряда не мигают

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слабый источник питания	Используйте источник питания с выходом ≈ 5 В, 1 А
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите и включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Не до конца подключили шнур USB Type-C в разъем для зарядки	Вставьте шнур USB Type-C до конца в разъем для зарядки
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам



на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C –5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 2,5 А*ч (9,25 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Температура нагрева: 40, 45 и 50 °С
6. Уровней вакуума: 5
7. Уровней прогрева: 3
8. Уровней интенсивности EMS: 10
9. Автоотключение: через 15 мин
10. Время работы: 2–2,5 ч
11. Время зарядки: 4 ч
12. Длина шнура USB Type-C: 1 м
13. Размер устройства: 86 × 130 × 58 мм
14. Размер упаковки: 215 × 151 × 78 мм
15. Вес нетто: 0,27 кг
16. Вес брутто: 0,49 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в место установки насадки/фильтра, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на массажере, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы

- дети не могли случайно дотронуться до движущихся частей прибора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
 14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
 16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
 17. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
 18. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем от массажера.
 19. Не используйте устройство во время передвижения в транспортном средстве и в помещениях с повышенной влажностью.
 20. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности, при наличии имплантов, пластин и электронных устройств (например, кардиостимуляторов). Перед использованием прибора снимайте украшения и пирсинги.
 21. При проведении EMS-массажа необходимо снять все металлические украшения и пирсинг. Запрещено проводить EMS-массаж на участках с имплантами, пластинами и металлическими элементами.
 22. Не подносите включенный прибор к голове, лицу, передней поверхности шеи, к точкам пульсации зоне сердца, молочных желез, лимфоузлов, к костным выступам, коленным и локтевым впадинам, непосредственно к позвоночнику, суставам, слизистым оболочкам и интимным зонам.
 23. Не допускайте попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в место установки насадки/фильтра, в разъем для зарядки и на шнур USB Type-C.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70 °С с шагом 1 °С
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87