


**Лучший друг
твоей кожи**

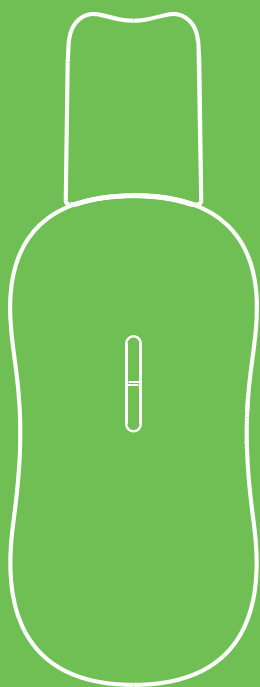

**Аппарат
для ультразвуковой
чистки лица KT-4125**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица КТ-4125 предназначен для удаления загрязнений с поверхности кожи, омертвевших клеток кожи и черных точек. Использование прибора повышает эластичность кожи, увеличивает эффективность применения питательных косметических средств, способствует улучшению кровообращения и ровному цвету кожи.

Прибор воздействует на кожу с помощью ультразвуковых волн, благодаря чему минимизируется механическое воздействие на кожный покров. Такая чистка не нарушает целостность клеток кожи и уменьшает риск раздражения. В отличие от химического пилинга, у которого есть ограничения, связанные с гиперпигментацией в летнее время, ультразвуковую чистку можно проводить в любое время года. У данной модели также есть функция воздействия положительно или отрицательно заряженными ионами. Положительно заряженные ионы способствуют более глубокой очистке и повышению эластичности кожи. Отрицательно заряженные ионы повышают эффективность питания кожи уходовыми средствами и способствуют восстановлению гидробаланса.

Аппарат для ультразвуковой чистки лица обязательно используют вместе с жидкой контактной средой, например, со специальным гелем для ультразвуковой чистки или с питательным кремом. Под воздействием ультразвука в жидкой среде возникает эффект кавитации. Мелкие пузырьки воздуха, лопаясь, создают множество мелких ударных волн, которые выбивают загрязнения с поверхности кожи.

Устройство работает в 3 режимах:

- «Очищение» — воздействие ультразвуком и положительно заряженными ионами;
- «Увлажнение» — воздействие ультразвуком и отрицательно заряженными ионами;
- «Лифтинг» — воздействие ультразвуком, положительно и отрицательно заряженными ионами.

В каждом режиме доступны 3 уровня интенсивности, которые отличаются периодами воздействия положительно или отрицательно заряженных ионов.

Регулярное использование аппарата для ультразвуковой чистки лица в совокупности с комплексным подходом к уходу за кожей позволяют в домашних условиях заметно улучшить состояние вашей кожи. Однако помните, что эффект от использования аппарата замечен только при регулярном применении и с учетом соблюдения всех правил использования прибора и ухода за кожей.

Внимание! Прибор не является медицинским устройством и используется только в профилактических целях.


В комплект устройства также входит подставка и шнур USB Type-C для зарядки аккумулятора.

Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Подставка — 1 шт.
4. Шнур USB Type-C — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица

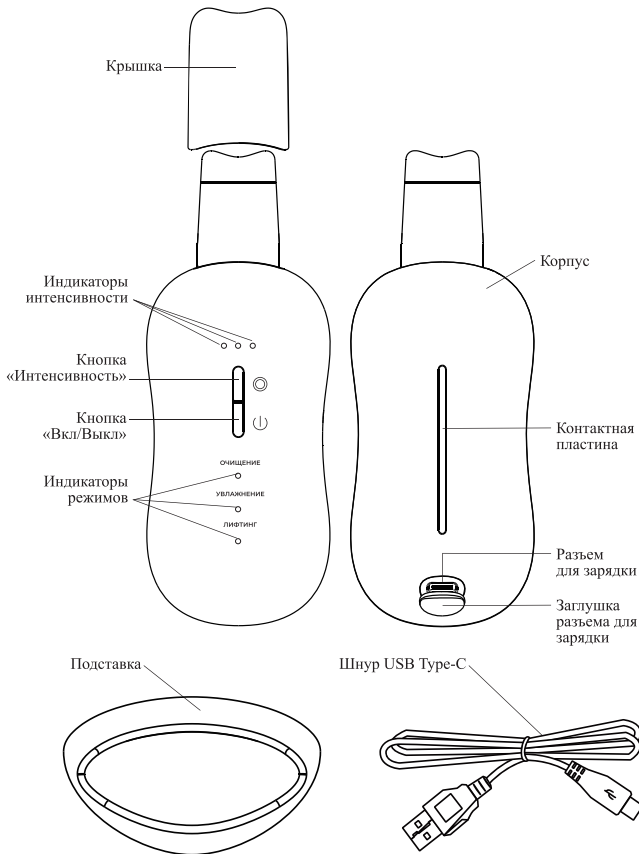

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор, а также переключает режимы его работы.

Чтобы включить и выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. По умолчанию устройство включается в режиме «Очищение» на первом уровне интенсивности, будут гореть один индикатор интенсивности и индикатор режима «Очищение».

Короткие нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» после включения циклически переключают 3 режима работы: «Очищение», «Увлажнение» и «Лифтинг». При выборе режима загорается соответствующий ему **индикатор режима**.

Нажимайте на **кнопку «Интенсивность»**, чтобы выбрать один из 3 уровней интенсивности. При нажатии на кнопку будут последовательно загораться **индикаторы интенсивности**: чем больше индикаторов интенсивности горит, тем выше степень интенсивности.

Сзади на **корпусе** прибора находится **контактная пластина**, до которой необходимо дотрагиваться во всех режимах, чтобы включить воздействие положительно или отрицательно заряженными ионами. Для более мягкого воздействия на кожу вы можете не касаться контактной пластины, однако режимы отличаются друг от друга именно зарядом действующих ионов. Используя только ультразвук, во всех режимах вы будете производить очищение ультразвуком без дополнительной стимуляции клеток кожи положительно или отрицательно заряженными ионами.

Примечание. Достаточно просто дотронуться до пластины, давить на нее не нужно.



Если прибор разряжен, индикаторы интенсивности мигнут три раза, затем прибор автоматически выключится. Во время зарядки индикаторы интенсивности будут мигать по очереди. Когда аккумулятор зарядится полностью, все три индикатора интенсивности будут гореть непрерывно.

Прибор автоматически отключается через 5 минут непрерывной работы.

Крышка защищает лопатку от пыли и повреждений.

Устройство устанавливается на **подставку** во время перерывов, для зарядки аккумулятора и длительного хранения.

Режимы работы

Режим «Очищение» (воздействие ультразвуком и положительно заряженными ионами для очистки) способствует:

- удалению загрязнений с поверхности кожи;
- удалению омертвевших клеток кожи;
- устранению мелких комедонов и загрязнений из пор;
- улучшению тона кожи;
- выравниванию кожного рельефа.

Для очищения вы можете работать с аппаратом, включая положительно заряженные ионы или не включая их (для этого не прикасайтесь к контактной пластине). Использовать данный режим можно 1–2 раза в неделю.

Примечание. Прибор неэффективен для удаления больших и закрытых комедонов.

Режим «Увлажнение» (воздействие ультразвуком и отрицательно заряженными ионами для питания кожи) способствует:

- повышению эффективности уходовой косметики;
- восстановлению гидробаланса кожи.

При работе держите пальцы на контактной пластине. Используйте данный режим 3–4 раза в неделю.

Режим «Лифтинг» (воздействие ультразвуком, положительно и отрицательно заряженными ионами) способствует:

- повышению тонуса и упругости кожи;
- повышению тонуса мышц лица;
- ускорению обменных процессов в клетках кожи;
- уменьшению отечности.

При работе держите пальцы на контактной пластине. Используйте данный режим 3–4 раза в неделю.

Внимание! Вне зависимости от режима не используйте прибор дольше 5 минут.

Используйте прибор только один раз в день и только в одном режиме. Не используйте прибор два дня подряд — делайте перерыв между процедурами.

Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальный гель для ультразвуковой очистки или питательный крем.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора.

Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом и узнать, можно ли и как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Протрите корпус и крышку устройства, а также базу слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно продезинфицируйте лопатку: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или в хлоргексидине. Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на контактную пластину, органы управления и шнур USB Type-C.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор устройства можно заряжать с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Когда уровень заряда будет слишком низким, индикаторы интенсивности мигнут три раза, и прибор автоматически выключится.

Для зарядки устройства подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\sim 5\text{ В}$, 1 А (в комплект не входит). Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Подключите шнур USB Type-C сначала к разъему для зарядки на устройстве, а затем — к источнику питания. Для удобства установите аппарат на подставку. Во время зарядки индикаторы интенсивности будут мигать по очереди. Когда аккумулятор зарядится полностью, все три индикатора интенсивности будут гореть непрерывно. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, а затем — от устройства.

Время зарядки аккумулятора составляет около 2 часов.

Аккумулятор устройства литий-ионный. Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено.

Если у вас есть украшения на лице, снимайте их перед использованием аппарата. Волосы рекомендуется собрать, чтобы они не мешали при использовании прибора.

Используйте прибор в зонах, указанных на рисунках ниже. Стрелками обозначены массажные линии. Не используйте прибор на шее и в зоне вокруг глаз. Не проводите лопаткой по родинкам. Не используйте прибор на других частях тела, кроме лица.

Внимание! Держите устройство только сухими руками.

Не рекомендуется использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.



2. Перед началом процедуры обязательно очистите кожу и снимите макияж.

Примечание. Для большего эффекта от процедуры рекомендуется перед ее проведением использовать гель для холодного гидрирования. Гель наносится плотным слоем на лицо, затем участки лица с гелем закрываются пленкой. Не наносите гель и не закрывайте пленкой глаза и зону вокруг глаз, губы и ноздри. Сколько времени держать гель на лице, уточните в рекомендациях к используемому средству. Затем снимите пленку и смойте гель с лица.

3. Нанесите на кожу специальное средство для проведения ультразвуковой чистки (приобретается отдельно). Если планируете работать с прибором в режиме «Увлажнение» и «Лифтинг», нанесите на кожу питательный крем или другое уходовое средство для питания кожи. Не используйте прибор на сухой коже!



Примечание. Если используемое косметическое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено. Используйте менее густое средство.

4. Снимите крышку с устройства.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. По умолчанию устройство включается в режиме «Очищение» на первом уровне интенсивности, будут гореть один индикатор интенсивности и индикатор режима «Очищение». При необходимости выберите другой режим работы с помощью кнопки «Вкл/Выкл».



Внимание! Если средство, по которому вы проводите процедуру, впиталось или высохло во время проведения процедуры, снова нанесите его на лицо. Не используйте аппарат на сухой коже!

Во время проведения процедуры обязательно очищайте лопатку от загрязнений чистой мягкой тканью или ватным диском.

6. Для проведения очистки выберите режим «Очищение». Для проведения более глубокой очистки во время работы прикасайтесь к контактной пластине, прибор будет воздействовать на кожу положительно заряженными ионами. Используйте данный режим 1–2 раза в неделю. Располагайте лопатку плоской стороной вверх. Прислоняйте лопатку к коже и проводите ею по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась вперед, а не назад. Держите прибор под углом 30°.

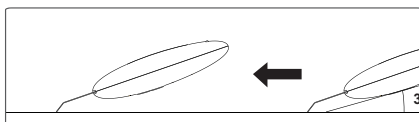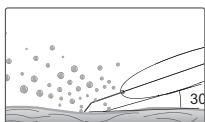

7. В режимах «Увлажнение» и «Лифтинг» вы можете работать с прибором 3–4 раза в неделю. При проведении процедуры держите пальцы на контактной пластине. Располагайте лопатку плоской стороной к коже. Прислоняйте лопатку к коже и проводите ею по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась назад, а не вперед. Держите прибор под углом в 30°.

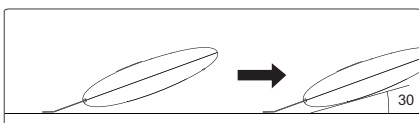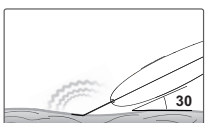

8. Рекомендуемое время проведения процедуры — не более 5 минут.
- Внимание!** Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. При проведении ультразвуковой чистки нет необходимости сильно надавливать на кожу лопаткой, т.к. очищение происходит за счет ультразвуковых волн.
9. Прибор автоматически отключается через 5 минут работы. Чтобы выключить устройство раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд.
10. Установите аппарат на подставку.
11. После проведения ультразвуковой чистки смойте с лица остатки средства для ультразвуковой чистки и загрязнения, которые могли остаться на поверхности кожи. После проведения процедур с аппаратом рекомендуется не наносить декоративную косметику в течение 8 часов.
12. После каждого использования тщательно очищайте и дезинфицируйте лопатку: ее можно протереть сначала влажной тканью, а затем ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или в хлоргексидине. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на контактную пластину, органы управления и шнур USB Type-C.
13. Когда лопатка высохнет, закройте ее крышкой.

Внимание! Выше приведены рекомендации по частоте использования прибора в каждом режиме, однако между процедурами необходимо делать перерыв в течение 1–2 дней. Используйте прибор только один раз в день и только в одном режиме. Не используйте прибор два дня подряд. Если вы уже один раз в течение недели использовали аппарат в режиме «Очищение», то рекомендуется использовать прибор на этой неделе еще не более одного раза (вне зависимости от режима).

Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут или появилась отечность, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием аппарата проконсультируйтесь с врачом.

Будьте внимательны при выборе косметических средств, чтобы избежать аллергических реакций. При необходимости проконсультируйтесь с врачом, какие средства для работы с прибором вам можно использовать.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Подросткам и детям можно пользоваться прибором только после консультации с врачом и под присмотром взрослых.
4. Не используйте аппарат после проведения других видов аппаратных процедур, а также после механических или химических пилингов.
5. Существуют противопоказания к применению, такие как:
 - беременность;
 - онкология;
 - наличие заболеваний кожи, в том числе инфекционных;
 - кожа, склонная к аллергическим реакциям;
 - наличие имплантов;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - тяжелая форма акне;
 - наличие большого количества родинок на лице;
 - воспаления на коже лица;
 - купероз 3–4 степени;
 - парез лицевого нерва;
 - невралгия тройничного нерва;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболеваниях сердца, например, кардиостимулятора;
 - хроническая мигрень;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - почечная недостаточность;
 - повышенная температура, грипп, ОРВИ;
 - сахарный диабет;
 - менструация;
 - наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительность к теплу;
 - гипогликемия;
 - гипертония;
 - слабость, нервозность и страх боли;
 - переутомление.
6. При дискомфорте во время работы с прибором прекратите процедуру и обратитесь к врачу.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключайте прибор и отключайте его от источника питания. Протирайте корпус устройства с крышкой и подставку слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Тщательно дезинфицируйте лопатку до и после использования: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или в хлоргексидине.

Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на контактную пластину, органы управления и шнур USB Type-C. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Уход и хранение

Храните аппарат для ультразвуковой чистки лица при температуре от 0 до 40 °С в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните прибор с закрытой крышкой, чтобы не повредить лопатку. Для удобства установите аппарат на подставку. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его около часа.



При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство

Устройство не заряжается, индикаторы интенсивности не горят

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания (компьютер, пауэрбанк) разряжен или не включен	Зарядите или включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C неплотно подключен к разъему для зарядки на устройстве или к источнику питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с устройством и с источником питания
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

Аппарат для ультразвуковой чистки перестал работать

Возможная причина	Решение
По истечении 5 минут использования сработало автоотключение устройства	Вне зависимости от режима рекомендуемое время процедуры — не более 5 минут. При необходимости включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»

Слабый эффект от проведения процедуры

Возможная причина	Решение
От 1–2 процедур эффект будет не так заметен	Это нормально и не является неисправностью прибора. Эффект от процедуры ультразвуковой чистки лица будет заметен при продолжительном и регулярном использовании, а также при условии, если все этапы очистки и последующего ухода за кожей лица были выполнены

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы проводите процедуру на сухой коже	Не используйте прибор на сухой коже! Всегда наносите средство для ультразвуковой чистки или питательный крем. Если используемое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено. Используйте менее густое средство

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 1 А
2. Мощность: 2,5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А*ч (1,85 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 30000 Гц ±15%
6. Уровень шума: ≤70 дБ
7. Время зарядки: 2 ч
8. Время работы: 30 мин
9. Количество режимов работы: 3
10. Автоотключение: через 5 мин
11. Длина шнура USB Type-C: 1 м
12. Размер устройства: 58 × 28 × 158 мм
13. Размер упаковки: 110 × 53 × 226 мм
14. Вес нетто: 0,15 кг
15. Вес брутто: 0,28 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Тяньбюти Бьюти энд Хэлс (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. B2901, Тяньли Сентрэл Бизнес Плаза (Фэйз II), №195 Хайдэ 3 Роуд, Хайчжу Кэмыноти, Юэхай Стрит, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход устройства из строя вследствие попадания воды, косметических средств, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на контактную пластину, органы управления и шнур USB Type-C не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор или шнур USB Type-C повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Держите прибор только сухими руками.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на контактную пластину, органы управления и шнур USB Type-C.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальное средство для ультразвуковой чистки или питательный крем, в зависимости от режима.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению».
18. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам.
19. Не используйте прибор на шее и в зоне вокруг глаз. Не используйте прибор на других частях тела, кроме лица. Если у вас есть украшения на лице, снимайте их перед использованием аппарата.
20. Вне зависимости от режима рекомендуемое время процедуры — не более 5 минут. При дискомфорте во время работы с прибором прекратите процедуру и обратитесь к врачу.
21. Используйте прибор только один раз в день и только в одном режиме. Не используйте прибор два дня подряд — делайте перерыв между процедурами в течение 1–2 дней.
22. Не используйте аппарат после проведения других видов аппаратных процедур, а также после механических или химических пилингов.
23. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом и узнать, можно ли и как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Возможность проведения других косметологических процедур до или после ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.
24. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
25. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
26. Обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства при зарядке.
27. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем — от устройства.

28. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87