

Мы оставляем за собой право вносить изменения в наши продукты и инструкции без предварительного уведомления. Изображение приведено только для справки. Данная брошюра была тщательно проверена, но мы не можем исключить возможность опечаток, пропусков или неточностей в содержании. Наша компания оставляет за собой право на разъяснения.

 Неправильная утилизация отходов может привести к загрязнению окружающей среды.

**Забота о здоровье
Наслаждение жизнью**

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

Массажное кресло

[Инструкция по эксплуатации]

Живое искусство

Благодарим вас за использование нашего массажного кресла. Это эргономичное массажное кресло предназначено для комплексного воздействия на спину, талию, бедра, ноги, руки и многое другое. Это массажное кресло высокого класса с несколькими вариантами массажа, включая термочувствительный массаж, массаж со сжатием подушки безопасности и другие функции для вашего роскошного удовольствия.

Чтобы предложить более качественные услуги, мы подготовили данное руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте подробную информацию в этой брошюре и обратите особое внимание на важные указания по технике безопасности, чтобы обеспечить правильное использование. Пожалуйста, храните эту брошюру надлежащим образом для вашего консультирования.

Поломка и техническое обслуживание

Проблемы	Причины	Решения
Звук при использовании (звук работающего устройства)	Механический звук при работе устройства	Этот звук является нормальным и не требует ремонта.
Устройство не работает.	Вилка сетевого шнура не вставлена в розетку. Выключатель розетки не был выключен. Кнопка сообщения не нажата.	Проверьте вилку сетевого шнура и розетку и убедитесь, что они надежно подключены, затем нажмите кнопку сообщения.
Массаж резко прекратился	По истечении 15 минут расчетного времени работы прибор автоматически переключается в режим ожидания.	Если вы хотите повторить массаж, нажмите кнопку переключения
	Защита двигателя от перегрева при превышении номинального времени работы.	Перед использованием выключите и отсоедините питание и подождите, пока двигатель остынет.

Гарантия на техническое обслуживание

Пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания клиентов, если в изделии обнаружатся какие-либо неисправности.

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на один год.

Техническое обслуживание не предоставляется при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный в результате ненадлежащего хранения, обслуживания или использования клиентом.
2. Ущерб, причиненный в результате демонтажа, произведенного не авторизованным сервисным центром нашей компании.
3. Поломка и ущерб, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
4. Использование в коммерческих целях.
5. Мы не несем ответственности за несчастные случаи, которые могут произойти при использовании нестандартном использовании.
6. Если данное изделие используется не в бытовых целях, мы не даем на него гарантии.
7. Поломка, вызванная манипуляциями, которые не соответствуют требованиям руководства.
8. Неисправности, вызванные самостоятельной покупкой или использованием аксессуаров, которые не соответствуют параметрам изделия. Мы не несем ответственности за любые несчастные случаи, вызванные этим. Наш центр обслуживания клиентов также готов помочь вам с продуктами, на которые не распространяется гарантия.

Содержание

Вопросы безопасности.....	01
Структура и параметры продукта.....	03
Инструкции по эксплуатации ручных контроллеров.....	04
Инструкция по эксплуатации функции массажа.....	05
Ежедневное техническое обслуживание.....	06
Поломка, техническое обслуживание и послепродажное обслуживание.....	07

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием.

Чтобы снизить риск возгорания, ожогов, поражения электрическим током или травмирования окружающих, пожалуйста, соблюдайте следующие правила:

1. Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки, когда устройство не работает, или перед разборкой компонентов.
2. Не используйте устройство под подушкой или другим покрытием, таким как одеяло, во избежание пожара, поражения электрическим током или других травм, вызванных перегревом.
3. Детям, людям с ограниченными возможностями, нарушениями органов чувств и нервной системы для использования устройства требуется присмотр взрослого.
4. Обязательно используйте данный продукт для целей, описанных в инструкции пользователя. Не используйте компоненты, отличные от рекомендованных производителем.
5. Не используйте данное изделие и не отправляйте его обратно в сервисный центр для проверки и ремонта при возникновении следующих условий: поврежден шнур питания или вилка электропитания; устройство работает неправильно; устройство упало на землю или сломалось; устройство попало в воду.
6. Не тяните за шнур питания для перемещения устройства.
7. Шнур питания и нагревательная поверхность должны находиться на безопасном расстоянии.
8. Не используйте устройство с закрытым воздуховыпускным отверстием. Следите за тем, чтобы воздуховыпускное отверстие не было забито ворсом или волосами.
9. Не вставляйте и не роняйте предметы в отверстия устройства.
10. Пожалуйста, не используйте данное устройство на открытом воздухе.
11. Не используйте данное устройство с распыляемыми составами или в местах, насыщенных кислородом.
12. Пожалуйста, выключите все режимы управления, прежде чем вынимать вилку сетевого шнура из розетки.
13. Необходимо следить за детьми, чтобы они не использовали данное изделие в качестве игрового инструмента.

1. Вопросы безопасности


* Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности или запыленности, чтобы избежать поражения электрическим током или выхода из строя компонентов.

* Не используйте массажное кресло в помещениях с температурой выше 40°C.

* Не ставьте массажное кресло вблизи обогревателей, печей или под прямыми солнечными лучами.

* Массажные кресла предназначены для личного пользования и не подходят для коммерческого использования.

Этапы и методы установки

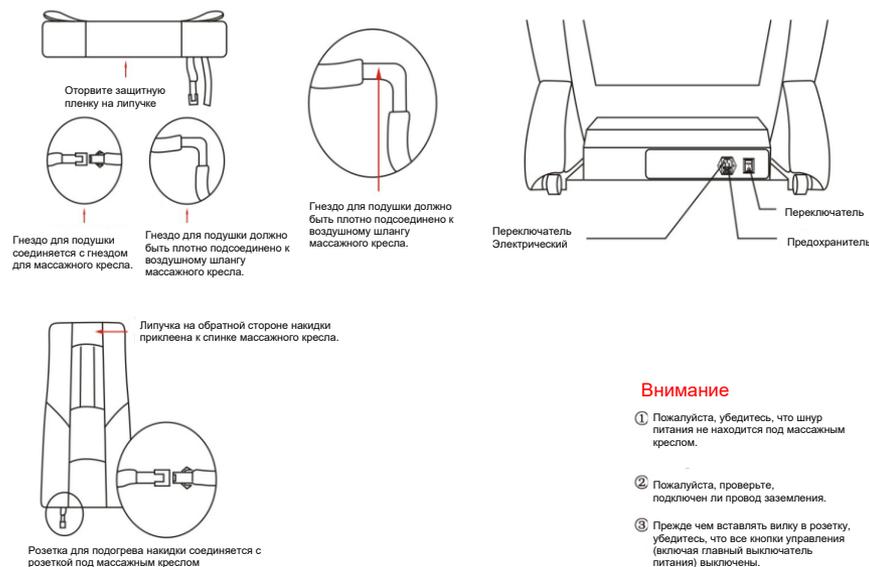

Внимание

- 1) Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания не находится под массажным креслом.
- 2) Пожалуйста, проверьте, подключен ли провод заземления.
- 3) Прежде чем вставлять вилку в розетку, убедитесь, что все кнопки управления (включая главный выключатель питания) выключены.

Ежедневное техническое обслуживание

- 1) Протирайте с помощью мягкого моющего средства и мягкой ткани, не используйте едкие чистящие средства.
- 2) Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специалистом ремонтной мастерской, назначенной производителем.
- 3) Отключайте блок питания, когда он не используется, или во время чистки.
- 4) Не режьте и не царапайте поверхность изделия никакими острыми предметами.
- 5) Храните изделие не во влажной среде, а в сухом и проветриваемом помещении.
- 6) Не нажимайте на изделие сильно.

Режим качания: качайтесь вперед и назад 5 раз, повторяя цикл каждые 5 минут. (нажатие этой кнопки в состоянии невесомости заменяется покачиванием).

Верхняя половина хода: Переключитесь на верхнюю половину хода, движение перемещается вперед и назад в верхней части дорожки, регулируется в ручном режиме.

Нижняя половина хода: Переключитесь на нижнюю половину хода, движение перемещается взад и вперед по нижней половине дорожки, регулируется в ручном режиме.

Полная ходьба: Переключитесь на полный ход, движение перемещается взад и вперед по дорожке, регулируется в ручном режиме.

Массаж фиксированной точкой: Массаж фиксированной точкой, движение устанавливается в текущей точке.

Регулировка ширины: Отрегулируйте ширину движения, 3 регулировки, ее можно регулировать в ручном режиме, в режиме постукивания, в режиме нажатия пальцем.

Пауза: В рабочем состоянии нажмите один раз, чтобы отключить все функции вручную, нажмите еще раз, чтобы перейти в автоматический режим 1.

Открыты все функции, которые можно использовать в ручном режиме.

Подушка безопасности: включите подушку безопасности, нажмите первую кнопку, откройте все, нажмите вторую кнопку, разведите ягодицы руками, ноги сомкните, нажмите в третий раз, бедра руками сомкните, ноги разведите, нажмите в четвертый раз, все закрыто.

Регулируется в ручном режиме.

Подошвенный ролик: Переключатель ножного ролика и регулировка скорости: нажмите первый раз, скорость открытия ролика равна единице, нажмите второй раз, скорость равна двум, нажмите третий раз, скорость равна трем, нажмите четвертый раз, ролик закрыт.

Регулируется в автоматическом ручном режиме.

Невесомость: переключатель невесомости, настраиваемый в ручном режиме (нажатие этой кнопки в режиме "качание включено" заменяется на режим "невесомость")

Горячий компресс: переключатель "горячий компресс". Время: нажмите один раз и добавьте 5 минут, максимум - 30 минут. Через 30 минут переключитесь на 5 минут.

Скорость: отрегулируйте основную скорость, 3-ступенчатая регулировка, ручной режим регулируется. (не регулируется под давлением)

Давление воздуха: отрегулируйте давление воздуха в подушке безопасности, 3-ступенчатая регулировка, регулируется в ручном режиме.

Опустить: долго нажимайте на спинку (в режиме невесомости и качания нажатие этой кнопки отключается)

Поднять: нажмите и удерживайте спинку, чтобы поднять (в режиме невесомости и качания нажатие этой кнопки отключается).

Ручной режим: Переключитесь в ручной режим замешивания, отбивания молотком, разминания, постукивания, нажатия пальцами и постукивания, движение переключится в режим полного диапазона.

Внимание

*Только для использования в помещении.

*Не повышайте температуру окружающей среды резко при использовании кресла при низких температурах в помещении. Перед использованием массажного кресла рекомендуется постепенно регулировать температуру до нормального уровня.

*Если массажное кресло для использования перенести из холодного в теплое помещение, влага в аппарате может повлиять на нормальную работу аппарата или даже привести к его повреждению.

*Для обеспечения безопасности и правильного использования массажного кресла, пожалуйста, обязательно внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием.

*Пожалуйста, не пользуйтесь массажным креслом, если тканевый чехол поврежден.

*Пожалуйста, не используйте массажное кресло одновременно с электрическими одеялами и другим терапевтическим оборудованием, чтобы избежать снижения эффекта массажа или причинения вреда здоровью.

*Пожалуйста, не пользуйтесь массажным креслом в течение 1 часа после еды, чтобы избежать противоположного эффекта. Пожалуйста, не пользуйтесь массажным креслом мокрыми руками или другими частями тела.

Вопросы безопасности

* Не кладите в массажное кресло какие-либо предметы или легковоспламеняющиеся материалы, так как это может привести к поражению электрическим током, неисправности или возгоранию.

* Если вы почувствуете дискомфорт во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите его.

*Пожалуйста, не накрывайте массажное кресло во время использования, чтобы не вызвать перегрева и не привести к поломке или возгоранию.

*Данное изделие нельзя использовать для самодиагностики или лечения: если вам требуется диагностика или лечение, пожалуйста, обратитесь к профессиональному медицинскому персоналу.

*Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если вы принимаете медикаментозные препараты или у вас есть другие заболевания. Не используйте этот продукт, если вы плохо себя чувствуете или беременны.

* Пожалуйста, сначала проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и следуйте его советам, если вы беременны или у вас менструальный цикл в разгаре.

* Рекомендуемое время использования - от 15 до 30 минут. Перед повторным использованием, пожалуйста, убедитесь, что массажное кресло отключено от сети и не пользуйтесь им по крайней мере 10 минут. При длительном непрерывном использовании массажного кресла может сработать

устройство защиты от перегрева, а затем автоматически отключиться питание.

* Поверхность прибора может нагреваться, поэтому людям, не чувствительным к нагреву, рекомендуется использовать его с осторожностью.

Условия, при которых не следует использовать массажные кресла

При возникновении любого из перечисленных ниже условий немедленно прекратите использование, выключите выключатель, отключите питание и свяжитесь с нами.

* Если вы случайно пролили воду на массажное кресло.

* Если тканевый чехол массажного кресла поврежден, и внутренний механизм обнажен.

* Если вы чувствуете дискомфорт или сильную боль во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.


* Если во время использования кресла вы обнаружите какую-либо неисправность или отклонение от нормы в работе устройства.

* В процессе использования произошло отключение электропитания. (Внезапное отключение питания может привести к травмам пользователя.)

* Если происходит разряд молнии.

Параметры продукта

Наименование товара	Массажное кресло
Номинальное напряжение	110 В-220 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	120 Вт
Уровень безопасности	Тип I
Соблюдение стандартов	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

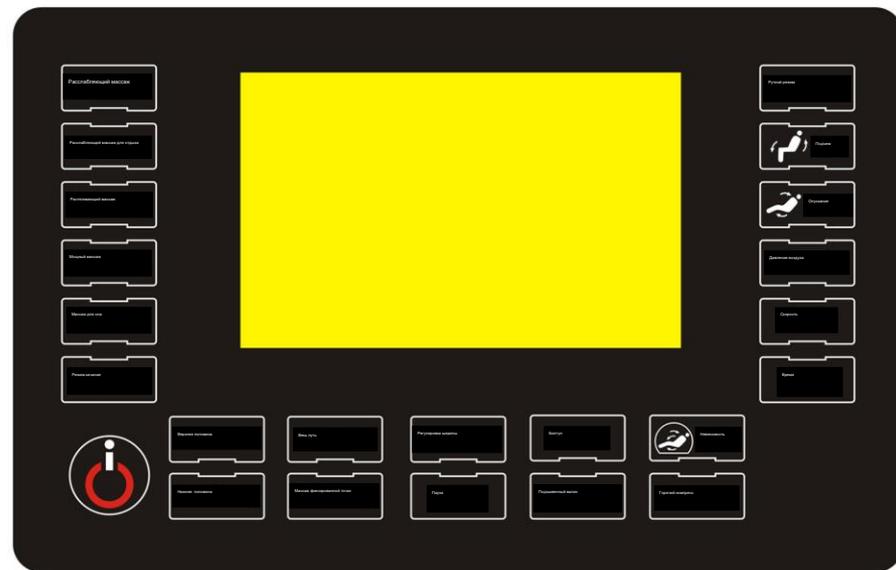

Инструкция по эксплуатации функции массажа

Поверните спинку на 10 секунд, чтобы перейти в режим расслабляющего массажа.
Расслабляющий массаж: Переключитесь в автоматический режим расслабляющего массажа.
Время работы: Все воздушные клапаны открыты, ролик открыт.
Расслабляющий массаж: Переключитесь в автоматический режим расслабляющего массажа.
Время работы: Все воздушные клапаны открыты, ролик открыт.
Растягивающий массаж: Переключитесь в автоматический режим растягивающего массажа.
Время работы: Все воздушные клапаны открыты, ролик открыт.
Сообщение с предупреждением: Переключитесь в автоматический режим интенсивного массажа.
Время работы: Воздушный клапан полностью открыт, и ролик открывается с максимальной силой.
Массаж глаз во время сна: Переключитесь в автоматический режим массажа во время сна.