



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ORLAUF RENEWAL



Портативный
массажер для головы
с зарядной базой

**Актуальная версия
инструкции**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Устройство массажера	9
4. Управление и функции массажера	10
5. Распаковка	10
6. Зарядка массажера	11
7. Правила эксплуатации аккумулятора	12
8. Устранение неисправностей	13
9. Спецификация	16

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Для снижения риска поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм соблюдайте следующие меры безопасности:

- всегда отключайте массажер от электросети перед очисткой;
- не используйте во время купания или душа;
- не размещайте и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину;
- не кладите и не погружайте в воду или другую жидкость;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду. немедленно отключите его;
- на массажер не должны падать предметы и не должна проливаться жидкость;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок и других металлических застёжек;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием. не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не заземлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг устройства;
- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;

- отключайте массажер от электросети во время грозы;
- не накрывайте устройство во время его работы;
- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для профессионального лечения.
- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра. Отключайте его от сети, когда он не используется.
- Используйте этот массажер как описано в данном руководстве. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем.
- Массажер предназначен для взрослых.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера.
- Не используйте продукт, если вы чувствуете себя плохо. Либо прекратите его использование, если во время массажа почувствуете себя плохо.
- Массажер предназначен для непрофессионального массажа, чтобы успокоить уставшие и ноющие мышцы. Он не предназначен для замены медицинского лечения. Если ваши недомогания и симптомы не проходят или ухудшаются после использования массажера, немедленно обратитесь к врачу.
- Не используйте массажер в сочетании с другим терапевтическим оборудованием или электрическим одеялом, так как это может привести к снижению эффекта от массажа или травме.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не используйте это устройство более 20 минут подряд.
- Не используйте это устройство на опухших или воспаленных участках кожи или на участках кожи с высыпаниями.
- Это устройство никогда не должно использоваться лицами, страдающими каким-либо физическим заболеванием, которое может ограничить способность пользователя управлять массажером.
- Дети, инвалиды или лица с ограниченными возможностями должны пользоваться массажером под присмотром.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Чтобы продлить срок службы изделия, не роняйте и не бросайте его, а также не давите на массажер.
- Не подвергайте массажер воздействию влаги, солнечных лучей и пыли.
- Не используйте на улице.
- Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву, что сократит срок службы устройства. Если массажер нагрелся, прекратите использование и дайте ему остыть.
- Чрезмерная жара или холод могут повредить устройство.
- Храните массажер в безопасном, прохладном и сухом месте.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для головы	1 шт.
База для зарядки массажера	1 шт.
Кабель питания с USB Type-C	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Сменный комплект массажных насадок	1 шт.

3. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Панель управления
2. Кнопка питания
3. Кнопка управления вибромассажем
4. Разъем Type-C
5. Зарядная база
6. Массажные манипуляторы
7. Кабель для зарядки устройства Type-C
8. Комплект сменных насадок

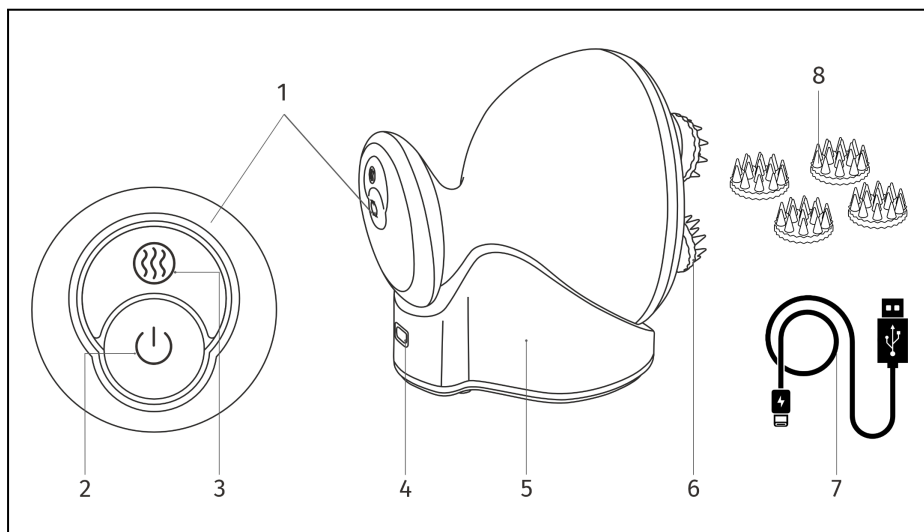


Рисунок 1 — Устройство массажера

4. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

Кнопка питания



- Нажмите кнопку питания для запуска массажера. Манипуляторы начнут работать на высокой скорости. Световая индикация будет постоянно гореть.
- Повторно нажмите для переключения на низкую скорость массажа. Световой индикатор будет мигать.
- Длительное нажатие (2-3 секунды) на кнопку питания отключает все функции.

Кнопка вибрации



- Нажмите кнопку для запуска режима вибрации с высокой интенсивностью.
- Повторно нажмите для переключения режима с низкой интенсивностью вибрации.
- Длительное нажатие (2-3 секунды) отключает режим вибрации.



Сеанс массажа длится 10 минут, после чего массажер отключается.

5. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Полностью зарядите массажер перед первым применением согласно инструкции ниже.
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

6. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

- Подключите зарядный кабель к порту Type-C и к порту USB.
- Индикатор питания подсветится красным цветом, а после полной зарядки — зеленым. Будьте внимательны, разъем слегка нагревается во время зарядки.
- Полностью зарядите массажер перед использованием. Время зарядки составляет 3 часа.
- Отсоедините зарядный кабель после полной зарядки устройства.



Внимание! Массажер не должен использоваться во время зарядки.
Проверьте уровень заряда до начала работы с массажером.
Полностью зарядите массажер перед первым применением.

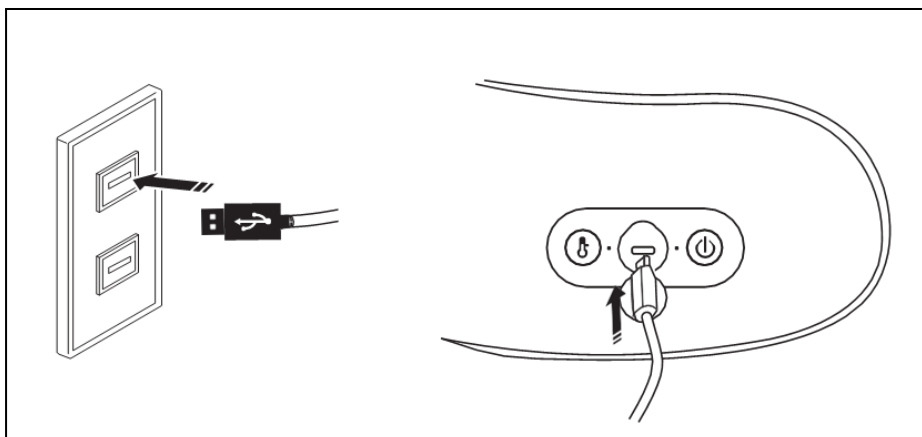


Рисунок 2 — Зарядка массажера

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумуляторов.

Обращение с аккумуляторами:

- при контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью;
- взрывоопасно, поэтому никогда не бросайте аккумулятор в огонь;
- не разбирайте, не открывайте и не ломайте аккумулятор;
- используйте только входящее в комплект зарядное устройство;
- перед первым использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен;
- необходимо постоянно следить за правильной зарядкой;
- полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В таблице перечислены наиболее часто встречающиеся проблемы при использовании массажера. Если у вас возникли проблемы, не упомянутые в списке, попробуйте выполнить следующие действия:

- выключите питание массажера;
- держите массажер отключенным в течение 60 минут;
- включите питание.

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает.	Низкий уровень заряда устройства.	Зарядите устройство.
	Массажер только что завершил работу (прошло 10 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился.	Нажмите кнопку питания.
Массажер перегревается.	Было выполнено несколько циклов по 10 минут.	Выключите массажер и дайте ему остыть.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Силиконовые массажные манипуляторы, шт.	4
Режим вибрации	Да
Таймер	Автоотключение через 10 минут
Размер (Д*Ш*В), см	12х10х11,5
Вес нетто, кг	0,5
Вес брутто, кг	0,6
Размер упаковки (Д*Ш*В), см	18х15х11,5
Напряжение питания	DC 5В 1А
Мощность, Вт	5
Батарея, мАч	1000, 4,2В
Примерное время работы, мин.	80
Примерное время зарядки батареи, час	3

Виды массажа	Акупрессурный, акупунктурный, комбинированный, расслабляющий, вибрационный, разминание
Механизм массажа	Массажные манипуляторы, вибрационный
Автопрограммы, шт	-
Кол-во роликов, шт.	4
Кол-во воздушных подушек, шт	-
Прогрев	-
Вибромассаж	Да
Пульт ДУ	-
Таймер	10 минут
Bluetooth	-
Размер (ДхШхВ), см	12х10х10
Вес нетто, кг	0,5
Вес брутто, кг	0,6
Размер упаковки, см	18х15х12
Напряжение питания	220В/5В 1А
Мощность, Вт	5

Производитель	Orlauf
Поставщик/Импортер	ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, 035С, ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orkauf.com

Сайт производителя <https://orkauf.com/>.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

