



РУКОВОДСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

# ORLAUF ELFEN



Массажное кресло  
для дома с 3D  
технологией массажа

**Актуальная версия  
инструкции**



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Меры безопасности</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>2. Обзор внешнего вида</b>                                          | <b>8</b>  |
| 2.1 Вид спереди и внешние детали                                       | 8         |
| 2.2 Массажный механизм кресла                                          | 9         |
| 2.3 Динамики массажного кресла                                         | 10        |
| <b>3. Перемещение массажного кресла</b>                                | <b>11</b> |
| <b>4. Подготовка к использованию</b>                                   | <b>13</b> |
| 4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла                    | 13        |
| 4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле    | 14        |
| 4.3 Включите питание кресла                                            | 15        |
| 4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении | 15        |
| <b>5. Включение и выключение массажного кресла</b>                     | <b>16</b> |
| 5.1 Включение массажного кресла                                        | 16        |
| 5.2 Начало сеанса массажа                                              | 17        |
| 5.3 Подключение по Bluetooth                                           | 17        |
| 5.4 Пауза и отключение                                                 | 17        |
| <b>6. Панель быстрого доступа</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>7. Управление массажным креслом</b>                                 | <b>21</b> |
| 7.1 Главный экран управления                                           | 21        |
| 7.2 Автоматические программы массажа                                   | 22        |
| 7.3 Ручной режим и настройка параметров массажа                        | 23        |
| 7.4 Настройка параметров массажа                                       | 24        |
| 7.5 Управление положением кресла и настройка сеанса                    | 25        |
| 7.6 Индивидуальная настройка массажной каретки под рост                | 26        |
| 7.7 Функция мониторинга здоровья                                       | 27        |
| 7.8 Общие настройки интерфейса                                         | 28        |
| <b>8. Чистка и уход</b>                                                | <b>29</b> |
| 8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи                              | 29        |
| 8.2 Уход за пластиковыми частями кресла                                | 30        |
| <b>9. Анализ и устранение неисправностей</b>                           | <b>31</b> |
| <b>10. Порядок заземления</b>                                          | <b>33</b> |
| <b>11. Спецификация</b>                                                | <b>34</b> |
| <b>12. Комплектация</b>                                                | <b>35</b> |
| <b>13. Гарантия</b>                                                    | <b>35</b> |

## РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с удачным приобретением! Вы стали обладателем массажного кресла Orlauf Elfen, сочетающего в себе передовые технологии и современный дизайн. Регулярное использование этого кресла поможет вам улучшить самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Перед началом эксплуатации массажного кресла внимательно изучите данное руководство, чтобы ознакомиться с его техническими характеристиками и функциональными возможностями. Обязательно сохраните эту инструкцию, чтобы всегда иметь доступ к перечню функций и правилам эксплуатации. Обращаем ваше внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникнут вопросы по эксплуатации массажного кресла, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или к официальному дилеру, у которого вы приобрели устройство.



*Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного изделия. Сохраните ее для дальнейшего обращения.*



## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании массажного кресла необходимо строго соблюдать основные меры предосторожности, изложенные ниже. Это снизит риск получения травм и поражения электрическим током.

**Внимательно прочитайте следующую информацию перед использованием массажного кресла:**

- аккуратно вставляйте вилку кресла в электрическую розетку во избежание риска возгорания или поражения электрическим током;
- для бесперебойной работы массажного кресла настоятельно рекомендуется использовать сетевой фильтр;
- не используйте массажное кресло в местах с повышенной влажностью воздуха, таких как сауна, парная, около бассейна, в ванной комнате, рядом с отопительными приборами и т.д.;
- не используйте кресло вне помещений и в местах с прямым солнечным светом;
- всегда отключайте вилку питания от электрической розетки сразу после завершения использования массажного кресла для предотвращения его повреждения при перебоях в подаче электроэнергии;
- никогда не подключайте и не отключайте вилку питания от розетки мокрыми руками;
- не оставляйте кресло без присмотра, если его используют люди с ограниченными возможностями или дети, либо если оно установлено в месте их нахождения;
- используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции;
- кресло предназначено для использования только одним человеком одновременно;
- не используйте дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем;
- не вставайте, не садитесь и не прыгайте на подставке для ног, спинке и подлокотниках кресла. Это может привести к травмам или неисправности оборудования;
- не засыпайте во время массажа;
- регулярно очищайте массажное кресло от загрязнений, пыли и мусора;
- не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла;
- не тяните за кабель питания для отключения или перемещения массажного кресла;
- перед включением массажного кресла убедитесь, что рядом нет детей, животных или предметов, которые могут попасть под движущиеся части;

- если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение «О» и затем отсоедините вилку от розетки. Это предотвратит возможные проблемы при повторном включении питания;
- при обнаружении разрывов в обшивке кресла немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр;
- данное массажное кресло предназначено для домашнего использования и не может применяться в других целях;
- проконсультируйтесь с врачом при наличии возможных противопоказаний к использованию массажного кресла;
- обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение или используете электронные медицинские импланты, например, кардиостимулятор;
- проконсультируйтесь с врачом при наличии одного из следующих заболеваний: злокачественные опухоли, болезни сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или хронические заболевания в состоянии обострения;
- если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу;
- никогда не применяйте массаж на опухших или воспаленных участках тела;
- не используйте массажное кресло более 30 минут за один сеанс;
- не используйте массажное кресло в помещениях, где применяются аэрозольные распылители (спреи) или наблюдается повышенная концентрация кислорода;
- данное массажное кресло не является медицинским оборудованием и предназначено для обеспечения комфортного массажа и отдыха. Оно не может заменить полноценное медицинское лечение;
- никогда не используйте массажное кресло с пережатыми воздушными шлангами. Не допускайте засорения воздушных шлангов и попадания внутрь волос или любых других посторонних предметов;
- контролируйте контакт кожи с нагреваемыми зонами кресла во избежание получения травм. Возникновение сбоев в работе нагревательного элемента и его чрезмерный нагрев могут привести к серьезным ожогам;
- перегрев может свидетельствовать о неправильном использовании массажного кресла. В этом случае немедленно выключите кресло и отсоедините вилку от розетки;
- перед использованием массажного кресла снимите все украшения, часы и другие аксессуары. Также убедитесь, что в карманах нет никаких предметов;
- не позволяйте детям приближаться к выдвижной секции для ног и другим подвижным частям кресла.



**Внимание!**

- Не садитесь в кресло в мокрой одежде и не допускайте попадания на него жидкости.
- Не допускайте контакта внешней поверхности кресла с острыми и режущими предметами.
- Никогда не снимайте чехол кресла и не пытайтесь ремонтировать кресло самостоятельно.

## 2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА

### 2.1 Вид спереди и внешние детали

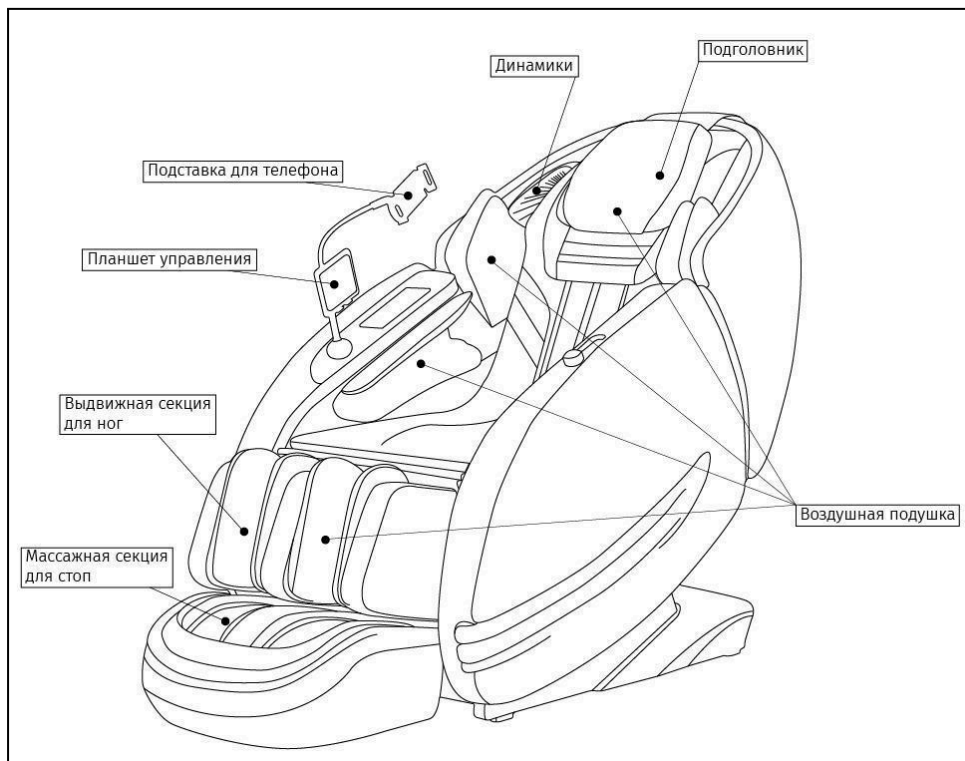


Рисунок 1 — Внешние детали массажного кресла

## 2.2 Массажный механизм кресла

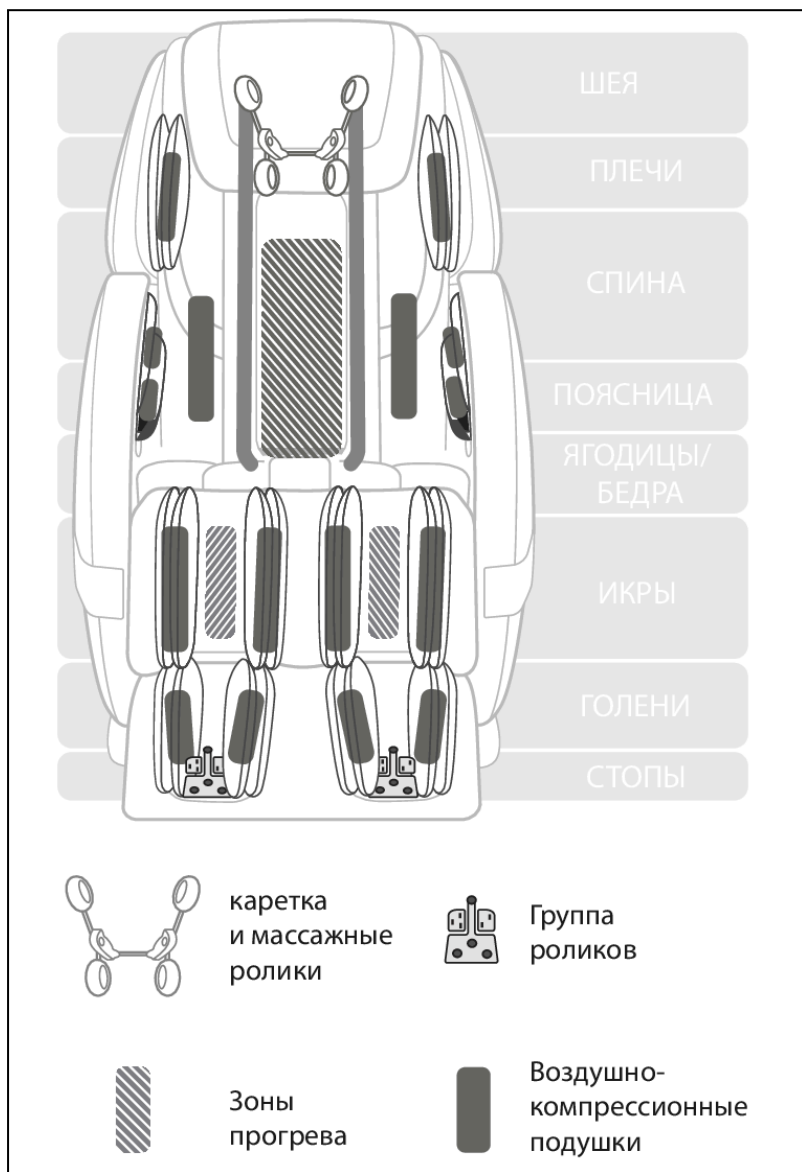


Рисунок 2 — Детали массажного механизма

## 2.3 Динамики массажного кресла

Название устройства для подключения по Bluetooth — Orlauf Elfen.

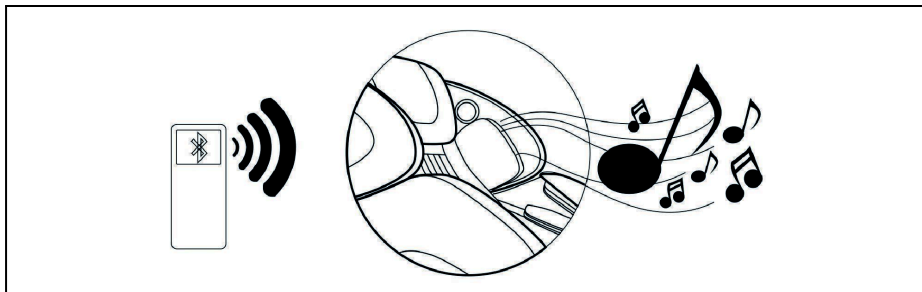


Рисунок 3 — Динамики массажного кресла подключаются по Bluetooth



**Примечание!** Динамики кресла с помощью Bluetooth могут подключаться одновременно только к одному устройству с Bluetooth. Пожалуйста, после использования выключите Bluetooth на своем устройстве, чтобы другие пользователи могли подключиться к колонкам.

### 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажное кресло тяжелое и габаритное, поэтому не рекомендуется перемещать его в одиночку.

#### Вариант 1: перемещение с помощью транспортировочных роликов

При перемещении кресла один человек должен поддерживать его за спинку, другой — за нижние части боковин. Отклоните таким способом кресло на 45 градусов, пока оно не встанет на транспортировочные ролики.

Не отклоняйте спинку слишком сильно, кресло может опрокинуться и придавить человека.

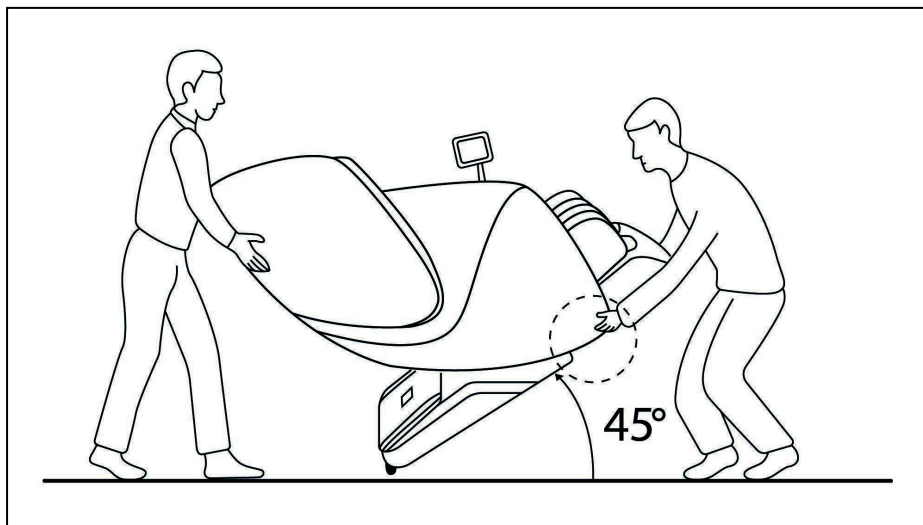


Рисунок 4 — Перемещение массажного кресла с помощью транспортировочных роликов

#### Вариант 2: без использования транспортировочных роликов

Крепко ухватитесь правой рукой за нижнюю часть кресла (за опору), левой рукой держите нижнюю часть спинки кресла. Поднимите его и переместите.

Обратите внимание, что вес кресла достаточно большой, поэтому для перемещения нужно как минимум два человека. Есть риск сорвать спину, будьте аккуратны!

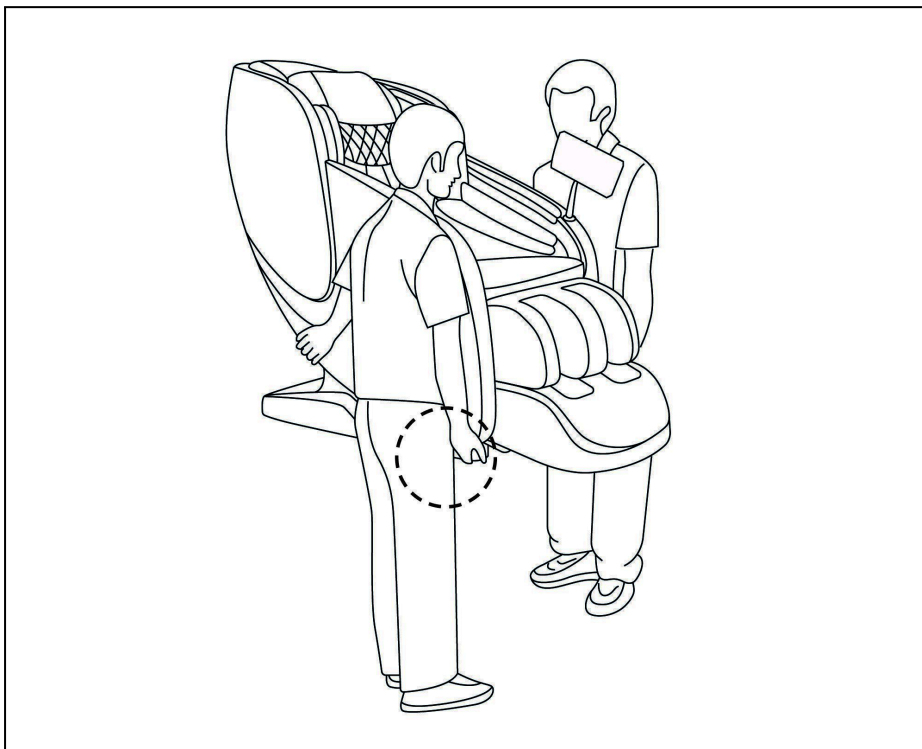


Рисунок 5 — Перемещение массажного кресла без использования транспортировочных роликов

#### **Примечание!**



- Не тащите и не толкайте кресло, пока оно не установлено в нужное место.
- При перемещении не держитесь за пластиковые части или за модуль питания. Можно повредить кресло или получить удар током.
- Не перемещайте кресло, если в нем кто-то сидит.
- Перед тем как перемещать кресло, убедитесь, что оно отключено от сети.
- Можно подложить коврик под транспортировочные ролики, если боитесь поцарапать пол.



## 4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### 4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет маленьких детей, домашних животных или других объектов.

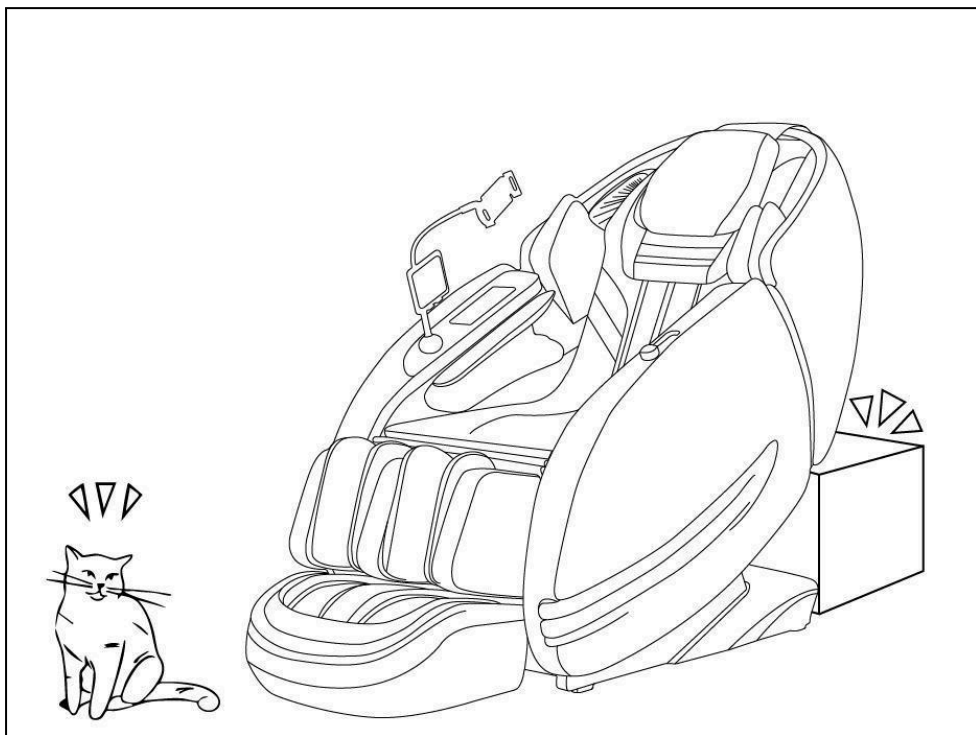


Рисунок 6 - Перед массажным креслом и за ним не должно быть посторонних предметов, домашних животных и детей

## 4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле

- Перед тем как приступить к массажу, убедитесь, что между любыми его частями нет посторонних предметов/
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внутренней поверхностью накидки спинки/
- Не сажайте домашних животных на массажное кресло, его спинку или подлокотники.

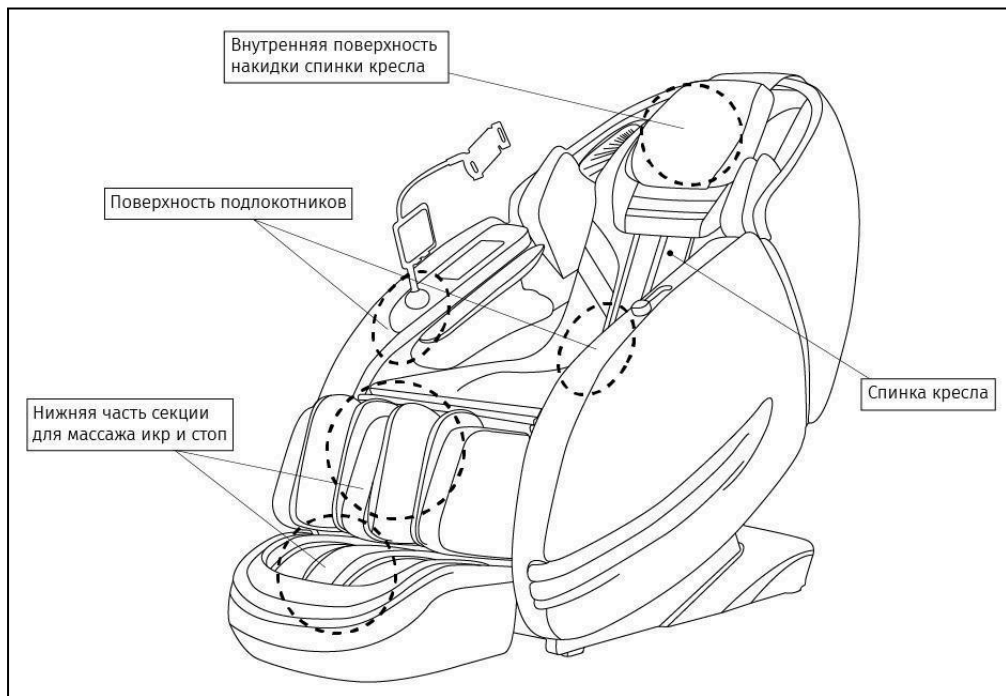


Рисунок 7 - Части массажного кресла, в которые могут попасть посторонние предметы

### 4.3 Включите питание кресла

- Плотно вставьте разъем питания в розетку блока сетевого выключателя.
- Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.
- Переведите переключатель в положение «I».

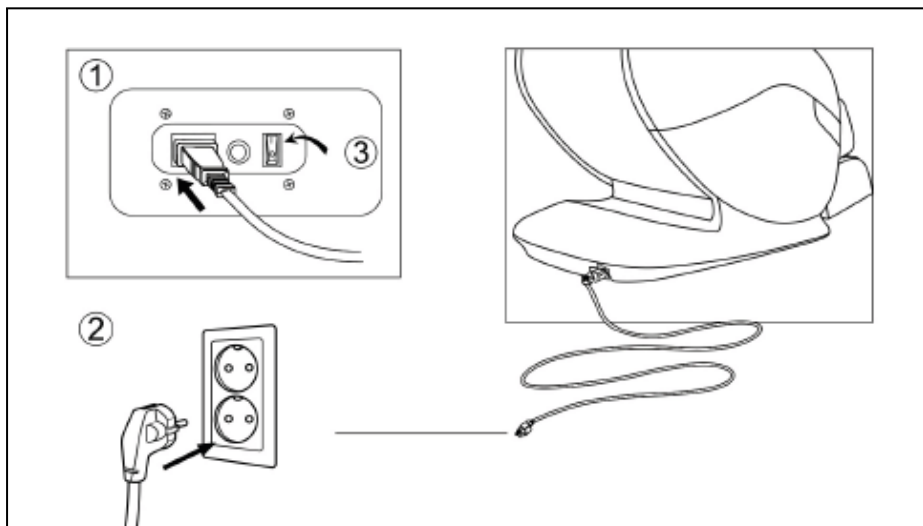


Рисунок 8 — Правильное включение массажного кресла

### 4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении

Если ролики находятся не в стационарном положении, нажмите кнопку «Вкл» на планшете управления, чтобы вернуть ролики в стационарное положение.

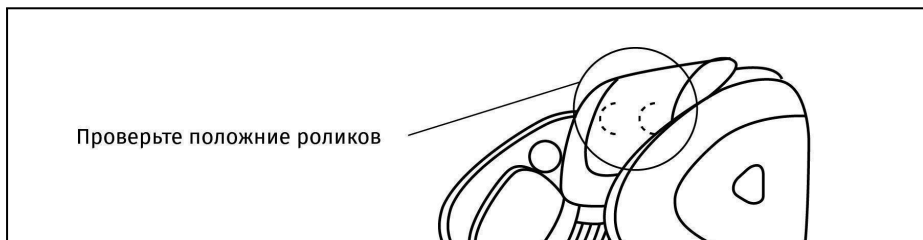


Рисунок 9 — Правильное положение роликов

## 5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

### 5.1 Включение массажного кресла

Убедитесь, что кнопка на задней панели питания находится в положении «О». Вставьте штепсель кабеля питания в разъем кресла. Убедитесь, что он не болтается в гнезде. Затем подключите кабель питания к розетке. Переключите кнопку питания в положение «I».



*Не трогайте кабель питания, розетку или разъем мокрыми или влажными руками!*

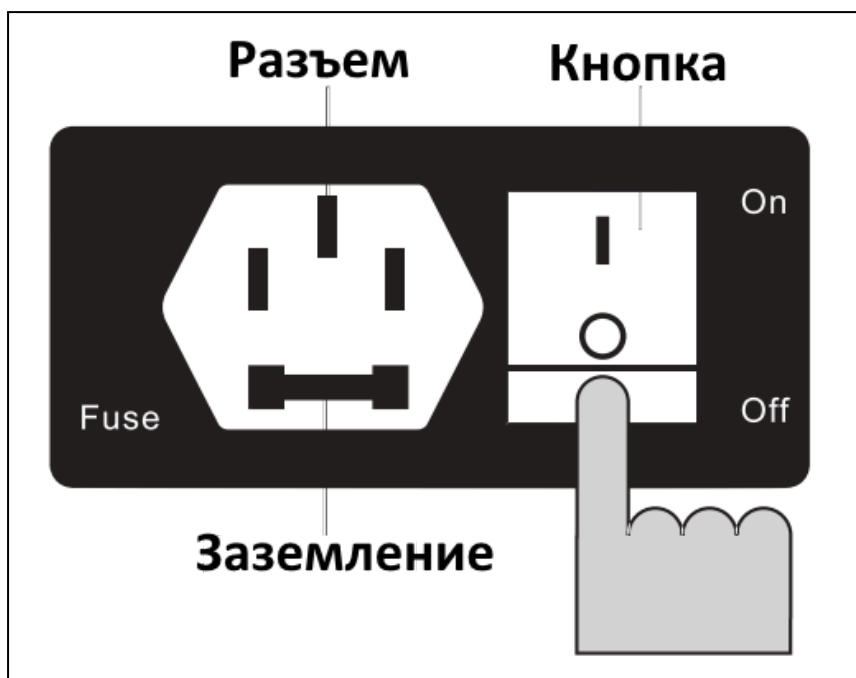


Рисунок 10 — Подключение массажного кресла

## 5.2 Начало сеанса массажа

Сядьте в кресло. Для включения нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на 1 секунду (кнопки управления и быстрого доступа к функциям расположены на левом подлокотнике).

## 5.3 Подключение по Bluetooth

На вашем смартфоне в меню соединения по Bluetooth найдите устройство Orlauf Elfen и подключитесь к нему. Так вы сможете проигрывать музыку со смартфона через встроенные колонки массажного кресла.



*По умолчанию код для подключения отсутствует.*

*Вы можете одновременно подключить только одно устройство по Bluetooth.*

## 5.4 Пауза и отключение

- **Принудительная остановка.** Нажмите на значок «II» на экране или на кнопку «⏻» на панели быстрого доступа на подлокотнике. Для повторного запуска массажа снова нажмите эту кнопку.
- **Окончание массажа.** Нажмите значок для остановки работы кресла. Не покидайте кресла до полного поднятия спинки и полного опускания секции для ног.
- Выключите кнопку на задней панели питания после полного выключения кресла.

## 6 .ПАНЕЛЬ БЫСТРОГО ДОСТУПА

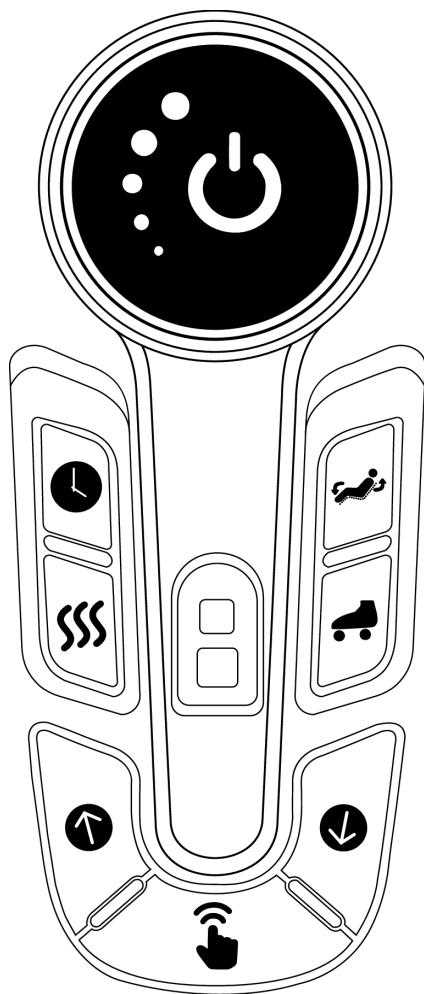


Рисунок 11 — Панель быстрого доступа



В режиме ожидания нажмите и удерживайте 2 секунды для включения кресла. В режиме "ВКЛЮЧЕНО" нажмите и удерживайте 2 секунды для выключения и сброса настроек.



В режиме "ВКЛЮЧЕНО" вращайте ручку по часовой стрелке для подъема спинки кресла. Вращайте против часовой стрелки для опускания спинки. Прекратите вращение для остановки движения спинки в желаемом положении.



В режиме "ВКЛЮЧЕНО" нажимайте для выбора продолжительности массажа.



Нажимайте для выбора прогрева или его отключения.



Нажмите и удерживайте для подъема секции для ног. Отпустите для остановки.



Нажмите и удерживайте для опускания секции для ног. Отпустите для остановки.




Нажмите для входа в режим ручной настройки параметров массажа.



Нажмите для включения или выключения роликового массажа стоп.



Нажмите для активации режима Zero-G. Повторное нажатие выключит режим.

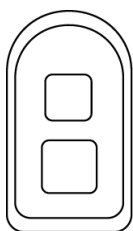

Нажмите для запуска функции анализа состояния здоровья. Следуйте инструкциям на экране.



## 7. УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ

### 7.1 Главный экран управления

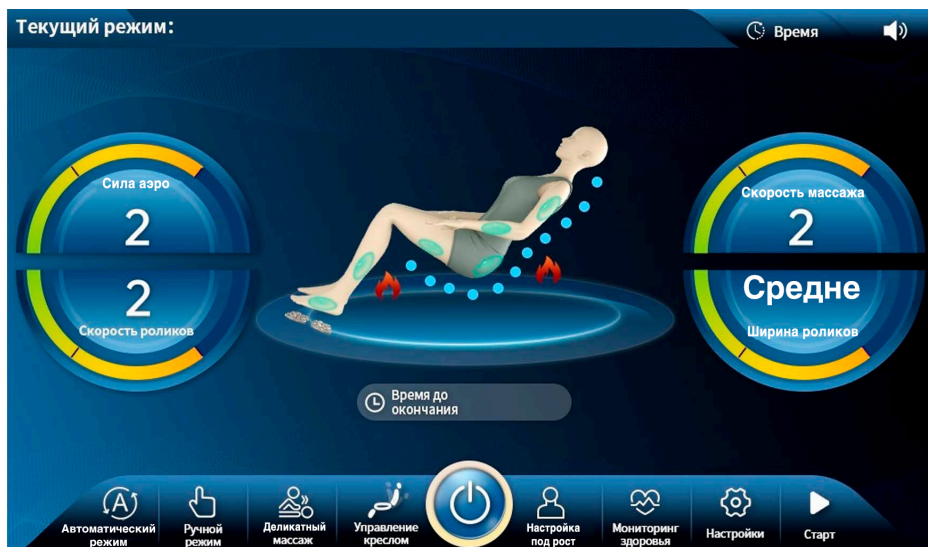


Рисунок 12 — Экран. Главное меню

Нажмите кнопку , чтобы включить/выключить кресло.

После включения массажное кресло автоматически выполнит сканирование контуров тела.

По завершении сканирования по умолчанию будет запущена первая автоматическая программа "Богатырское здоровье". Время сеанса по умолчанию составляет 20 минут.

## 7.2 Выбор автоматических программ массажа

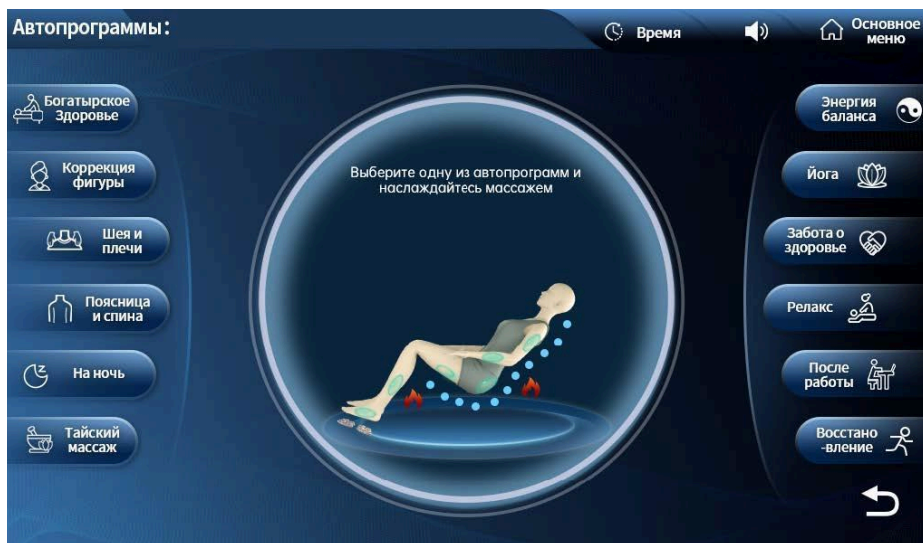


Рисунок 13 — Меню автопрограмм

**Кнопка автопрограммы:** в зависимости от вашего физического состояния и времени массажа вы можете выбрать любую из 12 программ:

“Богатырское здоровье”, “Коррекция фигуры”, “Шея и плечи”, “Поясница и спина”, “На ночь”, “Тайский массаж”, “Энергия баланса”, “Йога”, “Забота о здоровье”, “Релакс”, “После работы” и “Восстановление”.

### 7.3 Ручной режим и настройка параметров массажа

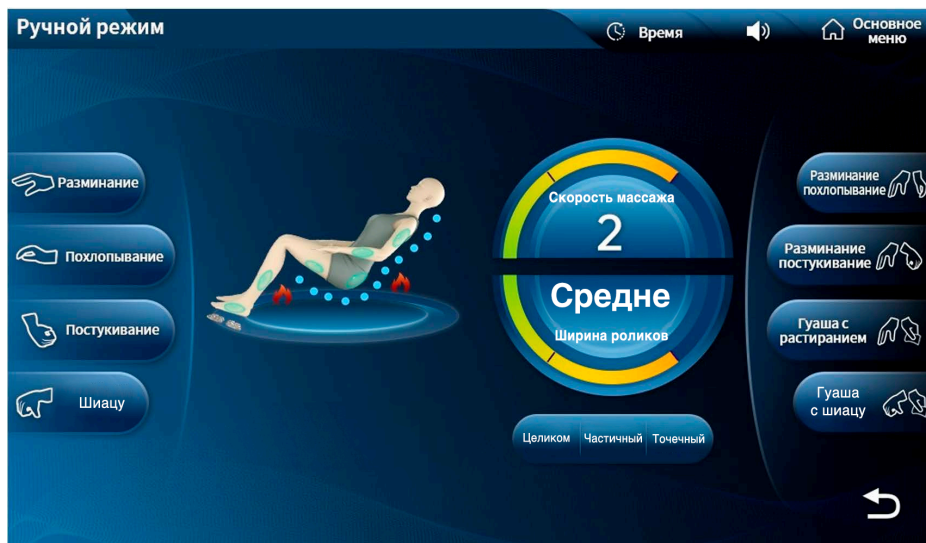


Рисунок 14 — Настройки массажа в ручном режиме

**Кнопка ручного режима:** в зависимости от вашего физического состояния вы можете выбрать одну из техник массажа: “Разминание”, “Похлопывание”, “Постукивание”, “Шиацу”, “Разминание с похлопыванием”, “Разминание с постукиванием”, “Гуаша с растиранием”, “Гуаша с шиацу”.

**Кнопка скорость массажа:** в ручном режиме вы можете регулировать скорость массажа (низкая, средняя, высокая).

**Кнопка ширина роликов:** в ручном режиме массажа (похлопывание, постукивание, шиацу и гуаша с шиацу) вы можете установить этот параметр (широкий, средний, узкий).

**Кнопки частичного, точечного и массажа целиком:** в ручном режиме вы можете выбрать любую область массаж.

## 7.4 Настройка параметров массажа

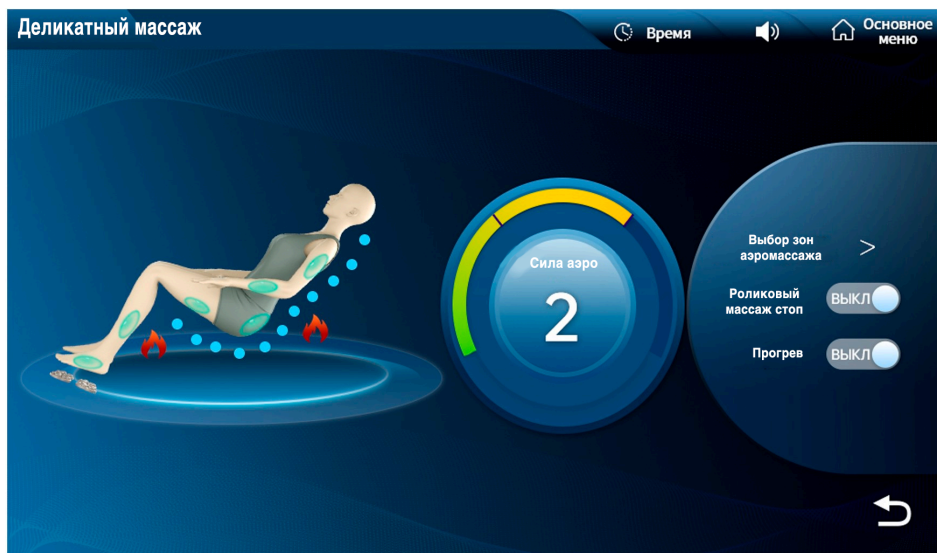


Рисунок 15 — Экран настройки массажа

**Кнопка сила аэро:** позволяет регулировать силу давления всех массажных подушек (первый, второй и третий уровень).

**Кнопка выбора зон аэромассажа:** вы можете выбрать область тела или включить “целиком”.

**Кнопка роликового массажа:** позволяет включать и выключать роликовый массаж стоп.

**Кнопка прогрева:** вы можете управлять включением/выключением прогрева.

## 7.5 Управление положением кресла и настройка сеанса

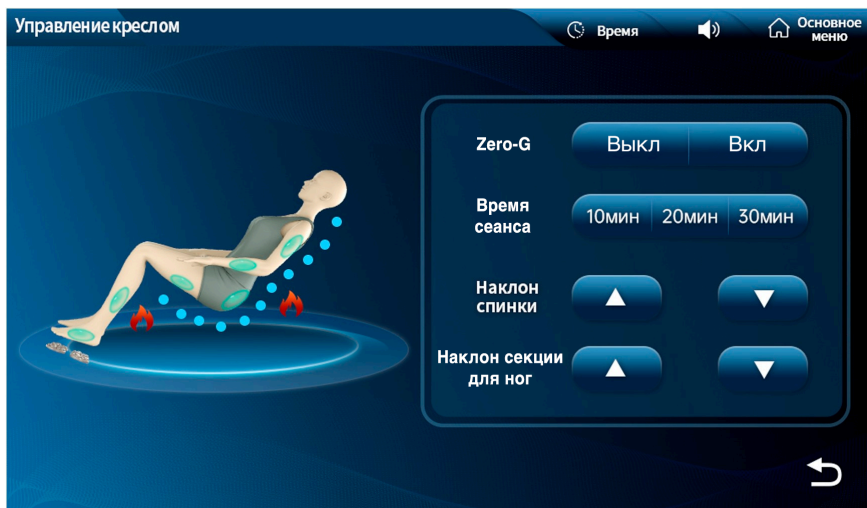


Рисунок 16 — Экран управления положением кресла

Выкл

Вкл

### Кнопка Zero-G

Позволяет включить или выключить Zero-G (положение нулевой гравитации).

10мин

20мин

30мин

### Кнопка времени сеанса

Вы можете выбрать время сеанса (10 минут, 20 минут и 30 минут).



### Кнопка подъема и опускания спинки

Нажмите кнопку ▲, чтобы поднять спинку, а затем еще раз, чтобы остановить процесс подъема.

Нажмите кнопку ▼, чтобы опустить спинку, а затем еще раз, чтобы остановить процесс опускания.



### Кнопка подъема и опускания секции для ног

Нажмите кнопку ▲, чтобы поднять секцию для ног, а затем еще раз, чтобы остановить процесс подъема.

Нажмите кнопку ▼, чтобы опустить секцию для ног, а затем еще раз, чтобы остановить процесс опускания.

## 7.6 Индивидуальная настройка массажной каретки под рост

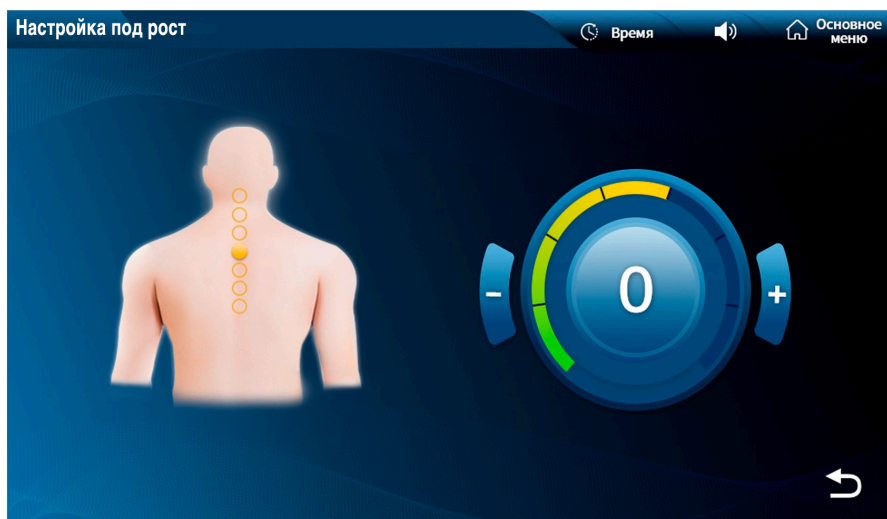


Рисунок 17 — Настройка под рост пользователя

Настройка под рост: кнопками + и – вы можете отрегулировать массажную каретку под ваш рост.

## 7.7 Функция мониторинга здоровья

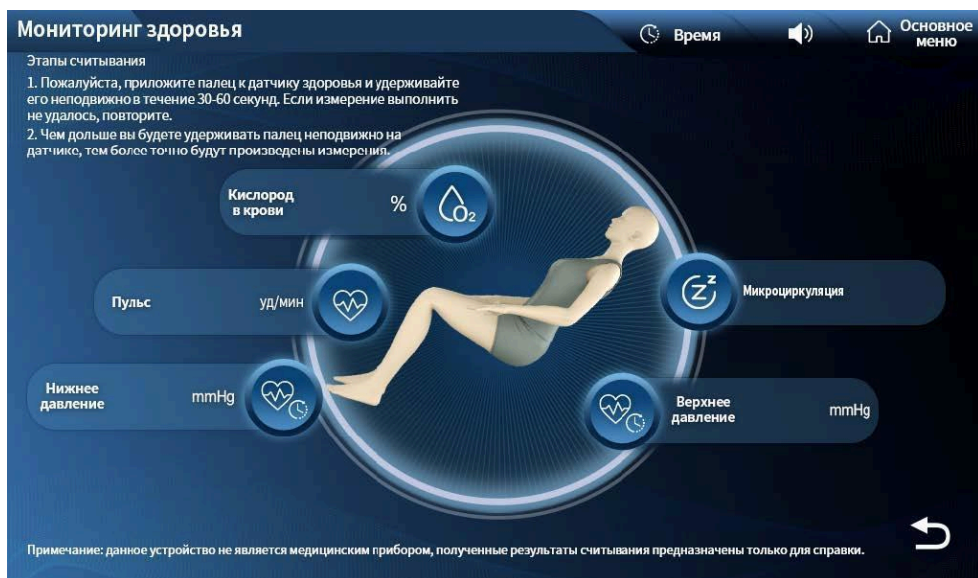


Рисунок 18 — Интерфейс мониторинга показателей здоровья

**Мониторинг здоровья:** данные о кислороде в крови, о пульсе, о верхнем и нижнем значении артериального давления и о микроциркуляции определяются путем прижатия пальца к датчику здоровья.

Данное устройство не является медицинским прибором, и полученные результаты считывания предназначены только для справки.

## 7.8 Общие настройки интерфейса

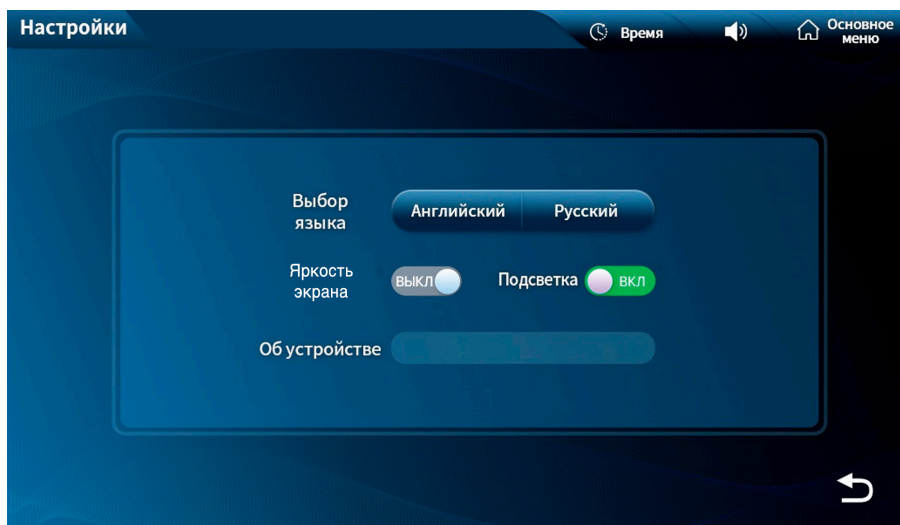


Рисунок 19 — Экран настроек интерфейса

**Язык меню:** вы можете переключить язык интерфейса вручную (Английский, Русский).

**Яркость экрана:** ручное управление яркостью экрана.

**Кнопка внешней подсветки кресла:** включение/выключение интерьерной подсветки массажного кресла.



## 8. ЧИСТКА И УХОД

### 8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи

- Протирайте искусственную кожу мягкой сухой тканью.
- Не используйте концентрированные чистящие средства и средства с содержанием спирта.
- При использовании специальной ткани для чистки искусственной кожи следуйте инструкции на упаковке.
- Не сушите поверхность с помощью фена.
- Ткань для очистки кресла может быть окрашена. Поэтому будьте осторожны при очистке поверхности кресла джинсовой или цветной тканью.
- Искусственная кожа кресла может обесцветиться при контакте с окрашенными волосами, поэтому место контакта с обивкой защищайте полотенцем.
- Если загрязнение удаляется с трудом, намочите меламинальную губку в нейтральном моющем средстве и используйте ее, чтобы очистить поверхность.

**Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом очистки, указанным ниже:**

- положите кусок мягкой ткани в воду или в 3-5% нейтральное моющее средство, затем выжмите его;
- протрите мягкой тканью загрязненную поверхность;
- протрите загрязненную поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства;
- протрите поверхность сухой мягкой тканью;
- дайте искусственной коже высохнуть естественным образом.

## 8.2 Уход за пластиковыми частями кресла

- Намочите кусок мягкой ткани в чистой воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите ею пластиковую поверхность.
- Протрите поверхность мягкой тканью, предварительно смоченной в чистой воде и отжатой.
- Дайте пластиковым деталям высохнуть естественным образом.



- Не используйте для очистки химические моющие средства с содержанием растворителя, бензина или спирта.
- Перед тем как протереть планшет управления, еще раз тщательно выжмите ткань.

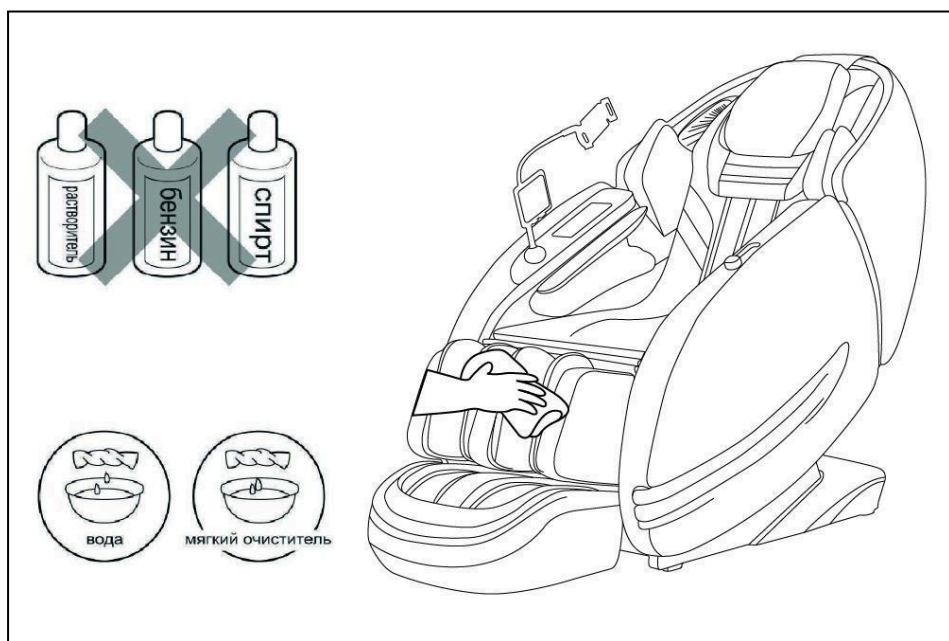


Рисунок 20 — Средства для очищения массажного кресла

## 9. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажного кресла. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже решений, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

**Если возникшая проблема не описана в представленной ниже таблице, попробуйте выполнить следующие действия:**

- выключите массажное кресло и отсоедините вилку от сети;
- подождите 60 минут;
- подключите массажное кресло к электрической сети и перезапустите его.

Таблица 1 — Возможные проблемы и их решение

| Проблема                                                           | Возможная причина                                                                                                         | Решение                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Массажное кресло не работает.                                      | Массажное кресло не подключено к питанию правильно.                                                                       | Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла с питанием сети в вашем регионе и затем снова подключите кресло к питанию. |
|                                                                    | У массажного кресла только что кончилось автоматическое время сеанса, поэтому оно выключилось и перешло в режим ожидания. | Если хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку I/O (Вкл/Выкл).                                                                 |
|                                                                    | Возможно, вы использовали массажное кресло без перерыва в течение 45 минут, из-за чего сработала защита от перегрева.     | Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть 60 минут. После чего можете использовать массажное кресло снова.                 |
|                                                                    | На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка, например, превышен максимальный допустимый вес.                     | Уберите лишнюю нагрузку с массажного кресла и снова начните массаж.                                                                    |
| Массажное кресло сильно нагрелось.                                 | Массажное кресло непрерывно работало длительное время.                                                                    | Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.                |
| Во время работы массажное кресло издает шум работающих механизмов. | Звук вызван работой моторов и насосов массажного кресла.                                                                  | Шум от механизмов может быть слышен. Это нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.                                     |

## 10. ПОРЯДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Массажное кресло должно быть обязательно заземлено. Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск удара током. Это массажное кресло оснащено сетевым шнуром со штекером и вилкой, имеющими заземляющий провод.



**Внимание!** Вилка должна быть соединена с розеткой, имеющей заземляющий контакт, и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к удару электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к сетевой розетке, закажите установку подходящей розетки у квалифицированного электрика.

Это массажное кресло предназначено для питания от сети с напряжением 220В и имеет вилку заземления, как показано ниже. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, что и вилка. Для данного массажного кресла не требуется переходной адаптер сетевой вилки.



Рисунок 21 — Правильное заземление массажного кресла

## 11. СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                         | Elfen                                                 |
| <b>Напряжение питания</b>                             | 220 В                                                 |
| <b>Частота</b>                                        | 50 Гц                                                 |
| <b>Мощность</b>                                       | 200 Вт                                                |
| <b>Таймер</b>                                         | 10, 20, 30 минут                                      |
| <b>Максимальное время работы</b>                      | 30 минут                                              |
| <b>Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)</b>     | 130x75x114 см                                         |
| <b>Габариты в разложенном положении, см (ДхШхВ)</b>   | 184x75x82 см                                          |
| <b>Габариты упаковки, см (ДхШхВ)</b>                  | 133x77x115 см                                         |
| <b>Вес нетто</b>                                      | 76 кг                                                 |
| <b>Вес брутто</b>                                     | 90 кг                                                 |
| <b>Температура воздуха во время использования</b>     | 0° - 35 °С                                            |
| <b>Относительная влажность во время использования</b> | 20-80 RH                                              |
| <b>Температура хранения</b>                           | 5° - 35°С                                             |
| <b>Относительная влажность во время хранения</b>      | 20-80 RH                                              |
| <b>Безопасность</b>                                   | Защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки |

## 12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Массажное кресло Orlauf Elfen       | 1 шт. |
| Кабель питания                      | 1 шт. |
| Планшет управления                  | 1 шт. |
| Пластиковый держатель планшета      | 1 шт. |
| Ключ шестигранник на 5 мм           | 1 шт. |
| Переходник на трубки подачи воздуха | 2 шт. |
| Пластиковая стяжка                  | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации          | 1 шт. |

## 13. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию качества продукции на три года. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность.

Данная продукция предназначена для домашнего использования. Если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажного кресла, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.



**Внимание!** Массажное кресло предназначено для домашнего использования!

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Поставщик/Импортер</b>  | ООО "ДЕМО-СПОРТ" 197183,<br>Санкт-Петербург г., Полевая Сабиловская ул.,<br>дом 54, 035С,<br>ИНН: 7805768366<br>ОГРН: 1207800096888<br><a href="http://www.demo-sport.ru/">www.demo-sport.ru/</a> <a href="mailto:sales@demo-sport.ru">sales@demo-sport.ru</a><br>тел. 8-800-775-56-38 |
| <b>Завод-изготовитель</b>  | Ningde Brilliant Massager Co., Ltd.<br>231D, building 2, No.6, Fuxin East Road,<br>Chengbei street Fu'an City, Ningde City, Fujian<br>Province, China<br>Tel: 0086-13600546645                                                                                                         |
| <b>Страна изготовления</b> | КНР                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Дата изготовления</b>   | Указана на этикетке                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Гарантия</b>            | 36 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Оборудование сертифицировано в соответствии с TP TC.





**ORLAUF**

