


**Волшебное
искусство
отдыхать!**

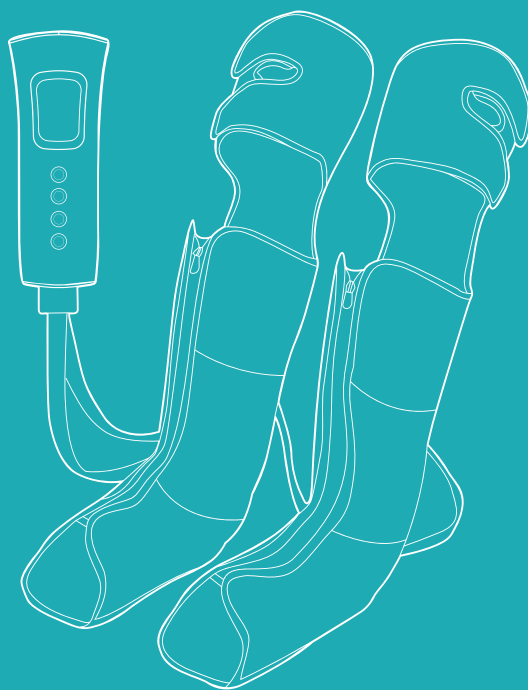

**Массажер для ног
КТ-5948**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для ног	5
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Массажер КТ-5948 поможет снять усталость, уменьшить отеки и расслабить мышцы ног с помощью воздушно-компрессионного массажа (прессотерапии).

Принцип действия прессотерапии основан на подаче сжатого воздуха низкого и высокого давления через манжеты. За счет ритмичного сжатия происходит активизация внутренних систем. В итоге застоявшаяся снизу кровь и лимфа начинают двигаться быстрее по венам вверх. Такое воздействие преимущественно направлено на мышечную ткань, поверхностные вены, кожные слои и жировую прослойку, лимфососуды. Процедура способствует улучшению внешнего вида и внутреннего состояния организма.

Проведение массажа улучшает кровообращение, в результате чего ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Воздушно-компрессионный массаж помогает восстановить нормальную работу лимфотока, что оказывает общее детоксикационное действие. Сеансы массажа укрепляют сосуды, повышая их тонус. Прессотерапия является профилактической мерой появления варикоза, способствует снижению отека ног и уменьшению объема в области бедер.

Воздушно-компрессионный массаж проводится в области стоп, голеней и бедер. Массажер работает в 6 разных режимах. Интенсивность массажа настраивается: минимальная, средняя или максимальная сила сжатия. Управление массажером осуществляется с помощью пульта. Через 20 минут работы массажера сработает автоотключение.

Для повышения эффективности массажа устройство обладает функцией подогрева: нагрев улучшает микроциркуляцию крови. Нагрев имеет три уровня.


Массажер подойдет как людям, ведущим сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает физические нагрузки, например, спортсменам после тренировки.

Данное устройство не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-либо заболевания, то перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.


Комплектация

1. Массажер для ног — 1 шт.
 - Массажер для левой ноги — 1 шт.
 - Массажер для правой ноги — 1 шт.
 - Пульт управления — 1 шт.
 2. Блок питания — 1 шт.
 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство массажера для ног

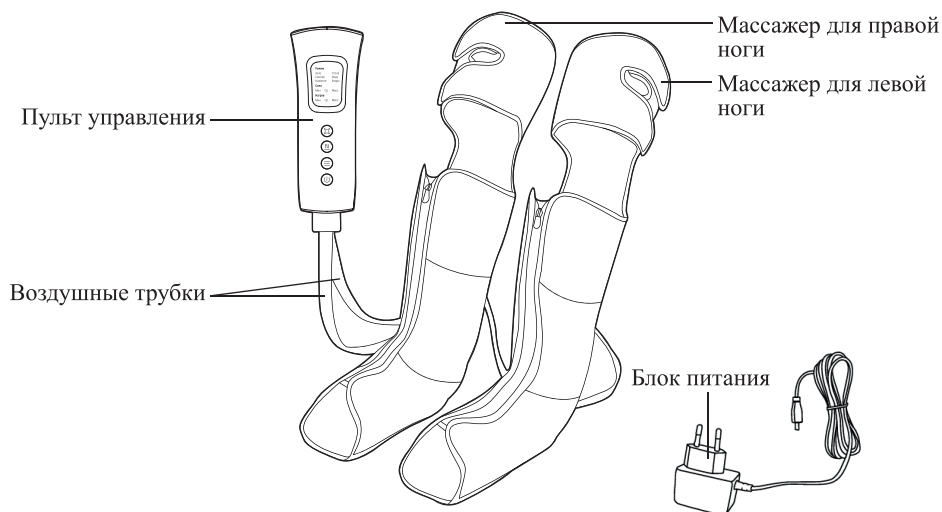

Пульт управления

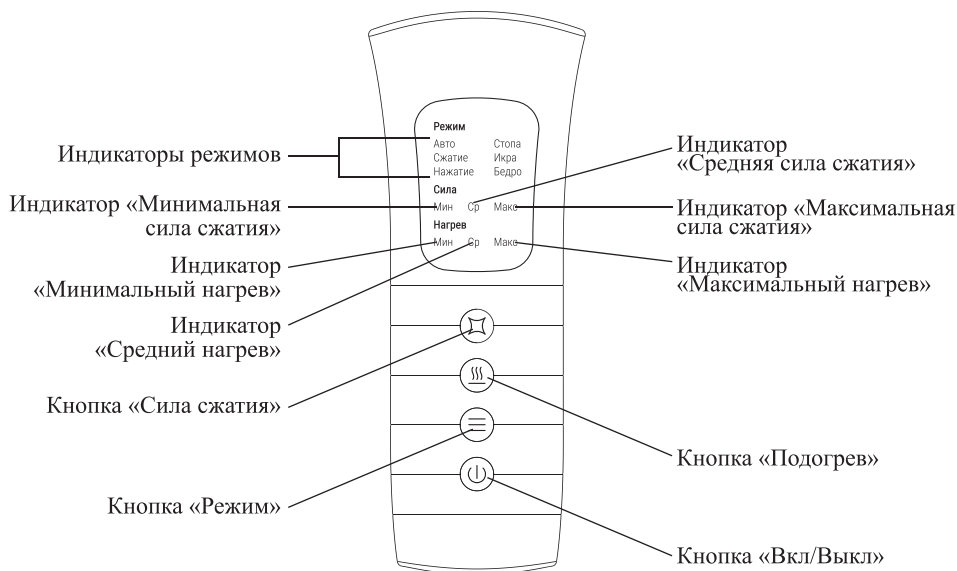

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. После включения массажер начнет работу с последними заданными параметрами.

Кнопка «Режим» циклически переключает режимы работы. На пульте управления загорается индикатор выбранного режима. На рисунках ниже черным цветом выделены области, подвергающиеся массажу.

Режим (индикатор на пульте управления)	Схема проведения массажа
Авто	
Сжатие	
Нажатие	
Стопа	
Икра	
Бедро	

Кнопка «Подогрев» переключает три уровня нагрева. На пульте управления загорается индикатор выбранного уровня нагрева.

Кнопка «Сила сжатия» переключает три уровня силы сжатия (интенсивность массажа): минимальный, средний и максимальный. На пульте управления загорается индикатор выбранной силы сжатия.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Расправьте массажер. В скрученном или сложенном состоянии включать устройство запрещено. Не зажимайте и не перегибайте манжеты и воздушные трубки.

Подключите воздушные трубки массажера к пульту управления. На воздушных трубках и около разъемов на пульте управления есть специальные обозначения. Вставьте воздушную трубку с маркировкой «UP L» в разъем на пульте управления, обозначенный латинской буквой «L». При этом надпись «UP L» должна быть направлена вверх. Аналогично подсоедините воздушную трубку с маркировкой «UP R» к разъему «R».

Примечание. Всегда подключайте оба массажера к пульту управления.

Подключите шнур блока питания к пульту управления, затем подключите блок питания к сети.

Использование

1. Массажер для ног нельзя стирать, поэтому, чтобы сохранить устройство в чистоте, проводите сеанс массажа в чистых тонких, эластичных брюках и носках. На одежде не должно быть никаких выпуклых декоративных элементов: молний, пуговиц и прочего.
2. Сядьте и наденьте массажеры на ноги, застегните молнии и закрепите манжеты на бедрах с помощью липучек, чтобы манжеты плотно прилегали к ногам. Не затягивайте манжеты слишком сильно. На массажерах в месте соединения с воздушной трубкой есть обозначения: «L» — массажер для левой ноги, «R» — массажер для правой ноги.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить массажер. Устройство начнет работу с последними заданными настройками.

Внимание! Не вставайте во время проведения массажа. Сеанс массажа проводится только сидя или лежа.

4. Нажимайте на кнопку «Сила сжатия», чтобы настроить силу сжатия при массаже. На пульте управления загорится индикатор выбранной мощности.
5. Нажимайте на кнопку «Подогрев», чтобы выбрать уровень подогрева. На пульте управления загорится соответствующий индикатор.
6. Один сеанс массажа длится 20 минут, далее сработает автоотключение. Чтобы выключить прибор раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства сделайте перерыв на 10–15 минут перед следующим включением.

Примечание. Сеанс массажа для одного человека рассчитан на 20 минут. Увеличение времени сеанса массажа может привести к чрезмерной стимуляции лимфотока и мышц, что может неблагоприятно отразиться на самочувствии человека.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - слабость, нервозность;
 - переутомление;
 - возраст младше 16 лет.
4. Прессотерапия может использоваться в качестве профилактики появления варикоза. На ранней стадии варикоза возможно проведение массажа только после консультации с врачом.
5. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка и обслуживание

Необходимо поддерживать чистоту изделия, т. к. стирка массажера запрещена.

Перед чисткой убедитесь, что массажер отключен от сети электропитания. Подождите, пока массажер сдуется и остынет. При необходимости протирайте массажер слегка влажной мягкой тканью. Допускается использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен с массажера. Не используйте агрессивные моющие средства. Не скручивайте и не мните изделие во время чистки.

Не сушите массажер на солнце. Не используйте массажер, если он влажный.

Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на пульт управления и на блок питания.

Уход и хранение

Перед хранением очистите массажер, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Отсоедините массажеры для ног от пульта управления. Аккуратно сложите массажер без образования каких-либо складок. Не скручивайте устройство.

Не кладите тяжелые предметы на прибор во время хранения. Не перегибайте воздушные трубки и шнур блока питания.

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите массажер в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Штекер блока питания не вставлен, либо вставлен не до конца в разъем на пульте управления	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем на пульте управления

Массажер не надувается

Возможная причина	Решение
Воздушные трубки не подключены к пульту управления	Плотно вставьте воздушные трубки в разъемы на пульте управления, как описано в главе «Подготовка к работе и использование»

Массажер перегрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть. Один сеанс массажа длится 20 минут, далее срабатывает автоотключение. Во избежание перегрева делайте перерыв на 10–15 минут перед проведением следующего сеанса массажа

Слишком сильная/слабая интенсивность массажа

Возможная причина	Решение
Выбрана слишком сильная/слабая сила сжатия во время массажа	Отрегулируйте интенсивность с помощью кнопки «Мощность»
Манжеты на бедрах затянуты слишком сильно/слабо	Не затягивайте манжеты слишком сильно. Манжеты должны обхватывать ногу, но не сдавливать ее

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 1 А
 - выход: $\approx$ 12 В, 3 А
- Мощность: 36 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
- Тип массажера: воздушно-компрессионный
- Количество режимов работы: 6
- Автоотключение: 20 мин
- Обхват ступни: до 40 см
- Обхват голени: до 50 см
- Обхват бедра: до 74 см
- Длина воздушной трубки: 1 м
- Длина шнура: 1,8 м
- Размер устройства: 300 × 110 × 760 мм
- Размер упаковки: 380 × 200 × 250 мм
- Вес нетто: 1,9 кг
- Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или составных частей не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или его несоответствующего использования.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов в массажер, на пульт управления или блок питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Массажер не предназначен для общественного использования, применения в медицинских учреждениях.
3. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
4. Перед подключением массажера к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания совпадают с параметрами используемого источника питания.

5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте массажер, блок питания и пульт управления в воду и другие жидкости.
6. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания или воздушные трубки. Не тяните за шнур при отключении от электросети.
7. Не используйте устройство, если шнур блока питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибора.
15. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, на блок питания и пульт управления.
16. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Во избежание перегрева во время использования никогда не накрывайте массажер и пульт управления чем-либо и не кладите пульт управления на массажер.
18. Не сворачивайте и не мните массажер во избежание выхода устройства из строя.
19. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
20. Массажер предназначен только для массажа ног. Не используйте устройство для проведения массажа других частей тела.
21. Не превышайте максимальное время работы устройства (20 минут). По истечении этого времени сделайте перерыв на 10–15 минут во избежание перегрева устройства.
22. Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

IM-1

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

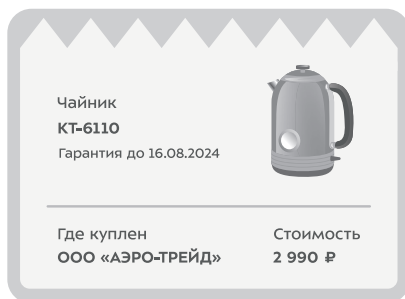

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775—56—87
info@kitfort.ru